

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра
здравоохранения
Республики Беларусь

«15»



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Роял Дент»

В.В. Медведева

2024



Каппы ортодонтические «Realline»

Инструкция по применению

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора УП «Центр экспертиз
испытаний в здравоохранении»

«11»

2024




СОГЛАСОВАНО

Главный врач
ГУ «Университетская
стоматологическая клиника»

«29»

2024

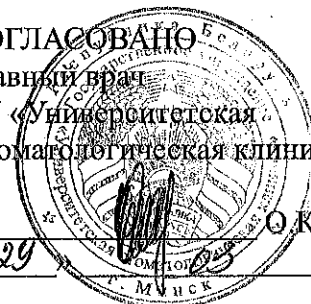

СОГЛАСОВАНО

Главный врач
УЗ «Городская стоматологическая
клиника» (г. Минск)

В. Ч. Недень

2024



Каппы ортодонтические «Realline» доставляются доктору в коробке, в которой находятся зип-пакеты каждый по отдельности с маркировкой, отображающей фамилию, имя доктора и пациента, нумерацию и для какой челюсти предназначена (верхней и/или нижней).

Инструкция для врача:

Каппы ортодонтические «Realline» могут применяться при исправлении аномалий положения отдельных зубов и исправления прикуса у взрослых и детей, а также в качестве ретенционного аппарата после ортодонтического лечения.

Лечащий врач выдает каждую новую каппу в среднем через 220 ч общего пользования, что составляет в среднем 10 – 14 дней. В иных случаях применения режим и сроки ношения, замена на новую назначаются лечащим врачом в индивидуальном порядке.

Инструкция для пациента:

В первые дни применения каппы может возникнуть дискомфорт – ощущение давления на зубы, накопление слюны, дефекты дикции, изменение окклюзионных контактов. В редких случаях, зависящих от анатомических особенностей строения мягких тканей пациента, может возникнуть натирание языка и слизистой оболочки. В связи с этим рекомендовано изолировать место потенциального травмирующего участка на каппе ортодонтическим воском и обратиться к лечащему врачу.

Пациент должен носить одну каппу не менее 18 ч в сутки (не менее 220 ч общего пользования, что составляет 10 – 14 дней) и снимать ее только на время приема пищи, употребления горячих, сладких напитков и при чистке зубов. Рекомендуется надевать каждую новую каппу перед сном, либо не снимать в течение 3-х часов после фиксации на зубной ряд (в первые дни применения допускается неплотное прилегание каппы к зубам, отсутствие щелчка при фиксации каппы). В ретенционном периоде время ношения одной каппы определяется лечащим врачом в индивидуальном порядке.

Перед фиксацией каппы требуется тщательно очистить зубы и саму каппу. Для очистки каппы лучше выбирать средства гигиены, предназначенные для ортодонтических аппаратов, либо очищать самостоятельно с помощью зубной монопучковой щетки или ирригатора.

Снимать каппу необходимо с задних зубов к передним, начиная с дистальной поверхности крайнего зуба, с помощью крючка, а фиксировать в обратном направлении (в противном случае возникнет деформация каппы, что повлияет на результат лечения и возникновение осложнений).

Хранить каппу необходимо в контейнере, который предотвратит поломку и дефекты аппарата при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 30 С° и относительной влажности не более 80 %.

Примечание – не соблюдение сроков и режима ношения каппы, правил гигиены и техники припасовки каппы в полости рта пациентом на протяжении лечения, игнорирование рекомендаций лечащего врача могут привести к увеличению времени лечения и отсутствию желаемого результата, а также возникновение осложнений.

Запрещается обрабатывать каппу кипятком во избежание деформации.

Срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления.



ООО «Роял Дэнт»

Юридический адрес: 220062, РБ, г. Минск, ул. Ратомская, д. 7, пом. 163в

Адрес производственной площадки: РБ, 220062, г. Минск, ул. Княгининская, 10-1