

ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ KATRACORE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Показания к применению: одноразовая полностью автоматическая игла для биопсии, используемая для гистологических исследований и забора образцов материала из мягких тканей и органов.

Противопоказания: Данную иглу следует использовать только врачам, имеющим опыт проведения интервенционных процедур и ознакомленным с возможными побочными эффектами, характерными результатами, ограничениями и противопоказаниями процедур биопсии. В случае, если пациент страдает нарушением свертываемости крови или принимает антикоагулянты, требуется экспертное мнение врача.


Возможные побочные эффекты: Боль, жар, кровотечение, гематурия и инфекция.

Меры предосторожности: Стерилизовано окисью этилена. Апиrogenно. Проверьте упаковку: если упаковка повреждена или вскрыта, использовать продукт запрещается. Проверьте срок годности и размер. Хранить в сухом защищенном от солнечного цвета месте при температуре 5-30°C. Следует учитывать возможность аллергических реакций. Использовать только в стационарных условиях врачам, ознакомленным с устройством и процедурой. Только для одного пациента. Не пытайтесь очистить или повторно стерилизовать данный продукт. Запрещается использовать устройство под контролем МРТ. После использования данный продукт может представлять потенциальную биологическую опасность. Используйте таким образом, чтобы избежать случайной пункции. Утилизировать в соответствии с применимым законодательством и нормами.

Пожалуйста, несколько раз проверьте устройство на функциональность и возможные повреждения, чтобы обеспечить правильное введение. Не используйте продукт в случае, если упаковка была вскрыта или повреждена.


ПРОЦЕДУРА БИОПСИИ:

1. Определите место забора биологического материала предпочтительно под контролем УЗИ или КТ.
2. Простерилизуйте и подготовьте кожу с помощью антисептического средства и салфетки.
3. При необходимости введите местный анестетик в область проведения биопсии.
4. Вскройте упаковку и удалите с иглы защитный чехол.
5. Введите спусковой механизм иглы для биопсии, как показано на рисунках ниже (I и II):

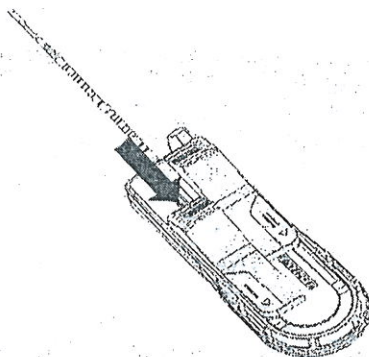

(I)


Оттяните кнопку #1 назад до упора

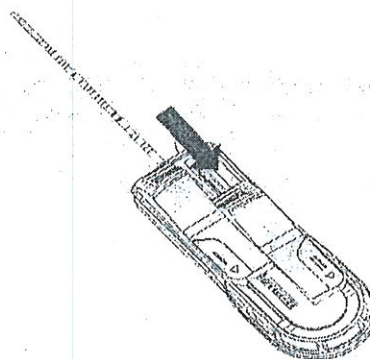

(II)

Оттяните кнопку #2 назад до упора


6. Введите иглу в пациента и продвигайтесь к месту забора биологического образца

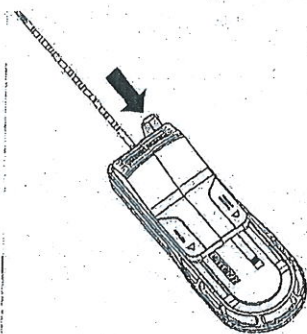

(III)



Одноразовое
использование

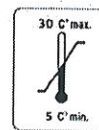

Условия
хранения



Срок
годности

STERILE EO

стерилизовано окисью этилена

7. Нажмите спусковые кнопки, расположенные спереди устройства (III).
8. Выньте иглу. Оттяните кнопку #1 назад, чтобы открыть выемку с образцом, и достаньте биологический образец.

Примечание: Настоящая инструкция НЕ устанавливает никакой медицинской или хирургической методики и не является рекомендацией к использованию таковой. За выбор подходящей методики и способа применения данного устройства ответственность несет лечащий врач.

CE

1984: Знак CE и идентификационный номер NB

ГЕОТЕК МЕДИКАЛ ВЕ СААЛЫК ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ САНАИИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ

ИВЕДИК ОСБ ААЧ - МЕТАЛЬ СИТЕСИ 1436 СОКАК №12 Йендирмахалле - Анкара, ТЕЛ: 0(312) 3959852 www.geotekmedikal.com

ИГЛА ДЛЯ БИОПСИИ VESCUТ ОДНОРАЗОВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Показания к применению: одноразовая полностью автоматическая игла для биопсии, используемая для гистологических исследований и забора образцов материала из мягких тканей и органов. Полностью автоматическая игла для биопсии Vescut имеет автоматически активируемый предохранительный механизм.

Противопоказания: Данную иглу следует использовать только врачам, имеющим опыт проведения интервенционных процедур и ознакомленным с возможными побочными эффектами, характерными результатами, ограничениями и противопоказаниями процедур биопсии. В случае, если пациент страдает нарушением свертываемости крови или принимает антикоагулянты, требуется экспертное мнение врача.


Возможные побочные эффекты: Боль, жар, кровотечение, гематурия и инфекция.

Меры предосторожности: Стерилизовано окисью этилена. Апирогенно. Проверьте упаковку: если упаковка повреждена или вскрыта, использовать продукт запрещается. Проверьте срок годности и размер. Хранить в сухом защищенном от солнечного света месте при температуре 5-30°C. Следует учитывать возможность аллергических реакций. Использовать только в стационарных условиях врачам, ознакомленным с устройством и процедурой. Только для одного пациента. Не пытайтесь очистить или повторно стерилизовать данный продукт. Запрещается использовать устройство под контролем МРТ. После использования данный продукт может представлять потенциальную биологическую опасность. Используйте таким образом, чтобы избежать случайной пункции. Утилизировать в соответствии с применимым законодательством и нормами.


Пожалуйста, несколько раз проверьте устройство на функциональность и возможные повреждения, чтобы обеспечить правильное введение. Не используйте продукт в случае, если упаковка была вскрыта или повреждена.

ПРОЦЕДУРА БИОПСИИ:


1. Определите место забора биологического материала предпочтительно под контролем УЗИ или КТ.
2. Простерилизуйте и подготовьте кожу с помощью антисептического средства и салфетки
3. При необходимости введите местный анестетик в область проведения биопсии.
4. Вскройте упаковку и удалите с иглы защитный чехол
5. Введите спусковой механизм иглы для биопсии, как показано на рисунках ниже:

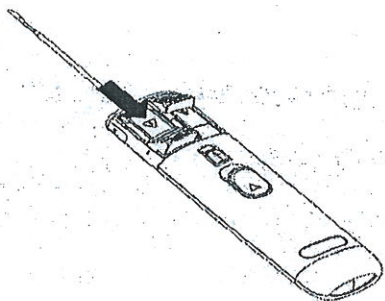


Оттяните кнопку #1 назад до упора

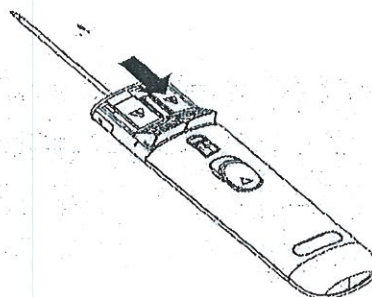

Оттяните кнопку #2 назад до упора

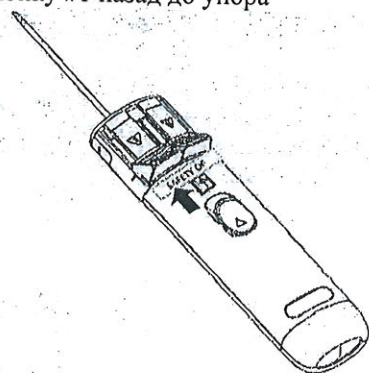

Перед запуском (#7) сдвиньте вперед предохранительную кнопку

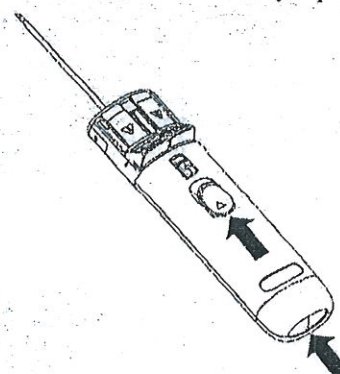

Нажмите любую кнопку запуска (#8)

6. Введите иглу в пациента и продвигайтесь к месту забора биологического образца
7. Когда игла достигнет необходимого места, нажмите на предохранительную кнопку для инактивации.
8. Нажмите любую кнопку запуска, расположенную на задней части или сбоку устройства, для его запуска
9. Выньте иглу. Оттяните кнопку #1 назад, чтобы открыть выемку с образцом, и достаньте биологический образец.

Примечание: Настоящая инструкция НЕ устанавливает никакой медицинской или хирургической методики и не является рекомендацией к использованию таковой. За выбор подходящей методики и способа применения данного устройства ответственность несет лечащий врач.

CE

1984:

Знак CE и идентификационный номер NB



Одноразовое Условия
использование хранения



Срок
годности

STERILE EO

Стерилизовано
окисью этилена

ГЕОТЕК МЕДИКАЛ ВЕ СААЛЫК ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ
ИВЕДИК ОСБ ААЧ - МЕТАЛЬ СИТЕСИ 1436 СОКАК №12 06378 АНКАРА-ТУРЦИЯ ТЕЛ: +90312 3959852

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Перевод соответствует
оригиналу

ГЕОТЕК МЕДИКАЛ ВЕ СААЛЫК ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ			
Документ № IFU-GPN	Действителен от: 02/05/2012	Редакция №: 02	Страница: 1
		Дата редакции: 07.01.2019	

ИГЛА ДЛЯ ПИСТОЛЕТА ДЛЯ БИОПСИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Показания к применению: Используется для автоматических биопсийных пистолетов для гистологических исследований и забора образцов материала из мягких тканей и органов.

Иглы MAXICORE-M совместимы с многоразовым пистолетом MAXICORE-M и многоразовым пистолетом BARD MAGNUM торговой марки Bard Inc.

Противопоказания: Данную иглу следует использовать только врачам, имеющим опыт проведения интервенционных процедур и ознакомленным с возможными побочными эффектами, характерными результатами, ограничениями, показаниями к применению и противопоказаниями процедур биопсии. В случае, если пациент страдает нарушением свертываемости крови или принимает антикоагулянты, требуется экспертное мнение врача.

Возможные побочные эффекты: Боль, жар, кровотечение, гематурия и инфекция.


Меры предосторожности: Стерилизовано окисью этилена. Апирогенно. Проверьте упаковку: если упаковка повреждена или вскрыта, использовать продукт запрещается. Проверьте срок годности и размер. Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре 5 - 30 °C. Следует учитывать возможность аллергических реакций. Использовать только в стационарных условиях врачам, ознакомленным с устройством и процедурой. Только для одного пациента. Не пытайтесь очистить или повторно стерилизовать данный продукт. Запрещается использовать потенциальную биологическую опасность. Используйте таким образом, чтобы избежать случайной пункции. Утилизировать в соответствии с применимым законодательством и нормами.

Пожалуйста, несколько раз проверьте устройство на функциональность и возможные повреждения, чтобы обеспечить правильное введение. Не используйте продукт в случае, если упаковка была вскрыта или повреждена.

ПРОЦЕДУРА БИОПСИИ:

1. Определите место забора биологического материала предпочтительно под контролем УЗИ или КТ.
2. Простерилизуйте и подготовьте кожу с помощью антисептического средства и салфетки.
3. При необходимости введите местный анестетик в область проведения биопсии.
4. Вскройте упаковку и удалите с иглы защитный чехол.
5. Вставьте иглу в биопсийный пистолет.
6. Следуйте инструкциям производителя биопсийного пистолета.

Примечание: Настоящая инструкция НЕ устанавливает никакой медицинской или хирургической методики и не является рекомендацией к использованию таковой. За выбор подходящей методики и способа применения данного устройства ответственность несет лечащий врач.
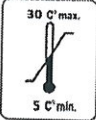
<p>CE 1984: Знак CE и идентификационный номер NB</p> <p>ГЕОТЕК МЕДИКАЛ ВЕ СААЛЫК ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ ИВЕДИК ОСБ ААЧ - МЕТАЛЬ СИТЕСИ 1436 СОКАК №12 06378 АНКАРА-ТУРЦИЯ ТЕЛ: +90312 3959852 ФАКС: +9312 3959853</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Одноразовое использование</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Условия хранения</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Срок годности</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>STERILE EO</p> <p>стерилизовано окисью этилена</p> </div>
---	---



Перевод соответствует
оригиналу

В.А. В.А. В.А.
07.01.2019

ГЕОТЕК МЕДИКАЛ ВЕ СААЛЫК ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ			
Документ № IFU-GPN	Действителен от: 02/05/2012	Редакция №: 02	Страница: 1
		Дата редакции: 07.01.2019	

КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА

Maxicore	GPN1409, GPN1410., GPN1412, GPN1415, GPN1416, GPN1420, GPN1609, GPN1610, GPN1612, GPN1615, GPN1616, GPN1620, GPN1625, GPN1809, GPN1810, GPN1812, GPN1815, GPN1816, GPN1820, GPN1825, GPN1830, GPN2009, GPN2010, GPN2015, GPN2020
Maxicore-M	GPN1409-M, GPN1410-M., GPN1412-M, GPN1415-M, GPN1416-M, GPN1420-M, GPN1609-M, GPN1610-M, GPN1612-M, GPN1615-M, GPN1616-M, GPN1620-M, GPN1625-M, GPN1809-M, GPN1810-M, GPN1812-M, GPN1815-M, GPN1816-M, GPN1820-M, GPN1825-M, GPN1830-M, GPN2009-M, GPN2010-M, GPN2015-M, GPN2020-M
Maxicore-U	GPN1409-U, GPN1410-U, GPN1412-U, GPN1415-U, GPN1416-U, GPN1420-U, GPN1609-U, GPN1610-U, GPN1612-U, GPN1615-U, GPN1616-U, GPN1620-U, GPN1625-U, GPN1809-U, GPN1810-U, GPN1812-U, GPN1815-U, GPN1816-U, GPN1820-U, GPN1825-U, GPN1830-U, GPN2009-U, GPN2010-U, GPN2015-U, GPN2020-U
Alfagun	GAC1409, GAC1410., GAC1412, GAC1415, GAC1416, GAC1420, GAC1609, GAC1610, GAC1612, GAC1615, GAC1616, GAC1620, GAC1625, GAC1809, GAC1810, GAC1812, GAC1815, GAC1816, GAC 820, GAC1825, GAC1830, GAC2009, GAC2010, GAC2015, GAC2020

ГЕОТЕК МЕДИКАЛ ВЕ СААЛЫК ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ			
Документ № IFU-GBL	Действителен от: 02/05/2012	Редакция №: 03	Страница: 1/2
		Дата редакции: 22.09.2020	АНГЛ

ИГЛА ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПАТОЛОГИИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Игла для локализации патологии молочной железы GEOTEK – это игла с индикатором глубины, с коннектором Луера и крючком с индикатором позиционирования.

Показания к применению: Игла для дооперационной локализации непальпируемых опухолевых образований.

Противопоказания: Наборы или иглы для биопсии / аспирации следует использовать только врачам, имеющим опыт проведения интервенционных процедур и ознакомленных с возможными побочными эффектами, характерными результатами, ограничениями, показаниями к применению и противопоказаниями процедур биопсии. В случае, если пациент страдает нарушением свертываемости крови или принимает антикоагулянты, требуется экспертное мнение врача.

Возможные побочные эффекты: Боль, жар, кровотечение, гематурия и инфекция.

Предупреждение: Ни при каких обстоятельствах не удаляйте крючок, введенный в ткань, без хирургического вмешательства.

Меры предосторожности: Стерилизовано окисью этилена. Апиrogenно. Проверьте упаковку: если упаковка повреждена или вскрыта, использовать продукт запрещается. Проверьте срок годности и размер. Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре 5 - 30 °C. Следует учитывать возможность аллергических реакций. Использовать только в стационарных условиях врачом, ознакомленным с устройством и процедурой. Только для одного пациента. Не пытайтесь очистить или повторно стерилизовать продукт. Запрещается использовать устройство под контролем МРТ. После использования данный продукт может представлять потенциальную биологическую опасность. Используйте таким образом, чтобы избежать случайной пункции. Утилизировать в соответствии с применимым законодательством и нормами. Пожалуйста, несколько раз проверьте устройство на функциональность и возможные повреждения, чтобы обеспечить правильное введение. Не используйте продукт в случае, если упаковка была вскрыта или повреждена.

ПРОЦЕДУРА ЛОКАЛИЗАЦИИ:

1. Определите место локализации, предпочтительно под контролем маммографии.
2. Простерилизуйте и подготовьте кожу с помощью антисептического средства и салфетки.
3. При необходимости введите местный анестетик в область проведения биопсии.
4. Вскройте упаковку и удалите с иглы защитный чехол.
5. Введите биопсийную иглу и направьте ее в выбранный участок.
6. Установите локализационную иглу позади пораженного участка.
7. В случае удовлетворительного положения кончика иглы, проволоку поместите в пораженный участок.

Предупреждение: Когда индикатор позиционирования крючка исчезает в игле, крючок отсоединяется от кончика иглы. Не пытайтесь подавать или доставать проволоку на этом этапе.

8. После того, как в выбранный участок введен крючок, удалите иглу.
9. Зафиксируйте проволоку с помощью фиксатора.

Примечание: Настоящая инструкция НЕ устанавливает никакой медицинской или хирургической методики и не является рекомендацией к использованию таковой. За выбор подходящей методики и способа применения данного устройства ответственность несет лечащий врач.


CE

1984: Знак CE и идентификационный номер NB

ГЕОТЕК МЕДИКАЛ ВЕ СААЛЫК ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ
САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ
ИВЕДИК ОСБ ААЧ - МЕТАЛЬ СИТЕСИ 1436 СОКАК №12
06378 АНКАРА-ТУРЦИЯ
ТЕЛ: +90312 3959852
ФАКС: +9312 3959853



Одноразовое
использование

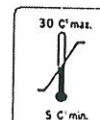

Условия
хранения



Срок
годности

STERILE EO

стерилизовано окисью этилена

Каталожные номера:
GBL2005, GBL2007, GBL2010, GBL2012, GBL2015,
GBLZ2005, GBLZ2007, GBLZ2010, GBLZ2012,
GBLZ2015

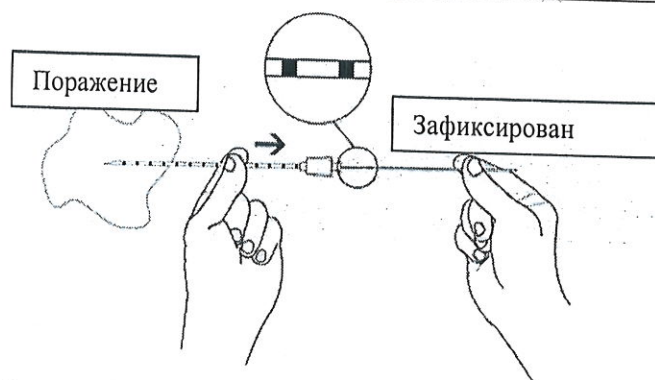


Рис.1 Поместите острие иглы в очаг поражения молочной железы

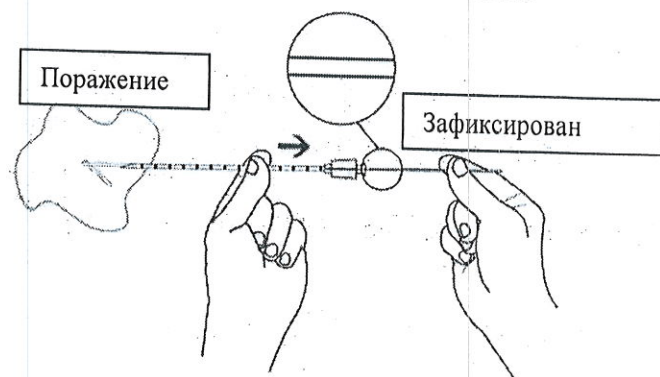


Рис. 2 Освободите крючок; удерживая локализующую проволоку на месте, извлеките иглу. Крючок оторвется, когда метки на проволоке полностью окажутся внутри втулки иглы.

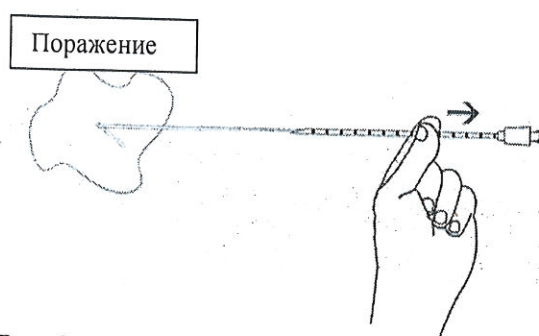


Рис. 3 извлеките иглу

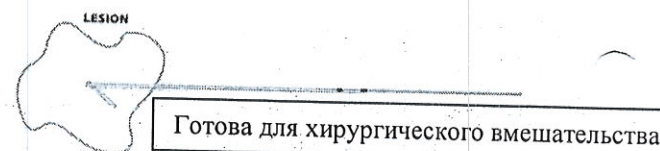


Рис 4. Локализирующая проволока размещена. Проверьте ее позицию с помощью рентгена или ультразвука.

ГЕОТЕК МЕДИКАЛ ВЕ СААЛЫК ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ			
Документ № IFU-GCX	Действителен от: 02/05/2012	Редакция №: 02	Страница: 1
		Дата редакции: 07.01.2019	АНГЛ

ИГЛА КООКСИАЛЬНАЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Коаксиальная проводниковая игла GEOTEK представляет собой иглу с метками глубины введения, ограничителем глубины введения и экзогенным маркером на дистальном кончике иглы.

Показания к применению: в основном используется при проведении процедур в интервенционной радиологии в качестве пункционной иглы, для направления иглы для биопсии.

Противопоказания: следует использовать только врачам, имеющим опыт проведения интервенционных процедур и ознакомленным с возможными побочными эффектами, характерными результатами, ограничениями, показаниями к применению и противопоказаниями процедур биопсии. В случае, если пациент страдает нарушением свертываемости крови или принимает антикоагулянты, требуется экспертное мнение врача.

Возможные побочные эффекты: Боль, жар, кровотечение, гематурия и инфекция.

Меры предосторожности: Стерилизовано окисью этилена. Апиrogenно. Проверьте упаковку: если упаковка повреждена или вскрыта, использовать продукт запрещается. Проверьте срок годности и размер. Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре 5 - 30 °C. Следует учитывать возможность аллергических реакций. Использовать только в стационарных условиях врачам, ознакомленным с устройством и процедурой. Только для одного пациента. Не пытайтесь очистить или повторно стерилизовать продукт. Запрещается использовать изделие под контролем МРТ. После использования данный продукт может представлять потенциальную биологическую опасность. Используйте таким образом, чтобы избежать случайной пункции. Утилизировать в соответствии с применимым законодательством и нормами.

Пожалуйста, несколько раз проверьте устройство на функциональность и возможные повреждения, чтобы обеспечить правильное введение. Не используйте продукт в случае, если упаковка была вскрыта или повреждена.

1. Простерилизуйте и подготовьте кожу с помощью антисептического средства и салфетки.
2. При необходимости введите местный анестетик в область проведения биопсии.
3. Вскройте упаковку и удалите с иглы защитный чехол.
4. С помощью ультразвука или КТ введите иглу в целевую область.
5. Удалите стилет
6. Проведите иглу для биопсии через коаксиальную иглу.
7. Проверьте позицию иглы и выполните биопсию.

Примечание: Настоящая инструкция НЕ устанавливает никакой медицинской или хирургической методики и не является рекомендацией к использованию таковой. За выбор подходящей методики и способа применения данного устройства ответственность несет лечащий врач.

CE


1984

Знак CE и идентификационный номер NB

ГЕОТЕК МЕДИКАЛ ВЕ СААЛЫК ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ
САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ
ИВЕДИК ОСБ ААЧ - МЕТАЛЬ СИТЕСИ 1436 СОКАК №12
06378 АНКАРА-ТУРЦИЯ
ТЕЛ: +90312 3959852
ФАКС: +9312 3959853



Одноразовое
использование

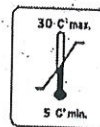

Условия
хранения



Срок
годности

STERILE EO

стерилизовано окисью этилена

Каталожные номера:

GCX1305, GCX1355, GCX1310, GCX13105,
GCX1315, GCX13155, GCX1505, GCX1555,
GCX1510, GCX15155, GCX1705, GCX1755,
GCX1710, GCX17105, GCX17155



Перевод соответствует
оригиналу

ГЕОТЕК МЕДИКАЛ ВЕ СААЛЫК ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ			
Документ № IFU-GTK	Действителен от: 02/05/2012	Редакция №: 04	Страница: 1
		Дата редакции: 16.24.2019	АНГЛ.

ПРОВОДНИК ДЛЯ ИГЛЫ ДЛЯ БИОПСИИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Показания к применению: Проводник для иглы для биопсии – это одноразовое изделие, которое присоединяется к ультразвуковому датчику при трансректальном или трансвагинальном УЗИ для того, чтобы направлять вставляемую иглу к месту забора биологического материала.

Противопоказания: Данный инструмент можно использовать только врачам, имеющим опыт проведения УЗИ и ознакомленным с возможными побочными эффектами, характерными результатами, ограничениями, показаниями и противопоказаниями процедур биопсии под контролем УЗИ.

Возможные побочные эффекты: Боль, жар, кровотечение, гематурия и инфекция.

Меры предосторожности: Стерилизовано окисью этилена. Апиrogenно. Проверьте упаковку: если упаковка повреждена или вскрыта, использовать продукт запрещается. Проверьте срок годности и размер. Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре 5 - 30 °C. Следует учитывать возможность аллергических реакций. Использовать только в стационарных условиях врачам, ознакомленным с устройством и процедурой. Только для одного пациента. Не пытайтесь очистить или повторно стерилизовать данный продукт. Запрещается использовать устройство под контролем МРТ. После использования данный продукт может представлять потенциальную биологическую опасность. Утилизировать в соответствии с применимым законодательством и нормами.

Пожалуйста, несколько раз проверьте устройство на функциональность и возможные повреждения, чтобы обеспечить правильное введение. Не используйте продукт в случае, если упаковка была вскрыта или повреждена.

ПРОЦЕДУРА:

1. Нанесите на поверхность датчика необходимое количество геля.
2. Используя метод стерилизации, закрепите насадку на датчике.
3. Перед тем, как прикрепить проводник для иглы к датчику, проверьте канал для иглы
4. Присоедините проводник для иглы к датчику
5. Удостоверьтесь в правильном выборе длины и диаметра иглы и введите иглу через проводник для иглы

Примечание: Настоящая инструкция НЕ устанавливает никакой медицинской или хирургической методики и не является рекомендацией к использованию таковой. За выбор подходящей методики и способа применения данного устройства ответственность несет лечащий врач.

 1984 ГЕОТЕК МЕДИКАЛ ВЕ СААЛЫК ХИЗМЕТЛЕРИ ТИДЖАРЕТ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ ИВЕДИК ОСБ ААЧ - МЕТАЛЬ СИТЕСИ 1436 СОКАК №12 06378 АНКАРА-ТУРЦИЯ ТЕЛ: +90312 3959852 ФАКС: +9312 3959853	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Одноразовое использование </div> <div style="text-align: center;">  Условия хранения </div> <div style="text-align: center;">  Срок годности </div> <div style="text-align: center;">  Дата производства </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> STERILE EO </div> стерилизовано окисью этилена
Каталожные номера: GTK01, GTK02, GTK03, GTK04, GTK05, GTK06, GTK07, GTK08, GTK08-R, GTK09, GTK09-R, GTK09-RS, GTK10, GTK11, GTK11-R, GTK12, GTK13, GTK14, GTK15, GTK16, GTK17, GTK18, GTK19, GTK20, GTK100, GTK101, GTK102, GTK103, GTK104, GTK105, GTK106, GTK107, GTK108, GTK109, GTK110, GTK111, GTK112, GTK113, GTK114, GTK115, GTK116, GTK117, GTK118, GTK119, GTK120, GTK121, GTK122, GTK123, GTK124, GTK125, GTK130, GTK131, GTK132, GTK133, GTK134, GTK135, GTK140, GTK141, GTK142, GTK143, GTK144, GTK145, GTK150, GTK151, GTK152, GTK153, GTK154, GTK155	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">REF</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">LOT</div> </div> <div> Каталожный номер Номер лота (партии) </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> 1984: Знак CE и идентификационный номер NB </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  Хранить в сухом месте </div> <div style="text-align: center;">  Беречь от солнечных лучей </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Перевод соответствия оригиналу </div>