
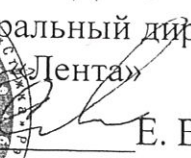


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Лента»

Е. В. Шайтура
«30» 01 2023

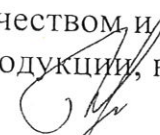

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПАКЕТА ПЕРЕВЯЗОЧНОГО КОМПРЕССИОННОГО (ППК)

И.о. начальника управления
качеством и сертификацией
продукции, начальник ОУК

Л.Н. Наконечная
30.01 2023

СОГЛАСОВАНО

Ректор учреждения образования
«Белорусский государственный
медицинский университет»


С.П. Рубникович
30.01.2023



СОГЛАСОВАНО

Главный врач учреждения
здравоохранения «10-я городская
клиническая больница»


В.П. Исачкин
30.01.2023




ВЕРНО
Начальник УКИСП
Л.Н. Наконечная
30.01.2023 г.

Настоящая инструкция по применению предназначена для ознакомления пользователей с назначением, применением, эксплуатацией, условиями хранения и гарантиями изготовителя пакета перевязочного компрессионного (ППК) (далее пакет).

Пакет соответствует требованиям ТУ ВУ 700002794.025-2023 «Пакет перевязочный компрессионный (ППК)».

Назначение:

Пакет предназначен для оказания само- и взаимопомощи, применяется в полевых условиях и в службах скорой медицинской помощи.

Описание изделия:

Пакет перевязочный компрессионный (ППК) представляет собой бинт медицинский эластичный компрессионный (далее бинт) с нашитой на него подушечкой абсорбирующей и продетым в подгиб бинта фиксатором пластиковым, который обеспечивает надежную фиксацию. С обратной стороны расположения подушечки абсорбирующей приклеен аппликатор давления, обеспечивающий плотное прилегание подушечки абсорбирующей к ране.

Подушечка абсорбирующая должна состоять из внешнего слоя, представляющего собой нетканое полотно, и внутреннего, содержащего суперабсорбент.

Пакет изготавливают стерильным.

Способ применения:

Перед использованием упаковку с пакетом необходимо разорвать по шву или разрезать ножницами.

Стерильный пакет необходимо извлекать из упаковки избегая соприкосновения с краями упаковки или иными предметами, способными контаминировать пакет.





После использования пакет утилизируется в обычном порядке.

Меры предосторожности:

Пакет сохраняет свою стерильность только при условии хранения в неповрежденной упаковке. Перед применением пакета необходимо проверить целостность упаковки. Не применять при поврежденной упаковке.

Нарушение целостности упаковки может привести к потере стерильности. Для контакта с поврежденной кожей, открытыми ранами использовать только стерильные пакеты.

Не использовать по истечении срока годности.

Условия эксплуатации:



Пакет предназначен для одноразового использования, повторное использование не допускается.

Транспортирование и хранение:

Пакеты транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с действующими на них правилами перевозки грузов.

Упакованные пакеты должны храниться в сухом, проветриваемом помещении, на расстоянии от пола не менее 20см, в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует соответствие пакета требованиям ТУ ВУ 700002794.025-2023 при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Срок годности стерильного пакета – пять лет с даты изготовления.

