

Инструкция по использованию ланцетов одноразовых

[Название продукта] Ланцеты одноразовые

[Тип] Soft

[Спецификации]

№ Повторного заказа	01-0121	01-0123	01-0126	01-0128	01-0130	01-0132	01-0133
Спецификация	21G	23G	26G	28G	30G	32G	33G

[Назначение] Одноразовый ланцет используется вместе с ланцетным устройством для сбора капиллярной крови с кончика пальца или других участков для определения уровня глюкозы в крови или других тестов с использованием небольших количеств крови.

Предполагаемая группа пациентов: взрослые и дети старше 2 лет

Предполагаемый пользователь: Одноразовый ланцет предназначен для использования профессионалами и частными лицами.

Показания: Подходит для диагностики диабета или уровня глюкозы в крови, а также для сбора капиллярной крови.

[Инструкция по применению]

1. Загрузите устройство ланцетное и снимите защитный колпачок.
2. Ознакомьтесь с Инструкцией по использованию вашего устройства ланцетного.



3. После использования утилизируйте использованный ланцет в утвержденном контейнере для острых предметов в соответствии с местными правилами утилизации острых предметов.

До использования После использования

Совместимость между одноразовым ланцетом и устройством ланцетным: Совместим с ланцетными устройствами серий LDE3, LDE4 от SteriLance и большинством других устройств ланцетных.

[Противопоказания] Неизвестно.

[Осторожно]

- Не используйте, если защитный колпачок был предварительно снят с ланцета.
- Не храните ланцет в ланцетных устройствах.
- Держите продукт подальше от детей.
- Ланцет предназначен для одноразового использования, поэтому не используйте его повторно. Ланцеты становятся тупыми и болезненными при повторном использовании.
- Не используйте ланцет после истечения срока годности.
- Выбросьте использованный ланцет в соответствующий контейнер.

[Срок годности] 5 лет

[Толкование символов]



Стерилизовано
облучением



Не использовать
повторно




Номер партии



Использовать до



Производитель

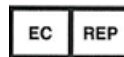

Европейское
уполномоченное
представительство



Уполномоченный
орган



Осторожно!



Медицинские
изделия



Дата изготовления

[Европейское уполномоченное представительство]

EMERGO EUROPE(ЭМЕРГО ЕВРОПА)

Prinsessegracht 20,2514 AP, The Hague,The Netherlands

(Принцессеграхт 20,2514 АП, Гаага, Нидерланды)

[Производитель]

SteriLance Medical (Suzhou) Inc (СтериЛанс Медикал (Сучжоу) Инк.)

No. 168 PuTuoShan Road, New District,215153 Suzhou,Jiangsu ,P.R.China

(№ 168 ПуТуошань Роуд, Новый район, 215153 Сучжоу, Цзянсу, КНР)

[Дата изменения] 8 сентября 2022 г. (Версия 03)

Instruction for use of Disposable Blood Lancet

[Product Name] Disposable Blood Lancet

[Model] Soft

[Specification]

Reorder No.:	01-0121	01-0123	01-0126	01-0128	01-0130	01-0132	01-0133
Specification	21G	23G	26G	28G	30G	32G	33G

[Intended use] The disposable blood lancet is used with lancing device to collect capillary blood from fingertip or alternate sites for blood glucose testing or other testing utilizing small amounts of blood.

Intended patient population: Adults and children over 2 years old

Intended user: The device is intended to be used by professionals and individuals.

Indications: It's suitable for diabetes or blood glucose detection and capillary blood collection.

[Instructions for Use]



1. Load your lancing device and twist off the protective cap.
2. Consult the Instructions for Use of your lancing device.
3. After use, please discard the used lancet in appropriate container.

Compatibility between Disposable blood lancet and Lancing Device: Compatible with LDE, LDE3, LDE4 series lancing device from SteriLance and most other lancing devices.

[Contraindications] Unknown.

[Caution]

- Do not use if protective cap has been previously removed from lancet.
- Do not store lancet in lancing devices.
- Please keep the product away from the children.
- The lancet is for disposable use and do not reuse the lancet. Lancets become dull and painful when reused.
- Do not use the lancet beyond the use-by date.
- Discard the used lancet in appropriate container.

[Sheft Life] 5 years

[Symbolic interpretation]



Sterilized using
irradiation



Do not re-use



Batch code



Use-by date



Manufacturer



European
Authorized
Representation



Notified Body



Caution



Medical Device



Date of manufacture

[European Authorized Representation]

Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP, The Hague, The Netherlands

[Manufacturer]

SteriLance Medical (Suzhou) Inc .
No.168 PuTuoShan Road, New District, 215153 Suzhou, Jiangsu, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

[Revised date] September 8, 2022 (Version 03)