

ООО «Медивайс»
ул. Заводская, 50, 222750,
г. Фаниполь, Дзержинский район,
Минская область, Республика Беларусь.
Тел. + 375 (17) 555-32-36
Факс + 375 (17) 555-32-59

**КАЛОПРИЕМНИК
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ
ИЛЕОСТОМНЫЙ**

ТУ ВУ 100343982.001-2023

Годеи 5 лет со дня изготовления.

Изделие одноразового применения.

После истечения срока годности не
использовать.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КАЛОПРИЕМНИК ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ИЛЕОСТОМНЫЙ

Применяется для сбора кишечного содержимого из стомы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Необходимо обращать внимание при использовании адгезивной продукции вокруг воспаленной уростомы, особенно в связи с расширенным мочеточником и отсутствием мочевого пузыря. В редких случаях клинические отчеты отмечают присутствие адгезива в мочевой системе у таких пациентов. В случае обнаружения частиц в мочевыводящих путях определите возможность дальнейшего использования адгезивных продуктов и начните соответствующую клиническую терапию.


ПОДГОТОВКА МЕШКА

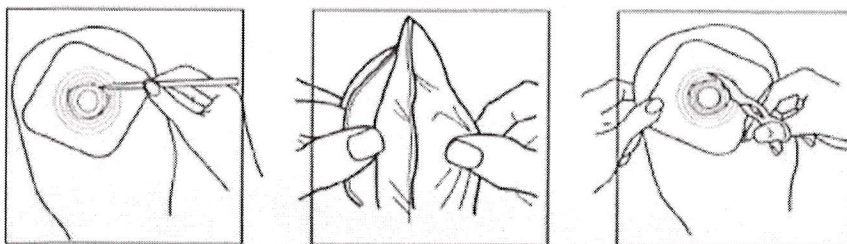

Кожа вокруг стомы должна быть чистой, сухой, не должна подвергаться воздействию растворителей или жиросодержащих веществ.




Используя маркировку на защитной бумаге пластины, начертите точный контур стомы.

ПРИКЛЕИВАНИЕ МЕШКА

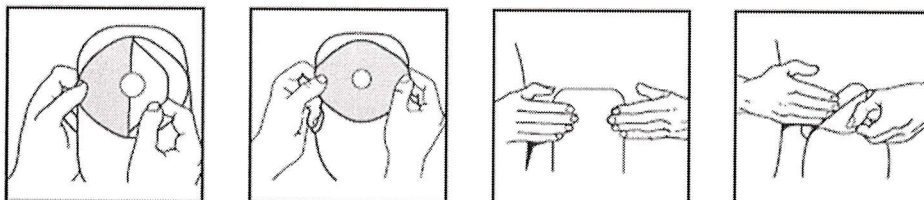


Убедитесь в плотном прилегании вокруг стомы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЖИМА

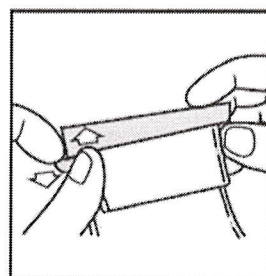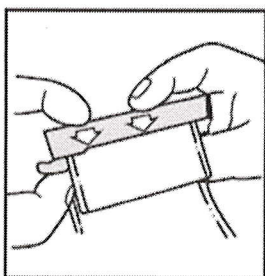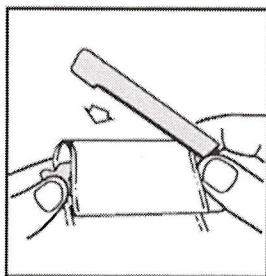

СНЯТИЕ МЕШКА

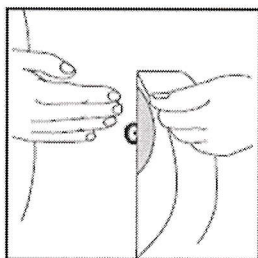


Данное изделие может оставаться на теле на время принятия ванны, душа или плавания. После контакта с водой просушить, промокнув сухим полотенцем.

УТИЛИЗАЦИЯ

Следуйте местным правилам и требованиям утилизации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

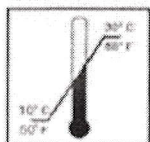

Температура хранения



Хранить в сухом месте. Избегать повышенной влажности.



Номер лота/контрольный номер



Годен до

Примечание: при возникновении раздражения на коже проконсультируйтесь с врачом.

За дополнительной информацией о продукции ООО «Медивайс» обращайтесь по телефонам: +375 17 555 32 46, Факс +375 17 555 32 59.