


СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра
здравоохранения Республики
Беларусь

Б.Н. Андросюк

« 29 » января 20 19 г.

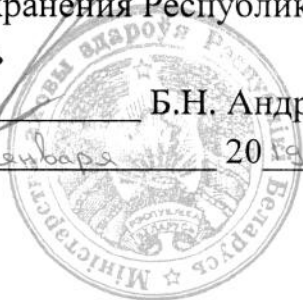

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
ООО « Научно-производственный
центр ХИММЕДСИНТЕЗ »

Н.А. Апостол

« 30 » января 20 19 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению НАБОРА СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ МУТНОСТИ


по ТУ ВУ 190612056.121-2008

СОГЛАСОВАНО

Директор
УП «Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении»

С.И. Марченко

« 28 » января 20 19 г.

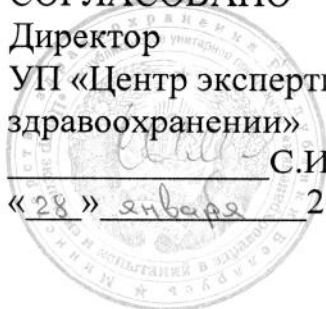

РАЗРАБОТАНО

Управляющий
ООО «Научно-производственный
центр ХИММЕДСИНТЕЗ»

Н.А. Апостол

« 23 » января 20 18 г.



Торговое название: Набор стандартных образцов мутности
ТУ ВУ 190612056.121-2008

Назначение: Набор стандартных образцов мутности представляет собой серию стандартов различной мутности (прозрачности). Предназначен для определения мутности (плотности) взвесей микроорганизмов.

Комплектность:

Стандартный образец мутности № 0,5	1 шт.
Стандартный образец мутности № 1	1 шт.
Стандартный образец мутности № 2	1 шт.
Стандартный образец мутности № 3	1 шт.
Стандартный образец мутности № 4	1 шт.
Стандартный образец мутности № 5	1 шт.
Пробирка сравнения	1 шт.
Фоновый бумажный образец черного цвета (бумага копировальная)	1 шт.

Способ применения:

– Перед применением тщательно взболтать Стандартный образец мутности не резкими движениями до полного исчезновения осадка.

– Налить исследуемую взвесь в пробирку сравнения, входящую в комплект поставки.

– Немедленно сравнить мутности, поместив пробирки на черный фон.

Интерпретация

Эквиваленты

Стандартный образец	Концентрация бактериальных клеток $(1) \cdot 10^8/\text{мл}$
0,5	1,5
1	3
2	6
3	9
4	12
5	15

Приведенные числа отражают средние значения, действительные для бактерий. Для дрожжей, которые больше по размеру, эти числа следует разделить приблизительно на 30.

Техника безопасности:

При работе со стеклом следует соблюдать особую осторожность.

Срок годности: 1 год.