

Безопасные наборы (иглы-бабочки) для взятия крови и инъекций (инфузий) SAFETY Blood Collection/Infusion Set Инструкция по применению

Применение

Безопасный набор (игла-бабочка) для взятия крови и инъекций (инфузий) **SAFETY Blood Collection/Infusion Set** представляет собой одноразовую стерильную иглу с крыльями для взятия крови, соединенная с гибкой трубкой (катетером), которая имеет разъем люэра. Безопасный набор (игла-бабочка) для взятия крови и инъекций (инфузий) **SAFETY Blood Collection/Infusion Set** используется для взятия крови и/или кратковременной инфузии внутривенных жидкостей. Крылатая игла спроектирована с защитным корпусом, который можно активировать, чтобы закрыть иглу сразу после венепункции и защитить от случайного повреждения иглой.

Описание продукта

Безопасный набор (игла-бабочка) для взятия крови и инъекций (инфузий) **SAFETY Blood Collection/Infusion Set** доступен в различных комбинациях. Безопасный набор (игла-бабочка) для взятия крови и инъекций (инфузий) **SAFETY Blood Collection/Infusion Set** индивидуально упакован, стерильный и может использоваться с системой люэра (например, **HOLDEX®**). Продукт должен использоваться квалифицированными специалистами здравоохранения только в соответствии с этими инструкциями.

SAFETY Blood Collection/Infusion Set	Индивидуально упакован, стерильный, используется с системой люэра.
SAFETY Blood Collection Set with Luer Adapter	Индивидуально упакован, стерильный, с присоединенным люэр-адаптером (для использования, например, со стандартным пластиковым держателем пробирок).
SAFETY Blood Collection Set with Luer Adapter + Holder	Индивидуально упакован, стерильный, готовый к использованию для взятия крови (с присоединенным люэр-адаптером и стандартным пластиковым держателем пробирок).

Безопасный набор (игла-бабочка) для взятия крови и инъекций (инфузий) **SAFETY Blood Collection/Infusion Set** не содержит компонентов из сухого натурального каучука. Принадлежности, содержащие латекс, маркируются как таковые на упаковке.

Меры предосторожности/Предупреждения

Устройство будет работать по назначению если следовать инструкции соответствующим образом:

- Перед использованием проверьте целостность индивидуальной упаковки безопасного набора. Если упаковка была повреждена, не используйте его.
- Не используйте безопасные наборы (иглы-бабочки) для взятия крови и инъекций (инфузий) **SAFETY Blood Collection/Infusion Set** после истечения срока их годности.
- Воздержитесь от небрежного снятия замка или сильного вытягивания крыла, так как такие действия могут повредить целостность устройства.
- Любая использованная игла считается загрязненной. Выбросьте все использованные наборы вместе с держателем в биологически опасные контейнеры, одобренные для их утилизации.
- После активации предохранительного механизма не отпускайте и не активируйте его повторно.
- Во время использования и утилизации всегда держите руки за иглой.
- Не сгибайте иглу. Изгиб иглы может причинить боль пациенту, может привести к травмам от укола иглой, может привести к загрязнению иглы, вызывающему инфекции, может привести к гемолизу образца или может привести к повреждению стальной трубки и наконечника иглы.
- Не используйте для подкожной инфузии или инъекции.
- Обращайтесь со всеми биологическими образцами и "острыми предметами" для сбора крови (ланцеты, иглы, адаптеры Люэра и наборы для сбора крови) в соответствии с политикой и процедурами вашего учреждения.
- Получить соответствующую медицинскую помощь в случае любого контакта с биологическими образцами (например, в результате прокола), поскольку они могут передавать ВИЧ (СПИД), вирусный гепатит или другое инфекционное заболевание.
- Не используйте повторно. Повторное использование продукта может привести к опасным инфекциям, травмам или смерти.
- Во время венепункции следует постоянно надевать перчатки, чтобы свести к минимуму опасность воздействия.
- Избегайте утечки крови и попадания воздуха в трубку во время процедуры инфузии.
- Необходимо соблюдать осторожность при сборе образцов крови, например, у обездвиженных пациентов, больных гемофилией или эпилепсией.
- Из-за риска загрязнения поверхности остатками крови, которые могут быть на кончике иглы, рекомендуется утилизировать иглу кончиком вверх.
- Никогда не закрывайте предохранительный механизм лейкопластырем.
- Процедуры внутривенного вливания должны проводиться в соответствии с политикой и процедурами вашего учреждения.
- Перед использованием в качестве устройства для кратковременной внутривенной инфузии убедитесь, что весь воздух удален путем затравки.
- Пожалуйста, используйте каждое устройство либо для сбора крови, либо для инфузии, но не для того и другого.

Хранение безопасного набора SAFETY Blood Collection/Infusion set перед применением

Храните безопасный набор **SAFETY Blood Collection/Infusion set** при температуре 4-36 °C (40-97°F).

ПРИМЕЧАНИЕ: Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Превышение максимальной рекомендуемой температуры хранения может привести к ухудшению качества безопасного набора для сбора крови/инфузии.

Сбор и обработка образцов

1. Извлеките безопасный набор **SAFETY Blood Collection/Infusion set** из упаковки.
 2. Убедитесь, что протектор крыла надежно зафиксирован в механизме безопасности. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если индивидуальная упаковка была вскрыта или повреждена, пожалуйста, выберите другое устройство.
 3. Выберите место для венепункции. Наложите жгут и подготовьте место пункции вены соответствующим антисептиком.
- НЕ ПАЛЬПИРУЙТЕ ОБЛАСТЬ ПУНКЦИИ ВЕНЫ ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ!

Для взятия крови

1. Выберите необходимую пробирку(ки) и безопасный набор **SAFETY Blood Collection/Infusion set** и, при необходимости, соедините с требуемым компонентом системы для взятия крови.
2. Осторожно снимите предохранительный колпачок с иглы.
3. Выполните венепункцию, держа руку пациента в опущенном положении. Впрыскивание крови подтвердит успешную венепункцию.
4. При необходимости зафиксируйте крылья иглы лейкопластырем.
5. Соберите кровь в соответствии с правилами вашего учреждения. Снимите жгут, как только в пробирке появится кровь. Всегда удерживайте пробирку на месте, нажимая на нее большим пальцем, чтобы предотвратить отдачу и обеспечить полную вытяжку вакуума. **ПРИМЕЧАНИЕ: Первая пробирка в серии будет недостаточно заполнена из-за мертвого объема гибкой трубки. Предварительно рекомендуется взять одноразовую пробирку (без добавок), чтобы обеспечить надлежащее соотношение антикоагулянта и крови.**
6. После завершения положите сухой марлевый тампон на место пункции без давления.
7. С помощью одной руки, активируйте механизм безопасности, нажав на светлую часть с обеих сторон ступицы, чтобы включить замок.
8. Сдвиньте защитный механизм назад до щелчка. Щелчок является признаком того, что механизм безопасности был правильно активирован.
9. Приложите легким давлением к месту прокола марлевый тампон согласно протоколу вашего предприятия.
10. Незамедлительно утилизируйте безопасный набор **SAFETY Blood Collection/Infusion set** в одобренный контейнер для утилизации в соответствии с процедурами вашего учреждения.

Для кратковременной внутривенной инфузии

Для целей инфузии асептически удалите любое устройство (держатель, луэр-адаптер или луэр-адаптер + держатель) из набора перед подключением к женскому порту луэра (венозный катетер). Осторожно снимите предохранительный колпачок с иглы и установите набор в соответствии с рекомендуемой процедурой. Убедитесь, что во время инфузии в системе нет воздуха.

*Максимальный объем заполнения (мл)

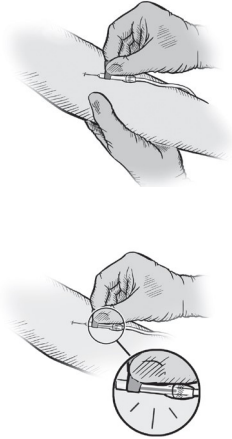
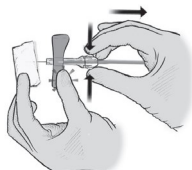
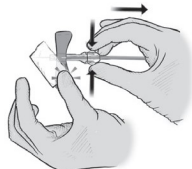
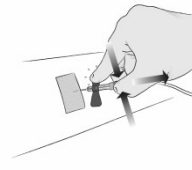
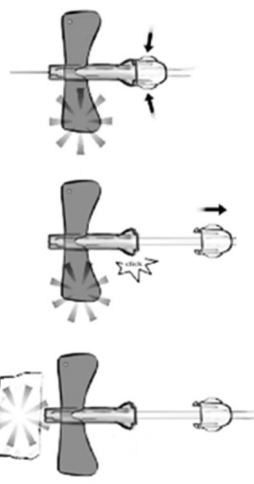
трубка	21G	23G	25G
10 см / 4 дюйма	0.3	0.3	-
19 см / 7.5 дюйма	0.4	0.4	0.4
30 см / 12 дюйма	0.6	0.6	0.6

* Максимальный расход потока (мл / мин)

трубка	21G	23G	25G
10 см / 4 дюйма	20,8	9.6	-
19 см / 7.5 дюйма	20,4	9.4	5.5
30 см / 12 дюйма	20,8	9.6	5.2

* значения, установленные с водой

1. Выполните венепункцию с опущенной рукой пациента и убедитесь, что инфузионный набор надежно прикреплен к пациенту.
2. Начните кратковременную внутривенную инфузию. **ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, следуйте инструкциям вашего учреждения, однако рекомендуется использовать устройство для однократной инфузии в течение максимум 5 часов.**
3. После завершения инфузии прекратите процедуру (см. пункты 6-10 в разделе взятие крови см. выше).

Взятие крови/инфузии	Активации механизма безопасности в вене	
	Когда взятие крови/инфузии были завершены, рекомендовано активировать механизм безопасности пока набор SAFETY Blood Collection/Infusion Set все еще находится в вене пациента.	
	1 Поместите марлю над местом пункции и удерживайте крыло большим пальцем. Активируйте механизм безопасности, нажав на обе стороны ступицы одной рукой, чтобы снять блокировку. Потяните ступицу назад.  Пример 1 или  Пример 2 или  Пример 3	2 Щелчок является признаком того, что механизм безопасности был правильно активирован. Игла полностью убирается в корпус устройства. Надавливайте на участок до остановки кровотечения. Убедитесь, что предохранительный механизм надежно заблокирован. 
	3 Утилизируйте в контейнере для острых предметов.	

Информация на этикетке

	Производитель		Температурный предел
	Срок годности		Не использовать повторно
LOT	Номер лота	STERILE EO	Стерилизовано этилен оксидом
REF	Каталожный номер		Обратитесь к инструкции по применению
	Дата производства		

Литература:
CLSI. Сбор диагностических образцов венозной крови. 7-е изд. Стандарт CLSI GP41. Уэйн, Пенсильвания: Институт клинических и лабораторных стандартов; 2017.

Производственная площадка:
Nipro (Таиланд) Corporation Ltd.,
10/2 Му 8 Бангномко, Сена,
Пхра Накхон Си Аюттхая 13110, Таиланд
Сделано в Таиланде



Greiner Bio-One GmbH
Бад Халлер ул. 32
4550 Кремсшёнстер
Австрия

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
телефон +43 7583 6791

Производитель
Greiner Bio-One GmbH, Австрия

0123

Безопасные наборы (иглы-бабочки) для
взятия крови SAFETY Blood Collection Set
с держателем для культур крови Blood Culture Holder

Инструкция по применению

Применение

Безопасный набор (игла-бабочка) для взятия крови **SAFETY Blood Collection Set** с держателем для культур крови **Blood Culture Holder** используется при рутинных процедурах венепункции. Крылатая игла из набора для безопасного взятия крови оснащена защитным корпусом, который можно активировать, чтобы закрыть иглу сразу после венепункции и защитить от случайного повреждения иглой. Держатель для культур крови **Blood Culture Holder** используется для заполнения кровью флаконов и пробирок для посева крови.

Описание продукта

Безопасный набор (игла-бабочка) для взятия крови **SAFETY Blood Collection Set** с держателем для культур крови **Blood Culture Holder** представляет собой одноразовую стерильную иглу с крыльями для взятия крови, соединенная с гибкой трубкой (катетером) и с предварительно прикрепленным держателем для культур крови **Blood Culture Holder**. Конструкция держателя позволяет собирать кровь во флаконы для посева крови и пробирки для взятия крови **VACUETTE®**. Эти изделия не изготавливаются из натурального каучукового латекса. Данное устройство должно использоваться надлежащим образом обученными медицинскими работниками только в соответствии с настоящими инструкциями.

Меры предосторожности/Предупреждения

- Перед использованием проверьте целостность индивидуальной упаковки Безопасного набора (иглы-бабочки) для взятия крови **SAFETY Blood Collection Set** с держателем для культур крови **Blood Culture Holder**. Не используйте набор при повреждении.
- Не используйте Безопасные наборы по истечении срока их годности.
- Любой Безопасный набор, который загрязняется кровью, считается опасным и должен быть немедленно утилизирован.
- Воздержитесь от небрежного снятия замка или сильного вытягивания крыла, так как такие действия могут повредить целостность устройства.
- Не используйте повторно. Повторное использование игл увеличивает риск получения травм от уколов иглой и опасных инфекций.
- После активации предохранительного механизма не отпускайте и не активируйте его повторно.
- После венепункции утилизируйте использованный Безопасный набор (иглу-бабочку) для взятия крови **SAFETY Blood Collection Set** с держателем для культур крови **Blood Culture Holder**, как единое целое в контейнере для острых предметов в соответствии с политикой и процедурами вашего учреждения.
- Во время использования и утилизации всегда держите руки за иглой.
- Не сгибайте иглу. Изгиб иглы может причинить боль пациенту, может привести к травмам от укола иглой, может привести к загрязнению иглы, вызывающему инфекции, может привести к гемолизу образца или может привести к повреждению стальной трубки и наконечника иглы.
- Обращайтесь со всеми биологическими образцами и "острыми предметами" для сбора крови (ланцеты, иглы, адаптеры Люэра и наборы для сбора крови) в соответствии с политикой и процедурами вашего учреждения.
- Обратитесь за соответствующей медицинской помощью в случае любого контакта с биологическими образцами (например, в результате прокола), поскольку они могут передавать ВИЧ (СПИД), вирусный гепатит или другое инфекционное заболевание.
- Любая использованная игла считается загрязненной и должна быть утилизирована в специальный контейнер для биологической опасности сразу после использования.
- Во время венепункции следует постоянно надевать перчатки, чтобы свести к минимуму опасность воздействия.
- Необходимо соблюдать осторожность при взятии образцов крови, например, у обездвиженных пациентов, больных гемофилией или эпилепсией.
- Из-за риска загрязнения поверхности остатками крови, которые могут быть на кончике иглы, рекомендуется утилизировать иглу кончиком вверх.
- Никогда не закрывайте предохранительный механизм лейкопластырем.
- Не пытайтесь вмешиваться в предохранительный механизм после активации.

Хранение

Храните продукт при температуре 4-36°C (40-97° F).
ПРИМЕЧАНИЕ: Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Превышение максимальной рекомендуемой температуры хранения может привести к ухудшению качества безопасного набора.

Сбор и обработка образцов

- Очистите место прокола и свои руки в соответствии с инструкциями, утвержденными в вашем учреждении.
- Продезинфицируйте открытые участки флаконов для взятия крови спиртовой салфеткой и дайте высохнуть на воздухе.
- Выполните венепункцию, держа руку пациента в опущенном положении. Флаконы для посева крови и пробирки для взятия крови следует поддерживать в вертикальном положении во время взятия крови.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Следуйте инструкциям производителя по правильному обращению с флаконами для посева крови.
- Поместите держатель для культур крови на флакон и прижмите его.
- После получения нужного количества крови отодвиньте держатель от флакона и (при необходимости) продолжайте взятие крови в другой флакон для посева крови или пробирки для взятия крови **VACUETTE®**.
- После завершения взятия крови аккуратно наложите марлю на место венепункции, не оказывая давления.
- Одной рукой активируйте предохранительный механизм безопасного набора, нажав на ступицу с обеих сторон, чтобы защелкнуть замок. Сдвиньте предохранительный механизм назад до тех пор, пока не раздастся слышимый щелчок. Щелчок является признаком того, что предохранительный механизм был правильно активирован.
- Слегка надавите на место прокола с помощью марлевого тампона в соответствии с протоколом учреждения.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Не оказывайте чрезмерного давления на место прокола.
- Утилизируйте устройство с держателем для культур крови как единое целое в контейнере для острых предметов в соответствии с правилами и процедурами вашего учреждения.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Во время использования и утилизации всегда держите руки за иглой.

Утилизация

- Следует учитывать и соблюдать общие санитарно-эпидемиологические правила и правовые нормы по надлежащей утилизации инфекционного материала.
- Использование одноразовых перчаток обеспечивает профилактику заражения.
- Загрязненные изделия с иглами должны быть утилизированы сразу после взятия крови подлежат утилизации в соответствующих емкостях для утилизации биологически опасных отходов, которые подлежат автоклавному и сжиганию.

Информация на этикетке

	Производитель		Температурный предел
	Срок годности		Не использовать повторно
	Номер лота		Стерилизовано этилен оксидом
	Каталожный номер		Обратитесь к инструкции по применению
	Дата производства		

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
Литература:
CLSI. Сбор диагностических образцов венозной крови. 7-е изд. Стандарт CLSI GP41. Уэйн, Пенсильвания: Институт клинических и лабораторных стандартов; 2017.
CLSI. Принципы и процедуры для посева крови; Утвержденное руководство. Документ CLSI M47-A. Уэйн, Пенсильвания: Институт клинических и лабораторных стандартов; 2007.

Производственная площадка:
Nipro (Таиланд) Corporation Ltd.,
10/2 My 8 Бангномко, Сена,
Пхра Нахон Си Аютхая 13110, Таиланд
Сделано в Таиланде

Greiner Bio-One GmbH
Бад Халлер ул. 32
4550 Кремсмонстер
Австрия

[www.gbo.com/
preanalytics](http://www.gbo.com/preanalytics)
office@at.gbo.com
Телефон: +43 7583
6791

Производитель
Greiner Bio-One GmbH, Австрия

Страница 1 / 1

Наборы (иглы-бабочки) для взятия крови и инъекций (инфузий) Blood Collection/Infusion Set Инструкция по применению

Применение

Набор (игла-бабочка) для взятия крови и инъекций (инфузий) **Blood Collection/Infusion Set** представляет собой одноразовую стерильную иглу с крыльями для взятия крови, соединенную с гибкой трубкой (катетером), которая имеет разъем люэра. Набор (игла-бабочка) для взятия крови и инъекций (инфузий) используется для взятия крови и/или кратковременной инфузии внутривенных жидкостей.

Описание продукта

Набор (игла-бабочка) для взятия крови и инъекций (инфузий) **Blood Collection/Infusion Set** доступен в различных комбинациях. Набор (игла-бабочка) для взятия крови и инъекций (инфузий) **Blood Collection/Infusion Set** индивидуально упакован, стерильный и может использоваться с системой люэра (например, HOLDEX®). Это устройство не имеет компонентов, изготовленных из натурального каучукового латекса. Продукт должен использоваться квалифицированными специалистами здравоохранения только в соответствии с этими инструкциями.

Blood Collection/Infusion Set	Индивидуально упакован, стерильный, используется с системой люэра.
Blood Collection Set with Luer Adapter	Индивидуально упакован, стерильный, с присоединенным луэр-адаптером (для использования, например, со стандартным пластиковым держателем пробирок).
Blood Collection Set with Luer Adapter + Holder	Индивидуально упакован, стерильный, готовый к использованию для взятия крови (с присоединенным луэр-адаптером и стандартным пластиковым держателем пробирок).

Меры предосторожности/Предупреждения

Устройство будет работать по назначению если следовать инструкции соответствующим образом:

- Перед использованием проверьте целостность индивидуальной упаковки набора. Если упаковка была повреждена, не используйте его.
- Не используйте наборы (иглы-бабочки) для взятия крови и инъекций (инфузий) **Blood Collection/Infusion Set** после истечения срока их годности.
- Любая использованная игла считается загрязненной. Выбросьте все использованные наборы вместе с держателем в биологически опасные контейнеры, одобренные для их утилизации.
- Во время использования и утилизации всегда держите руки за иглой.
- Не сгибайте иглу. Изгиб иглы может причинить боль пациенту, может привести к травмам от укола иглой, может привести к загрязнению иглы, вызывающему инфекции, может привести к гемолизу образца или может привести к повреждению стальной трубки и наконечника иглы.
- Не используйте для подкожной инфузии или инъекции.
- Обращайтесь со всеми биологическими образцами и "острыми предметами" для сбора крови (ланцеты, иглы, адаптеры Люэра и наборы для сбора крови) в соответствии с политикой и процедурами вашего учреждения.
- Обратитесь за соответствующей медицинской помощью в случае любого контакта с биологическими образцами (например, в результате прокола), поскольку они могут передавать ВИЧ, вирусный гепатит или другое инфекционное заболевание.
- Не используйте повторно. Повторное использование продукта может привести к опасным инфекциям, травмам или смерти.
- Выбросьте все использованные наборы **Blood Collection/Infusion Set** вместе с держателем в контейнеры биологической опасности, одобренные для их утилизации.
- Во время венопункции следует постоянно надевать перчатки, чтобы свести к минимуму опасность воздействия.
- Избегайте утечки крови и попадания воздуха в трубку во время процедуры инфузии.
- Пластификатор DEHP присутствует в жидкостном тракте трубки для взятия крови/инфузионного набора. Выщелачивание DEHP возможно при контакте с липидами. Особую осторожность необходимо соблюдать при применении на беременных или кормящих женщинах и детях.
- Необходимо соблюдать осторожность при сборе образцов крови, например, у обездвиженных пациентов, больных гемофилией или эпилепсией.
- Из-за риска загрязнения поверхности остатками крови, которые могут быть на кончике иглы, рекомендуется утилизировать иглу кончиком вверх.
- Процедуры внутривенного вливания должны проводиться в соответствии с политикой и процедурами вашего учреждения.
- Перед использованием в качестве устройства для кратковременной внутривенной инфузии убедитесь, что весь воздух удален путем затравки.
- Пожалуйста, используйте каждое устройство либо для взятия крови, либо для инфузии, но не для того и другого.

Хранение

Храните набор **Blood Collection/Infusion set** при температуре 4-36 °C (40-97°F).

ПРИМЕЧАНИЕ: Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Превышение максимальной рекомендуемой температуры хранения может привести к ухудшению качества набора для взятия крови/инфузии.

Сбор и обработка образцов

1. Извлеките набор **Blood Collection/Infusion Set** из упаковки.
2. Перед использованием проверьте целостность индивидуальной упаковки набора. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Если индивидуальная упаковка была вскрыта или повреждена, пожалуйста, выберите другое устройство.
3. Выберите место для венопункции. Наложите жгут и подготовьте место пункции вены соответствующим антисептиком.
4. НЕ ПАЛЬПИРУЙТЕ ОБЛАСТЬ ПУНКЦИИ ВЕНЫ ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ!

Для взятия крови

1. Выберите необходимую пробирку(ки) и набор **Blood Collection/Infusion set** и, при необходимости, соедините с требуемым компонентом системы для взятия крови.
2. Осторожно снимите предохранительный колпачок с иглы-бабочки.
3. Выполните венопункцию, держа руку пациента в опущенном положении. Впрыскивание крови подтвердит успешную венопункцию.
4. При необходимости зафиксируйте крылья иглы лейкопластырем.
5. Соберите кровь в соответствии с правилами вашего учреждения. Снимите жгут, как только в пробирке появится кровь. Всегда удерживайте пробирку на месте, нажимая на нее большим пальцем, чтобы предотвратить отдачу и обеспечить полную вытяжку вакуума. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Первая пробирка в серии будет недостаточно заполнена из-за мертвого объема гибкой трубки. Предварительно рекомендуется взять одноразовую пробирку (без добавок), чтобы обеспечить надлежащее соотношение антикоагулянта и крови.
6. После завершения положите сухой марлевый тампон на место пункции без давления.

7. Осторожно извлеките иглу из вены.
8. Приложите легким давлением к месту прокола марлевый тампон согласно протоколу вашего предприятия.
9. Незамедлительно утилизируйте набор **Blood Collection/Infusion set** в одобренный контейнер для утилизации в соответствии с процедурами вашего учреждения.

Для кратковременной внутривенной инфузии

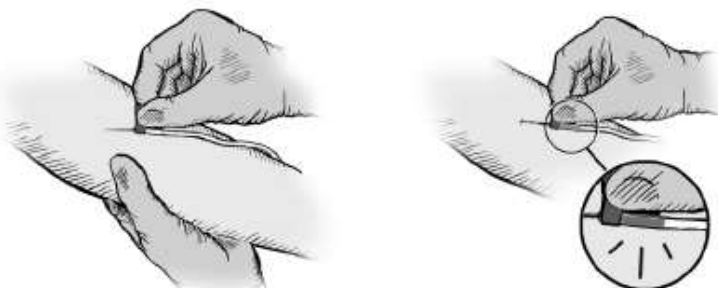
Для целей инфузии асептически удалите любое устройство (держатель, луэр-адаптер или луэр-адаптер + держатель) из набора перед подключением к женскому порту люэра (венозный катетер).

Осторожно снимите предохранительный колпачок с иглы и установите набор в соответствии с рекомендуемой процедурой. Убедитесь, что во время инфузии в системе нет воздуха.

Объем вливания		
Калибр (Гейдж)	Трубка	Макс. объем
21G, 23G, 25G	10 см / 4 дюйма	0.26 мл
21G, 23G, 25G	19 см / 7.5 дюйма	0.40 мл
21G, 23G, 25G	30 см / 12 дюйма	0.56 мл

1. Выполните венепункцию с опущенной рукой пациента и убедитесь, что инфузионный набор надежно прикреплен к пациенту.
2. Начните кратковременную внутривенную инфузию. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Пожалуйста, следуйте инструкциям вашего учреждения, однако рекомендуется использовать устройство для однократной инфузии в течение максимум 5 часов.
3. После завершения инфузии прекратите процедуру (см. пункты 6-10 в разделе взятие крови см. выше).

Взятие крови/инфузии



Утилизация



Информация на этикетке

	Производитель		Температурный предел
	Срок годности		Не использовать повторно
	Номер лота		Стерилизовано этилен оксидом
	Каталожный номер		Обратитесь к инструкции по применению
	Дата производства		

Литература:

CLSI. Сбор диагностических образцов венозной крови. 7-е изд. Стандарт CLSI GP41. Уэйн, Пенсильвания: Институт клинических и лабораторных стандартов; 2017.

Производственная площадка:
Nipro (Таиланд) Corporation Ltd.,
10/2 Му 8 Бангномко, Сена,
Пхра Накхон Си Аюттхая 13110, Таиланд
Сделано в Таиланде

Производитель
Greiner Bio-One GmbH, Австрия



Greiner Bio-One GmbH
Бад Халлер ул. 32
4550 Кремсшёнстер
Австрия

www.gbo.com/preanalytics
office@at.gbo.com
телефон +43 7583 6791