

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БЕЛМЕДБУМ»

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ БУМАГИ УПАКОВОЧНОЙ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТРУМЕНТА «КРАФТ-МЕДБЕЛ»

ТУ ВУ 193678202.001.2023

г. Минск

Настоящая инструкция является документом, устанавливающим порядок применения бумаги упаковочной для стерилизации «КРАФТ-МЕДБЕЛ» ТУ ВУ 193678202.001.2023 (далее – бумага) и гарантированные изготовителем основные параметры и технические характеристики бумаги в соответствии с требованиями ТУ ВУ 193678202.001.2023.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Бумага предназначена для упаковывания изделий медицинского назначения при их стерилизации следующими методами:

- сухим горячим воздухом в воздушных стерилизаторах (автоклавах);
- водяным насыщенным паром в паровых стерилизаторах (автоклавах).

1.2. Режимы стерилизации должны выбираться в соответствии с действующими на момент проведения стерилизации техническими нормативными правовыми актами, правилами, методическими указаниями и другой обязательной документацией.

1.3. Бумага обеспечивает сохранение стерильности упакованных в нее изделий медицинского назначения после стерилизации, в процессе их транспортировки и хранения до момента использования по назначению.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Для изготовления бумаги используется бумага оберточная из 100 % сульфитной или сульфатной небеленой целлюлозы из хвойных пород древесины.

2.2. Бумага изготавливается в листах, линейные размеры которых соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1 (В сантиметрах)

Ширина	Длина
15	15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
20	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
25	25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
30	30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
35	35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
40	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
45	45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
50	50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
55	55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
60	60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
65	65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
70	70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
75	75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
80	80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
84	84, 108
85	85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
90	90, 95, 100, 105, 110, 115, 120
95	95, 100, 105, 110, 115, 120
100	100, 105, 110, 115, 120
105	105, 110, 115, 120
110	110, 115, 120
115	115, 120
120	120

По согласованию с Заказчиком линейные размеры листов бумаги могут отличаться от указанных в таблице 1.

2.3. Масса бумаги площадью 1 м² – (80 ± 5) г.

2.4. Кратность использования бумаги – до трех раз, с учетом ее целостности.

2.5. Срок сохранения стерильности изделий медицинского назначения упакованных в бумагу – не менее 3 суток.

3. ПРИМЕНЕНИЕ БУМАГИ

3.1. Перед применением необходимо освободить бумагу от упаковки. Размер используемой для упаковки бумаги выбирают в зависимости от габаритов стерилизуемого медицинского изделия с запасом в 10-15 % от расчетной площади упаковываемого изделия.

3.2. Перед применением листы бумаги осматривают на предмет наличия повреждений и загрязнений. Бумага, имеющая складки, сквозные отверстия, масляные пятна и загрязнения, к использованию не допускается.

3.3. Медицинское изделие, предназначенное для стерилизации, упаковывается в один - два слоя бумаги. Колюшие и режущие медицинские инструменты рекомендуется упаковывать не менее чем в два слоя бумаги. Стандартная пошаговая схема двухслойной упаковки представлена на рисунке 1.

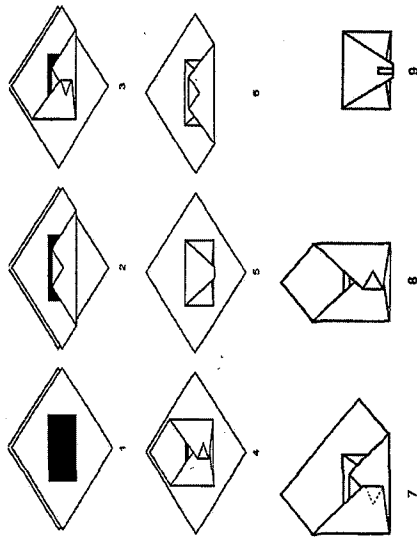


Рисунок 1. Стандартная схема двухслойной упаковки изделий медицинского назначения перед стерилизацией

3.4. Стерилизацию медицинских изделий, упакованных в бумагу, осуществляют в стерилизаторах, разрешенных к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь, соблюдая требования инструкции по эксплуатации стерилизаторов и правила загрузки стерилизационной камеры.

3.5. Контроль режимов стерилизации и качества стерилизации осуществляется в соответствии с действующими на момент проведения работ техническими нормативными правовыми актами, правилами, методическими указаниями и другой обязательной документацией.

4. УТИЛИЗАЦИЯ

4.1. Бумага должна утилизироваться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 февраля 2018г. № 14, и «Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность», утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130.

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Бумагу транспортируют в упакованном виде транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

5.2. Бумагу, упакованную в пакеты, транспортируют в крытых автотранспортных средствах без перевалок в пути.

5.3. Бумага должна храниться в крытых складах, защищенной от атмосферных осадков и почвенной влаги.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие бумаги требованиям

ВУ 193678202.001.2023 при соблюдении условий применения, транспортирования и хранения, установленных в настоящей инструкции по применению.

6.2. Срок годности бумаги – 3 года с даты изготовления.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Белмедбум»

220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Чернышевского, 10А, 4016

тел./факс (+37517) 280-51-72

место производства: Республика Беларусь, Минский район, а.г. Колодищи, ул. Тютенникова, 10д