



# ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit

REF 1L75-55



ru  
Cyclosporine  
1L75  
G54861R07  
H1L75R

См. выделенные изменения. Редакция: февраль 2019 г.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов преципитации цельной крови ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit предназначен для экстракции циклоспорина из образцов (образцы цельной крови пациентов, контроли и калибраторы ARCHITECT Cyclosporine Calibrators), предназначенных для тестирования на системе ARCHITECT iSystem.

Инструкции по предварительной обработке см. в инструкции по применению к реагенту ARCHITECT Cyclosporine.

## СОДЕРЖИМОЕ

1 флакон (12,3 мл) солюбилизующего реагента для цельной крови ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Solubilization Reagent содержит сурфактант в воде. Консервант: ProClin 300.

1 флакон (45,0 мл) реагента преципитации цельной крови ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent содержит раствор сульфата цинка в метаноле и этиленгликоле.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **IVD**
- Для диагностики *In Vitro*
- **ВНИМАНИЕ:** Данный продукт предполагает работу с образцами, полученными от человека. Рекомендуются считать все материалы, полученные от человека, потенциально инфекционными и обращаться с ними в соответствии со Стандартом по обращению с гемоконтажными патогенами, разработанным Управлением США по охране труда и промышленной гигиене (OSHA). При работе с материалами, содержащими или предположительно содержащими инфекционные агенты, следует соблюдать правила биологической безопасности, уровень 2, или другие соответствующие правила биологической безопасности.<sup>1-4</sup>

Следующие предупреждения и меры предосторожности относятся к: **WHOLE BLOOD SOLUBILIZATION REAGENT**



|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> | Содержит метилизотиазолы.                                                  |
| H317                  | Может вызывать аллергическую кожную реакцию.                               |
| <b>Предотвращение</b> |                                                                            |
| P261                  | Избегать вдыхания тумана/паров/аэрозолей.                                  |
| P272                  | Не выносить загрязненную одежду с рабочего места.                          |
| P280                  | Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз. |
| <b>Реагирование</b>   |                                                                            |
| R302+P352             | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.                   |
| R333+P313             | При раздражении кожи или появлении сыпи: Обратиться к врачу.               |
| R362+P364             | Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед использованием.             |

## Утилизация

|      |                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P501 | Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с санитарными нормами РФ (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 09.12.2010). |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Паспорта безопасности доступны на сайте [www.abbottdiagnostics.com](http://www.abbottdiagnostics.com) или у местного представителя.

Следующие предупреждения и меры предосторожности относятся к: **WHOLE BLOOD PRECIPITATION REAGENT**



|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ОПАСНОСТЬ</b> | Содержит метанол, этиленгликоль и сульфат цинка.                                    |
| H225             | Легковоспламеняющаяся жидкость и пар.                                               |
| H331             | Токсично при вдыхании.                                                              |
| H302             | Вредно при проглатывании.                                                           |
| H319             | Вызывает серьезное раздражение глаз.                                                |
| H315             | Вызывает раздражение кожи.                                                          |
| H370             | Наносит вред органам.                                                               |
| H373             | Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия. |
| H402*            | Вредно для водных организмов.                                                       |
| H412             | Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.                         |

## Предотвращение

|      |                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P210 | Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. |
| P233 | Держать крышку контейнера плотно закрытой.                                                                |
| P260 | Избегать вдыхания тумана/паров/аэрозолей.                                                                 |
| P280 | Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз.                                |
| P264 | После работы тщательно вымыть руки.                                                                       |
| P273 | Не допускать попадания в окружающую среду.                                                                |

## Реагирование

|                |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R370+P378      | В случае пожара: Для тушения использовать CO <sub>2</sub> , сухие химические вещества, сухой песок, спиртоустойчивые пенообразователи. |
| R304+P340      | ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении.                    |
| R303+P361+P353 | ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Снять немедленно всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой/принять душ.                          |


|                   |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P301+P330+P310    | ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту.                                                          |
| P305+P351+P338    | ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. |
| P308+P311         | В СЛУЧАЕ воздействия или обеспокоенности: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту.                                                                |
| <b>Хранение</b>   |                                                                                                                                                                                  |
| P403+P235         | Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте.                                                                                                                |
| <b>Утилизация</b> |                                                                                                                                                                                  |
| P501              | Утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с санитарными нормами РФ (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 09.12.2010).                                                                  |

\* Не применимо на территории действия Регламента ЕС № 1272/2008 (CLP).

Паспорта безопасности доступны на сайте [www.abbottdiagnostics.com](http://www.abbottdiagnostics.com) или у местного представителя. Подробную информацию о необходимых мерах предосторожности при работе анализатора см. в Руководстве по эксплуатации системы ARCHITECT, Раздел 8.

## ХРАНЕНИЕ

- При правильном хранении и обращении реагенты остаются стабильными до истечения срока годности.
- Не используйте после истечения срока годности.

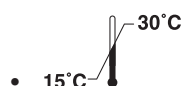

## БИБЛИОГРАФИЯ

- US Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration, 29 CFR Part 1910.1030, Bloodborne pathogens.
- US Department of Health and Human Services. *Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories*. 5th ed. Washington, DC: US Government Printing Office; December 2009.
- World Health Organization. *Laboratory Biosafety Manual*. 3rd ed. Geneva: World Health Organization; 2004.
- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline—Third Edition*. CLSI Document M29-A3. Wayne, PA: CLSI; 2005.

## Используемые символы

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                 | См. инструкцию по применению                          |
|                                 | Изготовитель                                          |
|                                 | Температурный диапазон                                |
|                                 | Использовать до/Срок годности                         |
| <b>CONTAINS: METHANOL</b>       | Содержит метанол                                      |
| <b>EC REP</b>                   | Авторизованный представитель в Европейском Сообществе |
| <b>INFORMATION FOR USA ONLY</b> | Информация только для США                             |
| <b>IVD</b>                      | Медицинское изделие для диагностики <i>In Vitro</i>   |

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LOT</b>                                | Номер серии                         |
| <b>PRODUCED FOR ABBOTT BY</b>             | Произведено для Abbott              |
| <b>PRODUCT OF USA</b>                     | Продукт США                         |
| <b>REF</b>                                | Каталожный номер                    |
| <b>WHOLE BLOOD PRECIPITATION REAGENT</b>  | Реагент преципитации цельной крови  |
| <b>WHOLE BLOOD SOLUBILIZATION REAGENT</b> | Реагент солюбилизации цельной крови |

ARCHITECT является торговой маркой компании Abbott Laboratories в различных юрисдикциях. Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

Abbott Laboratories  
Diagnostics Division  
Abbott Park, IL 60064  
USA

**EC REP** Abbott GmbH & Co. KG  
Max-Planck-Ring 2  
65205 Wiesbaden  
Germany  
+49-6122-580



### PRODUCED FOR ABBOTT BY

Fujirebio Diagnostics, Inc.  
940 Crossroads Blvd.  
Seguin, TX 78155  
USA

**Сервисная поддержка: Обращайтесь к своему местному представителю или смотрите контактную информацию для вашей страны на сайте [www.abbottdiagnostics.com](http://www.abbottdiagnostics.com)**

Редакция: февраль 2019 г.  
©2007, 2019 Abbott Laboratories



**Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:**

ООО "Эбботт Лэбораториз", 125171, Россия, г. Москва,  
Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,  
Тел: +7 (495) 258 42 80; факс: +7 (495) 258 42 81