


Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

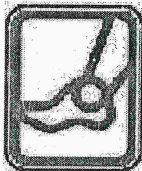

Перекладина подъемная к кровати деревянной
Руководство по эксплуатации

ОПИ-103.00.00РЭ

Республика Беларусь

Дата редакции 06.07.2023

Настоящее руководство по эксплуатации ОПИ-103.00.00РЭ (далее - РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с перекладиной подъёмной к кровати деревянной ОПИ-103.00.00 (далее – перекладина), с условиями эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Перекладина предназначена для самостоятельного подъёма больного в сидячее положение, переворота в кровати, разработки нижних конечностей, вытягивания больных суставов.

Применяется для оснащения ортопедических клиник, травматологических и восстановительных отделений клиник и для индивидуального использования в бытовых условиях.

Перекладина устанавливается на пол вокруг кровати.

1 Технические характеристики

1.1 Технические характеристики приведены в таблице

Обозначение	Длина, L, не более, мм	Ширина, В, не более мм	Масса, кг
ОПИ-103.00.00	2520	958	38,2
-01	2370	1118	35,8
-02	2370	848	32,9
-03	2370	748	31,7
-04	2340	1468	38,4
-05	2300	1378	37,8
-06	2300	1156	35,3
-07	2300	1115	35,2
-08	2300	1136	37,0
-09	2300	958	36,7
-10	2300	718	32,2
-11	2240	1048	34,0
-12	2210	1088	33,8
-13	2370	768	32,8
-14	2370	1048	33,6
-15	2170	1848	41,2
-16	2200	898	32,4

1.2 Срок службы не менее 10 лет.

2 Устройство изделия

Перекладина состоит из следующих основных узлов и деталей, приведенных на рисунке: ножки 1 и 1а, стойки 2, стяжки 3 и 4, перемычки 5, перекладина 6, направляющие 7, блоки 8, канат 9, болты 10, 11, гайки 12, 13, шайбы 14.

↑

3 Монтаж изделия

3.1 Перекладина поступает к потребителю в разобранном виде.

3.2 Для сборки изделия необходимо проделать следующие операции:

3.2.1 Собрать две поперечные полурамы: для чего две ножки 1 и 1а соединить стяжкой 3 при помощи болтов 11.

3.2.2 На перемычку 5 одеть стойку 2 и закрепить её при помощи болтов 11. На обеих перемычках 5 стойки 2 должны быть закреплены в одних и тех же отверстиях. Перемычку 5 закрепить на ножках 1 и 1а болтами 11.

3.2.3 Соединить полурамы стяжками 4 при помощи болтов 11, учитывая, что две стяжки, расположенные друг под другом, должны располагаться за кроватью к стене.

3.2.4 На стойку 2 одеть и закрепить направляющие 7 при помощи болтов 11 и гаек 12, расположив их на одной стороне.

3.2.5 В блоки 8 продеть канат 9.

3.2.6 Блоки 8 с канатом 9 одеть на перекладину 6, закрепить гайками 12 и болтами 11, продев их через перекладину в отверстия.

3.2.7 Вставить перекладину 6 в направляющие 7 и закрепить перекладину болтами 10 и гайками 13.

3.2.8 Отрегулировать перекладину 6 по высоте, и стойки 2 отрегулировать по ширине кровати в положение, удобное для пользователя.

3.2.9 После проделанных операций изделие готово к использованию.

4 Указание мер безопасности

4.1 Материалы, применяемые для изготовления перекладины, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (одежды, кожи пользователя, пола), с которой контактируют детали перекладины при эксплуатации.

4.2 Подвижные соединения должны быть отрегулированы, иметь плавный ход перемещения.

4.3 Поверхности деталей перекладины не должны иметь заусенцев, задигов, острых кромок или выступов, способных повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю, а также не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида.

4.4 Устройства регулирования высоты должны надёжно фиксироваться в нужном положении.

5 Техническое обслуживание

5.1 Все детали перекладины необходимо протирать дезинфицирующими моющими средствами.

5.2 Периодически проверять надёжность крепления конструкции и надёжность фиксации регулируемых узлов перекладины.

6 Комплектность

6.1 Перекладина в разобранном виде:

- стойки 2 – 2 шт.;
- ножки 1 – 2 шт.;
- ножки 1а – 2 шт.;
- стяжки 3 – 2 шт.;
- стяжки 4 – 3 шт.;
- направляющие 7 – 2 шт.;
- блоки 8 – 2 шт.;
- канат 9 в сборе с ремнём и ручкой – 1 шт.;
- перемычки 5 – 2 шт.;
- перекладина 6 – 1 шт.;

6.2 Стандартные изделия:

- болты М 10-6gx30.66.019 ГОСТ 7798-70 (поз. 10) – 2 шт.;
- болты М 10-6gx50.66.019 ГОСТ 7798-70 (поз. 11) – 20 шт.;
- гайки М10-6Н.5 019 ГОСТ 3032-76 (поз. 12) – 4 шт.;
- гайки М10-6Н.5 019 ГОСТ 5915-70 (поз. 13) – 2 шт.;
- шайбы 10.02.019 ГОСТ 113771-78 (поз. 14) – 20 шт.

6.3 Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7 Маркировка

7.1 Маркировка должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно конструкторской документации;
- обозначение СТБ 1426-2003;
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- срок службы (лет);
- гарантийный срок (месяцев);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для изделий, изготавливаемых серийно);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

8 Свидетельство о приемке

Перекладина подъемная к кровати деревянной ОПИ-103.00.00

Наименование

обозначение исполнение

заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями СТБ 1426-2003, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

9 Свидетельство об упаковывании

Перекладина подъемная к кровати деревянной ОПИ-103.00.00

Наименование

обозначение исполнение

заводской номер

упакована на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации


Нач.участка

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

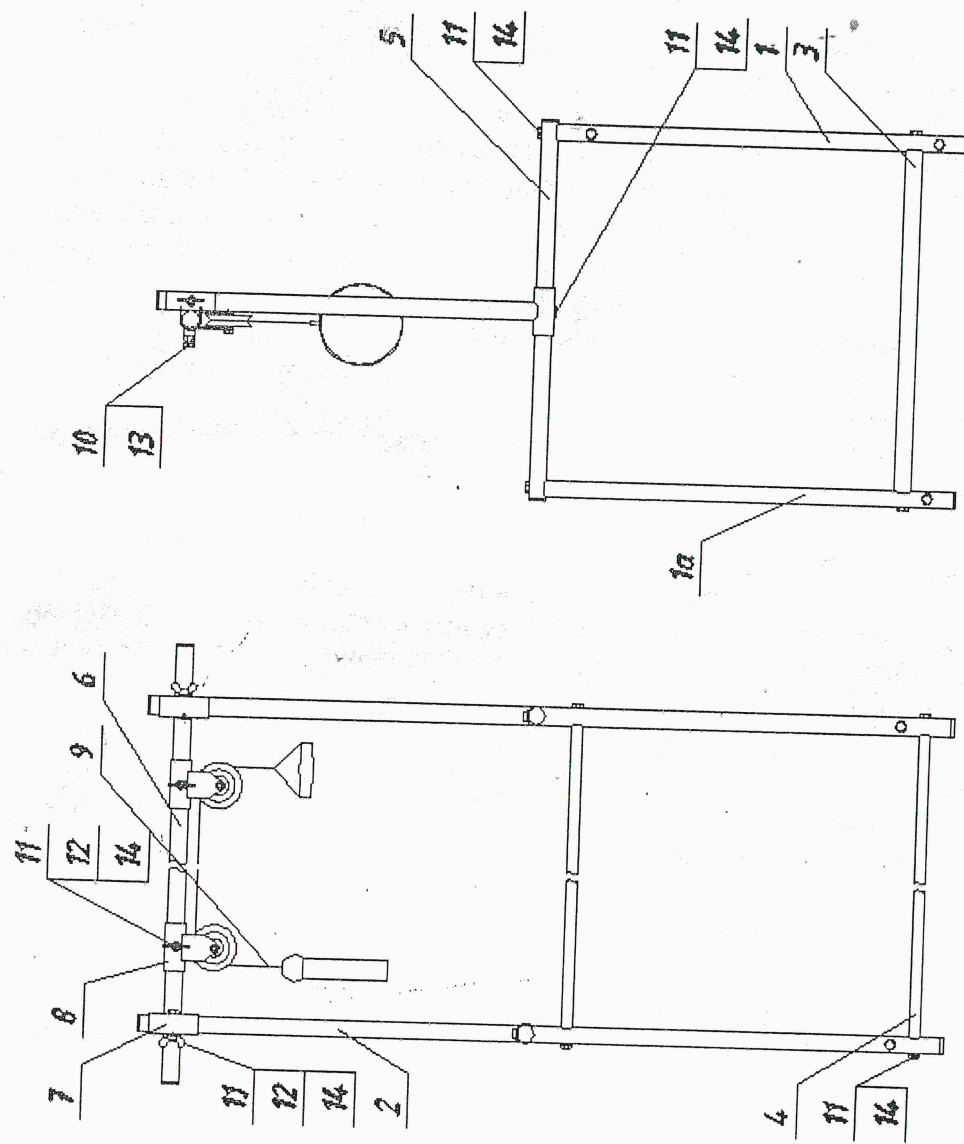

Рисунок

Примечание – Изображение перекладины на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации перекладины – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт перекладины в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя и при наличии РЭ. Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на перекладину без РЭ, а также на перекладину, имеющую нарушения требований, изложенных в настоящем РЭ.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений.

10.5 Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате физического износа или несоответствующего использования перекладины.

10.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу: 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308-14-85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а; 220003, г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

11 Сведения о государственной регистрации

Перекладина является изделием медицинского назначения.


Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271.

Действительно до 24.06.2026 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Телефон для справок (+375 17) 308-14-34; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308-14-79; сайт: www.bpovc.by.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

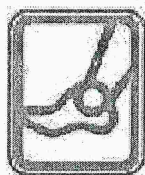

Перекладина подъемная к кровати деревянной
Руководство по эксплуатации

ОПИ-103.00.00МРЭ

Республика Беларусь

Дата редакции 06.07.2023

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на перекладину подъемную к кровати деревянной ОПИ-103.00.00М (далее – перекладина), предназначенную для самостоятельного подъема больного в сидячее положение, переворота в кровати, разработки нижних конечностей, вытяжения больных суставов.

Перекладина имеет возможность регулировки длины и ширины с шагом 50 мм. Применяется для оснащения ортопедических клиник, травматологических и восстановительных отделений клиник и для индивидуального использования в бытовых условиях.

Перекладина устанавливается на пол вокруг кровати.

1 Технические характеристики

1.1 Габаритные размеры:

- длина:

перекладины (поз. 6) – (2150...2550) мм;

стяжки (поз. 4) – (1960...2360) мм;

- ширина – (958...1408) мм;

- высота – 1496 мм.

1.2 Масса перекладины – не более 40 кг.

1.3 Срок службы – не более 10 лет.

2 Устройство и работа

2.1 Перекладина состоит из следующих основных узлов и деталей, приведенных на рисунке: ножки 1 и 1а; стойки 2; стяжки 3 и 4; перемычки 5; перекладина 6; направляющие 7; блоки 8; канат 9; болты 10, 11, 15; гайки 12, 13, 19, 21; шайбы 14, 20; винты 18; вставки 16, 16а, 17, 17а.

***Примечание** – Изображение перекладины на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.*

3 Монтаж изделия

3.1 Перекладина поступает к потребителю в разобранном виде.

3.2 Для сборки изделия необходимо проделать следующие операции:

3.2.1 Собрать две поперечные полурамы: для чего две ножки 1 и 1а соединить вставками 17 со стяжкой 3 при помощи болтов 11 и шайб 14. Соединение стяжки 3 и вставок 17 производится при

1

помощи винтов 18, гаек 19 и шайб 20. Регулировка длины стяжки 3 осуществляется путем перестановки болтов 18 в отверстиях вставок 17 и стяжки 3 (регулировка ступенчатая с шагом 50 мм).

3.2.2 На перемычку 5 со вставками 17а (с двух сторон) надеть стойку 2 и закрепить ее при помощи болтов 11. На обеих перемычках 5 стойки 2 должны быть закреплены в одних и тех же отверстиях. Вставки 17а закрепить на ножках 1 и 1а болтами 11 с шайбами 14. Регулировка длины перемычки 5 осуществляется путем перестановки винтов 18 в отверстиях вставок 17а и перемычек 5 (регулировка ступенчатая с шагом 50 мм).

ВНИМАНИЕ! После регулировки перемычки 5 и стяжки 3 должны иметь одинаковую длину.

3.2.3 Соединить полурамы стяжками 4 со вставками 16 при помощи болтов 11, учитывая, что две стяжки, расположенные друг под другом, должны располагаться за кроватью к стене. Соединение стяжки 4 и вставок 16 производится при помощи винтов 18, гаек 19 и шайб 20. Регулировка длины стяжки 4 осуществляется путем перестановки винтов 18 в отверстиях вставок 16 и стяжек 4 (регулировка ступенчатая с шагом 50 мм).

ВНИМАНИЕ! После регулировки стяжки 4 (4 шт.) должны иметь одинаковую длину.

3.2.4 На стойку 2 надеть и закрепить направляющие 7 при помощи болтов 11, гаек 12 и шайб 14, расположив их на одной стороне.

3.2.5 В блоки 8 продеть канат 9.

3.2.6 Блоки 8 с канатом 9 надеть на перекладину 6 и закрепить гайками 12 и болтами 11. Перекладину соединить со вставками 16а при помощи болтов 15, гаек 21 и шайб 14.

Регулировка длины перекладины 6 осуществляется путем перестановки болтов 15 в отверстиях вставок 16 (регулировка ступенчатая с шагом 50 мм).

3.2.7 Вставить перекладину со вставками 16а в направляющие 7 и закрепить перекладину болтами 10, гайками 13 и шайбами 14.

3.2.8 Отрегулировать перекладину 6 по высоте, и стойки 2 отрегулировать по ширине кровати в положение, удобное для пользователя.

3.2.9 После проделанных операций изделие готово к использованию.

4 Указание мер безопасности

4.1 Материалы, применяемые для изготовления перекладины, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (одежды, кожи пользователя, пола), с которой контактируют детали перекладины при эксплуатации.

4.2 Подвижные соединения должны быть отрегулированы, иметь плавный ход перемещения.

4.3 Поверхности деталей перекладины не должны иметь заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, способных повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю, а также не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида.

4.4 Устройства регулирования высоты должны надежно фиксироваться в нужном положении.

4.5 Перед использованием следует обязательно убедиться в прочности и надежности резьбовых соединений!

5 Техническое обслуживание

5.1 Все, детали перекладины необходимо протирать дезинфицирующими моющими средствами.

5.2 Периодически проверять надежность крепления конструкции и надежность фиксации регулируемых узлов перекладины.

6 Комплектность

6.1 Перекладина в разобранном виде:

- | | |
|------------------------|--|
| - ножки 1 – 2 шт.; | - вставки 16 – 6 шт.; |
| - ножки 1а – 2 шт.; | - вставки 16а – 2 шт.; |
| - стойки 2 – 2 шт.; | - вставки 17 – 4 шт.; |
| - стяжки 3 – 2 шт.; | - вставки 17а – 4 шт.; |
| - стяжки 4 – 3 шт.; | - направляющие 7 – 2 шт.; |
| - блоки 8 – 2 шт.; | - канат 9 в сборе с ремнем и ручкой – 1 шт.; |
| - перемычки 5 – 2 шт.; | - перекладина 6 – 1 шт.; |

6.2 Стандартные изделия:

- болты М10-6gx30.66.019 ГОСТ 7798-70 (поз. 10) – 4 шт.;
- болты М10-6gx45.66.019 ГОСТ 7798-70 (поз. 15) – 4 шт.;

- болты М10-6gx50.66.019 ГОСТ 7798-70 (поз. 11) – 18 шт.;
 - гайки М10-6Н.5 019 ГОСТ 3032-76 (поз. 12) – 4 шт.;
 - гайки М10-6Н.5 019 ГОСТ 5915-70 (поз. 13) – 4 шт.;
 - шайбы 10.05.019 ГОСТ 11371-78 (поз. 14) – 30 шт.;
 - винты М8-6gx45.66.019 ISO 7380 (поз.18) – 20 шт.;
 - гайки самостопорящиеся М8 DIN 985 (поз.19) – 20 шт.;
 - шайбы 8.05.019 ГОСТ 11371-78 (поз. 20) – 40 шт.;
 - гайки самостопорящиеся М10 DIN 985 (поз.21) – 4 шт.
- 6.3 Руководство по эксплуатации – 1 шт.

7 Свидетельство о приемке

Перекладина подъемная к кровати деревянной ОПИ-103.00.00М

наименование изделия

обозначение зав. номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов (СТБ 1426-2003), действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. Система менеджмента качества разработки и производства изделий протезно-ортопедических, обуви ортопедической и технических средств реабилитации соответствует требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

8 Свидетельство об упаковывании

Перекладина подъемная к кровати деревянной ОПИ-103.00.00М

наименование изделия

обозначение зав. номер

упакована на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

9 Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации перекладины – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

9.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт перекладины в случае выхода ее из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии руководства по эксплуатации. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

9.3 Гарантия не распространяется на перекладину без руководства по эксплуатации, а также на перекладину, имеющую нарушения требований, изложенных в настоящем руководстве.

9.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений.

9.5 Гарантия не распространяется на те дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования перекладины.

9.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:


220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 256-62-55.

10 Сведения о государственной регистрации

Перекладина является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271.

Действительно до 24.06.2026 г.

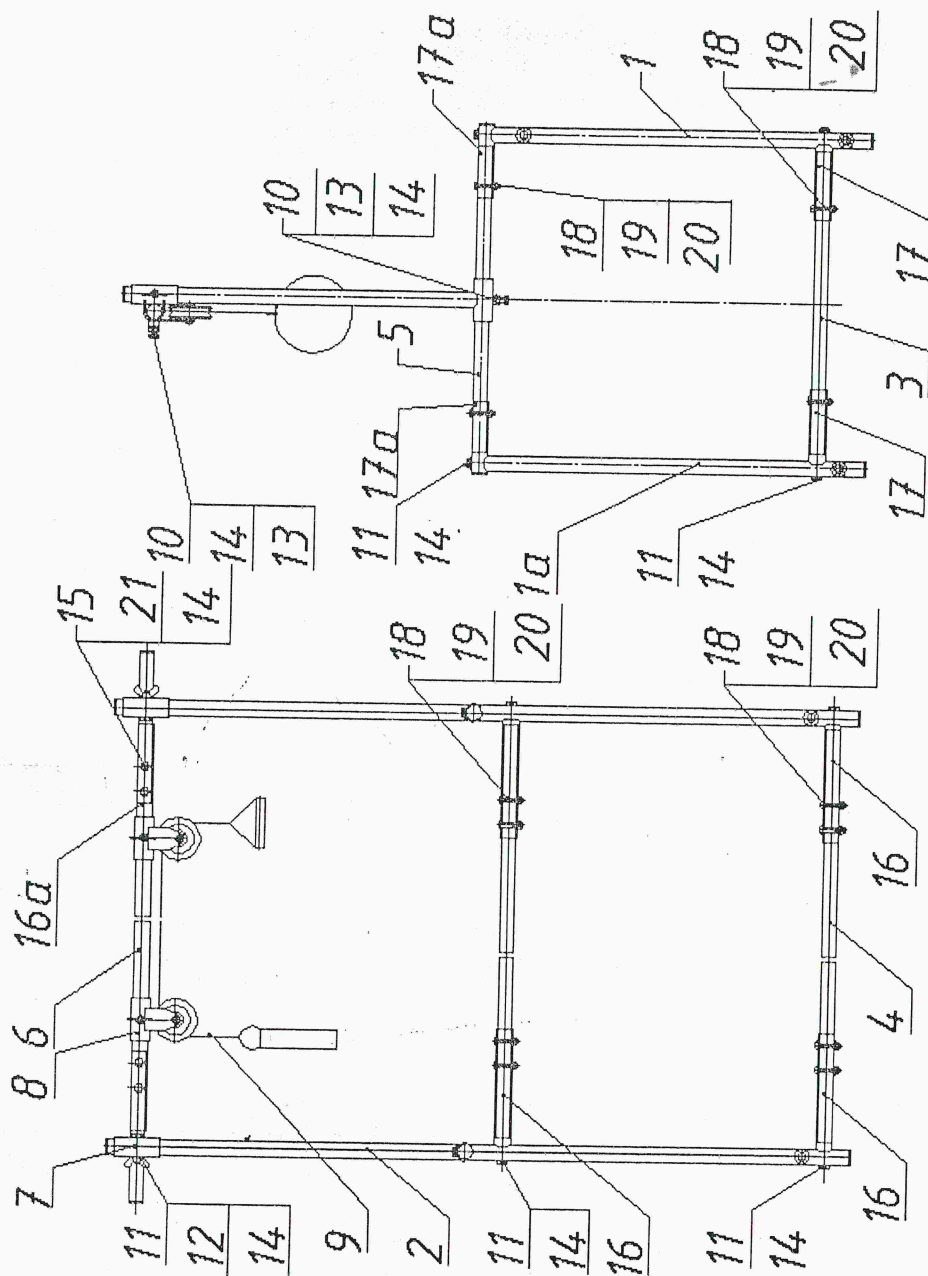


Рисунок

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учет Ваших предложений в будущем. Телефон для справок (+375 17) 308-14-34; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308-14-79; сайт: www.bpovc.by.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

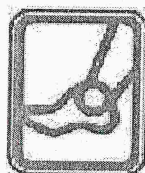

Перекладина подъемная к кровати металлической
Руководство по эксплуатации

ОПИ-101.00.00РЭ

Республика Беларусь

Дата редакции 06.07.2023

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на перекладину подъемную к кровати металлической ОПИ-101.00.00 (далее – перекладина), предназначенную для самостоятельного подъема больного в сидячее положение, переворота в кровати, разработки нижних конечностей, вытягивания больных суставов.

Применяется для оснащения ортопедических клиник, травматологических и восстановительных отделений клиник и для индивидуального использования в бытовых условиях.

Перекладина устанавливается на спинки кровати.

1 Технические характеристики

1.1 Технические характеристики приведены в таблице
Таблица

Обозначение	Длина, не более мм	Ширина, не более, мм	Высота, не более, мм	Масса, кг
ОПИ-101.00.00	2328	900	1500	15,90
-01	2318			15,85
-02	2268			15,81
-03	2268			15,82
-04	2228			15,74
-05	2208			15,00
-06	2228			15,74
-07	2128			14,78
-08	2268			15,87


1.2 Срок службы – не менее 10 лет.

2 Устройство и работа

2.1 Перекладина состоит из следующих основных узлов и деталей, приведенных на рисунке:

стойки 1, зажимы 2, скобы 3, пластины 4, перекладина 5, блоки 6, направляющие 7, канат 8, болты 9, 10, гайки 11, 12, шайбы 13.

Примечание – Изображение перекладины на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

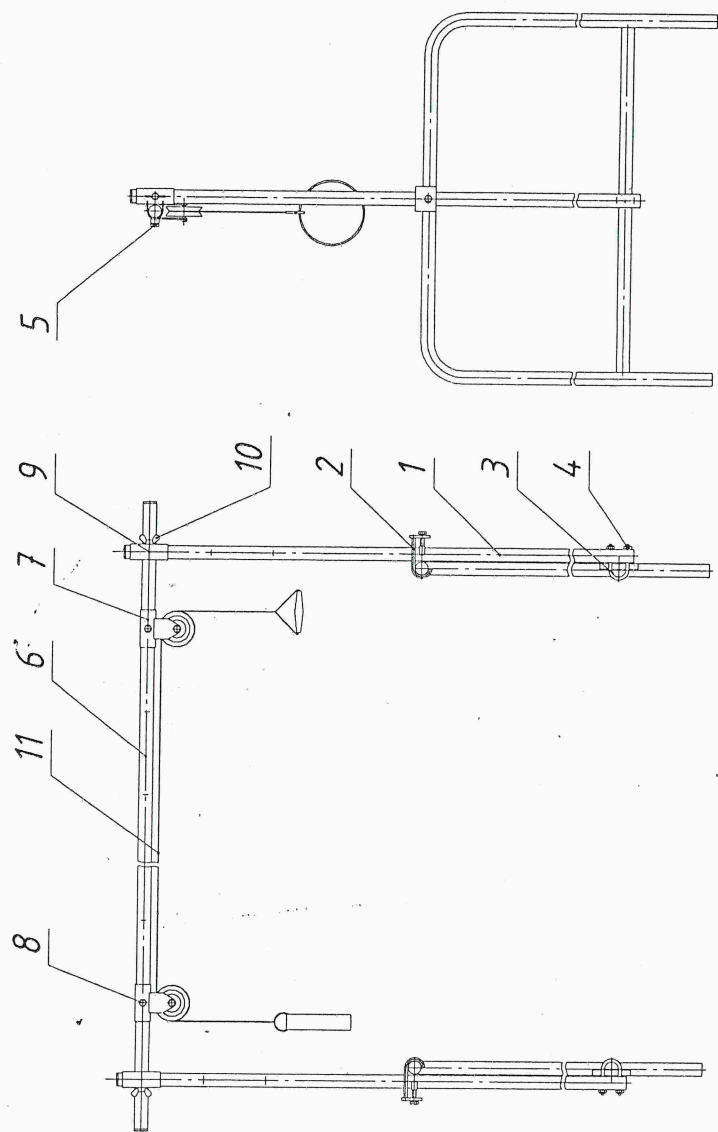

Рисунок

3 Монтаж изделия

3.1 Перекладина поступает к потребителю в разобранном виде.

3.2 Для сборки изделия необходимо проделать следующие операции:

3.2.1 На спинки кровати установить стойки 1 и закрепить их при помощи зажимов 2, скоб 3, пластин 4, гаек 12.

3.2.2 На стойки 1 одеть и закрепить направляющие 7 при помощи болтов 9 и гаек 11, расположив их на одной стороне.

3.2.3 В блоки 6 продеть канат 8.

3.2.4 Блоки 6 с канатом 8 одеть на перекладину 5, закрепив болтами 9 и гайками 11, продев их через перекладину в отверстия.

3.2.5 Вставить перекладину 5 в направляющие 7 и закрепить перекладину болтами 10 и шайбами 13.

3.2.6 Отрегулировать перекладину 5 по высоте кровати, удобной для пользования.

3.2.7 После проделанных операций изделие готово к использованию.

4 Указание мер безопасности

4.1 Материалы, применяемые для изготовления перекладины, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (одежды, кожи пользователя, пола), с которой контактируют детали перекладины при эксплуатации.

4.2 Подвижные соединения должны быть отрегулированы, иметь плавный ход перемещения.

4.3 Поверхности деталей перекладины не должны иметь заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, способных повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю, а также не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида.

4.4 Устройства регулирования высоты должны надежно фиксироваться в нужном положении.

5 Техническое обслуживание

5.1 Все детали перекладины необходимо протирать дезинфицирующими моющими средствами.

5.2 Периодически проверять надежность крепления конструкции и надежность фиксации регулируемых узлов перекладины.

6 Комплектность

6.1 Перекладина в разобранном виде:

- стойки 1 – 2 шт.;
- зажимы 2 – 2 шт.;
- скобы 3 – 2 шт.;
- пластины 4 – 2 шт.;
- перекладина 5 – 1 шт.;
- блоки 6 – 2 шт.;
- направляющие 7 – 2 шт.;
- канат 8 в сборе с ремнем и ручкой – 1 шт.

6.2 Стандартные изделия:

- болты М 10-6gx25.66.019 ГОСТ 7798-70 (поз. 10) – 2 шт.;
- болты М 10-6gx50.66.019 ГОСТ 7798-70 (поз. 9) – 4 шт.;
- гайки М8-6Н.6.019 ГОСТ 5927-70 (поз. 12) – 4 шт.;
- гайки М10-6Н.6.019 ГОСТ 3032-76 (поз. 11) – 4 шт.;
- шайбы 10.02.019 ГОСТ 113771-78 (поз. 13) – 2 шт.

6.3 Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7 Маркировка

7.1 Маркировка должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно конструкторской документации;
- обозначение СТБ 1426-2003;
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- срок службы (лет);
- гарантийный срок (месяцев);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для изделий, изготавливаемых серийно);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

8 Свидетельство о приемке

Перекладина подъемная к кровати металлической
наименование изделия

ОПИ-101.00.00

обозначение исполнение заводской номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями СТБ 1426-2003, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

9 Свидетельство об упаковке

Перекладина подъемная к кровати металлической
наименование изделия

ОПИ-101.00.00

обозначение исполнение заводской номер

упакована на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации перекладины – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт перекладины в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя при наличии руководства по эксплуатации. Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на перекладину без руководства по эксплуатации, а также на перекладину, имеющую нарушения требований, изложенных в настоящем руководстве.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений.

10.5 Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате физического износа или несоответствующего использования перекладины.

10.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу: 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308-14-85.

11 Сведения о государственной регистрации

Перекладина является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.1010271.

Действительно до 24.06.2026 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Телефон для справок (+375 17) 308-14-34; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308-14-79; сайт: www.bpovc.by.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10



ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
ЦСИЕ.03.169.00.00.00 П
«СИДЕНЬЕ ДЛЯ ВАННЫ»

Сиденье для ванны (далее - сиденье) используется для облегчения ухода за больными и инвалидами в ванной комнате. Устанавливается на ванну.

1 Технические характеристики

1.1 Основные параметры сиденья:

Сиденье выполняется в двух исполнениях с различием по ширине.

Модель	Длина, мм, ± 5	Ширина, мм, ± 5	Высота, мм, ± 5	Масса, кг, не более
ЦСИЕ.03.169.00.00.00	495	678	300	5,50
ЦСИЕ.03.169.00.00.00-01	495	766	300	6,62

1.2 Сиденье и спинка изготовлены из пиломатериалов лиственных пород.

1.3 Максимальная нагрузка на сиденье не более 100 кг.

1.4 Срок службы 5 лет.

2 Рекомендации по уходу

2.1 Проводить санитарную обработку сиденья моющими и дезинфицирующими средствами.

2.2 После санитарной обработки вытереть насухо.

2.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления. Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и естественным износом.

Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а.

Сиденье является изделием медицинского назначения. Изделие соответствует СТБ 1426-2003.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271.
Действительно до 24.06.2026 г.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»;
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Телефон для справок (+375 17) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308 14 79; сайт: www.bpovc.by.

Дата редакции 06.07.2023