
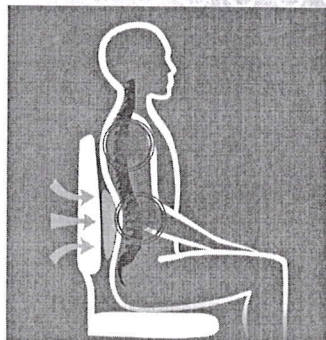



польза®

www.belpa-med.com

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОЯСНИЧНАЯ

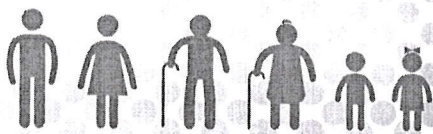

**Поддерживает и разгружает позвоночник
в положении сидя.**

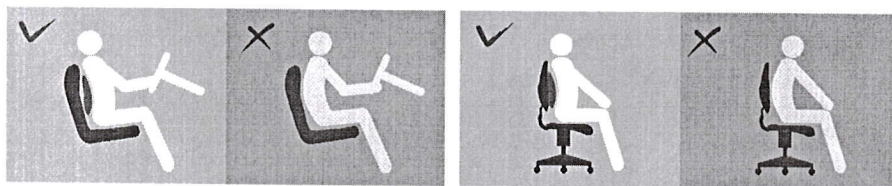

Инструкцию по применению смотрите на обороте.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись 

Шегелев А.С.


ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОЯСНИЧНАЯ



ПОДДЕРЖИВАЕТ И РАЗГРУЖАЕТ ПОЗВОНОЧНИК В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ.

ПОКАЗАНИЯ

- Боли в поясничном отделе позвоночника.
- Период реабилитации после травм и хирургических вмешательств.
- Длительное вынужденное положение сидя (в целях профилактики заболеваний позвоночника).

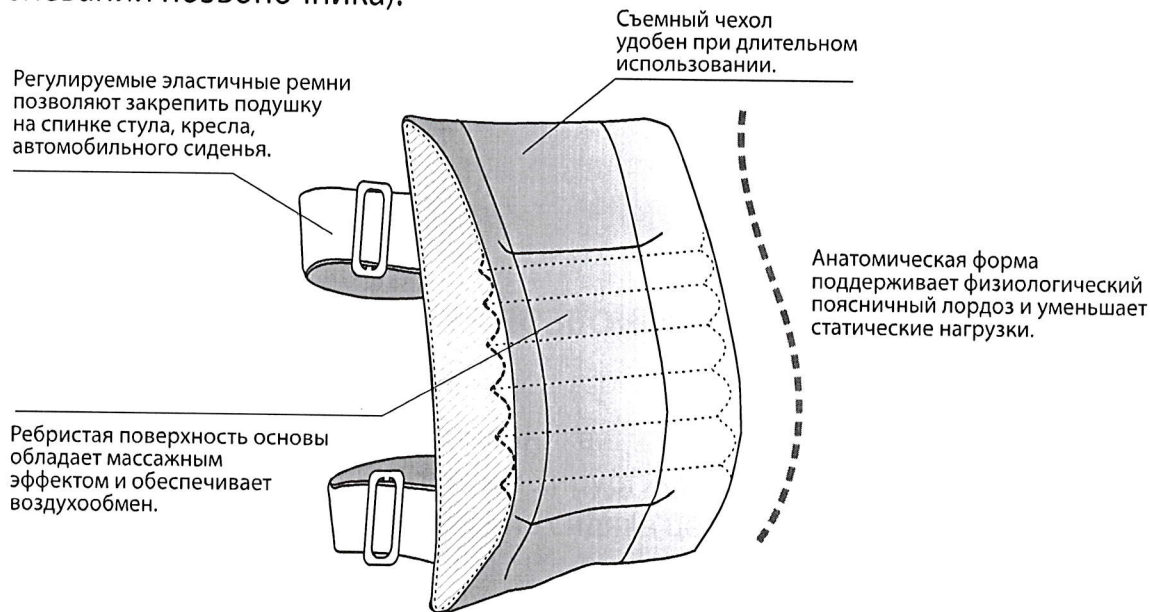

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Разместить на сидение в области поясничного отдела позвоночника, зафиксировать на спинке эластичными ремнями, отрегулировать натяжение ремней пряжками. Длительность ежедневного использования не ограничена. При возникновении болей, неприятных ощущений, снять изделие и обратиться к лечащему врачу. Съемный чехол стирать руками с использованием мягких моющих средств при температуре воды не выше 40°C. Не кипятить. Не отбеливать. Сушить вдали от источников тепла. Для основы подушки рекомендуется сухая чистка.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре не ниже -14 °C и не выше 25 °C и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 % на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Противопоказания: аллергические реакции на материалы, воспалительное поражение кожи поясничной области, острая травма позвоночника.

Размеры, см: 32,5 x 36,5 x 8,0.

Основа. Состав, %: пенополиуретан – 100.

Чехол. Состав, %: полиэфир – 100.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.

ТУ BY 800007404.010-2014

№ РЗН 2017/6128 от 06.07.2022



Производитель ООО «БЕЛПА-МЕД»:

220012, Беларусь, г. Минск,
ул. Кузьмы Чорного, д. 31, пом. 9, каб. 6
Тел./факс +375 17 243 81 16

E-mail: belpa-minsk@tut.by

Адрес производства: 222310, Беларусь,
Минская область, Молодечненский р-н,
д. Носилово, ул. Новая, д. 2

Уполномоченный представитель

**производителя, принимающий
претензии на территории РФ:**

ООО «ПОЛЬЗА», 214036, Россия,
г. Смоленск, ул. Смольянинова 15, оф. 515
Тел.: +7 495 6680774.



E-mail: polza_orto@mail.ru



польза®

www.belpa-med.com

**ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ**

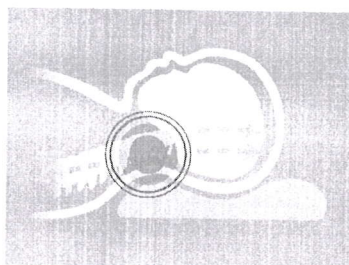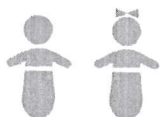

**Поддерживает и разгружает
шейный отдел позвоночника
у новорожденных во время сна.**

Инструкцию по применению смотрите на обороте.

КОПИЯ ВЕРНА

подпись *Минишев*

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ




ПОДДЕРЖИВАЕТ И РАЗГРУЖАЕТ ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА У НОВОРОЖДЕННЫХ ВО ВРЕМЯ СНА.

ПОКАЗАНИЯ

- Консервативное лечение и профилактика функциональной кривошеи.
- Реабилитационный период после родовой травмы с гипертонусом мышц шеи и плечевого пояса.
- В целях правильного развития шейного отдела позвоночника и формирования симметричной овальной формы головы ребенка.

Специальная форма подушки разработана с учётом анатомо-физиологических особенностей позвоночника у детей с 28-го дня жизни и до года.

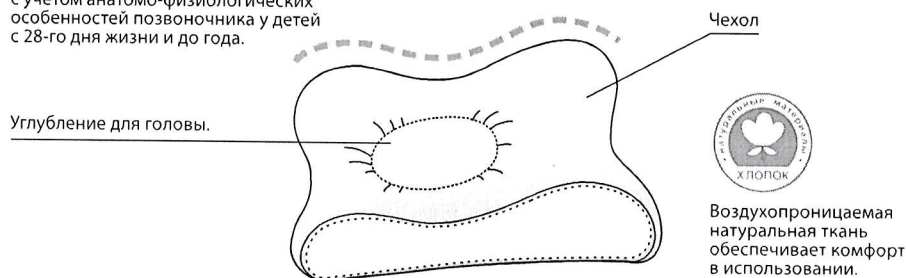

Инструкция по применению и уходу.

Перед использованием проконсультироваться с врачом. Голову ребенка укладывать на подушку так, чтобы узкий валик оказался под шеей ребенка, а голова в выемке. Периодически (1-2 раза в неделю) проветривать и просушивать подушку на свежем воздухе. Стирать по мере загрязнения руками (деликатно) с использованием мягких моющих средств при температуре воды не выше 40°C, не тереть, не выкручивать, слегка отжать. Не кипятить. Не отбеливать. Сушить на открытом воздухе на ровной поверхности вдали от источников тепла и солнечных лучей.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре не ниже -14 °C и не выше 25 °C и относительной влажности воздуха от 50 % до 80 % на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов сырья.

Размеры, см: 32,0 x 24,0 x 8,0.

Наполнитель. Состав, %: фибртек – 100.

Чехол. Состав, %: хлопок – 100.

Гарантийный срок хранения – 36 месяцев.

тип I ТУ ВУ 800007404.010-2014

«№РЗН 2017/6128 от 23.08.17



Производитель ООО «БЕЛПА-МЕД»
222310 Республика Беларусь,
Минская обл., Молодечненский р-н,
д. Носилово, ул. Новая, д. 2, к. 1
Тел.: +375 176 726604
E-mail: belpa@tut.by

**Уполномоченный представитель
производителя, принимающий
претензии на территории РФ:**
ООО «ПОЛЬЗА», 214036, Россия,
г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.15, оф. 515
Тел.: +7 495 6680774. E-mail: polza_orto@mail.ru

КОПИЯ ВЕРНА

подпись
Шмелев Е.А.