

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034 г. Гомель, ул. Владимирова, 8а



ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

ЦСИЕ.03.156.00.00.00 П

«ПРИСПОСОБЛЕНИЕ КРОВАТНОЕ ОПОРНОЕ»

Приспособление кроватное опорное (далее - приспособление) служит для поддержания туловища и головы в определенном положении лежа на кровати и предназначено для людей с ограничениями жизнедеятельности.

1 Технические характеристики

1.1 Основные параметры приспособления:

длина – (608 ± 5) мм; ширина - 806 мм, масса - 3,5 кг.

1.2 Максимальная нагрузка - не более 15 кг.

1.3 Предусмотрена возможность регулировки угла наклона на 30°, 45°, 60°, 75°.

1.4 Срок службы не менее 5 лет.

2 Рекомендации по уходу

2.1 Проводить санитарную обработку всех элементов приспособления моющими и дезинфицирующими средствами.

2.2 После санитарной обработки вытереть приспособление насухо.

2.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления. Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и естественным износом. Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (+375 232) 51-72-10, (+375 232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

4 Приспособление соответствует СТБ 1426-2003.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

Приспособление является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271.

Действительно до 24.06.2026 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (+375 232) 51 72 10, (+375 232) 51 72 23.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (+375 17) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 3081479; сайт: www.bprov.by.

Дата редакции 06.07.23

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034 г. Гомель, ул. Владимирова, 8а



**ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
ПОРУЧЕНЫ К УНИТАЗУ
ОПИ-110.00.00 П**

Поручень к унитазу (далее - поручень), применяется в качестве опорного устройства и крепится к полу с одной или с двух сторон унитаза.

Поручень является опорным устройством, предназначенным для людей с ограничениями жизнедеятельности и используется внутри помещений жилых, общественных и административно - бытовых зданий и сооружений.

1 Технические характеристики

1.1 Исполнения поручня:

ОПИ-110.00.00 правостороннее;

ОПИ-110.00.00-01 левостороннее.

1.2 Основные параметры поручня, не более:

длина – (547±8) мм; высота – (752±3) мм, ширина – (235±10) мм, масса – 4,6 кг.

1.3 Максимальная нагрузка - не более 50 кг.

1.4 Срок службы – не менее 10 лет.

2 Требования безопасности

2.1 Перед применением убедиться в надежности крепления всех соединений.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Проводить санитарную обработку поручня моющими и дезинфицирующими средствами.

3.2 После санитарной обработки вытереть поручень насухо.

3.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

4 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и естественным износом.

Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

46034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (+375 232) 51-72-10, (+375 232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

Поручень к унитазу является изделием медицинского назначения.

Изделие соответствует СТБ 1426-2003.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271. Действительно до 24.06.2026 г.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

**Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 517210, (0232) 517223.**

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учет Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

Дата редакции 06.07.2023

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а



**ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
ОПИ-87.00.00П «ПОРУЧЕЬ К РАКОВИНЕ»**

Поручеь к раковине (далее - поручеь) применяется в качестве опорного приспособления при мытии и крепится к стене.

Поручеь является опорным устройством, предназначенным для людей с ограничениями жизнедеятельности и используется внутри помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий и сооружений.

1 Технические характеристики

1.1 Основные параметры поручья, не более:

длина – (452 ± 3) мм; высота – (325 ± 10) мм, масса – 2,1 кг.

1.2 Максимальная нагрузка не более 50 кг.

1.3 Срок службы не менее 10 лет.

2 Требования безопасности

2.1 Перед применением убедиться в надежности крепления всех соединений.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Проводить санитарную обработку поручья моющими и дезинфицирующими средствами.

3.2 После санитарной обработки вытереть поручеь насухо.

3.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

4 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и естественным износом.

Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обратиться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Балуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 3081414.

Поручеь к раковине является изделием медицинского назначения. Изделие соответствует СТБ 1426-2003.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271. Действительно до 24.06.2026

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 51 72 10, (0232) 51 72 23.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

Дата редакции 11.07.2023

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Гомельский филиал
246034 г. Гомель, ул. Владимирова, 8а



Поручень поворотный для ванны
Руководство по эксплуатации

ОПИ-99.00.00РЭ

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а. (0232) 517210, (0232) 517223.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учет Ваших предложений в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

Настоящее руководство по эксплуатации ОПИ 99.00.00 РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством поручень поворотный для ванны ОПИ-99.00.00(далее- поручень) с условиями эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Поручень применяется в качестве опорного приспособления для ванной комнаты. Изготавливается из металлической трубы и имеет кронштейны для крепления к стене в ванной комнате. При использовании поворачивается перпендикулярно стене.


2 Технические характеристики

- 2.1 Длина – 825 мм.
- 2.2 Ширина – 481 мм.
- 2.3 Расстояние между кронштейнами L=540 мм.
- 2.4 Максимальная нагрузка не более 50 кг.
- 2.4 Масса поручня – не более 4 кг.
- 2.5 Срок службы – не менее 10 лет.

3 Устройство поручня

Поручень (см. рисунок) состоит из следующих основных элементов: рама поручня 1, кронштейны 2, маховик 3, оси 4, гайки 5, шайбы 6, планки 7.

Примечание – Изображение поручня на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие

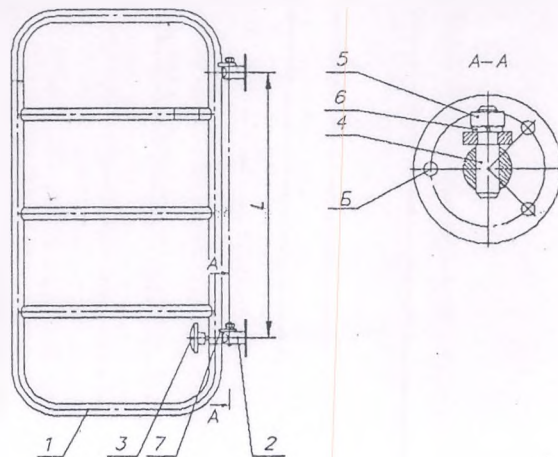

Рисунок

4 Монтаж и сборка изделия

Поручень к пользователю поступает в разобранном виде. Для сборки и монтажа изделия необходимо проделать следующие операции:

- 4.1 Ознакомиться со схемой собранного поручня (см. рисунок).
- 4.2 Определить место и высоту монтажа поручня.
- 4.3 Разметить расположение крепёжных отверстий Б (по 3 отверстия на каждом кронштейне) под установку анкеров, выдерживая размер L.
- 4.4 Просверлить по разметке отверстия сверлом диаметром 8 мм на глубину не менее 75 мм.
- 4.5 Установить анкера в просверленные отверстия так, чтобы цапга анкера утопала в отверстие.

4.6 Вывернуть винты из цанг анкерov и закрепить ими кронштейны 2 собранного согласно рисунку поручня в отверстиях Б.

4.7 Установить раму поручня 1 так, чтобы отверстия на планках 7 совпадали с отверстиями в стойках кронштейнов 2.

4.8 Закрепить раму поручня 1 на кронштейнах 2, продев оси 4 в отверстия и закрепив их с помощью гаек 5 и шайб 6.

Примечание – структура материала стены для крепления поручня должна быть плотной, однородной, без пустот (бетон, кирпич полнотелый и пр.).

5 Работа изделия

5.1 В нерабочем состоянии поручень откидывается параллельно стене. Для этого необходимо ослабить маховик 3, откинуть поручень и затянуть маховик.

5.2 Для приведения поручня в рабочее состояние необходимо ослабить маховик 3, откинуть поручень перпендикулярно стене и закрпить маховик.

6 Меры безопасности

6.1 Материалы, применяемые для изготовления поручня, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (одежды, кожи пользователя, пола), с которой контактируют детали поручня при эксплуатации.

6.2 Поверхности деталей поручня не должны иметь заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, способных повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю, а также не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида.

6.3 Гайки 5 должны быть надёжно затянуты на осях 4.

6.4 Маховик 3 должен быть надёжно затянут при использовании поручня.

7 Техническое обслуживание

7.1 Все детали поручня необходимо протирать дезинфицирующими моющими средствами.

7.2 Периодически проверять надёжность крепления конструкции и надёжность фиксации рамы поручня 1 на кронштейнах 2.

8 Комплектность

8.1 Рама, поручня (поз. 1)	- 1 шт.	
8.2 Кронштейн (поз. 2)		- 2 шт.
8.3 Маховик (поз. 3)		- 1 шт.
8.4 Ось (поз. 4)		- 2 шт.
8.5 Гайка М10-6Н.5.019 ГОСТ 5915-70 (поз. 5)		- 2 шт.
8.6 Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402-70 (поз. 6)	- 2 шт.	
8.7 Анкер стальной		- 6 шт.
8.8 Руководство по эксплуатации	- 1 шт.	

9 Маркировка

9.1 Маркировка должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно КД;
- обозначение СТБ;
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- срок службы (лет);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для серийных изделий);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

10 Свидетельство о приемке

Поручень поворотный для ванны ОПИ-99.00.00

наименование изделия обозначение зав. номер
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями
СТБ 1426-2003, действующей технической документацией и признан годным для
эксплуатации.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO
13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

11 Свидетельство об упаковывании

Поручень поворотный для ванны ОПИ-99.00.00

наименование изделия обозначение зав. номер
упакован на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность

личная подпись

расшифровка подписи, число, месяц, год

12 Гарантийные обязательства

11.1 Гарантийный срок эксплуатации поручня – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

11.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт поручня в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

11.3 Гарантия не распространяется на поручень, имеющий нарушения правил, изложенных в настоящем РЭ.

11.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений.

11.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресам:
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, тел. (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

13 Сведения о государственной регистрации

Поручень является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271.

Регистрационный номер изделия: Мн-7.3355/7.094-1907.

Действительно до 24.06.2026 г.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Гомельский филиал
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а



Поручень угловой с откидным сиденьем для душевых
Руководство по эксплуатации

ОПИ-98.00.00РЭ

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Владимирова, 8а. (+375 232) 51 72 10, (+375 232) 51 72 23.
Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству
производимых изделий. Телефон для справок (+375 17) 308 14 34;
отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308 14 79;
сайт: www.bpovc.by.

Дата редакции 12.07.2023

1 Назначение

Поручень угловой с откидным сиденьем для душевых ОПИ-98.00.00 (далее – поручень) применяется в качестве опорного приспособления для душевых комнат при умывании и крепится к стене.

Поручень предназначен для людей с ограничениями жизнедеятельности и используется внутри помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий и сооружений.

Исполнение ОПИ-98.00.00-01 дополнительным угловым поручнем не комплектуется.

2 Технические характеристики

2.1 Основные параметры поручня приведены в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение изделия		ОПИ-98.00.00	ОПИ-98.00.00-01
Параметр			
Длина, мм, не более	Поручень (поз. 1) в сборе с сиденьем	837	837
	Поручень (поз. 3)	837	-
Глубина сиденья, мм		310	310
Ширина сиденья, мм		490	490
Ширина, мм, не более	Поручень (поз. 1) в сборе с сиденьем	491	491
	Поручень (поз. 3)	107	-
Высота, мм, не более	Поручень (поз. 1) в сборе с сиденьем	385	385
	Поручень (поз. 3)	685	-
Масса изделия, кг, не более		10,1	7,0


2.4 Максимальная нагрузка: на поручень - не более 50 кг; на сиденье - не более 100 кг.

2.5 Срок службы – не менее 10 лет.

3 Устройство поручня

Поручень (см. рисунок) состоит из следующих основных элементов: поручень настенный 1, сиденье откидное 2, поручень угловой 3 (для исполнения ОПИ-98.00.00).

Примечание – Изображение поручня на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

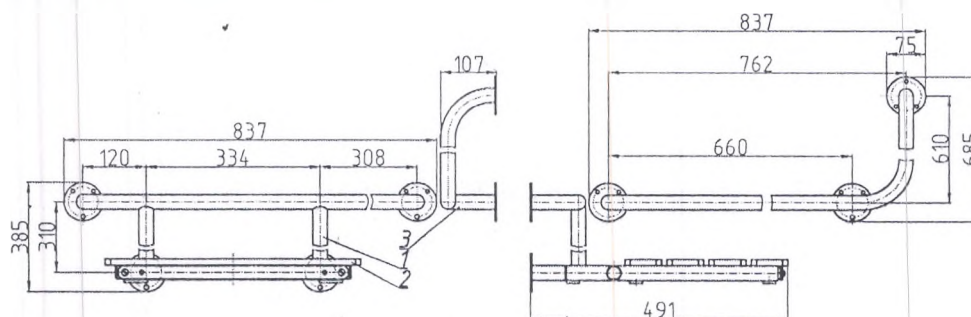

Рисунок

4 Монтаж и сборка изделия

Поручень к пользователю поступает в комплектном виде в чехле. Для сборки и монтажа изделия необходимо проделать следующие операции:

- 4.1 Ознакомиться со схемой смонтированного поручня (см. рисунок).
- 4.2 Распаковать и определить место и высоту монтажа поручня.
- 4.3 Разметить расположение крепежных отверстий (по 3 отверстия на каждом фланце) под установку анкеров, выдерживая размеры по месту.
- 4.4 Просверлить по разметке отверстия сверлом диаметром 8 мм на глубину не менее 75 мм.
- 4.5 Установить анкера в просверленные отверстия так, чтобы цапга анкера утопала в отверстие.
- 4.6 Закрепить винтами анкеров поручни 1 и 3 по месту согласно рисунку.
- 4.7 Контролировать возможность откидывания сиденья вертикально к стене.

Примечание – структура материала стены для крепления поручня должна быть плотной, однородной, без пустот (бетон, кирпич полнотелый и пр.).

5 Эксплуатация изделия

- 5.1 В нерабочем состоянии сиденье откидывается параллельно стене.
- 5.2 Для приведения сиденья в рабочее состояние необходимо повернуть его на осях в горизонтальное положение.

6 Меры безопасности

6.1 Материалы, применяемые для изготовления поручня, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (одежды, кожи пользователя, пола), с которой контактируют детали поручня при эксплуатации.

6.2 Поверхности деталей поручня не должны иметь заусенцев, задигов, острых кромок или выступов, способных повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю, а также не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида.

6.3 Контролировать надежность крепления винтов анкеров и осей сиденья.

7 Техническое обслуживание

7.1 Все детали поручня необходимо периодически протирать дезинфицирующими и моющими средствами. После санитарной обработки вытереть насухо. Не использовать для обработки растворители и абразивные вещества.

8 Комплектность

- | | |
|---|----------|
| 8.1 Поручень (поз. 1) в сборе с сиденьем (поз. 2) | - 1 шт. |
| 8.3 Поручень (поз. 3) (для исполнения ОПИ-98.00.00) | - 1 шт. |
| 8.4 Анкер стальной: для исполнения ОПИ-98.00.00 | - 21 шт. |
| для исполнения ОПИ-98.00.00-01 | - 12 шт. |
| 8.5 Руководство по эксплуатации | - 1 шт. |

9 Сведения о государственной регистрации

Поручень является изделием медицинского назначения. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271. Действительно до 24.06.2026

10 Свидетельство о приемке

Поручень угловой с откидным сиденьем для душевых

наименование изделия

обозначение

ОПИ-98.00.00

обозначение исполнение

зав. номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями ТНПА, СТБ 1426-2003, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Система менеджмента качества разработки и производства изделий протезно-ортопедических, обуви ортопедической и технических средств реабилитации соответствует требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

11 Свидетельство об упаковывании

Поручень угловой с откидным сиденьем для душевых

наименование изделия

обозначение

ОПИ-98.00.00

обозначение исполнение

зав. номер

упакован на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

12 Гарантийные обязательства

12.1 Гарантийный срок эксплуатации поручня – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

12.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт поручня в случае выхода его из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии руководства по эксплуатации. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

12.3 Гарантия не распространяется на поручень, имеющий нарушения правил, изложенных в настоящем руководстве.

12.4 Гарантийный ремонт не производится для поручня без руководства по эксплуатации на него и при наличии явных механических повреждений.

12.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресам: 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, тел. (+375 232) 51-72-10, (+375 232) 51-72-23. 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

Республика Беларусь
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
Гомельский филиал
246034 г. Гомель, ул. Владимирова, 8а



Поручень
Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.03.710.00.00.00РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.03.710.00.00.00 РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством Поручень с условиями эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Поручень применяется в качестве опорного приспособления при ходьбе. Изготавливается из металлической трубы и имеет опоры для крепления к стене в ванной комнате, коридорах, на лестницах и в других помещениях.

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики приведены в таблице.
Таблица

Обозначение	Длина поручня L_1 , мм	Масса поручня, кг	Расстояние между отверстиями, В, мм
ЦСИЕ.03.710.00.00.00	345	0,65	50
ЦСИЕ.03.710.00.00.00-01	450	0,81	
ЦСИЕ.03.710.00.00.00-02	575	1,00	
ЦСИЕ.03.710.00.00.00-03	1075	1,73	
ЦСИЕ.03.710.00.00.00-04	750	1,25	

2.2 Длина $L=(L_1-30)$ мм


2.3 Максимальная нагрузка: на поручень - 50 кг;

2.4 срок службы не менее 10 лет

3 Устройство поручня

Поручень (см. рисунок) состоит из следующих основных элементов: труба 1, винт 2, опора конечная 3.

Примечание – Изображение поручня на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

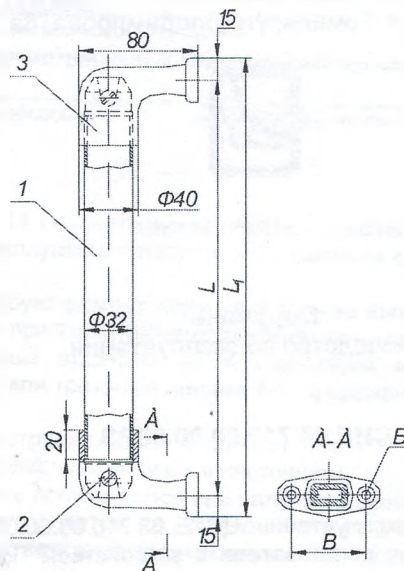

Рисунок

4 Монтаж изделия

Поручень к пользователю поступает в разобранном виде, упакованный в чехол из полиэтиленового рукава. Для сборки и монтажа изделия необходимо проделать следующие операции:

- 4.1 Ознакомиться со схемой собранного поручня (см. рисунок).
- 4.2 Определить место и высоту монтажа поручня.
- 4.3 Разметить расположение крепежных отверстий Б под установку анкеров, выдерживая размеры L и B.
- 4.4 Просверлить по разметке отверстия сверлом диаметром 8 мм на глубину не менее 75 мм.
- 4.5 Установить анкера в просверленные отверстия так, чтобы цапга анкера утопала в отверстие.
- 4.6 Вывернуть винты из цапг анкеров и закрепить ими опоры 3 собранного согласно рисунку поручня в отверстиях Б.
- 4.7 Равномерно затянуть стяжные винты 2 на опорах 3 так, чтобы труба поручня 1 не проворачивалась во время использования.

5 Меры безопасности

5.1 Материалы, применяемые для изготовления поручня, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (одежды, кожи пользователя, пола), с которой контактируют детали поручня при эксплуатации.

5.2 Поверхности деталей поручня не должны иметь заусенцев, задигов, острых кромок или выступов, способных повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю, а также не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида.

5.3 Стяжные винты 2 должны быть надежно затянуты на опорах 3.

6 Техническое обслуживание

6.1 Все детали поручня необходимо протирать дезинфицирующими моющими средствами.

6.2 Периодически проверять надёжность крепления конструкции и надёжность фиксации трубы в опорах.

7 Комплектность

7.1 Труба	- количество по заказу
7.2 Опора конечная	- 2 шт.
7.3 Опора промежуточная	- количество по заказу
7.4 Анкер стальной	- количество по заказу
7.5 Винт (для крепления опор конечных)	- 2 шт.
7.6 Винт (для крепления опор промежуточных)	- количество по заказу
7.7 Руководство по эксплуатации	- 1 шт.

8 Маркировка

5.1 Маркировка должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
 - наименование и обозначение изделия согласно КД;
 - обозначение СТБ;
 - идентификационный порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
 - срок службы;
 - гарантийный срок (месяцев);
 - дату изготовления (месяц, год);
 - отметку о приемке (штамп ОТК);
 - сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
 - идентификационный штриховой код (для изделий изготавливаемых серийно).
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

9 Свидетельство о приемке

Поручень в коридор ЦСИЕ.03.710.00.00.00

наименование изделия	обозначение	зав. номер
----------------------	-------------	------------

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями СТБ 1426-2003, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП.

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

10 Свидетельство об упаковывании

Поручень в коридор ЦСИЕ.03.710.00.00.00

наименование изделия

обозначение

зав. номер

упакован на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

11 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации поручня – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт поручня в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на поручень без РЭ, а также на поручень, имеющий нарушения требований, изложенных в настоящем РЭ.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений.

10.5 Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате физического износа или несоответствующего использования поручня.

10.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресам: 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, тел. (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8

12 Сведения о государственной регистрации

Поручень является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271.

Регистрационный номер изделия: Мн-7.3355/7.094-1907.

Действительно до 24.06.2026 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 517210, (0232) 517223.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учет Ваших предложений в будущем. Телефон для справок (017) 308-14-34; отдел маркетинга и сбыта (017) 308-14-79; сайт: www.bpovc.by.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
Гомельский филиал
246034 г. Гомель, ул. Владимирова, 8а



Поручень в коридор
Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.03.711.00.00.00РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.03.711.00.00.00 РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством поручень в коридор (далее – поручень) с условиями эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Поручень применяется в качестве опорного приспособления при ходьбе. Изготавливается из металлической трубы и имеет опоры для крепления к стене в коридорах, на лестницах и в других помещениях.

2 Технические характеристики

- 2.1 Длина поручня L выбирается индивидуально согласно заказа.
- 2.2 Расстояние между отверстиями $B=50$ мм.
- 2.3 Минимальная длина поручня $L_1=2078$ мм.
- 2.4 Максимальная нагрузка: на поручень - 50 кг.
- 2.5 Срок службы – не менее 10 лет.

3 Устройство поручня


Поручень (см. рисунок) состоит из следующих основных элементов: трубы 1, винты 2 и 3, опора конечная 4, опора промежуточная 5.

Примечание – Изображение поручня на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

4 Монтаж изделия

Поручень к пользователю поступает в разобранном виде, упакованный в чехол из полиэтиленового рукава. Для сборки и монтажа изделия необходимо проделать следующие операции:

- 4.1 Ознакомиться со схемой собранного поручня (см. рисунок).
- 4.2 Определить место и высоту монтажа поручня.

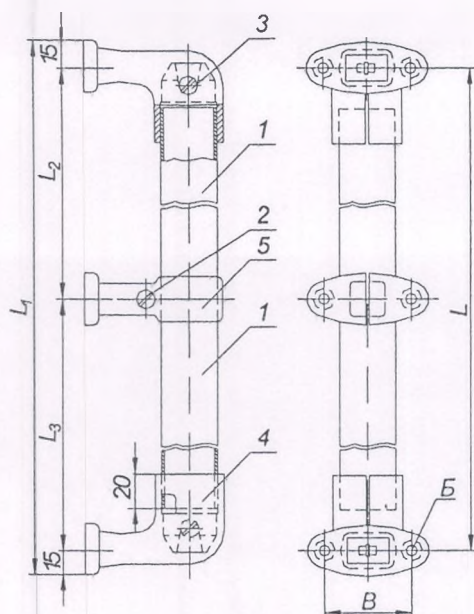

Рисунок

4.3 Разметить расположение крепёжных отверстий Б под установку анкеров, выдерживая размеры В, L, L/n, где n – количество труб 1 ($n_{\min}=2$).

4.4 Просверлить по разметке отверстия сверлом диаметром 8 мм на глубину не менее 75 мм.

4.5 Установить анкера в просверленные отверстия так, чтобы цапга анкера утонула в отверстиях.

4.6 Вывернуть винты из цапг анкеров и закрепить ими опоры 4 и 5 собранного согласно рисунку поручня в отверстиях Б.

4.7 Затянуть стяжной винт 2 промежуточной опоры 5.

4.7 Равномерно затянуть стяжные винты 3 на конечных опорах 4 так, чтобы трубы 1 не проворачивались во время использования.

5 Меры безопасности

5.1 Материалы, применяемые для изготовления поручня, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, а также не воздействуют на цвет поверхности (одежды, кожи пользователя, пола), с которой контактируют детали поручня при эксплуатации.

5.2 Поверхности деталей поручня не должны иметь заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, способных повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю, а также не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида.

5.3 Стяжные винты 2 и 3 должны быть надёжно затянуты.

6 Техническое обслуживание

6.1 Все детали поручня необходимо протирать дезинфицирующими моющими средствами.

6.2 Периодически проверять надёжность крепления конструкции и надёжность фиксации трубы в опорах.

7 Комплектность

7.1 Труба	- количество по заказу
7.2 Опора конечная	- 2 шт.
7.3 Опора промежуточная	- количество по заказу
7.4 Анкер стальной	- количество по заказу
7.5 Винт (для крепления опор конечных)	- 2 шт.
7.6 Винт (для крепления опор промежуточных)	- количество по заказу
7.7 Руководство по эксплуатации	- 1 шт.

8 Маркировка

5.1 Маркировка должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно КД;
- обозначение СТБ;
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- срок службы;
- гарантийный срок (месяцев);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для серийных изделий).
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

9 Свидетельство о приемке

Поручень в коридор ЦСИЕ.03.711.00.00.00

<i>наименование изделия</i>	<i>обозначение</i>	<i>зав. номер</i>
-----------------------------	--------------------	-------------------

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями СТБ 1426-2003, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

МП

<i>личная подпись</i>	<i>расшифровка подписи</i>	<i>число, месяц, год</i>
-----------------------	----------------------------	--------------------------

10 Свидетельство об упаковывании

Поручень в коридор ЦСИЕ.03.711.00.00.00

наименование изделия обозначение зав. номер

упакован на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

11 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации поручня – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт поручня в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на поручень без РЭ, а также на поручень, имеющий нарушения требований, изложенных в настоящем РЭ.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений.

10.5 Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате физического износа или несоответствующего использования поручня.

10.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресам: 246034 г. Гомель, ул. Владимирова, 8а т.8-(0232)-51-72-15,51-72-16

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8

12 Сведения о государственной регистрации

Поручень является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271.

Регистрационный номер изделия: Мн-7.3355/7.094-1907.

Действительно до 24.06.2026 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 517210,
(0232) 517223.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 308-14-34; отдел маркетинга и сбыта
17) 308-14-79; сайт: www.bprov.by.

Республика Беларусь

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а



ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
ЦСИЕ.03.171.00.00.00П

«ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ТУАЛЕТА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»

Приспособление для туалета для взрослых (далее - приспособление) предназначено для использования в туалетах, не оборудованных унитазами для людей с ограничениями жизнедеятельности.

1 Технические характеристики

1.1 Приспособление выполнено в трёх исполнениях с различием по длине и высоте.

1.2 Основные параметры приспособления:

Обозначение КД	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, не более, кг
ЦСИЕ.03.171.00.00.00	483±5	368±5	500±5	2,3
-01	490±5		540±5	2,4
-02	500±5		600±5	2,5

1.3 Масса пользователя, не более 100 кг.

1.4 Срок службы не менее 10 лет.

2 Рекомендации по уходу

2.1 Проводить санитарную обработку всех элементов приспособления моющими и дезинфицирующими средствами.

2.2 После санитарной обработки вытереть приспособление насухо.

2.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и естественным износом.

Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 3081414.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

Приспособление является изделием медицинского назначения. Изделие соответствует СТБ 1426-2003.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271.

Регистрационный номер Мин-7.3355/7.095-1907.

Действительно до 24.06.2026 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 517210, (0232) 517223.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых
изделий. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479;

сайт: www.bpovc.by

Дата редакции 11.07.2023



министерство труда и социальной защиты республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034 г. Гомель, ул. Владимирова, 8а

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ ЦСНЕ.30.365.00.00.00П

«Приспособление для туалета со спинкой»

Приспособление для туалета со спинкой (далее - приспособление), предназначено для взрослых при установке над унитазом или другими санитарными емкостями в квартирах или медицинских учреждениях. Для удобства пользователя в конструкции изделия имеется спинка.

Приспособление используется при пользовании туалетом для облегчения присаживания и вставания пациентов с патологией коленных и тазобедренных суставов, сопровождающейся затруднением функции сгибания - разгибания данных суставов.

1 Технические характеристики

1.1 Приспособление выполнено в двух исполнениях с различием по высоте.

1.2 Основные параметры приспособления:

Обозначение	Ширина, мм	Длина, мм, не более	Высота, мм	Высота от пола до сиденья, мм	Масса, кг, не более
ЦСНЕ.30.365.00.00.00	453±10	501	799±10	550±10	5,0
ЦСНЕ.30.365.00.00.00-01	453±10	510	849±10	600±10	5,3

1.2 Масса пользователя, не более 100 кг.

1.3 Срок службы не менее 10 лет.

2 Устройство изделия

2.1 Приспособление состоит из следующих элементов: сварная рама, спинка, сиденье, ручка.

4 Требования безопасности

3.1 Перед применением убедиться в надежности крепления всех соединений.

3.2 Предохранять приспособление от ударов и повреждений.

3.3 При повреждении и износе резиновых наконечников на ножках приспособления необходимо произвести их замену.

4 Рекомендации по уходу

4.1 Проводить санитарную обработку всех элементов приспособления моющими и дезинфицирующими средствами. После санитарной обработки вытереть приспособление насухо.

4.2 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

5 Хранение

5.1 Хранить приспособление в сухом и чистом помещении.

5.3 Не подвергать приспособление воздействию высокой температуры, влажности и пыли.

6 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и естественным износом. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента изготовления.

Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (+375 232) 51-72-10, (+375 232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 3081485.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

Приспособление является изделием медицинского назначения.

Изделие соответствует СТБ 1426-2003. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271. Регистрационный номер Мин-7.3355/7.095-1907.

Действительно до 24.06.2026 г.

*Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (+375 232) 51 72 10, (+375 232) 51 72 23.*

*Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий.
Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и
сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.*

Дата редакции 11.07.2023

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а



ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
ЦСИЕ.03.168.00.00.00П
«ПРИСТАВКА К УНИТАЗУ»

Приставка к унитазу (далее - приставка) применяется в качестве опорного приспособления при пользовании унитазом и предназначена для пользователей с ограничениями жизнедеятельности.

1 Технические характеристики

1.1 Основные параметры приставки:

Приставка выполнена в двух исполнениях с различием по высоте.

Обозначение	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг, не более
ЦСИЕ.03.168.00.00.00	420±10	520±10	700±10	4,7
ЦСИЕ.03.168.00.00.00-01			750±10	4,9

1.3 Максимальная нагрузка - не более 100 кг.

1.3 Срок службы не менее 10 лет.

2 Требования безопасности

2.1 Перед применением убедиться в надёжности крепления всех соединений.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Проводить санитарную обработку приставки моющими и дезинфицирующими средствами.

3.2 После санитарной обработки вытереть приставку насухо.

3.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

4 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты реализации.

Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и естественным износом.

Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (+375 232) 51-72-10, (+375 232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Приставка к унитазу является изделием медицинского назначения. Изделие соответствует СТБ 1426-2003.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271. Действительно до 24.06.2026 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул.Владимирова, 8а, (+375 232) 51 72 10, (+375 232) 51 72 23. Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий.

Телефон для справок (+375 17) 308 14 34; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308 14 79;
сайт: www.bpovc.by.

Дата редакции 11.07.2023

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
Гомельский филиал
246034 г. Гомель, ул. Владимирова, 8а



Приспособление для купания детей с ДЦП
Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.03.886.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

Дата редакции 11.07.2023

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.03.886.00.00.00 РЭ (далее – РЭ), предназначено для ознакомления пользователя с устройством приспособление для купания детей с ДЦП ЦСИЕ.03.886.00.00.00 (далее – приспособление), с условиями эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Приспособление является опорным устройством, предназначенным для обслуживания детей при личной гигиене в ванной.

Состоит из пластиковых труб, обтянутых специальной тканью (баннером). Регулируются углы наклона сиденья.

Приспособление изготавливается в трёх исполнениях.

Перед первым использованием приспособления рекомендуется получить консультацию специалиста и внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

2 Технические характеристики

2.1 Основные параметры приспособления приведены в таблице 1 (все обозначения и предельные отклонения размеров см. на рисунке).

Таблица 1

Обозначение изделия		ЦСИЕ.03.886.00.00.00	-01	-02
Параметр				
Длина, мм	L±10	792	1006	1222
	L ₁	560	690	770
Глубина сиденья, мм, L ₂		220	300	370
Высота спинки, мм, L ₃		520	660	810
Высота, мм	H±5	595	735	885
	H ₁ , не более	175	200	225
Ширина, мм	сиденья, В, не более	298	334	352
	B ₁ ±5	370	406	426
Масса изделия, кг, не более		4,0	4,5	5,0
Максимальный рост пользователя, см		92	127	173

2.2. Срок службы 2 года.

2.3 Максимальная грузоподъемность (масса пользователя) – не более 40 кг.

3 Устройство приспособления

Приспособление (см. рисунок) состоит из следующих элементов: опоры 1, сиденье 2, боковины 3, угольники 4 и 5, кнопки 6 и 7, ограничитель 8, ремни 9 и 10.

Примечание – Изображение приспособления на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

4 Эксплуатация изделия


4.1 Приспособление установить в ванну.

4.2 Отрегулировать на необходимый угол части приспособления с помощью кнопок 6 и 7 (регулировка пятиступенчатая, шаг регулировки 20°).

4.2.1 Нажать одновременно две кнопки 6, расположенные на угольниках 4, отрегулировать на необходимый угол верхнюю часть сиденья, отпустить кнопки.

4.2.2 Нажать одновременно две кнопки 7, расположенные на угольниках 5, отрегулировать на необходимый угол нижнюю часть сиденья, отпустить кнопки.

4.3 Расположить в приспособлении ребенка, определив оптимальное положение ограничителя 8 при помощи ремней 10. При необходимости зафиксировать ребенка ремнями 9.

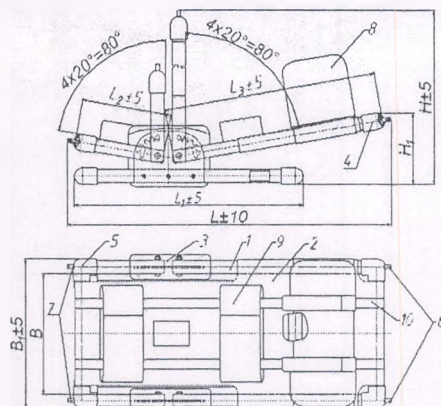

Рисунок

5 Меры безопасности

5.1 Перед использованием приспособления по назначению убедиться в надёжной фиксации сиденья в выбранном положении.

5.2 При использовании приспособления следить за надёжным удержанием ребёнка в изделии и не оставлять ребёнка без присмотра.

6 Техническое обслуживание

6.1 Приспособление необходимо протирать дезинфицирующим раствором.

6.2 После использования приспособления необходимо вытирать насухо.

6.3 Ограничитель просушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов. Не подвергать глажению.

7 Комплектность

7.1 Приспособление 1 шт.

7.2 Руководство по эксплуатации 1 шт.

8 Маркировка

8.1 Маркировка приспособления должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно КД;
- обозначение СТБ 1426-2003;
- идентификационный порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- срок службы (лет);
- гарантийный срок (месяцев);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для изделий, изготавливаемых серийно).
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

9 Свидетельство о приемке

Приспособление для купания детей с ДЦП ЦСИЕ.03.886.00.00.00

наименование изделия обозначение исполнение зав. номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями СТБ 1426-2003, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

МП

личная подпись расшифровка подписи число, месяц, год

10 Свидетельство об упаковывании

Приспособление для купания детей с ДЦП ЦСИЕ.03.886.00.00.00

наименование изделия обозначение исполнение зав. номер

упаковано на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

11 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт приспособления в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на приспособления, имеющие нарушения правил, изложенных в РЭ.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений

10.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 3081485.

12 Сведения о государственной регистрации

Приспособление является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271. Регистрационный номер Мн-7.3355/7.097-1907.

Действительно до 24.06.2026 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 517210, (0232) 517223.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
Гомельский филиал
246034 г. Гомель, ул. Владимирова, 8а



**Приспособление для купания детей с ДЦП
(Рост пользователя до 140 см)**

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.30.544.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

Дата редакции 11.07.2023

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.30.544.00.00.00 РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством приспособление для купания детей с ДЦП (рост пользователя до 140 см) (далее - приспособление), с условиями эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Приспособление является опорным устройством, предназначенным для обслуживания детей при выполнении личной гигиены в ванной комнате.

Приспособление состоит из алюминиевых труб, обтянутых специальной тканью (баннером), с регулировкой угла наклона сиденья.

Перед первым использованием приспособления рекомендуется внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

2 Технические данные

2.1 Габаритные размеры приспособления:

- длина $L - (935 \dots 1460 \pm 10)$ мм;
- ширина $B - (413 \pm 10)$ мм;
- высота спинки $L_2 - (320 \dots 425)$ мм;
- глубина сиденья $L_1 - (250 \dots 330)$ мм.
- ширина сиденья $B_1 -$ не более 392 мм.

2.3 Максимальная грузоподъемность (масса пользователя) – 50 кг.

2.4 Масса – не более 4,0 кг.

2.5. Максимальный рост пользователя -140см.

2.6 Срок службы не менее 2 года.

3 Устройство приспособления

Приспособление (см. рисунок) состоит из следующих элементов: рама 1, верхняя часть 2, нижняя часть 3, ремни 4, 5 и 6, ограничитель 7, кнопки 8, фиксаторы 9.

Примечание – Изображение приспособления на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.

4 Эксплуатация изделия

4.1 Приспособление установить в ванну.

4.2 Отрегулировать глубину сиденья и высоту спинки приспособления с помощью фиксатора 9, предварительно сняв баннер с приспособления.

4.3 Сняв одновременно два фиксатора 9, отрегулировать положение приспособления.


4.4 Отрегулировать на необходимый угол части приспособления с помощью кнопок 8 (шаг регулировки 20°).

4.5 Нажимая попарно кнопки 8, отрегулировать положение приспособления таким образом, чтобы оно касалось поверхности ванны в трёх точках.

4.6 Расположить в приспособлении ребёнка, определив оптимальное положение, зафиксировать положение при помощи ремней 5 и 6.

4.7 Отрегулировать ограничители 7.

4.8 Ограничитель 7 отклеить от ремня 4 и отрегулировать положение.

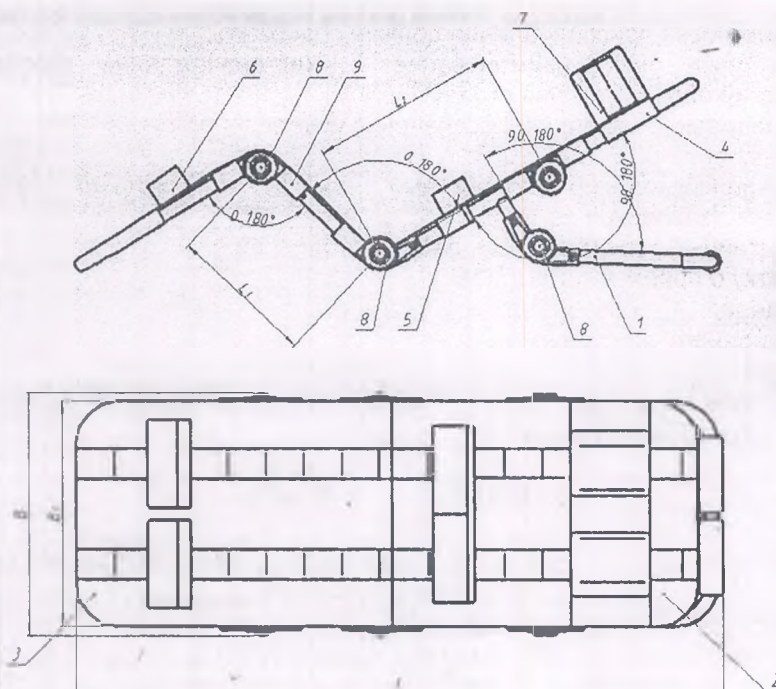

Рисунок

5 Меры безопасности

5.1 Перед использованием приспособления по назначению убедиться в надёжной фиксации сиденья в выбранном положении.

5.2 При использовании приспособления следить за надёжным удержанием ребёнка в изделии и не оставлять ребёнка без присмотра.

6 Техническое обслуживание

6.1 Приспособление необходимо протирать дезинфицирующим раствором.

6.2 После использования приспособления необходимо вытирать насухо.

6.3 Ограничитель просушить в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов. Не подвергать глажению.

7 Комплектность

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 7.1 Приспособление | - 1 шт. |
| 7.2 Руководство по эксплуатации | - 1 шт. |

8.Маркировка

- 8.1 Маркировка приспособления должна содержать:
- товарный знак, наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну);
 - наименование изделия и обозначение изделия в согласно КД;
 - обозначение СТБ 1426-2003;
 - идентификационный порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
 - гарантийный срок (месяцев); дату изготовления (месяц; год);
 - отметку о приёмке (штамп ОТК);
 - сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
 - идентификационный штриховой код (для серийных изделий);
 - «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

9 Свидетельство о приемке

Приспособление для купания детей с ДЦП (рост пользователя до 140 см)
наименование изделия

ЦСИЕ.30.544.00.00.00

обозначение

зав. номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями СТБ 1426-2003, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП _____

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

10 Свидетельство об упаковке

Приспособление для купания детей с ДЦП (рост пользователя до 140 см)
наименование изделия

ЦСИЕ.30.544.00.00.00

обозначение

зав. номер

упаковано на РУП БПОВЦ согласно требованиям, предусмотренным в

наименование или код изготовителя

действующей технической документации

должность личная подпись расшифровка подписи число, месяц, год

11 Гарантийные обязательства

11.1 Срок гарантии приспособления 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

11.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт приспособления в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия -изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведённых пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

11.3 Гарантия не распространяется на приспособления, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем РЭ.

11.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений

11.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ Гомельский филиал по адресу: **246034 г. Гомель, ул. Владимирова 8а.**

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского 10.

12 Сведения о государственной регистрации

Приспособление является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271

Действительно до 24.06.2026

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Гомельский филиал 246034, г. Гомель, ул. Владимирова 8а

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Телефон для справок г. Минск (+375 17) 308-14-34; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308-14-79; сайт: www.bpovc.by.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034 г. Гомель, ул. Владимирова, 8а



СИДЕНЬЕ ДЛЯ ВАННЫ
ЦСИЕ. 03.720.00.00.00П
ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Сиденье для ванны (далее - сиденье) применяется для облегчения ухода за больными и инвалидами в ванной комнате. Устанавливается в ванну.

1 Технические характеристики

1.3 Основные параметры сиденья:

длина – (450 ± 3) мм, ширина – (676 ± 5) мм, высота – $(303,5 \pm 3)$ мм, масса - 4,9 кг.

1.4 Сиденье и спинка изготовлены из высокопрочных полимеров.

1.3 Срок службы не менее 5 лет.

2 Рекомендации по уходу

2.1 Проводить санитарную обработку сиденья моющими и дезинфицирующими средствами.

2.2 После санитарной обработки вытереть насухо.

2.3 Не использовать для обработки сиденья растворители, абразивные вещества.

3 Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и естественным износом.

Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а.

Сиденье является изделием медицинского назначения. Изделие соответствует СТБ 1426-2003.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271.

Действительно до 24.06.2026 г.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 517210, (0232) 517223.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учет Ваших предложений в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

Дата редакции 11.07.2023



ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
ЦСИЕ. 03.891.00.00.00
«СТУПЕНЬКА К ВАННЕ»

Ступенька к ванне (далее - ступенька) используется для облегчения подъёма в ванну больных и инвалидов. Изготавливается из алюминиевых труб и пиломатериалов.

1 Технические характеристики

1.2 Основные параметры ступеньки:

длина - 430 мм, ширина - 385 мм, высота – 175,5 мм, масса - 3 кг.

1.2 Максимальная нагрузка (масса пользователя) - не более 100 кг.

1.3 Остальные технические характеристики в соответствии с СТБ 1426-2003.

2 Рекомендации по уходу

2.1 Проводить санитарную обработку ступеньки моющими и дезинфицирующими средствами.

2.2 После санитарной обработки ступеньку вытереть насухо.

2.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3 Срок службы не менее 5 лет.

4 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию). Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления. Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и естественным износом.

Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 3081485.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015:

Ступенька является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271.

Регистрационный номер изделия: Мн-7.3355/7.099-1907.

Действительно до 24.06.2026 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 517210, (0232) 517223.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
246034 г. Гомель, ул. Владимирова, 8а



ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
ЦСИЕ. 03.892.00.00.00
«СТУПЕНЬКИ К ВАННЕ»

Ступеньки к ванне (далее - ступеньки) используются для облегчения подъема в ванну больных и инвалидов. Изготавливаются из алюминиевых труб и пиломатериалов.

1 Технические характеристики

1.4 Основные параметры ступенек:

длина – (658 ± 10) мм, ширина – (385 ± 10) мм, высота – (326 ± 10) мм, масса – 5,5 кг.

1.5 Максимальная нагрузка (масса пользователя) - не более 100 кг.

1.6 Срок службы не менее 5 лет.

2 Рекомендации по уходу

2.1 Проводить санитарную обработку ступенек моющими и дезинфицирующими средствами.

2.2 После санитарной обработки ступеньки вытереть насухо.

2.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и естественным износом.

Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 51-72-10, (0232) 51-72-23.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 3081485.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

Ступенька является изделием медицинского назначения. Изделие соответствует СТБ 1426-2003

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110271.

Действительно до 24.06.2026 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал: 246034, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (0232) 517210, (0232) 517223.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учет Ваших предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

Дата редакции 11.07.2023