

GNI Co., Ltd.

5F 501, 63-12, Dongtancheomdansaneop 1-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea.

Тел.: +82-505-600-8880 Факс: +82-505-333-8880 Домашняя страница:

<http://www.gniortho.com>

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Название продукта: Ортодонтические Пружины (в FDA: Пружина, Ортодонтическая)
- Firmenное наименование: NITI Пружины, закрытая пружина с ушком
- Дата редакции: **2021.12.10**
- Номер редакции: **Версия 0**

	Отдел / Должность	Имя	Дата	Подпись
Вопрос	Представитель по управлению качеством	Да Ин, Джанг	2021.12.10	
Обзор	Президент	Дуг Су, Ким	2021.12.10	
Одобрение	Президент	Дуг Су, Ким	2021.12.10	

Нет.	Лист регистраций изменений	Номер редакции	Дата
1	Недавно установленный	0	2021.12.10
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Ортодонтические пружины


NITI Springs, закрытая пружина с ушком

Подготовка перед использованием

1. Проверьте товар на наличие отклонений.
2. Проверьте, запечатана ли упаковка.

Инструкция по применению

1. После проверки длины используемой детали подготовьте пружину нужной длины (модель), вставьте ее в проволоку и поместите между нужными скобами.

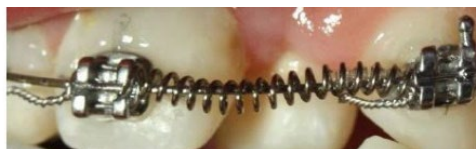

Открытая пружина
(Используется для расширения
межзубного пространства)



Закрытая пружина
(Используется для сужения
межзубного пространства)

Условия хранения и обращения после использования

1. Этот продукт является одноразовым медицинским устройством и не может быть использован повторно.
2. Хранить в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.



Меры предосторожности при использовании

1. Этот продукт должен использоваться ортодонтами.
2. Избегайте деформации, применяя чрезмерную силу во время использования.
3. Поскольку этот продукт является одноразовым, его повторное использование запрещено.
4. Не ешьте твердую и липкую пищу во время ношения изделия.

КОНТАКТ



Компания GNI Co., LTD.

5F 501, 63-12, Dongtancheomdansaneop 1-ro,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Корея

Тел : +82-505-600-8880

Факс: +82-505-333-8880

Домашняя страница: <http://www.gniortho.com>

GNI Co., Ltd.

5F 501, 63-12, Dongtancheomdansaneop 1-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea.

Тел.: +82-505-600-8880

Факс: +82-505-333-8880

Домашняя страница:

<http://www.gniortho.com>

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

■ Название продукта: Ортодонтические Устройства (в FDA: ленточные, эластичные, ортодонтические)

■ Торговая марка: Ортодонтические резинки, Лигатуры, Силовая цепь, Сепараторы, уплотнительные кольца, торсионная прокладка, силиконовый воск

■ Дата редакции: **2021.12.10**

■ Номер редакции: **Версия 0**

	Отдел / Должность	Имя	Дата	Подпись
Вопрос	Представитель по управлению качеством	Да Ин, Джанг	2021.12.10	
Обзор	Президент	Дуг Су, Ким	2021.12.10	
Одобрение	Президент	Дуг Су, Ким	2021.12.10	

Нет.	лист регистраций изменений	Номер редакции	Дата
1	Недавно установленный	0	2021.12.10
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Ортодонтические устройства

**Ортодонтические резинки,
Лигатурная повязка, силовая цепь,
сепараторы, уплотнительные кольца,
торсионная прокладка, силиконовый
воск**

Подготовка перед использованием

1. Не ставьте на изделие тяжелые предметы.
2. Перед использованием проверьте внешний вид на предмет деформации или прилипания посторонних веществ.

Инструкция по применению

1. Обязательно используйте его только для указанной цели и не злоупотребляйте им для любых других целей.

- Ортодонтические резинки

Ортодонтические резинки используются для постановки межчелюстной тяги (от верхней челюсти к нижней). Фиксируется с помощью кибер-брекетов, язычных кнопок и/или крючков.

- Лигатуры

Используется в качестве устройства для лигирования брекета и дуги путем подвешивания на стяжке брекета для ортодонтического лечения.

- Силовая цепь

Ее обрезают до нужной длины и подвешивают между зубами, чтобы придать необходимое усилие натяжения для ортодонтического лечения.

- Сепараторы

Вставьте кольцо между зубами, где будет вставлена лента, используя плоскогубцы.

- Уплотнительные кольца

После подвешивания на скобах или крючках для ортодонтического лечения эластично соедините зубы и вставьте между

- Торсионная накладка

Ее обрезают до нужной длины и подвешивают между зубами, чтобы придать необходимое усилие натяжения для ортодонтического

лечения.

- Силиконовый воск

Отрезав соответствующее количество, нанесите его на кронштейн. После этого аккуратно прижмите изделие пальцами, чтобы оно покрыло весь кронштейн.

Условия хранения и обращения после использования

1. Этот продукт является одноразовым медицинским устройством и не может быть использован повторно.
2. Хранить в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.



Меры предосторожности при использовании

1. Изделия, отделившиеся во время использования, следует заменить новыми и перевязать.
2. По решению и указаниям стоматолога перевязывают в месте, подходящем для содержания ортодонтического лечения.
3. Замененные продукты должны быть утилизированы.
4. Обязательно используйте его только для указанной цели и не злоупотребляйте им для любых других целей.
5. Поскольку этот продукт является одноразовым, его повторное использование запрещено.

КОНТАКТ



Компания GNI Co., LTD.

5F 501, 63-12, Dongtancheomdansaneop 1-ro,
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

Тел : +82-505-600-8880

Факс: +82-505-333-8880

Домашняя

страница :<http://www.gniortho.com>

GNI Co., Ltd.

5F 501, 63-12, Dongtancheomdansaneop 1-ro, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea.

Тел.: +82-505-600-8880 Факс: +82-505-333-8880 Домашняя страница:

<http://www.gniortho.com>

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Название продукта: Внутриротовые фиксирующие элементы (IN FDA: зажим, проволока, ортодонтический)
- Торговая марка: Внутриротовые фиксирующие элементы
- Дата редакции: **2021.12.10**
- Номер редакции: **Версия 0**

	Отдел / Должность	Имя	Дата	Подпись
Вопрос	Представитель по управлению качеством	Да Ин, Джанг	2021.12.10	
Обзор	Президент	Дуг Су, Ким	2021.12.10	
Одобрение	Президент	Дуг Су, Ким	2021.12.10	

Нет.	лист регистраций изменений	Номер редакции	Дата
1	Недавно установленный	0	2021.12.10
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Внутриротовые фиксирующие элементы

Внутри полости рта

Подготовка перед использованием

1. Проверьте товар на наличие отклонений.

Инструкция по применению

1. Наносится на область, необходимую для ортодонтического лечения.

Условия хранения и обращения после использования

1. Этот продукт является одноразовым медицинским устройством и не может быть использован повторно.
2. Хранить в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.



Меры предосторожности при использовании

1. Не используйте этот продукт для каких-либо целей, кроме ортодонтических.
2. Избегайте деформации изделия путем приложения чрезмерной силы во время использования.
3. Поскольку этот продукт является одноразовым медицинским устройством, его повторное использование запрещено.

КОНТАКТ



Компания GNI Co., LTD.

5F 501, 63-12, Dongtancheomdansaneop 1-ro,

Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Корея

Тел : +82-505-600-8880

Факс: +82-505-333-8880

Домашняя страница: <http://www.gniortho.com>

GNI-IFU-009_Rev. 0