



**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИСКАМЕДТЕХ» г. Минск**

СИСТЕМЫ РЕЛЬСОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

СРМ-ИМТ

Руководство по эксплуатации и паспорт

ЦИЛГ.004.00 РЭ

2023

1. Основные сведения

1.1. Настоящее руководство по эксплуатации является совмещенным с паспортом документом, содержащим основные сведения о конструкции систем рельсовых медицинских СРМ-ИМТ, технических характеристиках, комплектности, правилах монтажа и эксплуатации, сведения о приемке и упаковывании, гарантийные обязательства.

1.2. Системы рельсовые медицинские СРМ-ИМТ предназначены для крепления навесного оборудования жизнеобеспечения в отделениях интенсивной терапии, реанимации, родовых и операционных залах и других палатах лечебно-профилактических учреждений.

1.3. Системы рельсовые медицинские СРМ-ИМТ, изготавливаются в соответствии с ТУ ВУ 100991302.004-2007 изм. «З», ГОСТ 20790 и КД: ЦИЛГ.004.01 – ЦИЛГ.004-04.

2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики систем рельсовых СРМ-ИМТ указаны в таблице 1.

Обозначение	Габаритные размеры (высота, толщина, длина), Н×В×L*, мм	Грузоподъемность, М, кг	Ширина несущего рельса, мм
СРМ-ИМТ-01	95×95×600*	30,0	**
СРМ-ИМТ-02	95×95×1000*	50,0	**
СРМ-ИМТ-03	95×95×1400*	70,0	**
СРМ-ИМТ-04	95×95×1800*	90,0	**

* допускается изготовление систем рельсовых других длин (L) по заявкам заказчика, при этом грузоподъемность (М) систем рассчитывается по формуле $M=0,05L$.

** по согласованию с заказчиком, системы рельсовые медицинские СРМ-ИМТ изготавливаются следующих типоразмеров: 25 × 10 мм; 30 × 10 мм; круглый Ø30 мм.

2.2. Для изготовления систем рельсовых медицинских СРМ-ИМТ применяются материалы: сталь коррозионно-стойкая марок 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632, сплав алюминиевый марки Д16 по ГОСТ 4784; торцы рельса заглушены пластиковыми заглушками.

2.3. Климатическое исполнение – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

2.4. Системы рельсовые СРМ-ИМТ относятся к стационарным изделиям группы 1 по ГОСТ 20790.

2.5. Средний срок службы – 5 лет.

3. Правила эксплуатации и меры безопасности

3.1. Системы рельсовые медицинские СРМ-ИМТ должны эксплуатировать при температуре от плюс 10°C до плюс 35°C и относительной влажности 80% при 25°C

3.2. Запрещается нагружать системы весом большим, чем указано в таблице 1.

4. Очистка и дезинфекция

4.1. Системы рельсовые медицинские СРМ-ИМТ устойчивы к обработке 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644. Возможно проведение очистки и дезинфекции другими средствами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь, согласно методическим и эксплуатационным документам.

5. Правила хранения

Системы рельсовые медицинские СРМ-ИМТ подлежат хранению в упаковке изготовителя на складах поставщика (потребителя) при температуре воздуха от минус 50°C до плюс 40°C и


влажности – 75% при 15°C. Окружающий воздух не должен содержать коррозионно-активных примесей, масляных паров и взвесей.

6. Комплектация систем рельсовых СРМ-ИМТ

СРМ-ИМТ-04




СРМ-ИМТ-03

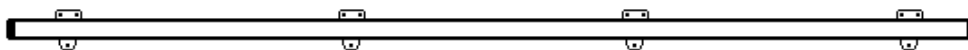


СРМ-ИМТ-02




СРМ-ИМТ-01

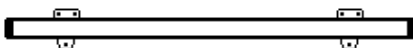

СРМ-ИМТ-01

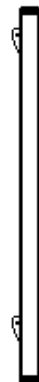

1. Несущий рельс
2. Кронштейн
3. Комплект крепления
(саморез, дюбель)

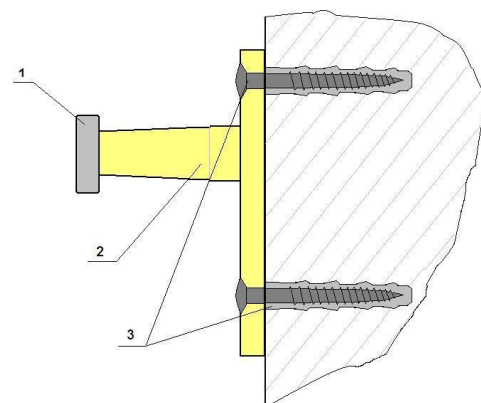

7. Монтаж

Монтаж систем рельсовых СРМ-ИМТ в ЛПУ выполняется специалистами монтажной службы предприятия-изготовителя ЗАО «ИСКАМЕДТЕХ», г. Минск, либо уполномоченными ЗАО «ИСКАМЕДТЕХ» организациями.

8. Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации систем рельсовых медицинских СРМ-ИМТ – 24 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 40 мес. со дня отгрузки со склада предприятия-изготовителя.

9. Изготовитель и его юридический адрес

Системы рельсовые медицинские СРМ-ИМТ изготавливаются предприятием ЗАО «ИСКАМЕДТЕХ», 220070, РБ, г. Минск, ул. О. Кошевого, 10-1Н.

Тел/факс +375 17 399-10-99. E-mail: info@imt.by

10. Свидетельство о приемке

Системы рельсовые медицинские:

Тип изделия	Длина	Кол-во
СРМ-ИМТ-01	600 мм	1 шт
СРМ-ИМТ-02	1000 мм	-
СРМ-ИМТ-03	1400 мм	-
СРМ-ИМТ-04	1800 мм	-
	Длины систем по заявке заказчика	-
СРМ-ИМТ-01	-	-
СРМ-ИМТ-02	-	-
СРМ-ИМТ-03	-	-
СРМ-ИМТ-04	-	-

изготовлены и приняты в соответствии с требованиями ТУ ВУ 100991302.004-2007 изм. «2» и признаны годными к эксплуатации.

КОНТРОЛЕР: Хаменко А.Н.
ФИО МП (подпись)

ДАТА «14» сентября 2020г.

11. Свидетельство об упаковывании

Системы рельсовые медицинские СРМ-ИМТ-01 упакован согласно ТУ ВУ 100991302.004-2007 изм. «2».

Тип изделия	Длина	Кол-во
СРМ-ИМТ-01	600 мм	1 шт
СРМ-ИМТ-02	1000 мм	-
СРМ-ИМТ-03	1400 мм	-
СРМ-ИМТ-04	1800 мм	-
	Длины систем по заявке заказчика	-
СРМ-ИМТ-01	-	-
СРМ-ИМТ-02	-	-
СРМ-ИМТ-03	-	-
СРМ-ИМТ-04	-	-

УПАКОВЩИК: Корабельников А.Н.
ФИО МП (подпись)

ДАТА «14» сентября 2020г.

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБИТЕЛЕ:
