

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Министра

здравоохранения

Республики Беларусь

А.Г. Старовойтов

«04» 08 2024



Ленты для регистрирующих приборов

ТУ ВУ 600040287.001 – 2023

Инструкция по применению

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель директора

УП «Центр экспертизы
и испытаний в здравоохранении»

М.И. Злотникова

«05» 08 2024



«СОГЛАСОВАНО»

Главный врач

УЗ «1-я городская
клиническая больница»

О.П. Есманчик

«19» 08 2024



«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор

ООО «ВЕСТ», Республика Беларусь

Г.М. Кищук

2024



«СОГЛАСОВАНО»

Главный врач

УЗ «Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи»

О.И. Светлицкая


«18» 08 2024



Ленты для регистрирующих приборов

ТУ ВУ 600040287.001 – 2023

Инструкция по применению

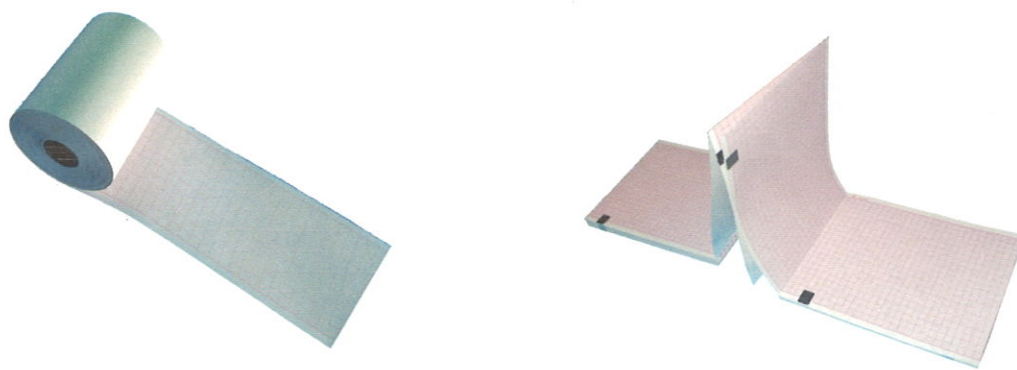



Для принтера используйте ленты, рекомендуемые производителем. В противном случае это может сократить срок службы термопечатающей головки, записанные сигналы станут размытыми, а лента будет подаваться плохо.

Технические требования

На лентах не должно быть морщин, разрывов, помятых и волнистых участков, пятен. Кромки должны быть ровными, без надрывов и смятий бумаги.

Диаграммная сетка должна быть напечатана четко, иметь однотонную окраску по всему полю без наплывов краски и отмарывания. Печать диаграммной сетки должна быть нанесена со стороны теплочувствительного слоя термочувствительной бумаги.

Условия хранения и эксплуатации

Продукция из термочувствительной бумаги должна храниться в темных помещениях с температурой 18-25°C и относительной влажностью 40-65%. Отпечатанную продукцию рекомендовано хранить в папках из полиолефина и полиэфиров. В случае длительного воздействия прямых солнечных лучей и офисного света или более коротком воздействии интенсивного ультрафиолетового излучения ленты желтеют. Изображение имеет тенденцию к выцветанию под солнечными лучами и, если его подвергают воздействию флуоресцентного света в течение длительного периода.

Рекомендован для использования клей, основанный на крахмале, ПВА или СМС.

Тренинги, процарапывание металлическими или жесткими предметами, ногтем и т.д. может привести к реакции термослоя бумаги.

Список материалов, контакта с которыми следует избегать: органические растворители; чистящие жидкости; пластификаторы; нефтяные растворители; бумаги для влажного диазирования; копировальные бумаги; бумага литого мелования; материалы, содержащие трибутил фосфат; разнообразные термо системы; безуглеродные растворители; аммоний; масла; вода.

Утилизация

К лентам для медицинских регистрирующих приборов могут быть использованы обычные методы утилизации. Использование, хранение и утилизация данного продукта не вызывает экологического загрязнения.

Гарантии изготовителя

Все гарантии производителя на стабильность изображения действуют только в случае соблюдения условий хранения и эксплуатации, указанных в настоящей инструкции.

При соблюдении всех условий хранения срок сохранения изображения на термобумаге составляет не менее 3 лет. Если требования по срокам архивного хранения выше указанного, рекомендуется сделать резервную копию (ксерокопию).

Гарантийный срок хранения устанавливается 12 месяцев со дня реализации продукции.

Пожаробезопасность

Степень воспламеняемости аналогична бумаге без покрытия. Применяется стандартное оборудование пожаротушения.

Заправка лент

Для обеспечения долговременной эксплуатации термопечатающего механизма необходимо выбирать ленты от надежного производителя, которая в точности соответствует техническим характеристикам вашей техники.

Сигнал может быть воспроизведен на термобумаге в пачках или рулонах. Чтобы загрузить бумагу правильно, необходимо предварительно ознакомиться с принципами ее установки.

Для правильной загрузки складывающихся лент необходимо следовать приведенным ниже инструкциям:

- поместите термочувствительную бумагу в специальное отделение, предназначенное для нее;
- обратите внимание: черная маркировка (метка) должна быть в нижней части пачки;
- пачка складывающихся лент должна быть расположена строго посередине между двумя направляющими;
- после загрузки термочувствительной бумаги, обязательно прикройте дверцу, которая помещена между главной корпусной частью устройства и резиновым валиком.

Для правильной загрузки рулонных лент необходимо следовать приведенным ниже инструкциям:

- нажать кнопку открывания крышки отсека для термобумаги и аккуратно откинуть крышку;
- установить рулон термобумаги вытянув свободный конец в сторону панели управления и закрыть крышку отсека так, чтобы тянущий обрезиненный валик прижал термобумагу термочувствительным слоем (сторона с нанесенной диаграммной сеткой) к термопечатающей головке (ТПГ) без перекоса;
- зафиксировать крышку отсека с обрезиненным валиком в термопечатающем механизме до щелчка.

Примечание: допускается использование термобумаги, у которой термочувствительный слой обращен внутрь рулона, но в любом случае рулон следует располагать так, чтобы термочувствительный слой был обращен к термопечатающей головке.

ВНИМАНИЕ! При открытой крышке отсека запрещаются любые механические воздействия на термопечатающую головку и валик термопечатающего механизма.

Претензии по качеству принимаются ООО «ВЕСТ» в течение гарантийного срока, установленного ТУ ВУ 600040287.001 – 2023. Моментом фактического получения товара является дата подписания товарной накладной на товар Покупателем.