



Инструкция по применению

Ортезы голеностопные

Модели: AT53014, AT53015, AT53016, AT53017



AT53014 Ортез голеностопный с добавлением спандекса, легкая степень фиксации

Ортез выполнен из гибкого, воздухопроницаемого материала, который состоит из спандекса, латекса и полиэстера. Ортез поддерживают лодыжку, профилактически защищает ее от травм, особенно при ослаблении сустава. Ортез оптимально обеспечивает функционирование сустава, сохраняет движение в анатомическом диапазоне, корректирует и предотвращает патологические отклонения. Используется при посттравматической реабилитации, растяжении связок, подвывихи и нестабильность в голеностопном суставе, артроз и артрит голеностопного сустава, профилактика травм во время физической активности. Используемый материал, обеспечивает хорошую гибкость продукта даже при длительном применении.

Размеры AT53014: S: 33 - 36 см, M: 37 – 41 см, L: 42 – 46 см, XL: 47см – плюс.
Размер ортеза определяется по размеру обуви.



AT53015 Ортез голеностопный из полиэстера, легкая степень фиксации

Ортез выполнен из эластичного материала, основным компонентом которого является полиэстер. Ортез поддерживают лодыжку, профилактически защищает ее от травм, особенно при ослаблении сустава. Ортез оптимально обеспечивает функционирование сустава, сохраняет движение в анатомическом диапазоне, корректирует и предотвращает патологические отклонения. Используется при посттравматической реабилитации, растяжении связок, подвывихи и нестабильность в голеностопном суставе, артроз и артрит голеностопного сустава, профилактика травм во время физической активности. Ортез предназначен для длительного так и краткосрочного использования.

Размеры AT53015: универсальный.



AT53016 Ортез голеностопный с волокном из бамбука, легкая степень фиксации

Ортез выполнен из гибкого, воздухопроницаемого материала, основным компонентом которого является бамбуковое волокно, с добавками хлопка и спандекса. Ортез усиливает лодыжку, профилактически защищает ее от травм, особенно при ослаблении сустава. Ортез обеспечивает функционирование сустава в оптимальном, анатомическом диапазоне движения, корректирует его искажения и предотвращает патологические аномалии. Полезно при посттравматической реабилитации, во время физической активности - особенно при ослаблении сустава, в случае дегенеративных и ревматических заболеваний. Бамбуковое волокно, используемое в продукте, благодаря природной субстанции "бамбо кун", присутствующей в них, обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Кроме того, поскольку выращивание бамбука не требует использования химических веществ и пестицидов, его волокна не содержат токсичных раздражителей.

Размеры AT53016: S: 33 - 36 см, M: 37 – 41 см, L: 42 – 46 см, XL: 47см – плюс. Размер ортеза определяется по размеру обуви.



AT53017 Ортез голеностопный из нейлона, легкая степень фиксации

Ортез изготовлен из гибкого, воздухопроницаемого материала, основным составляющим которого является нейлон, с добавлением латекса и спандекса. Ортез поддерживают лодыжку, профилактически защищает ее от травм, особенно при ослаблении сустава. Ортез оптимально обеспечивает функционирование сустава, сохраняет движение в анатомическом диапазоне, корректирует и предотвращает патологические отклонения. Используется при посттравматической реабилитации, растяжении связок, подвывихи и нестабильность в голеностопном суставе, артроз и артрит голеностопного сустава, профилактика травм во время физической активности. Нейлон, используемый в продукте, обеспечивает высокую легкость и стойкость продукта, легко моется, быстро высыхает и создает неблагоприятную среду для развития бактерий и грибов, поэтому этот ортез можно рекомендовать специально для физически активных людей, занимающихся спортом.

Размеры AT53017: S: 33 - 36 см, M: 37 – 41 см, L: 42 – 46 см, XL: 47см – плюс.
Размер ортеза определяется по размеру обуви.



Состав:

Модели:

AT53014 - 65% полиэстер, 25% латекс, 10% спандекс;

AT53015 - 75% полиэфирный хлопок, 25% шелк;

AT53016 - 10% эластан, 40% бамбуковое волокно, 25% хлопок, 25% спандекс;

AT53017 - 60% нейлон, 30% латексный шелк, 10% спандекс.

Рекомендации по уходу за изделием

- Ортез можно стирать исключительно вручную в воде при температуре до 40°C деликатным моющим средством.
- Глажка, химчистка, использование отбеливателей запрещены.
- Не выжимать.
- Сушить в сухом виде в развернутом состоянии, деликатно отжать перед сушкой.

Внимание!

1. Перед применением изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
2. Длительность ежедневного использования изделия в соответствии с рекомендациями Вашего лечащего врача. Использовать изделие исключительно по назначению. При возникновении вопросов по применению, обратитесь к Вашему лечащему врачу.
3. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.
4. Изделие нельзя применять при наличии открытых ран, ссадин.
5. Условия хранения: в сухом месте при комнатной температуре.

Информация об изделии

Для получения подробной информации об изделии обратитесь к производителю или к продавцу в вашей местности.

Срок годности (хранения): 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Гарантия: полгода с даты покупки без потери медицинских качеств.

Импортер в Республику Беларусь – ИООО «АНМЕДПЛЮС», г.Минск, ул.Пономаренко 35/А - 318
тел.: +375 44 799 76 99.

Производитель - ANTAR Sp. J., ул. Зависьляньска, 43; 03-068, Варшава, Республика Польша,
тел.: 0 22 518 36 00.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:.....

Серийный номер:

Дата продажи:.....

1) Фирма Antar Sp.J. (АНТАР), 03-068 Варшава, ул. Зависьляньска, 43, настоящим предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня продажи.

2) Во время гарантийного срока АНТАР обязуется провести необходимый ремонт изделия для восстановления правильного его функционирования в течение 14 рабочих дней со дня получения изделия на ремонт по вышеуказанному адресу.

3) АНТАР сохраняет за собою право заменить изделие, в случае, если признает, что издержки на ремонт превышают его стоимость. Ремонт или замена дефектных изделий не продлевают гарантийный срок.

4) В случае обнаружения, что изделие работает неправильно, следует незамедлительно отправить его в адрес АНТАР (см. п. 1) или связаться с пунктом продажи изделия.

5) Прежде, чем начать эксплуатацию, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению и тщательно её соблюдать. Использование изделия не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией лишает изделие гарантии.

6) Гарантией не охвачены повреждения, возникшие вследствие пробоя или пореза изделия острым предметом, повреждения в результате воздействия внешней механической силы, излишнего нажима, соединения изделия с жирными или маслянистыми веществами, бензином и другими агрессивными веществами.

7) НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПОКУПКИ ТОВАРА (ЧЕКОМ, СЧЁТОМ ИЛИ СЧЕТОМ-ФАКТУРОЙ). ПРОСИМ ПРИЛОЖИТЬ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОКУПКУ В СЛУЧАЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ.

8) Претензии, заявленные без подтверждения покупки товара, не принимаются.



Antar Sp.J.

ul. Zawiślńska 43, 03-068 Warszawa

tel. +48 22 518 36 00

fax: +48 22 518 36 30

e-mail:antar@antar.net

Импортёр в РБ – ИООО «АНМЕДПЛЮС»,
тел.: +375 44 799 76 99.

Штамп пункта продажи, Ф.И.О.
и разборчивая подпись продавца:



www.antar.net



_____ ()

V 1.29.02.2016



Инструкция по применению

Ортезы коленные

Модели: AT53010, AT53011, AT53012, AT53013



AT53010 Ортез коленный с добавлением спандекса, легкая степень фиксации

Ортез выполнен из гибкого, воздухопроницаемого материала, состоящий из спандекса, латекса и полиэстера. Укрепляет сустав, обеспечивает сжатие и легкое согревание сустава. Ортез оптимально обеспечивает функционирование сустава, сохраняет движение в анатомическом диапазоне, корректирует и предотвращает патологические отклонения. Ортез фиксирует коленный сустав, профилактически защищает его от травм, используется при легких повреждениях связочного аппарата и ушибах коленного сустава, при ревматических и дегенеративных заболеваниях. Используемый материал, обеспечивает хорошую гибкость ортеза даже при длительном применении.

Размеры AT53010: S: 28 - 34 см, M: 31 - 35 см, L: 36 - 40 см, XL: 41 - 44 см.

Чтобы определить размер ортеза, необходимо измерить окружность вокруг колена при повороте на 20 градусов.



AT53011 Ортез коленный из полиэстера, легкая степень фиксации

Ортез выполнен из эластичного материала, основным составляющим которого является полиэстер. Он укрепляет сустав, обеспечивает сжатие и легкое согревание сустава. Оптимально обеспечивает функционирование сустава, сохраняет движение в анатомическом диапазоне, корректирует и предотвращает патологические отклонения. Ортез усиливает коленный сустав, профилактически защищает его от травм, используется при легких повреждениях связочного аппарата и ушибах коленного сустава, при ревматических и дегенеративных заболеваниях. Ортез используется при боли различной этиологии, повышенных нагрузках на коленный сустав.

Размеры AT53011: универсальный.



AT53012 Ортез коленный с волокном из бамбука, легкая степень фиксации

Ортез выполнен из гибкого, воздухопроницаемого материала, основным компонентом которого является бамбуковое волокно, с добавлением хлопка и спандекса. Укрепляет сустав, обеспечивает сжатие и легкое согревание сустава. Ортез оптимально обеспечивает функционирование сустава, сохраняет движение в анатомическом диапазоне, корректирует и предотвращает патологические отклонения. Ортез фиксирует коленный сустав, профилактически защищает его от травм, используется при легких повреждениях связочного аппарата и ушибах коленного сустава, при ревматических и дегенеративных заболеваниях. Бамбуковое волокно, используемое в продукте, благодаря природному происхождению обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Кроме того, поскольку выращивание бамбука не требует использования химических веществ и пестицидов, его волокна не содержат токсичных раздражителей.

Размеры AT53012: S: 28 - 34 см, M: 31 - 35 см, L: 36 - 40 см, XL: 41 - 44 см.

Чтобы определить размер ортеза, необходимо измерить окружность вокруг колена при повороте на 20 градусов.



AT53013 Ортез коленный из нейлона, легкая степень фиксации

Ортез выполнен из гибкого, воздухопроницаемого материала, основным компонентом, которого является нейлон, с добавлением латекса и спандекса. Ортез укрепляет сустав, обеспечивает сжатие и легкое согревание сустава. Оптимально обеспечивает функционирование сустава, сохраняет движение в анатомическом диапазоне, корректирует и предотвращает патологические отклонения. Ортез стабилизирует коленный сустав, профилактически защищает его от травм, используется при легких повреждениях связочного аппарата и ушибах коленного сустава, при ревматических и дегенеративных заболеваниях. Нейлон, используемый в продукте, обеспечивает высокую легкость и стойкость продукта, легко моется, быстро высыхает и создает неблагоприятную среду для развития бактерий и грибов, поэтому этот ортез можно рекомендовать особенно для физически активных людей, занимающихся спортом.

Размеры AT53013: S: 28 - 34 см, M: 31 - 35 см, L: 36 - 40 см, XL: 41 - 44 см.

Чтобы определить размер ортеза, необходимо измерить окружность вокруг колена при повороте на 20 градусов.



Состав:

Модели:

AT53010 - 65% полиэстер, 25% латекс, 10% спандекс;

AT53011 - 75% полиэфирный хлопок, 25% шелк;

AT53012 - 10% эластан, 40% бамбуковое волокно, 25% хлопок, 25% спандекс;

AT53013 - 60% нейлон, 30% латексный шелк, 10% спандекс.

Рекомендации по уходу за изделием

- Ортез можно стирать исключительно вручную в воде при температуре до 40°C деликатным моющим средством.
- Глажка, химчистка, использование отбеливателей запрещены.
- Не выжимать.
- Сушить в сухом виде в развернутом состоянии, деликатно отжать перед сушкой.

Внимание!

1. Перед применением изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
2. Длительность ежедневного использования изделия в соответствии с рекомендациями Вашего лечащего врача. Использовать изделие исключительно по назначению. При возникновении вопросов по применению, обратитесь к Вашему лечащему врачу.
3. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.
4. Изделие нельзя применять при наличии открытых ран, ссадин.
5. Условия хранения: в сухом месте при комнатной температуре.

Информация об изделии

Для получения подробной информации об изделии обратитесь к производителю или к продавцу в вашей местности.

Срок годности (хранения): 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Гарантия: полгода с даты покупки без потери медицинских качеств.

Импортёр в Республику Беларусь – ИООО «АНМЕДПЛЮС», г.Минск, ул.Пономаренко 35/А - 318
тел.: +375 44 799 76 99.

Производитель - ANTAR Sp. J., ул. Зависьляньска, 43; 03-068, Варшава, Республика Польша,
тел.: 0 22 518 36 00.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:.....

Серийный номер:

Дата продажи:.....

1) Фирма Antar Sp.J. (АНТАР), 03-068 Варшава, ул. Зависьяньска, 43, настоящим предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня продажи.

2) Во время гарантийного срока АНТАР обязуется провести необходимый ремонт изделия для восстановления правильного его функционирования в течение 14 рабочих дней со дня получения изделия на ремонт по вышеуказанному адресу.

3) АНТАР сохраняет за собою право заменить изделие, в случае, если признает, что издержки на ремонт превышают его стоимость. Ремонт или замена дефектных изделий не продлевают гарантийный срок.

4) В случае обнаружения, что изделие работает неправильно, следует незамедлительно отправить его в адрес АНТАР (см. п. 1) или связаться с пунктом продажи изделия.

5) Прежде, чем начать эксплуатацию, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению и тщательно её соблюдать. Использование изделия не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией лишает изделие гарантии.

6) Гарантией не охвачены повреждения, возникшие вследствие пробоя или пореза изделия острым предметом, повреждения в результате воздействия внешней механической силы, излишнего нажима, соединения изделия с жирными или маслянистыми веществами, бензином и другими агрессивными веществами.

7) НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПОКУПКИ ТОВАРА (ЧЕКОМ, СЧЁТОМ ИЛИ СЧЕТОМ-ФАКТУРОЙ). ПРОСИМ ПРИЛОЖИТЬ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОКУПКУ В СЛУЧАЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ.

8) Претензии, заявленные без подтверждения покупки товара, не принимаются.



Antar Sp.J.

ul. Zawisłańska 43, 03-068 Warszawa

tel. +48 22 518 36 00

fax: +48 22 518 36 30

e-mail: antar@antar.net

Импортер в РБ – ИООО «АНМЕДПЛЮС»,
тел.: +375 44 799 76 99.

Штамп пункта продажи, Ф.И.О.
и разборчивая подпись продавца:



www.antar.net



_____ (_____)

V 1.29.02.2016



Инструкция по применению

Ортезы локтевые

Модели: AT53022, AT53023, AT53024, AT53025



AT53022 Ортез локтевой с добавлением спандекса, легкая степень фиксации

Ортез выполнен из гибкого, воздухопроницаемого материала, который включает спандекс, латекс и полиэстер. Данное сочетание материалов обладает легким согревающим действием. Ортез фиксирует сустав, уменьшает боль, а также предотвращает перегрузку сустава. Ортез обеспечивает функционирование сустава в оптимальном, анатомическом диапазоне движения, корректирует его искажения и предотвращает патологические отклонения. Рекомендуются в качестве профилактической меры, защиты от травм и перегрузок, а также в случае дегенеративных и ревматических заболеваний. Используемый материал обеспечивает хорошую эластичность продукта даже при длительном применении.

Размеры AT53022: S:20 - 23 см, M:23 - 26 см, L:26 – 29 см, XL:29 – 32 см.

Чтобы определить размер ортеза, необходимо измерить окружность локтя.



AT53023 Ортез локтевой из полиэстера, легкая степень фиксации

Ортез выполнен из эластичного материала, основным компонентом которого является полиэстер. Данное сочетание материалов обладает легким согревающим действием. Ортез фиксирует сустав, уменьшает боль, а также предотвращает перегрузку сустава. Ортез обеспечивает функционирование сустава в оптимальном, анатомическом диапазоне движения, корректирует его искажения и предотвращает патологические отклонения. Рекомендуется в качестве профилактической меры, защиты от травм и перегрузок, а также в случае дегенеративных и ревматических заболеваний. Ортез предназначен для кратковременного использования.

Размеры AT53023: универсальный.



АТ53024 Ортез локтевой с волокном из бамбука, легкая степень фиксации

Ортез выполнен из гибкого, воздухопроницаемого материала, основным компонентом которого является бамбуковое волокно, с добавлением хлопка и спандекса. Данное сочетание материалов обладает легким согревающим действием. Ортез фиксирует сустав, уменьшает боль, а также предотвращает перегрузку сустава. Ортез обеспечивает функционирование сустава в оптимальном, анатомическом диапазоне движения, корректирует его искажения и предотвращает патологические отклонения. Рекомендуется в качестве профилактической меры, защищая от травм и перегрузки, а также в случае дегенеративных и ревматических заболеваний. Бамбуковое волокно, используемое в продукте, благодаря природной субстанции "бамбо кун", присутствующей в нем, обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Кроме того, поскольку выращивание бамбука не требует использования химических веществ и пестицидов, его волокна не содержат токсичных раздражителей.

Размеры АТ53024: S:20 - 23 см, M:23 - 26 см, L:26 – 29 см, XL:29 – 32 см.

Чтобы определить размер ортеза, необходимо измерить окружность локтя.



AT53025 Ортез локтевой из нейлона, легкая степень фиксации

Ортез выполнен из гибкого, воздухопроницаемого материала, основным компонентом которого является нейлон, с добавлением латекса и спандекса. Данное сочетание материалов обладает легким согревающим действием. Ортез фиксирует сустав, уменьшает боль, а также предотвращает перегрузку сустава. Ортез обеспечивает функционирование сустава в оптимальном, анатомическом диапазоне движения, корректирует его искажения и предотвращает патологические отклонения. Рекомендуется в качестве профилактической меры, защиты от травм и перегрузок, а также в случае дегенеративных и ревматических заболеваний. Нейлон, используемый в продукте, обеспечивает высокую легкость и стойкость продукта, легко моется, быстро высыхает и создает неблагоприятную среду для развития бактерий и грибов, поэтому этот ортез рекомендован для людей, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом.

Размеры AT53025: S:20 - 23 см, M:23 - 26 см, L:26 – 29 см, XL:29 – 32 см.

Чтобы определить размер ортеза, необходимо измерить окружность локтя.



Состав:

Модели:

AT53022 - 65% полиэстер, 25% латекс, 10% спандекс;

AT53023 - 75% полиэфирный хлопок, 25% шелк;

AT53024 - 10% эластан, 40% бамбуковое волокно, 25% хлопок, 25% спандекс;

AT53025 - 60% нейлон, 30% латексный шелк, 10% спандекс.

Рекомендации по уходу за изделием

- Ортез можно стирать исключительно вручную в воде при температуре до 40°C деликатным моющим средством.
- Глажка, химчистка, использование отбеливателей запрещены.
- Не выжимать.
- Сушить в сухом виде в развернутом состоянии, деликатно отжать перед сушкой.

Внимание!

1. Перед применением изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
2. Длительность ежедневного использования изделия в соответствии с рекомендациями Вашего лечащего врача. Использовать изделие исключительно по назначению. При возникновении вопросов по применению, обратитесь к Вашему лечащему врачу.
3. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.
4. Изделие нельзя применять при наличии открытых ран, ссадин.
5. Условия хранения: в сухом месте при комнатной температуре.

Информация об изделии

Для получения подробной информации об изделии обратитесь к производителю или к продавцу в вашей местности.

Срок годности (хранения): 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Гарантия: полгода с даты покупки без потери медицинских качеств.

Импортер в Республику Беларусь – ИООО «АНМЕДПЛЮС», г.Минск, ул.Пономаренко 35/А - 318
тел.: +375 44 799 76 99.

Производитель - ANTAR Sp. J., ул. Зависьяньска, 43; 03-068, Варшава, Республика Польша,
тел.: 0 22 518 36 00.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:.....

Серийный номер:

Дата продажи:.....

1) Фирма Antar Sp.J. (АНТАР), 03-068 Варшава, ул. Зависьяньска, 43, настоящим предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня продажи.

2) Во время гарантийного срока АНТАР обязуется провести необходимый ремонт изделия для восстановления правильного его функционирования в течение 14 рабочих дней со дня получения изделия на ремонт по вышеуказанному адресу.

3) АНТАР сохраняет за собою право заменить изделие, в случае, если признает, что издержки на ремонт превышают его стоимость. **Ремонт или замена дефектных изделий не продлевают гарантийный срок.**

4) В случае обнаружения, что изделие работает неправильно, следует незамедлительно отправить его в адрес АНТАР (см. п. 1) или связаться с пунктом продажи изделия.

5) Прежде, чем начать эксплуатацию, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению и тщательно её соблюдать. Использование изделия не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией лишает изделие гарантии.

6) Гарантией не охвачены повреждения, возникшие вследствие пробоя или пореза изделия острым предметом, повреждения в результате воздействия внешней механической силы, излишнего нажима, соединения изделия с жирными или маслянистыми веществами, бензином и другими агрессивными веществами.

7) НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПОКУПКИ ТОВАРА (ЧЕКОМ, СЧЁТОМ ИЛИ СЧЕТОМ-ФАКТУРОЙ). ПРОСИМ ПРИЛОЖИТЬ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОКУПКУ В СЛУЧАЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ.

8) Претензии, заявленные без подтверждения покупки товара, не принимаются.



Antar Sp.J.
ul. Zawiślńska 43, 03-068 Warszawa
tel. +48 22 518 36 00
fax: +48 22 518 36 30
e-mail: antar@antar.net

Импортер в РБ – ИООО «АНМЕДПЛЮС»,
тел.: +375 44 799 76 99.

Штамп пункта продажи, Ф.И.О.
и разборчивая подпись продавца:



www.antar.net



_____ ()

V 1.29.02.2016



Инструкция по применению

Ортезы лучезапястные

Модели: AT53018, AT53019, AT53020, AT53021



AT53018 Ортез лучезапястный с добавлением спандекса, легкая степень фиксации

Ортез выполнен из гибкого, воздухопроницаемого материала, который включает спандекс, латекс и полиэстер. Данное сочетание материалов обладает легким согревающим действием. Ортез фиксирует сустав, уменьшает боль, связанную с длительной работой за компьютером, а также предотвращает перегрузку сустава. Ортез обеспечивает функционирование сустава в оптимальном, анатомическом диапазоне движения, корректирует его искажения и предотвращает патологические аномалии. Рекомендуется для профилактики, защиты от травм и дегенерации (например, для людей, работающих за компьютером, играющих в теннис, гольф), а также во время дегенеративных и ревматических заболеваний. Используемый материал обеспечивает хорошую эластичность продукта даже при длительном применении.

Размеры AT53018: S: 14-16 см, M: 16 - 18 см, L: 18 - 20 см, XL: 20 - 22 см.

Чтобы определить размер ортеза, необходимо измерить окружность запястья.



AT53019 Ортез лучезапястный из полиэстера, легкая степень фиксации

Ортез выполнен из эластичного материала, основным компонентом которого является полиэстер. Данное сочетание материалов обладает легким согревающим действием. Ортез фиксирует сустав, уменьшает боль, связанную с длительной работой за компьютером, а также предотвращает перегрузку сустава. Ортез обеспечивает функционирование сустава в оптимальном, анатомическом диапазоне движения, корректирует его искажения и предотвращает патологические аномалии. Рекомендуется для профилактики, защиты от травм и дегенерации (например, для людей, работающих за компьютером, играющих в теннис, гольф), а также во время дегенеративных и ревматических заболеваний. Ортез предназначен для кратковременного использования.

Размеры AT53019: универсальный.



AT53020 Ортез лучезапястный с волокном из бамбука, легкая степень фиксации

Ортез выполнен из гибкого, воздухопроницаемого материала, основным компонентом которого является бамбуковое волокно, с добавлением хлопка и спандекса. Данное сочетание материалов обладает легким согревающим действием. Ортез фиксирует сустав, уменьшает боль, связанную с длительной работой за компьютером, а также предотвращает перегрузку сустава. Ортез обеспечивает функционирование сустава в оптимальном, анатомическом диапазоне движения, корректирует его искажения и предотвращает патологические аномалии. Рекомендуется в качестве профилактической меры для защиты от повреждений и дегенерации (например, для людей, работающих за компьютером, играющих в теннис, гольф), а также во время дегенеративных ревматических заболеваний. Бамбуковое волокно, используемое в продукте, благодаря природной субстанции "бамбо кун", присутствующей в нем, обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Кроме того, поскольку выращивание бамбука не требует использования химических веществ и пестицидов, его волокна не содержат токсичных раздражителей.

Размеры AT53020: S: 14-16 см, M: 16 - 18 см, L: 18 - 20 см, XL: 20 - 22 см.

Чтобы определить размер ортеза, необходимо измерить окружность запястья.



AT53021 Ортез лучезапястный из нейлона, легкая степень фиксации

Ортез выполнен из гибкого, воздухопроницаемого материала, основным компонентом которого является нейлон, с добавлением латекса и спандекса. Данное сочетание материалов обладает легким согревающим действием. Ортез фиксирует сустав, уменьшает боль, связанную с длительной работой за компьютером, а также предотвращает перегрузку сустава. Ортез обеспечивает функционирование сустава в оптимальном, анатомическом диапазоне движения, корректирует его искажения и предотвращает патологические аномалии. Рекомендуется в качестве профилактической меры для защиты от повреждений и дегенерации (например, для людей, работающих за компьютером, играющих в теннис, гольф), а также при дегенеративных ревматических заболеваниях. Нейлон, используемый в продукте, обеспечивает высокую легкость и стойкость изделия, легко моется, быстро сохнет и создает среду, неблагоприятную для роста бактерий и грибов, поэтому ортез может быть рекомендован людям, ведущим активный образ жизни и занимающихся спортом.

Размеры AT53021: универсальный.



Состав:

Модели:

AT53018 - 65% полиэстер, 25% латекс, 10% спандекс;

AT53019 - 75% полиэфирный хлопок, 25% шелк;

AT53020 - 10% эластан, 40% бамбуковое волокно, 25% хлопок, 25% спандекс;

AT53021 - 60% нейлон, 30% латексный шелк, 10% спандекс.

Рекомендации по уходу за изделием

- Ортез можно стирать исключительно вручную в воде при температуре до 40°C деликатным моющим средством.
- Глажка, химчистка, использование отбеливателей запрещены.
- Не выжимать.
- Сушить в сухом виде в развернутом состоянии, деликатно отжать перед сушкой.

Внимание!

1. Перед применением изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
2. Длительность ежедневного использования изделия в соответствии с рекомендациями Вашего лечащего врача. Использовать изделие исключительно по назначению. При возникновении вопросов по применению, обратитесь к Вашему лечащему врачу.
3. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.
4. Изделие нельзя применять при наличии открытых ран, ссадин.
5. Условия хранения: в сухом месте при комнатной температуре.

Информация об изделии

Для получения подробной информации об изделии обратитесь к производителю или к продавцу в вашей местности.

Срок годности (хранения): 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Гарантия: полгода с даты покупки без потери медицинских качеств.

**Импортер в Республику Беларусь – ИООО «АНМЕДПЛЮС», г.Минск, ул.Пономаренко 35/А - 318
тел.: +375 44 799 76 99.**

**Производитель - AN TAR Sp. J., ул. Зависьляньска, 43; 03-068, Варшава, Республика Польша,
тел.: 0 22 518 36 00.**



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:.....

Серийный номер:

Дата продажи:.....

1) Фирма Antar Sp.J. (АНТАР), 03-068 Варшава, ул. Зависьяньска, 43, настоящим предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня продажи.

2) Во время гарантийного срока АНТАР обязуется провести необходимый ремонт изделия для восстановления правильного его функционирования в течение 14 рабочих дней со дня получения изделия на ремонт по вышеуказанному адресу.

3) АНТАР сохраняет за собою право заменить изделие, в случае, если признает, что издержки на ремонт превышают его стоимость. **Ремонт или замена дефектных изделий не продлевают гарантийный срок.**

4) В случае обнаружения, что изделие работает неправильно, следует незамедлительно отправить его в адрес АНТАР (см. п. 1) или связаться с пунктом продажи изделия.

5) Прежде, чем начать эксплуатацию, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению и тщательно её соблюдать. Использование изделия не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией лишает изделие гарантии.

6) Гарантией не охвачены повреждения, возникшие вследствие пробоя или пореза изделия острым предметом, повреждения в результате воздействия внешней механической силы, излишнего нажима, соединения изделия с жирными или маслянистыми веществами, бензином и другими агрессивными веществами.

7) НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПОКУПКИ ТОВАРА (ЧЕКОМ, СЧЁТОМ ИЛИ СЧЕТОМ-ФАКТУРОЙ). ПРОСИМ ПРИЛОЖИТЬ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОКУПКУ В СЛУЧАЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ.

8) Претензии, заявленные без подтверждения покупки товара, не принимаются.



Antar Sp.J.

ul. Zawiślńska 43, 03-068 Warszawa

tel. +48 22 518 36 00

fax: +48 22 518 36 30

e-mail:antar@antar.net

Импортёр в РБ – ИООО «АНМЕДПЛЮС»,
тел.: +375 44 799 76 99.

Штамп пункта продажи, Ф.И.О.
и разборчивая подпись продавца:



www.antar.net



_____ ()

V 1.29.02.2016



Инструкция по применению

Ортезы для позвоночника

Модели: АТ04505, АТ04506




АТ04505 Ортез для крестцового, поясничного, грудного отделов позвоночника с бретелями (сильной степени фиксации)

Ортез АТ04505 служит для стабилизации и укрепления позвоночника в поясничном отделе. Он выполнен из гибких ортопедических лент, благодаря которым ортез воздухопроницаем, обеспечивает идеальный отвод излишков тепла и пота, а также «дыхание» тела под ортезом. Ортез оснащен системой 4 пластин длиной 20 см и боковых стягивающих ремней, обеспечивающих идеальную фиксацию пояснично-крестцового отдела позвоночника. Изделие оснащено системой лент и вырезов для облегчения их применения для людей с парезом рук. Рекомендуется при различных заболеваниях позвоночника: дегенерации позвоночника в области торако-поясничного отдела, дископатии в области торако-поясничного отдела, дегенеративной болезни позвоночника, спондилолистеза в области торако-поясничной области.

Высота ортеза: с шинами – 55 см, без шин – 29 см.

Размеры (обхват талии): S (80 - 95 см), M (90-100 см), L (95-105 см), XL (105-115 см), XXL (115-125 см), XXXL (125-135 см).

Схема надевания ортеза

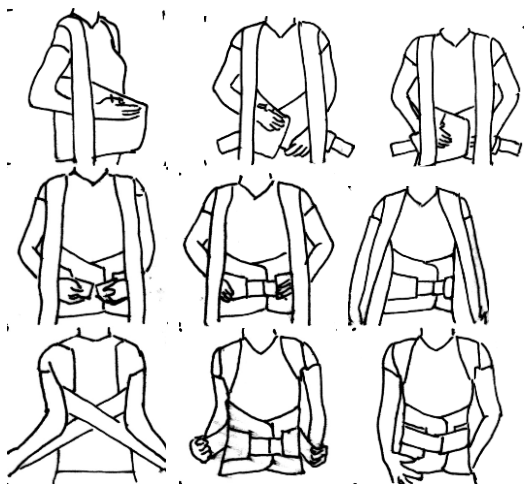




АТ04506 Ортез для поясничного отдела позвоночника (средней степени фиксации)

Ортез АТ04506 обеспечивает стабилизацию и укрепление позвоночника на крестном, поясничном и грудном отделах. Он выполнен из гибких ортопедических лент, благодаря которым ортез воздухопроницаем, обеспечивает идеальный отвод излишков тепла и пота, а также «дыхание» тела под ортезом. Ортез состоит из крестцово-поясничной шнуровки и широкой передней части застегивающейся на «липучку», которая позволяет регулировать размер изделия. Дополнительно оснащено стягивающими ремнями вокруг плеч, которые предотвращают чрезмерный нажим на плечи и подмышки. Ортез рекомендован при различных заболеваниях позвоночника, напр. межпозвоночной многоуровневой грыже, остеопорозе, дегенеративных изменениях, нестабильности позвоночника, поясничном спондилолистезе, компрессионном переломе позвоночника на фоне остеопороза, ишиасе, болевых синдромах пояснично-крестцового отдела, после оперативных вмешательств.

Высота ортеза – 24 см.

Размеры (обхват талии): S: 60 – 75 см, M: 76 – 90 см, L: 91 – 100 см, XL: 101 – 115 см, XXL: 116 – 125 см, XXXL: 126 – 140 см.

Схема надевания ортеза:

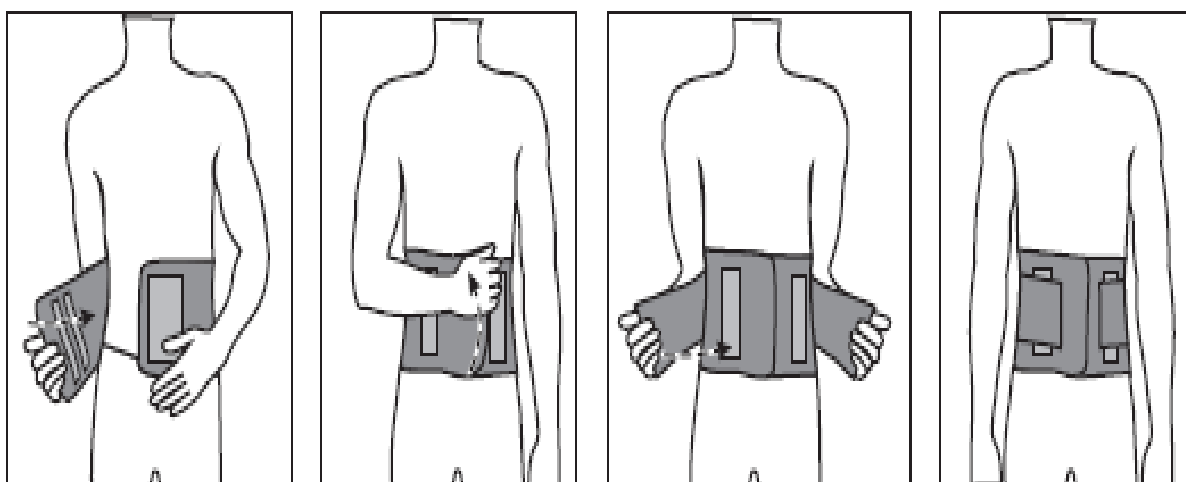



Изделия имеют широкий диапазон регулировки. Ортезы быстро и легко можно подобрать к форме тела пациента. Застежка на липучках гарантирует эффективную фиксацию.

Примечания

Ортезы следует применять в соответствии с предписаниями врача. Изделия не следует применять в случае открытых ран, ссадин, а также после предварительного применения геля и разогревающей мази.

Ортезы можно стирать исключительно вручную в воде при температуре до 40°C деликатным моющим средством (напр. хозяйственное мыло). Перед стиркой следует убрать планшеты.

Глажка, химчистка, использование отбеливателей запрещены. Не выжимать. Сушить в сухом виде в развернутом состоянии, деликатно отжать перед сушкой.

Состав:

Модель AT04505:

- 52% полиэстер, 34% сталь, 10,5% латекс, 3,5% полиамид;

Модель AT04506:

- 58% полиэстер, 20% сталь, 11,5% латекс, 10,5% полиамид.

Рекомендации по уходу за изделием

- Ортез можно стирать исключительно вручную в воде при температуре до 40°C деликатным моющим средством.

- Глажка, химчистка, использование отбеливателей запрещены.

- Не выжимать.

- Сушить в сухом виде в развернутом состоянии, деликатно отжать перед сушкой.

Внимание!

Перед применением изделия необходимо проконсультироваться с лечащим врачом или физиотерапевтом.

Надевать на нательное бельё.

Длительность ежедневного использования изделия в соответствии с рекомендациями Вашего лечащего врача.

Использовать изделие исключительно по назначению. При возникновении вопросов по применению, обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость материалов.

Изделие нельзя применять при наличии открытых ран, ссадин.

Условия хранения: в сухом месте при комнатной температуре.

Информация об изделии

Для получения подробной информации об изделии обратитесь к производителю или к продавцу в вашей местности.

Срок годности (хранения): 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения, эксплуатации и ухода за изделием.

Гарантия: полгода с даты покупки без потери медицинских качеств.

Импортер в Республику Беларусь – ИООО «АНМЕДПЛЮС», г.Минск, ул.Пономаренко 35/А - 318
тел.: +375 44 799 76 99.

Производитель - ANTAR Sp. J., ул. Зависьляньска, 43; 03-068, Варшава, Республика Польша,
тел.: 0 22 518 36 00.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель:.....

Серийный номер:

Дата продажи:.....

1) Фирма Antar Sp.J. (АНТАР), 03-068 Варшава, ул. Зависьляньска, 43, настоящим предоставляет гарантию на изделие сроком 12 месяцев со дня продажи.

2) Во время гарантийного срока АНТАР обязуется провести необходимый ремонт изделия для восстановления правильного его функционирования в течение 14 рабочих дней со дня получения

изделия на ремонт по вышеуказанному адресу.

3) АНТАР сохраняет за собою право заменить изделие, в случае, если признает, что издержки на ремонт превышают его стоимость.

4) В случае обнаружения, что изделие работает неправильно, следует незамедлительно отправить его в адрес АНТАР (см. п. 1) или связаться с пунктом продажи изделия.

5) Прежде, чем начать эксплуатацию, необходимо ознакомиться с инструкцией по применению и тщательно её соблюдать. Использование изделия не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией лишает изделие гарантии.

6) Гарантией не охвачены повреждения, возникшие вследствие пробоя или пореза изделия острым предметом, повреждения в результате воздействия внешней механической силы, излишнего нажима, соединения изделия с жирными или маслянистыми веществами, бензином и другими агрессивными веществами.

7) НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПОКУПКИ ТОВАРА (ЧЕКОМ, СЧЁТОМ ИЛИ СЧЕТОМ-ФАКТУРОЙ). ПРОСИМ ПРИЛОЖИТЬ ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОКУПКУ В СЛУЧАЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ.

8) Претензии, заявленные без подтверждения покупки товара, не принимаются.



Antar Sp.J.
ul. Zawiślańska 43, 03-068 Warszawa
tel. +48 22 518 36 00
fax: +48 22 518 36 30
e-mail: antar@antar.net

Импортер в РБ – ИООО
«АНМЕДПЛЮС»,
тел.: +375 44 799 76 99.

Штамп пункта продажи, Ф.И.О.
и разборчивая подпись продавца:



www.antar.net



V

_____()

1.29.02.2016