

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за поясом радикулитным ПИО-21

Пояс радикулитный ПИО-21 (далее пояс) серийного и индивидуального изготовления, предназначен для лиц при остеохондрозе, затихшем туберкулезе позвоночника, неспецифическом спондилите и спондилоартрозе, болевых ощущениях, парезе мышц брюшной стенки и других патологических состояниях. Рекомендуется носить пояс в период обострения, при физической нагрузке, по рекомендации врача ортопеда - травматолога.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость, аллергические реакции на компоненты материалов.

Размер пояса при серийном изготовлении определяется обхватом талии в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Обхват талии, см	Размер пояса
60-64	0
65-69	1
70-74	2
75-79	3
80-84	4
85-89	5
90-94	6
95-99	7
100-104	8
105-109	9
110-114	10
115-119	11
120-124	12
125-129	13
130-134	14

Пояс необходимо надевать на нижнее белье.


Перед сном пояс нужно снимать.

Сняв пояс, рекомендуется ежедневно промывать тело теплой водой с мылом и вытирать насухо полотенцем.

Для обеспечения правильного ухода за поясом необходимо:

- стирку производить только ручную при температуре не выше 40° С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- после стирки пояс хорошо прополоскать в теплой, а затем в холодной воде;
- пояс выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивания;

- не отбеливать, не подвергать глажению;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов.

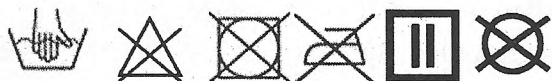

Условия эксплуатации (для климатического исполнения УХЛ категория 4.2 по ГОСТ 15150):

- температура воздуха в помещении должна быть от плюс 10°C до плюс 40 °C;
- относительная влажность воздуха от 60 до 80% при плюс 25 °C.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:



РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.
Телефон для справок: (017) 308-14-34; регистратура: (017) 308-14-32.
E-mail: minsk@bpovc.by; <http://www.bpovc.by>

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учет Ваших пожелания в будущем.

Производственные площадки:

❖ Барановичский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 225409, г. Барановичи, ул. Царюка, 39. Телефон для справок: (0163) 64-82-52; орт.кабинет: (0163) 64-82-58. E-mail: prort@brest.by; <http://www.bpovc-bar.by>

❖ Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 210033, г. Витебск, ул. Лазо, 113.
Регистратура (медкабинет): (0212) 67-14-12, магазин-прокат: (0212) 67-14-22.
E-mail: vitebsk@bpovc.by; <http://www.bpovc-vitebsk.by>

❖ Гомельский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А.
Регистратура: (0232) 51-72-23. E-mail: gomel@bpovc.by; <http://www.bpovc-gomel.by>

❖ Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь 230003, г. Гродно, ул. Белуша 47А.
Телефон для справок: (0152) 62-42-92. E-mail: grodno@bpovc.by; <http://www.bpovc-grodno.by>

❖ Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г. Могилев, пер. Базный, 8
Телефон для справок: (0222) 74-48-91, (0222) 64-40-95, (029) 302-14-57.
E-mail: mogilev@bpovc.by; <http://www.bpovc-mogilev.by>