

РАЗБАВИТЕЛЬ BM / BM Diluent

разбавитель для автоматического анализа.

Только для диагностики in vitro.



Код продукта: 1-110-0020 20 л

НАЗНАЧЕНИЕ

Разбавитель BM представляет собой забуференный, стабилизированный и микрофильтрованный раствор электролита для автоматического разведения образцов крови человека, количественного и качественного определения эритроцитов (RBC), лейкоцитов (WBC) и субпопуляций лейкоцитов, тромбоцитов (PLT) и измерения концентрации гемоглобина (HGB) на анализаторе BM HEM 3. Разбавитель BM следует использовать только с реагентами производства BioMaxima. Ошибочные результаты могут быть получены при использовании с реагентами сторонних производителей. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации анализатора.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Хлорид натрия..... < 1,0 %

Буфер < 1,1 %

Консерванты..... < 0,4 %

Стабилизаторы < 0,4 %

в воде без ионов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Разбавитель BM является экологически чистым реагентом, не содержащим азидов; он не содержит вредных ингредиентов.

-Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой.

-При попадании в глаза или на кожу промойте глаза обильным количеством воды в течение нескольких минут или промойте участок кожи водой.

-Держите контейнер с реагентом закрытым, если он не используется.

-При работе с реагентом надевайте лабораторные перчатки. Все образцы биологических жидкостей следует рассматривать как потенциально инфекционные материалы. Обращайтесь с кровью и другими потенциально инфекционными материалами, соблюдая соответствующие меры предосторожности. Используйте перчатки, маски и халаты, если предполагается контакт с кровью.

-Ознакомьтесь с паспортом безопасности материала, связанного с реагентом.

-При работе с реагентами соблюдайте правила надлежащей лабораторной практики (GLP).

СБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

Разбавитель BM предназначен для использования с образцами крови, взятыми из вены с антикоагулянтом ЭДТА. Образцы для гематологического анализа можно хранить до 8 часов при температуре 15–30°C или до 24 часов после взятия в холодильнике при температуре 2–8°C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

-Данный реагент готов к использованию и может применяться прямо из контейнера; специальная подготовка не требуется.

-Оставьте реагент при комнатной температуре минимум на 12 часов.

ЗАМЕНА РЕАГЕНТА

-Человек, устанавливающий реагент, должен быть обученным лабораторным специалистом.

-Снимите входную крышку с контейнера реагента, который необходимо заменить. Подсоедините входное отверстие реагента к новому контейнеру.

-Убедитесь, что цвета каждой трубки, этикетки контейнера с реагентом и разъема на задней панели анализатора совпадают.

-Избегайте попадания пыли или микробного загрязнения трубок и реагентов. Не переливайте и не перемешивайте остатки реагента из одной емкости в другую.

-Тщательно заправьте новый реагент и измерьте фоновые значения в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора.

-При установке новой партии реагента выполните повторную калибровку прибора, как указано в руководстве по эксплуатации.

ХРАНЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ РЕАГЕНТА

-Храните разбавитель BM при температуре от 15 до 30°C.F

-Срок годности разбавителя составляет 36 месяцев с даты изготовления при условии хранения в предписанном температурном режиме.

-Не используйте реагент после истечения срока годности, указанного на этикетке контейнера.

-Выбросьте открытый контейнер через 120 дней.

-Не используйте реагент если он был заморожен.

-Утилизируйте отходы, неиспользованный продукт и загрязненную упаковку в соответствии с местными правилами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

БиоМаксима С.А.

Ул. Веттерув 5

20-277 Люблин, ПОЛЬША

www.biomaxima.com

export@biomaxima.com

Лизирующий реагент ВМ / ВМ Lizat

лизирующий реагент для автоматического анализа

Только для диагностики *in vitro*.



Код продукта: 1-111-0001 1 л

НАЗНАЧЕНИЕ

Лизирующий реагент ВМ представляет собой стабилизированный и микрофильтрованный лизирующий агент для строматолиза эритроцитов (RBC), количественного определения лейкоцитов (WBC) и субпопуляций лейкоцитов и измерения концентрации гемоглобина (HGB) в крови человека на гематологических анализаторах ВМ НЕМ 3. Лизирующий реагент ВМ следует использовать только с реагентами производства BioMaxima. Ошибочные результаты могут быть получены при использовании с реагентами сторонних производителей. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации анализатора.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Поверхностно-активные вещества..... <3,5 %

Буферы < 1,0 %

Консерванты..... < 0,5 %

Стабилизаторы < 0,5 %

в воде без ионов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

-Лизирующий реагент ВМ является экологически чистым, не содержащим цианидов и азидов; не содержит вредных ингредиентов.

-Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой.

-При попадании в глаза или на кожу промойте глаза обильным количеством воды в течение нескольких минут или промойте участок кожи водой.

-Держите контейнер с реагентом закрытым, если он не используется.

-При работе с реагентом надевайте лабораторные перчатки.

-Все образцы биологических жидкостей следует рассматривать как потенциально инфекционные материалы.

-Обращайтесь с кровью и другими потенциально инфекционными материалами, соблюдая соответствующие меры предосторожности. Используйте перчатки, маски и халаты, если предполагается контакт с кровью.

-Ознакомьтесь с паспортом безопасности материала, связанного с реагентом.

-При работе с реагентами соблюдайте правила надлежащей лабораторной практики (GLP).

СБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

Лизирующий реагент ВМ предназначен для использования с образцами крови, собранными из вены, с антикоагулянтом ЭДТА.

Образцы для гематологического анализа можно хранить до 8 часов при температуре 15–30°C или до 24 часов после взятия в холодильнике при температуре 2–8°C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

-Данный реагент готов к использованию и может применяться прямо из контейнера; специальная подготовка не требуется.

-Оставьте реагент при комнатной температуре минимум на 12 часов.

ЗАМЕНА РЕАГЕНТА

-Человек, устанавливающий реагент, должен быть обученным лабораторным специалистом.

-Снимите входную крышку с контейнера реагента, который необходимо заменить. Подсоедините входное отверстие реагента к новому контейнеру.

-Убедитесь, что цвета каждой трубки, этикетки контейнера с реагентом и разъема на задней панели анализатора совпадают.

-Избегайте попадания пыли или микробного загрязнения трубок и реагентов. Не переливайте и не перемешивайте остатки реагента из одной емкости в другую.

-Тщательно заправьте новый реагент и измерьте фоновые значения в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора.

-При установке новой партии реагента выполните повторную калибровку прибора, как указано в руководстве по эксплуатации.

ХРАНЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ РЕАГЕНТА

-Храните реагент при температуре от 15 до 30°C.

-Срок годности лизирующего реагента ВМ составляет 36 месяцев со дня изготовления, при условии хранения в установленном температурном режиме.

-Не используйте реагент после истечения срока годности, указанного на этикетке контейнера.

-Выбросьте открытый контейнер через 120 дней.

-Не используйте реагент если он был заморожен.

-Утилизируйте отходы, неиспользованный продукт и загрязненную упаковку в соответствии с местными правилами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

БиоМаксима С.А.

Ул. Веттерув 5

20-277 Люблин, ПОЛЬША

www.biomaxima.com

export@biomaxima.com

ОЧИСТИТЕЛЬ BM / BM Cleaner

очищающий реагент для автоматического анализа

Только для диагностики in vitro.



Код продукта: 1-112-0001 1 л

НАЗНАЧЕНИЕ

Очиститель BM представляет собой стабилизированный и микрофильтрованный раствор протеолитических ферментов для регулярной автоматической очистки, замачивания и промывки капилляров, трубок и камер гематологических анализаторов, удаления осадков компонентов крови и отложений липопротеинов на гематологическом анализаторе BM HEM 3.

Очиститель BM следует использовать только с реагентами производства BioMaxima SA. Ошибочные результаты могут быть получены при использовании реагентов сторонних производителей. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации анализатора.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Моющие средства..... < 1,0%

Буферы < 1,0 %

Консервант < 0,5 %

Стабилизаторы < 0,5 %

в воде без ионов

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

-Очиститель BM является экологически чистым, не содержащим азидов реагентом; он не содержит вредных ингредиентов.

-Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой.

-При попадании в глаза или на кожу промойте глаза обильным количеством воды в течение нескольких минут, участок кожи промойте водой.

-Держите контейнер с реагентом закрытым, когда он не используется.

-При работе с реагентом надевайте лабораторные перчатки.

-Все образцы биологических жидкостей следует рассматривать как потенциально инфекционные материалы. Обращайтесь с кровью и другими потенциально инфекционными материалами с соблюдением мер предосторожности. Используйте перчатки, маски и халаты, если предполагается контакт с кровью.

-Ознакомьтесь с паспортом безопасности материала, связанного с реагентом.

-При работе с реагентами соблюдайте правила надлежащей лабораторной практики (GLP).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТА

-Данный реагент готов к использованию и может применяться прямо из контейнера; специальная подготовка реагентов не требуется.

-Оставьте реагент при комнатной температуре минимум на 12 часов.

ЗАМЕНА РЕАГЕНТА

-Человек, устанавливающий реагент, должен быть обученным лабораторным специалистом.

-Снимите входную крышку с контейнера реагента, который необходимо заменить. Подсоедините входное отверстие реагента к новому контейнеру.

-Убедитесь, что цвета каждой трубки, этикетки контейнера с реагентом и разъема на задней панели анализатора совпадают.

-Избегайте попадания пыли или микробного загрязнения трубок и реагентов. Не переливайте и не перемешивайте остатки реагента из одной емкости в другую.

-Тщательно заправьте новый реагент и измерьте фоновые значения в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора.

-При установке новой партии реагента выполните повторную калибровку прибора, как указано в руководстве по эксплуатации.

ХРАНЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ РЕАГЕНТОВ

-Храните очиститель BM при температуре от 15 до 30°C.

-Срок годности очистителя составляет 48 месяцев со дня изготовления, при условии хранения в предписанном температурном режиме.

-Не используйте реагент после истечения срока годности, указанного на этикетке контейнера.

-Выбросьте открытый контейнер через 120 дней.

-Не используйте реагент если он был заморожен.

-Утилизируйте отходы, неиспользованный продукт и загрязненную упаковку в соответствии с местными правилами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

БиоМаксима С.А.

Ул. Веттерув 5

20-277 Люблин, ПОЛЬША

www.biomaxima.com

export@biomaxima.com

Разбавитель 5TS для гематологического анализатора / Hematology Analyzer Diluent (Diluent 5TS)

разбавитель для автоматического
анализа для in vitro диагностики



Код продукта: DIL-C

Название продукта:

Разбавитель для гематологического анализатора

Упаковка:

20 л

Назначение:

Для анализа клеток крови, разведения образцов и приготовления клеточной суспензии.

Принцип:

Разбавитель - это раствор с определенной ионной силой и проводимостью, который может разбавить кровь и сформировать поток оболочки, обеспечивая стабильную среду для подсчета клеток крови. **Ингредиенты:** Хлорид натрия, сульфат натрия, буферный агент, противогрибковые и антибактериальные агенты, консервант.

Хранение и стабильность:

Продукт будет стабилен в течение 2 лет при хранении при температуре от 2°C до 30°C (от 35°F до 86°F). Если рабочая среда составляет от 15°C до 30°C (от 59°F до 86°F), выбросьте вскрытый контейнер через 60 дней.

Применимый анализатор:

BM HEM 5 TS

Использование:

Доведите разбавитель до температуры использования, распакуйте реагент, вставьте соответствующий катетер в бочку с разбавителем в соответствии с цветовым соответствием между крышкой бутылки с реагентом и соединением крышки бутылки анализатора, закрутите крышку бутылки в сборе, замените реагент в соответствии с руководством оператора анализатора, а затем проведите холостое определение, чтобы убедиться, что измеренное значение находится в пределах диапазона холостого счета, требуемого в руководстве оператора анализатора перед тестированием образца.

Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству оператора анализатора.

Предосторожности:

- Не дышать. В случае вдыхания немедленно обратитесь к врачу. Избегайте контакта с кожей или глазами. В случае контакта с кожей промойте пораженный участок большим количеством воды. В случае попадания в глаза немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Используйте продукт до истечения срока годности.
- Если продукт заморожен (частично или полностью), полностью оттайте его, нагрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте путем осторожного переворачивания. Проверьте фоновые результаты перед анализом образцов пациентов.
- Утилизируйте реагенты, отходы и расходные материалы в соответствии с государственными нормами.
- Результат теста может быть недостоверным, если: срок годности реагента истек или он недействителен; реагент загрязнен пылью из воздуха; образец не обработан чисто; реагент смешивается или используется с реактивами сторонних производителей.
- После доставки, пожалуйста, проверьте внешнюю упаковку. Если она повреждена и жидкость вытекает, не используйте реагент. Если утечки не происходит, пожалуйста, перед использованием анализатора проведите тест контроля качества, чтобы убедиться, что система обнаружения работает нормально.
- Внутренняя упаковка (мягкое ведро) и внешняя упаковка разбавителя должны использоваться вместе.

Производитель:

BioMaxima S.A

Ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin,
Poland Tel: +48 8174551 40

Email: export@biomaxima.com

Website: www.biomaxima.com



Используемые символы



Обратитесь
к руководству
пользователя



Для
диагностики
in vitro



Номер
серии



Срок
годности



Производитель



Дата
производства



Температурные
ограничения



Лицензи
рованное
представи
тельство в ЕС



Декларация
соответствия
CE

Лизирующий реагент 5 I для гематологического анализатора / Hematology Analyzer Lyse (Lizat 5 I)

для автоматизированного анализа

Только для использования в диагностике in vitro



Код продукта: LYC-1

Имя продукта:

Лизирующий реагент для гематологического анализатора

Модель:

LYC-1

Упаковка:

200 мл

Назначение:

Он используется для лизирования (разрушения) эритроцитов для определения гемоглобина или для помощи в подсчете белых кровяных клеток.

Принцип:

Реагент добавляется для лизиса эритроцитов (RBC) и реакции с высвобожденным гемоглобином (HGB) для измерения HGB, количества лейкоцитов (WBC) и базофилов (BAS)

Активные ингредиенты:

Поверхностно-активный агент; буферный агент; противогрибковые и антибактериальные агенты.

Хранение и стабильность:

Продукт будет стабилен в течение 2 лет при хранении при температуре от 2°C до 30°C (35°F - 86°F). Если рабочая среда составляет от 15°C до 30°C (от 59°F до 86°F), выбросьте вскрытый контейнер через 60 дней

Применимый анализатор:

Применим к BM HEM 5 TS

Использование:

Доведите лизирующий реагент до температуры использования, распакуйте реагент, вставьте соответствующий катетер во флакон с реагентом в соответствии с цветовым соответствием между крышкой флакона с реагентом и стыком крышки флакона анализатора, закрутите крышку флакона в сборе, замените реагент в соответствии с руководством оператора анализатора, а затем проведите подсчет фона, чтобы убедиться, что измеренное значение находится в пределах диапазона подсчета фона, требуемого в руководстве оператора анализатора перед тестированием образца. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству оператора анализатора.

Технические характеристики:

Продукт представляет собой прозрачную жидкость без частиц, осадка или частиц.

Фоновый результат: WBC ≤ 0.2 × 10⁹/л, HGB ≤ 1 г/л.

Предупреждения:

- Не вдыхать. В случае вдыхания немедленно обратитесь к врачу. Избегайте контакта с кожей или глазами. В случае контакта с кожей промойте пораженный участок немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды. В случае попадания в глаза немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Используйте продукт до истечения срока годности.
- Если продукт заморожен (частично или полностью), полностью оттайте его, нагрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте путем осторожного переворачивания. Проверьте фоновые результаты перед анализом образцов пациентов.
- Утилизируйте реагенты, отходы и расходные материалы в соответствии с государственными нормами.
- Результат теста может быть недостоверным, если: срок годности реагента истек или он недействителен; реагент загрязнен пылью из воздуха; образец не обработан чисто; реагент смешивается или используется с реактивами сторонних производителей.
- После доставки, пожалуйста, проверьте внешнюю упаковку. Если она повреждена и жидкость вытекает, не используйте реактив. Если утечки не происходит, пожалуйста перед использованием анализатора проведите тест контроля качества, чтобы убедиться, что система обнаружения работает нормально.
- Внутренняя упаковка (мягкое ведро) и внешняя упаковка разбавителя должны использоваться вместе.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

BioMaxima S.A

Ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin,
Poland Tel: +48 8174551 40

Email: export@biomaxima.com

Website: www.biomaxima.com



Используемые символы



Обратитесь к руководству пользователя



Для диагностики in vitro



Номер серии



Срок годности




Производитель



Дата производства



Температурные ограничения

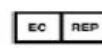

Лицензированное представительство в ЕС



Декларация соответствия CE

Лизирующий реагент 5 II для гематологического анализатора / Hematology Analyzer Lyse (Lizat 5 II)

для автоматизированного анализа
Только для диагностики in vitro



Код продукта: LYC-2

Название продукта:

Лизирующий реагент для гематологического анализатора

Модель:

LYC-2

Упаковка:

500 мл

Назначение:

Он используется для лизиса (разрушения) эритроцитов и сохранения морфологии клеток перед анализом крови, чтобы облегчить подсчет лейкоцитов.

Принцип:

Препарат добавляется для лизиса эритроцитов (RBC) и сохранения морфологии клеток для лейкоцитов (WBC) дифференцировка.

Активные ингредиенты:

Поверхностно-активный агент; Буферный агент; Противогрибковые и антибактериальные агенты.

Хранение и стабильность:

Продукт будет стабилен в течение 2 лет при хранении при температуре от 2°C до 30°C (35°F - 86°F). Если рабочая среда составляет от 15°C до 30°C (от 59°F до 86°F), выбросьте вскрытый контейнер через 60 дней.

Применимый анализатор:

Применим к анализатору BM HEM 5 TS

Использование:

Доведите лизирующий реагент до температуры использования, распакуйте реагент, вставьте соответствующий катетер во флакон с реагентом в соответствии с цветовым соответствием между крышкой флакона с реагентом и соединением крышки флакона анализатора в сборе, закрутите крышку флакона в сборе, замените реагент в соответствии с руководством оператора анализатора, а затем проведите фоновый подсчет, чтобы убедиться, что измеренное значение находится в пределах диапазона фонового подсчета, требуемого в руководстве оператора анализатора перед тестированием образца. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству оператора анализатора.

Технические характеристики

Продукт представляет собой прозрачную жидкость без частиц, осадка или частиц.

Фоновый результат: WBC ≤ 0.2 × 10⁹/L.

Предупреждения:

- Не вдыхать. В случае вдыхания немедленно обратитесь к врачу. Избегайте контакта с кожей или глазами. В случае контакта с кожей промойте пораженный участок немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды. В случае попадания в глаза немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Используйте продукт до истечения срока годности.
- Если продукт заморожен (частично или полностью), полностью оттайте его, нагрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте путем осторожного переворачивания. Проверьте фоновые результаты перед анализом образцов пациентов.
- Утилизируйте реагенты, отходы и расходные материалы в соответствии с государственными нормами.
- Результат теста может быть недостоверным, если: срок годности реагента истек или он недействителен; реагент загрязнен пылью из воздуха; образец не обработан чисто; реагент смешивается или используется с реактивами сторонних производителей.
- После доставки, пожалуйста, проверьте внешнюю упаковку. Если она повреждена и жидкость вытекает, не используйте реактив. Если утечки не происходит, пожалуйста, перед использованием анализатора проведите тест контроля качества, чтобы убедиться, что система обнаружения работает нормально.
- Внутренняя упаковка (мягкое ведро) и внешняя упаковка разбавителя должны использоваться вместе.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

BioMaxima S.A

Ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland

Tel: +48 8174551 40

Email: export@biomaxima.com

Website: www.biomaxima.com



Используемые символы



Обратитесь к руководству пользователя



Для диагностики in vitro



Номер серии



Срок годности




Производитель



Дата производства



Температурные ограничения

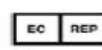

Лицензированное представительство в ЕС



Декларация соответствия CE

Разбавитель 5 / Hematology Analyzer Diluent (Diluent 5)

Для гематологического анализатора BM HEM 5+

Кат.№ DIL-A

Упаковка 20 л

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для анализа клеток крови, разведения образцов и приготовления клеточной суспензии.

ПРИНЦИП

Разбавитель представляет собой раствор с определенной ионной силой и проводимостью, который может разжижать кровь и формировать оболочечный поток, обеспечивая стабильную среду для подсчета клеток крови.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Хлорид натрия, сульфат натрия, буферный агент; Противогрибковые и антибактериальные агенты.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Продукт стабилен в течение 2х лет при хранении при температуре от 2°C до 30°C (от 35°F до 86°F).

Если рабочая среда находится в диапазоне от 15°C до 30°C (от 59°F до 86°F), утилизируйте открытый контейнер через 60 дней.

ПРИМЕНЯЕМЫЙ АНАЛИЗАТОР

Применимо к гематологическому анализатору BM HEM 5+.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Доведите Разбавитель реагент до температуры использования, распакуйте его, вставьте соответствующий катетер в бочку с реагентом в соответствии с цветовым соответствием между крышкой бочки с реагентом и соединением узла крышки флакона анализатора, завинтите узел крышки флакона, замените реагент в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора, а затем перед тестированием образца проведите контрольное измерение, чтобы убедиться, что полученные значения находятся в пределах диапазона, указанного в руководстве по эксплуатации анализатора. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации анализатора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт представляет собой прозрачную жидкость без частиц, осадка и хлопьев.

Фоновый результат:

WBC $\leq 0,2 \times 10^9/\text{л}$

RBC $\leq 0,02 \times 10^{12}/\text{л}$

HGB $\leq 1\text{г}/\text{л}$

PLT $\leq 10 \times 10^9/\text{л}$

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не вдыхайте. В случае вдыхания немедленно обратитесь к врачу. Избегайте контакта с кожей или глазами. При попадании на кожу немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Используйте продукт до истечения срока годности.
- Если продукт заморожен (частично или полностью), полностью разморозьте его, нагрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте, осторожно перевернув. Прежде чем анализировать образцы пациентов, проверьте фоновые результаты.
- Утилизируйте реагенты, отходы и расходные материалы в соответствии с государственными нормами.
- Результат теста может быть недостоверным, если: срок годности реагента истек или он недействителен; реагент, загрязнен пылью из воздуха; образец обработан нечисто; реагент смешивается или используется с реагентами сторонних производителей.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание изделия - бесплатное в рамках гарантийного срока. Гарантия не распространяется на:

- Реагент с истекшим сроком годности;
- Реагент, который использовался неправильно;
- Реагент, хранящийся в условиях, не соответствующих рекомендациям;
- При возникновении с реагентом форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар и землетрясение;
- Другие причины, не вызванные анализатором или самим реагентом.

(Дата производства: см. этикетку продукта)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ



См. руководство по эксплуатации



Для диагностики in vitro



Номер партии



Дата производства



Производитель



Дата истечения срока действия



Ограничение температуры



BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
tel.: +48 81 745 51 40; fax: +48 81 744 29 15; e-mail: info@biomaxima.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Лизирующий реагент Н / Hematology Analyzer Lyse (Lizat Н)

для гематологического анализатора BM HEM 5+

Кат.№ LYA-1

Упаковка 500 мл

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется для разрушения мембраны эритроцитов и преобразования гемоглобина в гемоглобиновый комплекс для определения HGB. Реагент 2-дифференцирует WBC от BASO и других WBC и определяет количество WBC.

ПРИНЦИП

Реагент добавляется для лизирования эритроцитов (RBC) и реакции с высвободившимся гемоглобином (HGB) для измерения HGB, количества лейкоцитов (WBC) и базофилов (BAS).

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Поверхностно-активное вещество; Буферный агент; Противогрибковые и антибактериальные агенты.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Реагент стабилен в течение 2 лет при хранении при температуре от 2°C до 30°C (от 35°F до 86°F). Если рабочая среда находится в диапазоне от 15°C до 30°C (от 59°F до 86°F), утилизируйте открытый контейнер через 60 дней.

ПРИМЕНИМЫЙ АНАЛИЗАТОР

Применимо к гематологическому анализатору BM HEM 5+.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Доведите лизирующий реагент до температуры использования, распакуйте его, вставьте соответствующий катетер в бутылку с реагентом в соответствии с цветовым соответствием между крышкой флакона с реагентом и соединением узла крышки флакона анализатора, закрутите узел крышки флакона, замените реагент в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора, а затем перед тестированием образца проведите контрольное измерение, чтобы убедиться, что полученные значения находятся в пределах диапазона, указанного в руководстве по эксплуатации анализатора. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации анализатора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт представляет собой прозрачную жидкость без частиц, осадка и хлопьев.
Фоновый результат: WBC $\leq 0,2 \times 10^9/\text{л}$, HGB $\leq 1\text{г/л}$

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не вдыхайте. В случае вдыхания немедленно обратитесь к врачу. Избегайте контакта с кожей или глазами. При попадании на кожу немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Используйте продукт до истечения срока годности.
- Если продукт заморожен (частично или полностью), полностью разморозьте его, нагрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте, осторожно перевернув. Прежде чем анализировать образцы пациентов, проверьте фоновые результаты.
- Утилизируйте реагенты, отходы и расходные материалы в соответствии с государственными нормами.
- Результат теста может быть недостоверным, если: срок годности реагента истек или он недействителен; реагент, загрязнен пылью из воздуха; образец обработан нечисто; реагент смешивается или используется с реагентами сторонних производителей.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание изделия - бесплатное в рамках гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на:

- Реагент с истекшим сроком годности;
- Реагент, который использовался неправильно;
- Реагент, хранящийся в условиях, не соответствующих рекомендациям;
- При возникновении с реагентом форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар и землетрясение;
- Другие причины, не вызванные анализатором или самим реагентом.

(Дата производства: см. этикетку продукта)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ



См. руководство по эксплуатации



Для диагностики in vitro



Номер партии



Дата производства



Производитель



Дата истечения срока действия



Ограничение температуры



Лизирующий реагент EO I / Hematology Analyzer Lyse (Lizat EO I) для гематологического анализатора BM HEM 5+

Кат.№ LYA-2

Упаковка 500 мл

НАЗНАЧЕНИЕ

Он используется для разрушения эритроцитов и взаимодействия с Лизирующим реагентом, кат.№ LYA-3 для 4-дифференцировки лейкоцитов.

ПРИНЦИП

Реагент используется с Лизирующим реагентом, кат.№ LYA-3 для растворения RBC и изменения морфологии WBC, чтобы проверить результат классификации WBC.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Поверхностно-активное вещество; Буферный агент; Противогрибковые и антибактериальные агенты.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Продукт стабилен в течение 2 лет при хранении при температуре от 2°C до 30°C (от 35°F до 86°F).
Если рабочая среда находится в диапазоне от 15°C до 30°C (от 59°F до 86°F), утилизируйте открытый контейнер через 60 дней.

ПРИМЕНИМЫЙ АНАЛИЗАТОР

Применимо к гематологическому анализатору BM HEM 5+.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Доведите лизирующий реагент до температуры использования, распакуйте его, вставьте соответствующий катетер в бутылку с реагентом в соответствии с цветовым соответствием между крышкой флакона с реагентом и соединением узла крышки флакона анализатора, завинтите узел крышки флакона, замените реагент в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора, а затем перед тестированием образца проведите контрольное измерение, чтобы убедиться, что полученные значения находятся в пределах диапазона, указанного в руководстве по эксплуатации анализатора. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации анализатора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт представляет собой прозрачную жидкость без частиц, осадка и хлопьев.
Фоновый результат: WBC $\leq 0,2 \times 10^9/\text{л}$.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не вдыхайте. В случае вдыхания немедленно обратитесь к врачу. Избегайте контакта с кожей или глазами. При попадании на кожу немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Используйте продукт до истечения срока годности.
- Если продукт заморожен (частично или полностью), полностью разморозьте его, нагрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте, осторожно перевернув. Прежде чем анализировать образцы пациентов, проверьте фоновые результаты.
- Утилизируйте реагенты, отходы и расходные материалы в соответствии с государственными нормами.
- Результат теста может быть недостоверным, если: срок годности реагента истек или он недействителен; реагент, загрязнен пылью из воздуха; образец обработан нечисто; реагент смешивается или используется с реагентами сторонних производителей.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание изделия - бесплатное в рамках гарантийного срока. Гарантия не распространяется на:

- Реагент с истекшим сроком годности;
- Реагент, который использовался неправильно;
- Реагент, хранящийся в условиях, не соответствующих рекомендациям;
- При возникновении с реагентом форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар и землетрясение;
- Другие причины, не вызванные анализатором или самим реагентом.

(Дата производства: см. этикетку продукта)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ



См. руководство по эксплуатации



Для диагностики in vitro



Номер партии



Дата производства



Производитель



Дата истечения срока действия



Ограничение температуры



BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
tel.: +48 81 745 51 40; fax: +48 81 744 29 15; e-mail: info@biomaxima.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Лизирующий реагент EO II / Hematology Analyzer Lyse (Lizat EO II)

для гематологического анализатора BM HEM 5+

Кат.№ LYA-3

Упаковка 1 л

НАЗНАЧЕНИЕ

Он используется для разрушения эритроцитов и взаимодействия с Лизирующим реагентом, кат.№ LYA-2 для 4-дифференцировки лейкоцитов.

ПРИНЦИП

Реагент используется с Лизирующим реагентом, кат.№ LYA-2 для растворения RBC и изменения морфологии WBC, чтобы проверить результат классификации WBC.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Поверхностно-активное вещество; Буферный агент; Противогрибковые и антибактериальные агенты.

ХРАНИЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Продукт стабилен в течение 2 лет при хранении при температуре от 2°C до 30°C (от 35°F до 86°F).

Если рабочая среда находится в диапазоне от 15°C до 30°C (от 59°F до 86°F), утилизируйте открытый контейнер через 60 дней.

ПРИМЕНИМЫЙ АНАЛИЗАТОР

Применимо к гематологическому анализатору BM HEM 5+.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Доведите лизирующий реагент до температуры использования, распакуйте его, вставьте соответствующий катетер в бутылку с реагентом в соответствии с цветовым соответствием между крышкой флакона с реагентом и соединением узла крышки флакона анализатора, завинтите узел крышки флакона, замените реагент в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора, а затем перед тестированием образца проведите контрольное измерение, чтобы убедиться, что полученные значения находятся в пределах диапазона, указанного в руководстве по эксплуатации анализатора. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации анализатора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продукт представляет собой прозрачную жидкость без частиц, осадка и хлопьев.

Фоновый результат: WBC $\leq 0,2 \times 10^9/\text{л}$.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не вдыхайте. В случае вдыхания немедленно обратитесь к врачу. Избегайте контакта с кожей или глазами. При попадании на кожу немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.
- Используйте продукт до истечения срока годности.
- Если продукт заморожен (частично или полностью), полностью разморозьте его, нагрейте до комнатной температуры и тщательно перемешайте, осторожно перевернув. Прежде чем анализировать образцы пациентов, проверьте фоновые результаты.
- Утилизируйте реагенты, отходы и расходные материалы в соответствии с государственными нормами.
- Результат теста может быть недостоверным, если: срок годности реагента истек или он недействителен; реагент, загрязнен пылью из воздуха; образец обработан нечисто; реагент смешивается или используется с реагентами сторонних производителей.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание изделия - бесплатное в рамках гарантийного срока. Гарантия не распространяется на:

- Реагент с истекшим сроком годности;
- Реагент, который использовался неправильно;
- Реагент, хранящийся в условиях, не соответствующих рекомендациям;
- При возникновении с реагентом форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар и землетрясение;
- Другие причины, не вызванные анализатором или самим реагентом.

(Дата производства: см. этикетку продукта)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ



См. руководство по эксплуатации



Для диагностики in vitro



Номер партии



Дата производства



Производитель



Ограничение температуры



Дата истечения срока действия



BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Poland
tel.: +48 81 745 51 40; fax: +48 81 744 29 15; e-mail: info@biomaxima.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



Внешний очиститель BM (BM External Cleaner)

Для автоматического анализа в in vitro диагностике

Кат.№: 1-114-0100

100 мл



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Внешний очиститель BM - это чистящий и отбеливающий концентрат для гематологических анализаторов. Чистящий концентрат гипохлорита, входящий во Внешний очиститель BM - стабилизированный, микрофильтрованный, концентрированный раствор для интенсивной окислительной очистки, промывки капилляров, трубок и камер гематологических анализаторов, удаления преципитатов компонентов крови и липопротеиновых отложений на всех гематологических анализаторах.

ПРИМЕНИМЫЙ АНАЛИЗАТОР

Применимо к анализатору BM HEM 5 TS

ИНГРЕДИЕНТЫ

Детергенты.....	<1.0%
Гипохлорит натрия	< 5.0 %
Гидроксид натрия.....	<0.5%
Стабилизаторы.....	< 0.5 %

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ

- Концентрат гипохлорита Внешнего очистителя BM содержит гипохлорит натрия в сильно щелочном растворе. Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой.
- В случае попадания в глаза или на кожу промойте глаза большим количеством воды в течение нескольких минут или промойте участок кожи водой.
- При проглатывании НЕ вызывайте рвоту. Выпейте большое количество воды и обратитесь за медицинской помощью. Остерегайтесь аспирации, если рвота все же произошла.
- При работе с реагентом надевайте лабораторные перчатки.
- Все образцы биологической жидкости следует рассматривать как потенциально инфекционные материалы. Обращайтесь с кровью и другими потенциально инфекционными материалами с соблюдением соответствующих мер предосторожности. Используйте перчатки, маски и халаты, если ожидается контакт с кровью.
- Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности MSDS, прилагаемым к реагенту.
- При работе с реагентами используйте надлежащую лабораторную практику (GLP).

ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ

- Этот реагент готов к использованию и может применяться прямо из контейнера; специальной подготовки реагента не требуется.
- Оставьте реагент при комнатной температуре не менее чем на 12 часов.

ЗАМЕНА РЕАГЕНТОВ


- Устанавливать реагент может только обученный специалист лаборатории.
- Во время ежедневного обслуживания аспирируйте чистящее средство через зонд. Выполните цикл очистки, как указано в руководстве пользователя прибора.
- Если холостой результат слишком высок или появляется неприемлемый результат, дозируйте концентрированный реагент непосредственно в соответствующую камеру в соответствии с руководством пользователя прибора.

ХРАНЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ РЕАГЕНТОВ

- Храните Внешний очиститель BM при температуре от 15 до 30°C.
- Срок годности Внешнего очистителя BM составляет 36 месяцев с даты изготовления при условии хранения в предписанном температурном режиме.
- Не используйте реагент после истечения срока годности, указанного на этикетке контейнера.
- Вскрытый контейнер следует выбросить через 120 дней.
- Не используйте реагент после замораживания.
- Утилизируйте отработанный продукт, неиспользованный продукт и загрязненную упаковку в соответствии с местными правилами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

BioMaxima S.A.
Ul. Vettterów 5
20-277 Lublin
POLAND
www.biomaxima.com
export@biomaxima.com

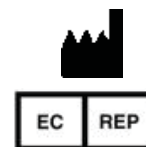

Используемые символы



Обратитесь
к руководству
пользователя



Для
диагностики
in vitro



Номер
серии



Срок
годности




Производитель



Дата
производства



Температурные
ограничения

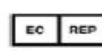

Лицензи-
рованное
представи-
тельство в ЕС



Декларация
соответствия
CE



Внешний очиститель BM E (BM External Cleaner E)

Для автоматического анализа в in vitro диагностике

Кат.№: 1-115-0100

100 мл



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Внешний очиститель BM E- это чистящий концентрат для интенсивной окислительной очистки, промывки капилляров, трубок и камер гематологических анализаторов, удаления преципитатов компонентов крови и липопротеиновых отложений на всех гематологических анализаторах.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Детергенты.....	<1.0%
Гипохлорит натрия	< 5.0 %
Гидроксид натрия.....	<0.5%
Стабилизаторы.....	< 0.5 %

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ

- Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой.
- В случае попадания в глаза или на кожу промойте глаза большим количеством воды в течение нескольких минут или промойте участок кожи водой.
- При проглатывании НЕ вызывайте рвоту. Выпейте большое количество воды и обратитесь за медицинской помощью. Остерегайтесь аспирации, если рвота все же произошла.
- При работе с реагентом надевайте лабораторные перчатки.
- Все образцы биологической жидкости следует рассматривать как потенциально инфекционные материалы. Обращайтесь с кровью и другими потенциально инфекционными материалами с соблюдением соответствующих мер предосторожности. Используйте перчатки, маски и халаты, если ожидается контакт с кровью.
- Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности MSDS, прилагаемым к реагенту.
- При работе с реагентами используйте надлежащую лабораторную практику (GLP).

ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ

- Этот реагент готов к использованию и может применяться прямо из контейнера; специальной подготовки реагента не требуется.
- Оставьте реагент при комнатной температуре не менее чем на 12 часов.

ЗАМЕНА РЕАГЕНТОВ

- Устанавливать реагент может только обученный специалист лаборатории.


Во время ежедневного обслуживания аспирируйте чистящее средство через зонд. Выполните цикл очистки, как указано в руководстве пользователя прибора.

ХРАНЕНИЕ, СТАБИЛЬНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ РЕАГЕНТОВ

- Храните Внешний очиститель BM E при температуре от 15 до 30°C.
- Срок годности Внешнего очистителя BM E составляет 36 месяцев с даты изготовления при условии хранения в предписанном температурном режиме.
- Не используйте реагент после истечения срока годности, указанного на этикетке контейнера.
- Вскрытый контейнер следует выбросить через 120 дней.
- Не используйте реагент после замораживания.
- Утилизируйте отработанный продукт, неиспользованный продукт и загрязненную упаковку в соответствии с местными правилами.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

BioMaxima S.A.
Ul. Vettterów 5
20-277 Lublin
POLAND
www.biomaxima.com
export@biomaxima.com

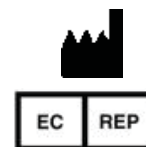

Используемые символы



Обратитесь
к руководству
пользователя



Для
диагностики
in vitro



Номер
серии



Срок
годности




Производитель



Дата
производства



Температурные
ограничения

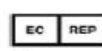

Лицензи-
рованное
представи-
тельство в ЕС



Декларация
соответствия
CE