

Руководство по эксплуатации:

Костыли опорные металлические предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 150 кг.

Для регулировки высоты костыля необходимо разобрать болтовое соединение ножки со стойками, переставить ножку на требуемую высоту, собрать болтовое соединение. Шаг регулировки высоты – 35 мм.

Устройство против скольжения (для арт. 16(753), 16(753)М, 16(753)Л и 16(753)МП) работает по принципу «затвора». Для установки в рабочее положение штифт сдвигается по прорези вниз и в сторону, при этом из резинового наконечника выдвигается штырь, который обеспечивает надежное сцепление со скользкими поверхностями. В нерабочее положение устройство приводится в обратной последовательности. Устройство против скольжения при эксплуатации необходимо регулярно смазывать любым машинным маслом.

Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании костылей с выдвинутым штырем против скольжения.

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОСТЫЛЯМИ С ВЫДВИНУТЫМ
ШТЫРЕМ ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
И В МЕСТАХ БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ!**

**Недопустимо пользоваться костылями с износившимися
резиновыми наконечниками.**

При необходимости проведения дезинфицирования используются следующие средства:
3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по ОСТ 42-21-2-85.

Транспортировать костыли следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Хранить костыли в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°С и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения 3 года.

По окончании эксплуатации или срока хранения костыли подлежат утилизации в ближайший контейнер для общепытовых отходов.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.


Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться производителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Изготовитель: ООО «Аверсус» Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2, стр. 3
тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83 info@aversus.ru; www.aversus.ru

Организация, принимающая претензии на территории Республики Беларусь:
ООО «Вест» 222160, Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Калиновского, 7
Телефон: +375 17 217-00-89; info@westltd.by

Зарегистрированный товарный знак

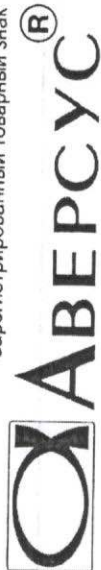

КОСТЫЛИ ОПОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Рег. удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2009/05735 от 29.11.2018 г.

Варианты исполнения и основные габаритные характеристики

Варианты исполнения	Артикул	Вес, пара/кг	Длина, мм	
			не менее	не более
Костыли опорные металлические для взрослых	16(540)	2,5	1180	1425
Костыли опорные металлические для взрослых (с мягкими чехлами на подмышечники и ручки)	16(540)М	2,6	1180	1425
Костыли опорные металлические для взрослых с устройством против скольжения	16(753)	2,55	1180	1425
Костыли опорные металлические для взрослых с устройством против скольжения (с мягкими чехлами на подмышечники и ручки)	16(753)М	2,65	1180	1425
Костыли опорные металлические подростковые	16(540)П	2,3	1070	1315
Костыли опорные металлические подростковые (с мягкими чехлами на подмышечники и ручки)	16(540)МП	2,4	1070	1315
Костыли опорные металлические подростковые с устройством против скольжения	16(753)П	2,35	1070	1315
Костыли опорные металлические подростковые с устройством против скольжения (с мягкими чехлами на подмышечники и ручки)	16(753)МП	2,45	1070	1315

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КОСТЫЛИ ОПОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ИЗГОТОВЛЕННЫ ПО ГОСТ Р 57764-2017

Дата выпуска
ОТК
Партия

Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации. На резиновые наконечники гарантия не распространяется.

Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Руководство по эксплуатации:

Костыли опорные металлические (алюминиевый сплав) предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 150 кг и ростом от 120 см до 190 см.

Для регулировки высоты костыля необходимо разобрать болтовое соединение ножки со стойками, переставить ножку на требуемую высоту, собрать болтовое соединение. Шаг регулировки высоты – 32 мм.

Для перестановки ручки костыля необходимо разобрать болтовое соединение ручки со стойками, переставить ручку на требуемую высоту, собрать болтовое соединение. Шаг перестановки ручки – 32 мм.

Устройство против скольжения (для арт. Комби и КомбиМ) работает по принципу «затвора». Для установки в рабочее положение штифт сдвигается по прорези вниз и в сторону, при этом выдвигается штырь, который обеспечивает надежное сцепление со скользкими поверхностями.

В нерабочее положение устройство приводится в обратной последовательности.

Устройство против скольжения при эксплуатации необходимо регулярно смазывать любым машинным маслом.

Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании трости с выдвинутым штырем против скольжения

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТРОСТЬЮ С ВЫДВИНУТЫМ ШТЫРЕМ ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И В МЕСТАХ БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ!

Недопустимо пользоваться тростью с износившимся резиновым наконечником

При необходимости проведения дезинфицирования используются следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по МУ-287-113

Транспортировать трости следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Хранить трости в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения 3 года.

По окончании эксплуатации или срока хранения трости подлежат утилизации в ближайший контейнер для общепыльных отходов.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность, полученные при потребительских качества изделия, могут изменяться производителем без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Иготовитель: ООО «Аверсус» Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20-34, стр. 2
каб. 2В Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2, стр. 3
тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83 info@aversus.ru; www.aversus.ru

Организация, принимающая претензии на территории Республики Беларусь:

ООО «Вест» 222160, Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Калиновского,

Телефон: +375 17 217-00-89; info@westld.by

О А В Е Р С У С®

КОСТЫЛИ ОПОРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ

Рег. удостовер. Росздравнадзора № ФСР 2009/05733 от 29.10.2018 г.,

Варианты исполнения и основные габаритные характеристики

Варианты исполнения	Артикул	Вес, пара/кг	Длина, мм	
			Не менее	Не более
Костыли опорные деревянные (для взрослых)	743	1,75	1200	1424
Костыли опорные деревянные (для взрослых, с мягкими чехлами на подмышечники и ручки)	743М	1,85	1200	1424
Костыли (опорные) подростковые деревянные (с мягкими чехлами на подмышечники и ручки)	743П	1,65	1050	1474
Костыли (опорные) подростковые деревянные (с мягкими чехлами на подмышечники и ручки)	743МП	1,75	1050	1474
Костыли (опорные) деревянные с устройством против скольжения (для взрослых)	749	1,8	1235	1395
Костыли (опорные) деревянные с устройством против скольжения (для взрослых, с мягкими чехлами на подмышечники и ручки)	749М	1,9	1235	1395
Костыли (опорные) подростковые деревянные с устройством против скольжения	749П	1,65	1085	1445
Костыли (опорные) подростковые деревянные с устройством против скольжения (с мягкими чехлами на подмышечники и ручки)	749МП	1,75	1085	1445
Костыли (опорные) детские деревянные	743Д	1,4	930	1122
Костыли (опорные) детские деревянные (с мягкими чехлами на подмышечники и ручки)	743МД	1,5	930	1122
Костыли (опорные) комбинированные (для взрослых, деревянные стойки, алюминиевые ножки, с УПС)	Комби	1,8	1240	1432
Костыли (опорные) комбинированные (для взрослых, деревянные стойки, алюминиевые ножки, с УПС, с мягкими чехлами на подмышечники и ручки)	КомбиМ	1,9	1240	1432

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН КОСТЫЛИ ОПОРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗГОТОВЛЕННЫ ПО ГОСТ Р 57764-2017

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

На резиновых наконечниках гарантия не распространяется.

Иготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Дата выпуска
ОТК
Партия

Руководство по эксплуатации:

Костыли опорные металлические (алюминиевый сплав) предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 150 кг и ростом от 120 см до 190 см.

Для регулировки высоты костыля (для арт. 747Д, 747МД, 19(540), 19(540)М, 19(753), 19(540)П, 19(540)МП, 19(753)МП) необходимо разобрать болтовое соединение ножки со стойками, переставить ножку на требуемую высоту, собрать болтовое соединение. Шаг регулировки высоты - 35мм.

Для регулировки высоты костыля (для арт. 19(540)Т, 19(540)МТ, 19(753)Т, 19(753)МП, 19(540)ПТ, 19(540)МПТ, 19(753)ПТ и 19(753)ТМП) необходимо на верхней части ножки одновременно нажать две кнопки и передвинуть нижнюю часть ножки на требуемую высоту, убедиться что кнопки вышли из отверстия и надежно зафиксировались в соединении. Шаг регулировки высоты - 25мм.

Для перестановки ручки костыля необходимо разобрать болтовое соединение ручки со стойками, переставить ручку на требуемую высоту, собрать болтовое соединение. Шаг перестановки ручки - 35мм.

Устройство против скольжения (для арт. 19(753)Т, 19(753)М, 19(753)ТМП, 19(753)П, 19(753)МП) работает по принципу «затвора». Для установки в рабочее положение штифт сдвигается по прорези вниз и в сторону, при этом выдвигается штырь, который обеспечивает надежное сцепление со скользкими поверхностями.

В первом положении устройство приводится в обратный последовательности.

Устройство против скольжения при эксплуатации необходимо регулярно смазывать любым машинным маслом.

Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании трости с выдвинутым штырем против скольжения

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТРОСТЬЮ С ВЫДВИНУТЫМ ШТЫРЕМ ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И В МЕСТАХ БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ!

Недопустимо пользоваться тростью с износившимся резиновым наконечником

При необходимости проведения дезинфицирования используются средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по МУ-287-113

Транспортировать трости следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Хранить трости в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения 3 года.

По окончании эксплуатации или срока хранения трости подлежат утилизации в ближайший контейнер для бытовых отходов.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться производителем — без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

И изготовитель: ООО «Аверсус» Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2, стр. 2, тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83 info@aversus.ru; www.aversus.ru

Организация, принимающая претензии на территории Республики Беларусь:

ООО «Вест» 222160, Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Калиновского, 7

Телефон: +375 17 217-00-89; info@westld.by



КОСТЫЛИ ОПОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (алюминиевый сплав)

Рег. удостовер. Росздравнадзора № ФСР 2009/05733 от 29.10.2018 г.

Варианты исполнения и основные габаритные характеристики

Варианты исполнения	Артикул	Вес, пара/кг	Длина, мм	
			Не менее	Не более
Костыли опорные металлические детские (алюминиевый сплав)	747Д	1,1	875	980
Костыли опорные металлические детские (алюминиевый сплав), с мягкими чешками на подмышечники и ручки	747МД	1,2	875	980
Костыли опорные (алюминиевый сплав) для взрослых	19(540)	1,6	1220	1430
Костыли опорные (алюминиевый сплав) для взрослых (с мягкими чешками на подмышечники и ручки)	19(540)М	1,7	1220	1430
Костыли опорные (алюминиевый сплав) для взрослых (с регулируемыми по высоте ножками)	19(540)Т	1,6	1270	1445
Костыли опорные (алюминиевый сплав) для взрослых (с регулируемыми по высоте ножками, с мягкими чешками на подмышечники и ручки)	19(540)ТМ	1,7	1270	1445
Костыли опорные (алюминиевый сплав) для взрослых с УПС	19(753)	1,75	1220	1430
Костыли опорные (алюминиевый сплав) для взрослых с УПС (с мягкими чешками на подмышечники и ручки)	19(753)М	1,85	1220	1430
Костыли опорные (алюминиевый сплав) для взрослых с УПС (с регулируемыми по высоте ножками)	19(753)Т	1,75	1270	1445
Костыли опорные (алюминиевый сплав) для взрослых с УПС (с регулируемыми по высоте ножками, с мягкими чешками на подмышечники и ручки)	19(753)ТМ	1,85	1270	1445
Костыли опорные (алюминиевый сплав) подростковые	19(540)П	1,4	1070	1280
Костыли опорные (алюминиевый сплав) подростковые (с мягкими чешками на подмышечники и ручки)	19(540)МП	1,5	1070	1280
Костыли опорные (алюминиевый сплав) подростковые (с регулируемыми по высоте ножками)	19(540)ПТ	1,5	1120	1295
Костыли опорные (алюминиевый сплав) подростковые (с регулируемыми по высоте ножками, с мягкими чешками на подмышечники и ручки)	19(540)ПТМ	1,6	1120	1295
Костыли опорные (алюминиевый сплав) подростковые с УПС	19(753)П	1,55	1070	1280
Костыли опорные (алюминиевый сплав) подростковые с УПС (с мягкими чешками на подмышечники и ручки)	19(753)МП	1,65	1070	1280
Костыли опорные (алюминиевый сплав) подростковые с УПС (с регулируемыми по высоте ножками)	19(753)ПТ	1,65	1120	1295
Костыли опорные (алюминиевый сплав) подростковые с УПС (с регулируемыми по высоте ножками, с мягкими чешками на подмышечники и ручки)	19(753)ПТМ	1,75	1120	1295

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

КОСТЫЛИ ОПОРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ)
изготовлены по ГОСТ Р 57764-2017

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

На резиновые наклейки гарантия не распространяется.

Дата выпуска
ОТК
Партия

Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва

Руководство по эксплуатации:

Трость опорная предназначена для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 150 кг (для арт. 16(527)УС - до 80кг) и ростом от 165 см до 190 см.

Трость состоит из пластмассовой или деревянной ручки, резинового наконечника и стойки, которая в зависимости от исполнения, может быть деревянной (для арт. 528, 529, Конус/пл., Конус/дер.) стеклопластиковой (для арт. 16 и 21) или металлической (для арт. 527, 16(527), 16(527)Б, 16(527)АЛ, 16(527)АП, 16(527)С, 16(527)У, 16(527)УБ, 16(527)УАЛ и 16(527)УАП).

Трости выпускают фиксированного размера для людей среднего роста. Для того, чтобы своими силами укоротить трость (кроме арт. 529, 16(527)У, 16(527)УАЛ и 16(527)УАП), необходимо снять резиновый наконечник со стойки и ножовкой по металлу отпилить нужный размер. Срез покрыть лаком или краской НЦ. При работе соблюдать меры предосторожности.

Устройство против скольжения (для арт. 529) работает по принципу "эксцентрик". Для установки в рабочее положение рычажок с усилием откидывается по прорези вниз, при этом из резинового наконечника выдвигается штырь, который обеспечивает надежное сцепление со скользкими поверхностями.

Устройство против скольжения (для арт. 16(527)У, 16(527)УБ, 16(527)УАЛ и 16(527)УАП) работает по принципу "затвора". Для установки в рабочее положение штифт двигается по прорези вниз и в сторону.

В нерабочее положение устройство приводится в обратную последовательности.

Устройство против скольжения при эксплуатации необходимо регулярно смазывать любым машинным маслом.

Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании трости с выдвинутым штырем против скольжения

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТРОСТЬЮ С ВЫДВИНУТЫМ ШТЫРЕМ ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И В МЕСТАХ БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ!

Недопустимо пользоваться тростью с износившимся резиновым наконечником

При необходимости проведения дезинфицирования используются следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по МУ-287-113

Транспортировать трости следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Хранить трости в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения 3 года.

По окончании эксплуатации или срока хранения трости подлежат утилизации в ближайший контейнер для общепылевых отходов.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться производителем — без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Изготовитель: ООО «Аверсус» Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 20, стр. 2, каб. 2В Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2, стр. 3 тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83 info@aversus.ru; www.aversus.ru

Организация, принимающая претензии на территории Республики Беларусь:

ООО «Вест» 222160, Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Калиновского, 7 Телефон: +375 17 217-00-89; info@westtd.by

О А В Е Р С У С®

ТРОСТЬ ОПОРНАЯ

Рег. удостовер. Росздравнадзора № ФСР 2009/05733 от 29.10.2018 г.,
Варианты исполнения и основные габаритные характеристики

Варианты исполнения	Артикул	Вес, шт/кг	Длина не более, мм
Трость (опорная) деревянная с пластмассовой ручкой	528	0,38	940
Трость (опорная) деревянная с пластмассовой ручкой с УПС	529	0,44	960
Трость (опорная) деревянная с пластмассовой ручкой «Конус»	Конус/пл.	0,36	930
Трость (опорная) деревянная с деревянной ручкой «Конус»	Конус/дер.	0,38	930
Трость опорная из стеклопластика	16	0,26	920
Трость опорная из стеклопластика повышенной прочности	21	0,34	940
Трость опорная металлическая	527	0,42	900
Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав)	16(527)Б	0,30	900
Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) с УПС	16(527)У	0,32	900
Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав)	16(527)УБ	0,32	900
Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) с анатомической ручкой (под левую или правую руку)	16(527)АЛ 16(527)АП	0,30	900
Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав) с анатомической ручкой (под левую или правую руку) с УПС	16(527)УАЛ 16(527)УАП	0,32	900

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТРОСТЬ ОПОРНАЯ ИЗГОТОВЛЕНА ПО ГОСТ Р 57764-2017

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня приобретения при соблюдении правил эксплуатации, наличии настоящего гарантийного талона с отметкой о дате выпуска и товарного чека торговой организации.

На резиновые наконечники гарантия не распространяется.

Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва



Руководство по эксплуатации:

Трость опорная металлическая регулируемая по высоте предназначена для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей, имеющих травмы и заболевания нижних конечностей, весом до 150 кг и ростом до 190 см.

Для регулировки высоты трости (для арт. 22, 22Б, 22У, 22УБ, 22АЛ, 22/дер., 22АП и 22УАЛ, 22УАП, 22К и 22У/К) необходимо вынуть фиксирующий хомут, переставить ножку на требуемую высоту так, чтобы отверстия в трубах совпали, вставить хомут. Шаг регулировки высоты - 25 мм.

Для регулировки высоты трости (для арт. 22Т, 22ТБ, 22УТ, 22УТБ, 22ТАЛ, 22ТАБ, 22УТАЛ, 22УТАБ, 22Т/дер., 22Т/К и 22УТ/К) необходимо нажать кнопочный фиксатор, переставить ножку на требуемую высоту, убедиться что кнопка вышла из отверстия и надежно зафиксировалась в соединении. Шаг регулировки высоты - 25 мм.

Устройство против скольжения (для арт. 22У, 22УБ, 22УТ, 22УТБ, 22УАЛ, 22УАП, 22УТАЛ, 22УТАП, 22У/дер., 22УТ/дер., 22УТ/К и 22УТ/К) работает по принципу «затвора». Для установки в рабочее положение штифт сдвигается по прорези вниз и в сторону, при этом выдвигается штифт, который обеспечивает надежное сцепление со скользкими поверхностями.

В нерабочее положение устройство приводится в обратном порядке.

Устройство против скольжения при эксплуатации необходимо регулярно смазывать любым машинным маслом.

Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании трости с выдвинутым штырем против скольжения.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТРОСТЬЮ С ВЫДВИНУТЫМ

ШТЫРЕМ ПРОТИВ СКОЛЬЖЕНИЯ

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

И В МЕСТАХ БОЛЬШОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ!

Недопустимо пользоваться тростью с износившимся резиновым наконечником.

При необходимости проведения дезинфицирования используют следующие средства: 3% раствор перекиси водорода с добавлением 0,5 % моющего средства типа «Лотос» или другой раствор по МУ-287-113.

Транспортировать трости следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Хранить трости в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°C и относительной влажности воздуха не более 65%, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения 3 года.


По окончании эксплуатации или срока хранения трости подлежат утилизации в ближайший контейнер для общебытовых отходов.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные при нарушении условий эксплуатации данной продукции или при использовании ее не по назначению.

Технические характеристики, не влияющие на функциональность и потребительские качества изделия, могут изменяться производителем — без предварительного уведомления.

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Изготовитель: ООО «Аверсус» Юр. адрес: Россия, 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 10, стр. 3
2, каб. 2В Почтовый адрес: Россия, 129347, г. Москва, Югорский пр-д, д. 2, стр. 3
тел.: (495) 637-93-00, (499) 188-65-83 info@aversus.ru; www.aversus.ru

Организация, принимающая претензии на территории Республики Беларусь:
ООО «Вест» 222160, Республика Беларусь, Минская область, г. Жодино, ул. Калиновского, 7
Телефон: +375 17 217-00-89; info@westltd.by

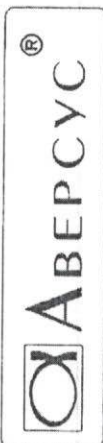

Трость опорная металлическая регулируемая по высоте

Рег. удостовер. Росздравнадзора № ФСР 2009/05735 от 29.11.2018 г.,
№ ФСР 2008/02408 от 01.11.2018 г.

Варианты исполнения и основные габаритные характеристики

Варианты исполнения	Артикул	Вес, шт/кг	Длина, мм	
			Не менее	Не более
Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав), регулируемая по высоте	22, 22Б, 22Т, 22ТБ	0,36	750	975
Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав), регулируемая по высоте, с устройством против скольжения	22У, 22УБ, 22УТ, 22УТБ	0,40	750	965
Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав), регулируемая по высоте, с анатомической ручкой (под левую руку)	22АЛ, 22ТАЛ	0,36	750	975
Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав), регулируемая по высоте, с анатомической ручкой (под правую руку)	22АП, 22ТАП	0,36	750	965
Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав), регулируемая по высоте, с устройством против скольжения (под левую руку)	22УАЛ, 22УТАЛ	0,40	750	975
Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав), регулируемая по высоте, с анатомической ручкой (под правую руку)	22УАП, 22УТАП	0,40	750	965
Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав), регулируемая по высоте, с деревянной ручкой	22/дер., 22Т/дер.	0,36	750	975
Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав), регулируемая по высоте, с деревянной ручкой, с устройством против скольжения	22УТ/дер.	0,40	750	965
Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав), регулируемая по высоте, с ручкой типа «Клонав» со смещенным центром тяжести	22/К, 22Т/К	0,50	780	980
Трость опорная металлическая (алюминиевый сплав), регулируемая по высоте, с ручкой типа «Клонав» со смещенным центром тяжести, с устройством против скольжения	22УТ/К	0,54	770	970

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Трость опорная металлическая регулируемая по высоте
изготовлена по ГОСТ Р 57764-2017

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со

дня приобретения при соблюдении правил

эксплуатации, наличии настоящего

гарантийного талона с отметкой о дате выпуска

и товарного чека торговой организации.

На наконечник гарантия не

распространяется.

Дата
выпуска
ОТК
Партия

Изготовитель: ООО «Аверсус», Россия, г. Москва