

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Проводники инфузионные однократного применения
ТУ РБ 05838972.007-95

ИСЖЕ.942274.01 ИП

Дата выпуска _____ Рев. 09

Настоящая инструкция применяется для проводников инфузионных однократного применения, которые включают в себя следующие варианты исполнений: прозрачные, светонепроницаемые и трехходовые.

НАЗНАЧЕНИЕ Проводник инфузионный однократного применения (далее – проводник) предназначен для внутривенного введения жидких лекарственных препаратов с помощью шприцевых насосов. Проводник инфузионный ПИ светонепроницаемый однократного применения предназначен для внутривенного введения лекарственных препаратов, разрушающихся под воздействием света, с помощью шприцевых насосов. Проводники инфузионный ПИ трехходовой однократного применения предназначен для управления потоком вливаемых жидких лекарственных препаратов из одного или двух разных источников одновременно, для соединения инфузионной/трансфузионной линии (магистральной) и постоянного устройства, находящегося в вене с целью контроля введения растворов и препаратов при дополнительных вливаниях.

ФОРМА ВЫПУСКА Проводник выпускается в первичной упаковке, состоящей из пленки термоформуемой и бумаги газопроницаемой. Детали проводника изготовлены из полимерных материалов, выдержавших токсикологические испытания в установленном порядке и рекомендованных для применения в медицинских изделиях.

Проводник в первичной упаковке стерилен, апирогенен и нетоксичен.

Стерилизован окисью этилена.


ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Специальные противопоказания неизвестны. Пациент с известной аллергической реакцией в отношении одного из материалов или непереносимостью компонентов изделий не должен проходить лечение с применением данного медицинского изделия.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ Побочных действий не обнаружено. При соблюдении данной инструкции побочные действия отсутствуют.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ (прозрачный и светонепроницаемый)

1. Проверить целостность первичной упаковки и срок годности проводника.
2. Вскрыть первичную упаковку и извлечь проводник.
3. Снять колпачок 1 (см. рис 1) и подсоединить коннектор 2 к шприцу с лекарственным препаратом.

Вариант I (прозрачный)

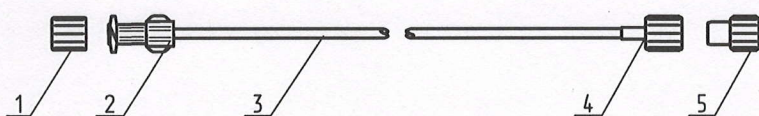

Вариант II (светонепроницаемый)

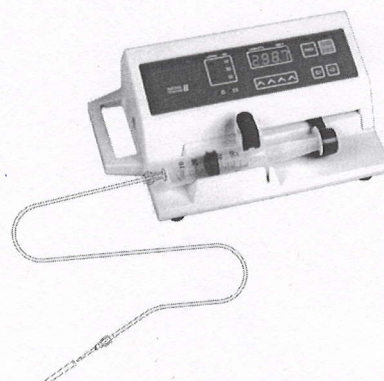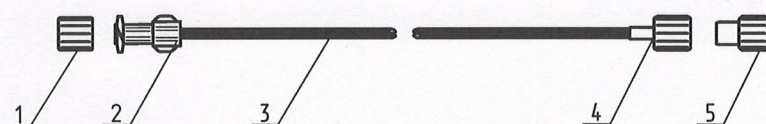


- 1 – колпачок запорный; 2 – коннектор «Luer-lock female»; 3 – трубка;
4 – коннектор «Luer-lock male»; 5 – колпачок защитный.

Рисунок 1 – Проводник инфузионный

4. Снять колпачок 5 и надеть на коннектор 4 иглу инъекционную.
5. Плавно надавливая на шток шприца, заполнить проводник лекарственным препаратом до полного вытеснения воздуха из трубки 3 и появления капли из иглы инъекционной.
6. Надеть колпачок на иглу инъекционную.
7. Убедиться в отсутствии пузырьков воздуха в трубке проводника
8. Закрепить шприц с проводником в гнезде шприцевого насоса.
9. Обработать место венепункции спиртом, йодом или другим антисептиком.
10. Снять колпачок с иглы инъекционной и произвести венепункцию.
11. Задать требуемую скорость введения препарата (см. инструкцию по эксплуатации шприцевого насоса).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ (трехходовой)

1. Проверить срок годности проводника и целостность первичной упаковки.
2. Вскрыть первичную упаковку и извлечь проводник.
3. Снять колпачок 1 (см. рис. 2) и надежно подключить одну или две магистрали к коннектору 2.

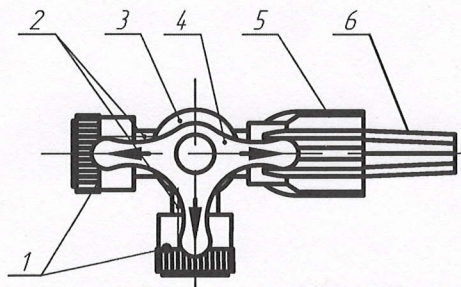

- 1 – колпачок запорный; 2 – коннектор корпуса «Luer-lock female»; 3 – корпус; 4 – поворотное устройство; 5 – коннектор корпуса «Luer-lock male»; 6 – колпачок защитный.

Рисунок 2 – Проводник инфузионный трехходовой

4. Снять защитный колпачок 6 и подсоединить подходящее устройство к коннектору 5.
5. С помощью вращения поворотного устройства 4 установить необходимое направление потоков жидкости.
6. После окончания использования утилизировать проводник в установленном порядке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Проводник предназначен для однократного применения. Не использовать повторно. Повторное использование может быть опасным как для пациента, так и для персонала.

Не подвергать повторной стерилизации. Повторная стерилизация или повторное использование могут вызвать инфекцию или критические реакции.

Проводник имеет коннекторы Luer-lock (male и female) обеспечивающие герметичное, безопасное и надежное соединение с инъекционными иглами, венозными катетерами, шприцами Luer-lock.

ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ Слишком сильное затягивание может привести к повреждению резьбы разъема Luer и образования открытых трещин. Соединяйте разъем Luer правильно.

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ Не использовать не по назначению. Перед использованием изделия убедитесь в его целостности и работоспособности. Во избежание повреждений вследствие неправильного применения используйте изделие в соответствии с данной инструкцией по применению. Не использовать при нарушении целостности первичной упаковки.

После использования подлежит обработке и утилизации.

В случае нарушения вышеперечисленного, надежность применения изделия не гарантируется, и производитель не несет ответственности.

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ:



Дата изготовления



Использовать до




Код партии



Не использовать повторно



Не применять при повреждении упаковки

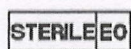

Стерилизация с применением окиси этилена



Ограничение температуры



Хрупкое. Осторожно



Беречь от влаги



Предел по количеству ярусов в штабеле



Давление

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ Проводники должны храниться во вторичной упаковке при температуре от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Защитить проводники от попадания прямых солнечных лучей и хранить в сухом месте с относительной влажностью воздуха не более 80 %. При транспортировке в холодное время года, изделие перед применением выдержать 24 часа при комнатной температуре. Срок годности – 5 лет от даты изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ Утилизацию производить в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 07.02.2018 г. № 14 и инструкции о правилах и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 22 ноября 2002 г. № 81.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Производственное унитарное предприятие «ФреБор»
(Унитарное предприятие «ФреБор»).

Республика Беларусь, 222518, г. Борисов, Минская обл., ул. Чапаева, 64, 6 этаж.
Телефон: + 375 177 734265, факс + 375 177 732471

Адрес электронной почты: info@frebor.by