



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Устройства для взятия проб крови Microvette® APT с K2ЭДТА

Устройства для взятия проб крови Microvette® APT с K2ЭДТА представляют собой пробирки с внесенными реагентами, с интегрированными приспособлениями для взятия капиллярной крови и с крышками с цветовой кодировкой. Устройства Microvette выполнены из пластика в виде двойной пробирки (внешняя пробирка цилиндрической формы, внутренняя пробирка круглой формы).

Взятие капиллярной крови производится с помощью капилляра типа «end-to-end» (для устройств объемом 250 мкл) или через край устройства, «самотеком» (для устройств объемом 500 мкл).

Взятие капиллярной крови проводится с помощью встроенного капилляра «end-to-

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Устройства для взятия проб крови Microvette® APT с K2ЭДТА предназначены для использования при взятии, хранении и/или транспортировании капиллярной крови для анализов или других исследований в in vitro диагностике.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний в рамках установленного производителем назначения не имеет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, маска, халат) во время проведения процедуры взятия капиллярной крови.
- Всегда следует при взятии крови заполнять капилляр до метки, чтобы не нарушить соотношение реагента к крови.
- Использованные скарификаторы следует поместить в специальные контейнеры для утилизации, согласно правилам вашего учреждения.
- Запрещено использование устройств Microvette® APT с истекшим сроком годности.
- Запрещено использовать устройства Microvette® APT при изменении в них цвета реагентов. Все жидкие консерванты и антикоагулянты прозрачны и бесцветны.
- Не использовать повторно.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материалы, необходимые для взятия крови

- Для защиты от контакта с кровью: средства индивидуальной защиты (перчатки, маска, халат);
- Спиртовые салфетки или смоченный спиртом ватный тампон;
- Индивидуальная стерильная салфетка или ватный тампон;

- Устройство Microvette® APT;
- Ланцет/скарifikатор;
- Контейнер для сбора острых и колющих изделий (игл, ланцетов/скарifikаторов);
- Контейнер для сбора, хранения, транспортировки и утилизации опасных отходов класса Б или В.

Подготовка к взятию капиллярной крови

- Убедитесь, что положение, в котором находится пациент, комфортно и безопасно для него и удобно для проведения манипуляции;
- Протрите руки;
- Наденьте одноразовые перчатки;
- Подготовьте к работе ланцет/скарifikатор;
- Подготовьте к работе устройство Microvette® APT.

Манипуляции перед взятием капиллярной крови

- Протрите место прокола. Дождитесь полного высыхания дезинфицирующего средства. После дезинфекции не дотрагивайтесь до него;
- Предупредите пациента о начале процедуры;
- Зафиксируйте рукой палец, пятку или ухо пациента;
- Проколите обработанный участок кожи ланцетом/скарifikатором;
- Удалите первую каплю крови и приступите к взятию капиллярной крови.

Условия хранения и применения

Изделие следует хранить при комнатной температуре от +2 до +25°C, относительной влажности не более 80%.


Изделие следует эксплуатировать при температуре от +18 до +25°C, относительной влажности не более 80%.

Условия хранения устройств с образцами крови и последующая транспортировка:

Хранение и транспортировка устройств должны проводиться при комнатной температуре (18-25°C) в течение 4 часов.

Беречь от влаги.

Только для одноразового применения.

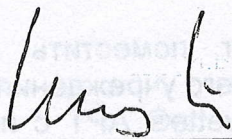


SARSTEDT

AG & Co. KG

Sarstedtstraße 1

51588 NÜMBRECHT

Mr. Rainer Schuster,
Member of the Executive Board