

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Столик для манипуляций на руке СР, заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ м.п. _____ Подпись

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ БУ 800017554.054-2015 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт столика, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации, подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя: 225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Столик для манипуляций на руке СР заводской № _____
ТУ БУ 800017554.054-2015

Приобретен _____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____ города _____

Подпись и печать руководителя
ремонтного предприятия
Подпись и печать руководителя
учреждения - владельца

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»


СТОЛИК ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ НА РУКЕ

СР


ТУ БУ 800017554.054-2015

Паспорт

БИПЯ.942813.054 ПС

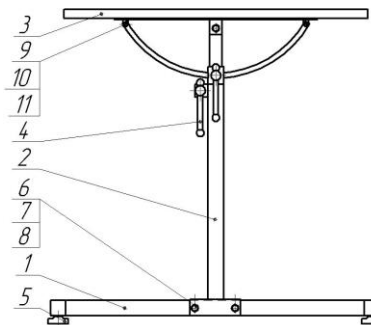

1. Основание
2. Стойка
3. Панель
4. Фиксатор
5. Опора
6. Болт М8х40

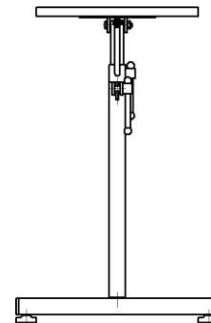

7. Гайка М8
8. Шайба 8
9. Болт М4х30
10. Гайка М4
11. Шайба 4

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Столик для манипуляций на руке СР (далее – столик) предназначен для забора крови с целью проведения лабораторных исследований, проведения манипуляций на руке (мелкого хирургического и постхирургического вмешательства: например, удаление фурункула, зашивание ран, перевязка и т.п.) в медицинских учреждениях.

1.2 Столик предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры столика, мм:

длина.....650±10
ширина.....400±10
высота.....620...1000

2.2 Габаритные размеры панели, мм:

длина.....600±10
ширина.....320±10

2.3 Масса, кг, не более.....8,5

2.4 Равномерно-распределенная нагрузка на панель, кг.....10±1

2.5 Угол наклона панели, не менее70°

2.6 Срок службы, лет, не менее.....5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблице.

Наименование	Кол., шт.	Наименование	Кол., шт.
Основание	1	Гайка М8	3
Стойка	1	Шайба 8	3
Панель	1	Болт М4х30	2
Фиксатор	2	Гайка М4	2
Опора	4	Шайба 4	2
Болт М8х40	3	Паспорт	1

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Столик (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из основания 1, стойки 2, панели 3, фиксаторов 4, регулируемых опор 5. Основание столика изготовлено из профильной трубы, стойка – из круглой трубы, с порошковым полимерным покрытием, устойчивым к обработке дезерсредствами, температурному и физическому воздействию. Панель изготовлена из ДСП, поролонa, винилискожи.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Столик поставляется потребителю в упакованном виде.

4.3 Распакуйте столик, очистите его от пыли.

4.4 Осмотрите столик для определения его состояния после транспортирования и хранения.

4.5 Соберите столик согласно рисунку. Прикрепите панель 3 к стойке 2 при помощи крепежа 9, 10, 11 и 6, 7, 8. Соедините основание 1 со стойкой 2 при помощи крепежа 6, 7, 8. С помощью регулируемых опор 5 выставьте столик на полу. Отрегулируйте высоту и наклон столика с помощью фиксаторов 4.

4.6 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата). Также допускается проводить обработку любыми дезерсредствами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации столика необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Столик в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25°С.

6.2 Хранить столик допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик для манипуляций на руке СР, заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ BY 800017554.054-2015 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ м.п.

Подпись ответственного за приемку _____