

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажами

Бандажи ортопедические поддерживающие на туловище (далее бандажи) предназначены для поддержания туловища при различных заболеваниях позвоночника и для профилактики послеоперационных осложнений. Рекомендуется носить бандажи в период обострения, при физической нагрузке, по рекомендации врача травматолога-ортопеда.

Противопоказанием к пользованию бандажами является индивидуальная непереносимость применяемых материалов.

Размер для каждого вида бандажа определяется в соответствии с таблицей 1:

- на поясничный отдел позвоночника, грудно - поясничный отдел позвоночника - обхват талии (измеряется горизонтально вокруг туловища на уровне талии через пупочную часть);
- на грудной отдел позвоночника - обхват груди (измеряется горизонтально вокруг туловища, непосредственно под основанием грудных желез).

Таблица 1

Размер	Обхват талии (для моделей 2101, 2103, 2104, 2105, 2107, 2109, 1201, 1302, 1500), см	Обхват талии (для моделей 2102, 2106, 2108, 2110), см	Обхват груди (для моделей 3600, 3700), см	Обхват груди (для модели 3800), см
XS	60-69	60-69	-	63-67
S	70-79	70-79	-	68-73
M	80-89	80-89	75-84	74-78
L	90-99	90-99	85-94	79-83
XL	100-109	100-109	95-104	84-89
XXL	110-119	110-119	105-114	90-94
XXXL	120-129	120-129	115-124	-
4XL	-	130-139	-	-

Бандажи следует надевать на нижнее белье, застёгивать на застёжку текстильную « контакт».

Все модели бандажей изготавливаются в универсальном исполнении.

Перед сном бандаж необходимо снимать.


Для обеспечения правильного ухода за бандажами необходимо:

- перед стиркой из бандажа извлечь планшеты при их наличии;
- стирку производить только ручную при температуре не выше 40С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- после стирки бандаж хорошо прополоскать в тёплой, а затем в холодной воде;
- бандаж выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивание;



- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не отбеливать, не подвергать глажению;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов
- после высыхания в бандаж вставить планшеты (при наличии);
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.

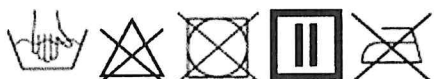

Условия эксплуатации (для климатического исполнения УХЛ категория 4.2 по ГОСТ 15150):

- температура воздуха от плюс 10°C до плюс 40°C;
- относительная влажность воздуха от 60 до 80% при плюс 25 °C.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно - ортопедический восстановительный центр».

Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Телефон для справок: (017) 308-14-34; регистратура: (017) 308-14-32.

E-mail: minsk@bpovc.by; <http://www.bpovc.by>

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.

Производственные площадки:

❖ Барановичский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 225409, г. Барановичи, ул. Царюка, 39. Телефон для справок: (0163) 64-82-52; орт.кабинет: (0163) 64-82-58. E-mail: prort@brest.by; <http://www.bpovc-bar.by>

❖ Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 210033, г. Витебск, ул. Лазо, 113. Регистратура (медкабинет): (0212) 67-14-12, магазин-прокат: (0212) 67-14-22. E-mail: vitebsk@bpovc.by; <http://www.bpovc-vitebsk.by>

❖ Гомельский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А. Регистратура: (0232) 51-72-23. E-mail: gomel@bpovc.by; <http://www.bpovc-gomel.by>

❖ Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь 230003, г. Гродно, ул. Белуша 47А. Телефон для справок: (0152) 62-42-92. E-mail: grodno@bpovc.by; <http://www.bpovc-grodno.by>

❖ Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г. Могилев, пер. Базный, 8. Телефон для справок: (0222) 74-48-91, (0222) 64-40-95, (029) 302-14-57. E-mail: mogilev@bpovc.by; <http://www.bpovc-mogilev.by>

Генеральный директор
В. А. Каневский

