

Министерство труда и социальной защиты РБ
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
Гомельский филиал
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а



Трость тактильная ТТ
Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.03.224.00.00.00 РЭ

Республика Беларусь



Директор

В. П. Каневит

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.03.224.00.00.00 РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством трости тактильной ТТ (далее - трость), условиями её эксплуатации и технического обслуживания.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Трость предназначена в качестве вспомогательного технического средства реабилитации при самостоятельном передвижении слепых и слабовидящих людей. Трость помогает ориентироваться в пространстве слепым и слабовидящим людям, обеспечивает безопасность от столкновения с препятствиями, является средством подачи сигнальных звуков. Белый цвет трости со светоотражающей плёнкой на корпусе используется в качестве предупредительного сигнала для водителей и пешеходов. Трость не может служить опорой при ходьбе.

1.1.2 Вид климатического исполнения УХЛ 1.1 ГОСТ15150.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Технические характеристики трости приведены в таблице.

Таблица

Обозначение КД	Длина, (±10), мм	Масса, (±0,02), кг	Номер рисунка
ЦСИЕ.03.224.00.00.00	900	0,258	1
-01	950	0,266	
-02	1000	0,274	
-03	1050	0,282	
-04	1100	0,290	
-05	1150	0,300	
-06	1200	0,310	
-07	900	0,222	2
-08	950	0,230	
-09	1000	0,240	
-10	1050	0,248	
-11	1100	0,256	
-12	1150	0,264	
-13	1200	0,282	
-14	1250	0,315	1
-15	1250	0,280	2

1.2.2 Срок службы – не менее 2 лет.

1.3 Устройство

1.3.1 Трость состоит (рисунки 1 и 2) из стойки 1, изготовленной из алюминиевой трубы. На нижнем конце стойки расположен металлический наконечник 2 для определения неровностей дороги, а на верхнем – ручка 3 с петлей 4 для предотвращения соскальзывания трости с руки. Трость оснащена световозвращающей плёнкой 5, расположенной в верхней части стойки 1.

1.4 Подготовка к использованию

1.4.1 Продеть руку в петлю и взять трость за ручку.

1.4.2 Трость готова к использованию.

2 Меры безопасности

2.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ в процессе эксплуатации использовать трость как опорную.

2.2 Рекомендуются обучение по применению трости не проводить в местах скопления людей.



Директор

В.А. Каневий

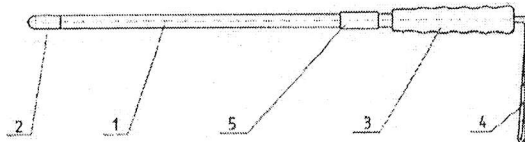


Рисунок 1

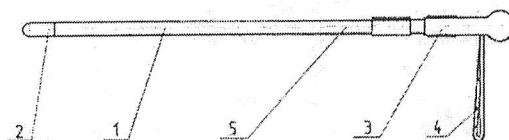


Рисунок 2

3 Техническое обслуживание

3.1 Ежедневное техническое обслуживание трости включает в себя проверку фиксации наконечника.

4 Комплектность

4.1 Комплект поставки изделия включает:

- трость - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;

5 Маркировка

5.1 Маркировка трости должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно КД;
- обозначение ТУ;
- длину изделия;
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- срок службы (лет);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для серийных изделий);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».



Директор

В. А. Калевич

6 Свидетельство о приемке

Трость тактильная ТТ ЦСИЕ.03.224.00.00.00
наименование изделия обозначение зав. номер
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями
ТУ BY 100010315.067-2011, действующей технической документацией и признана
годной для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие
требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП

личная подпись _____ расшифровка подписи _____ год, месяц, число _____

7 Свидетельство об упаковке

Трость тактильная ТТ ЦСИЕ.03.224.00.00.00
наименование изделия обозначение зав. номер
упакована РУП БПОВЦ
наименование или код изготовителя
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность _____ личная подпись _____ расшифровка подписи _____
год, месяц, число _____

8 Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации трости - 6 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

8.2 При выходе из строя трости во время гарантийного срока, трость принимается в ремонт при наличии настоящего РЭ и при условии соблюдения потребителем указанных в нем правил эксплуатации.

8.3 Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате ремонтных работ, проведенных пользователем самостоятельно или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

8.4 Гарантийный ремонт тростей производится на РУП БПОВЦ по адресу:
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а, (8-0232)-51-72-16.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 3081485.

9 Сведения о государственной регистрации


Трость является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110214.

Действительно до: 24.06.2026 г.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
Гомельский филиал: 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а,
(8-0232)-51-72-16, сайт: gomei@bpovc.by

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учет Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 308-14-34; отдел маркетинга и сбыта (017) 308-14-79; сайт: www.bpovc.by.

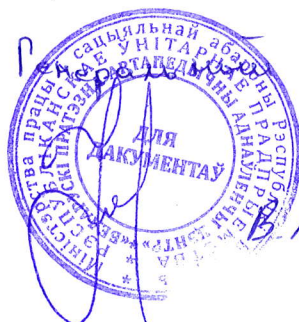

Директор

В. А. Каневит