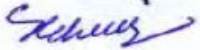
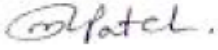
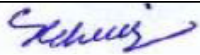
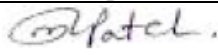


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ [КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ]

Наименование изделия	Трубка эндотрахеальная с манжетой стерильная, одноразового использования ANGELTOUCH AS-07	
Модель	AS-07	
Маркировка CE		
Наименование изготовителя	«Ангипласт Прайвит Лимитед»	
Адрес изготовителя	Участок № 4803, крыло здания IV, Корпорация промышленного развития штата Гуджарат, Ватва, Ахмадабад 382 445 [Индия]	
Описание изделия	Трубка эндотрахеальная с манжетой стерильная, одноразового использования ANGELTOUCH AS-07 состоит из прозрачной, устойчивой к перегибу, термочувствительной трубки из ПВХ, не вызывающего раздражения, стандартного коннектора, баллона, воздуховода и манжеты с обратным клапаном. Рентгеноконтрастная полоса облегчает точное расположение трубки в трахее. Благодаря закругленной гладкой форме глазка Мерфи обеспечивается атравматичная интубация и экстубация. Уплотнение, образуемое между трубкой и трахеей, при наполнении мягкого баллона, укрепленного на дистальном конце трубки, является достаточным для предотвращения попадания каких-либо выделений в легкие.	
Область применения	Эндотрахеальная трубка используется в реаниматологии при общей анестезии для восстановления проходимости дыхательных путей и при проведении искусственной вентиляции легких. Трубку вводят в трахею через нос или рот пациента, убедившись в том, что дыхательные пути не перекрыты и воздух поступает в легкие.	
Технические характеристики		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Обратный клапан с индикатором, облегчающий раздувание и спускание манжеты. ◆ Соразмерное раздувание тонкой гладкой манжеты, исключающее риски вклинения. ◆ Наконечник, подходящий для 15-мм коннектора.

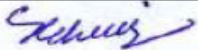
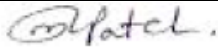
Подготовлен		Утвержден
	Страница 1	
С.А. Чристиан		М.М. Пател

Компоненты и материалы	Порядковый номер	Наименование компонента	Количество	Используемые материалы
	1	Трубка	1	Поливинилхлорид, не содержащий ДЭГФ [ПВХ]
	2	Коннектор	1	Полиэтилен высокой плотности [ПЭНД]
	3	Обратный клапан	1	Проволочная арматура: нержавеющая сталь/Клапан: АБС-пластик
	4	Индивидуальная упаковка	1	Бумажный полиэтиленовый пакет
Инструкция по применению	<p>1. Используя асептический метод, полностью раздуть манжету, чтобы убедиться в ее прочности.</p> <p>2. Перед интубацией откачать весь воздух из манжеты. Во время интубации следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить манжету.</p> <p>3. Используя асептический метод, провести интубацию пациента.</p> <p>4. После интубации раздуть манжету с использованием минимального объема воздуха, достаточного для создания необходимого уплотнения. ВНИМАНИЕ. Как правило, при раздувании манжеты должно наблюдаться незначительное сопротивление. Вследствие чего, эффективность уплотнения невозможно определить на ощупь. Рекомендуется использовать методику минимального абсорбирующего объема.</p> <p>5. Сразу после раздувания манжеты следует провести аускультацию легких. При ослаблении дыхательных шумов над одним из легочных полей или их отсутствии при аускультации отрегулировать трубку соответствующим образом.</p> <p>6. При постановке эндотрахеальной трубки следует контролировать расположение дистального конца трубки, просматриваемое на рентгенограмме грудной клетки.</p>			
Применяемый стандарт	ISO 5361:2016			
Использование изделия	Только для однократного применения			
Стерилизация	Проведена			
Метод стерилизации	Газовая стерилизация этиленоксидом			
Условия хранения	Беречь от влаги. Хранить в сухом прохладном месте.			
Подробное описание упаковки				
Индивидуальная упаковка [пакет]	Пластиковый картонный пакет, 115 мм [4,5"] x 265 мм [10,5"] x бумага: 300 г и пластик: 200 г (размеры: 3,0–4,5) Пластиковый картонный пакет, 150 мм [6"] x 355 мм [14,5"] x бумага: 300 г и пластик: 200 г (размеры: 5,0–10,0)			
Внутренняя коробка [Размеры и количество]	3 слоя, 400 мм x 165 мм x 160 мм – 25 шт.			
Упаковочная коробка [Размеры и количество]	Гофрокороб, 410 мм x 350 мм x 665 мм – 200 шт.			

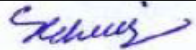
Подготовлен		Утвержден
	Страница 2	
С.А. Чристиан		М.М. Пател

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ [КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ]

Наименование изделия	Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой стерильная, одноразового использования ANGELTOUCH AS-07A	
Модель	AS-07A	
Маркировка CE		
Наименование изготовителя	«Ангипласт Прайвит Лимитед»	
Адрес изготовителя	Участок № 4803, крыло здания IV, Корпорация промышленного развития штата Гуджарат, Ватва, Ахмадабад 382 445 [Индия]	
Область применения	Изделие используется при проведении оротрахеальной или назотрахеальной интубации для восстановления проходимости дыхательных путей.	
Описание изделия	Эндотрахеальная трубка армированная с манжетой стерильная состоит из прозрачной, устойчивой к перегибу, термочувствительной трубки из ПВХ, не вызывающего раздражения, стандартного коннектора, баллона, воздуховода и манжеты с обратным клапаном. Рентгеноконтрастная полоса облегчает точное расположение трубки в трахее. Благодаря закругленной гладкой форме глазка Мерфи обеспечивается атравматичная интубация и экстубация. Уплотнение, образуемое между трубкой и трахеей, при наполнении мягкого баллона, укрепленного на дистальном конце трубки, является достаточным для предотвращения попадания каких-либо выделений в легкие.	
Технические характеристики		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Благодаря усиленной проволочной арматуре эндотрахеальной трубки возможно создание полноценного временного воздуховода при проведении интубации. ◆ Хотя трубка и является достаточно прочной для интубации, она размягчается от температуры тела, и таким образом обеспечивается соответствие строению верхних дыхательных путей. ◆ Устойчивость к перегибу, минимизация риска окклюзии трубки. ◆ Возможно проведение интубации как через рот, так и через нос. ◆ Обратный клапан, обеспечивающий эффективное и удобное раздувание и спускание манжеты. ◆ Широкий диапазон размеров по всем параметрам трахеи для детей и взрослых.

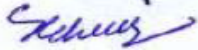
Подготовлен		Утвержден
	Страница 1	
С.А. Чристиан		М.М. Пател

Компоненты и материалы	Порядковый номер	Наименование компонента	Количество	Используемые материалы
	1	Трубка	1	Поливинилхлорид, не содержащий ДЭГФ [ПВХ]
	2	Коннектор	1	Полиэтилен высокой плотности [ПЭНД]
	3	Проволочная арматура (усиленная)/Обратный клапан	1	Нержавеющая сталь
	4	Индивидуальная упаковка	1	Бумажный полиэтиленовый пакет
Инструкция по применению	<p>1. Используя асептический метод, полностью раздуть манжету, чтобы убедиться в ее прочности.</p> <p>2. Перед интубацией откачать весь воздух из манжеты. Во время интубации следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить манжету.</p> <p>3. Используя асептический метод, провести интубацию пациента.</p> <p>4. После интубации раздуть манжету с использованием минимального объема воздуха, достаточного для создания необходимого уплотнения. ВНИМАНИЕ. Как правило, при раздувании манжеты должно наблюдаться незначительное сопротивление. Вследствие чего, эффективность уплотнения невозможно определить на ощупь. Рекомендуется использовать методику минимального абсорбирующего объема.</p> <p>5. Сразу после раздувания манжеты следует провести аускультацию легких. При ослаблении дыхательных шумов над одним из легочных полей или их отсутствии при аускультации отрегулировать трубку соответствующим образом.</p> <p>6. При постановке эндотрахеальной трубки следует контролировать расположение дистального конца трубки, просматриваемое на рентгенограмме грудной клетки.</p>			
Применяемый стандарт	ISO 5361:2016			
Использование изделия	Только для однократного применения			
Стерилизация	Проведена			
Метод стерилизации	Газовая стерилизация этиленоксидом			
Условия хранения	Беречь от влаги. Хранить в сухом прохладном месте.			
Подробное описание упаковки				
Индивидуальная упаковка [пакет]	Пластиковый картонный пакет, 115 мм [4,5"] x 265 мм [10,5"] x бумага: 300 г и пластик: 200 г (размеры: 3,0–4,5) Пластиковый картонный пакет, 150 мм [6"] x 355 мм [14,5"] x бумага: 300 г и пластик: 200 г (размеры: 5,0–10,0)			
Внутренняя коробка [Размеры и количество]	3 слоя, 400 мм x 165 мм x 160 мм – 25 шт.			
Упаковочная коробка [Размеры и количество]	Гофрокороб, 410 мм x 350 мм x 665 мм – 200 шт.			

Подготовлен		Утвержден
	Страница 2	
С.А. Чристиан		М.М. Пател

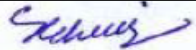
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ [КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ]

Наименование изделия	Трубка эндотрахеальная гладкой формы стерильная, одноразового использования ANGELTOUCH AS-08	
Модель	AS-08	
Маркировка CE		
Наименование изготовителя	«Ангипласт Прайвит Лимитед»	
Адрес изготовителя	Участок № 4803, крыло здания IV, Корпорация промышленного развития штата Гуджарат, Ватва, Ахмадабад 382 445 [Индия]	
Область применения	Это изделие используется для обеспечения беспрепятственного поступления газов и паров в легкие и из легких в случаях, когда легкие пациента не вентилируются должным способом.	
Описание изделия	Стерильная эндотрахеальная трубка без манжеты гладкой формы состоит из прозрачной, устойчивой к перегибу, термочувствительной трубки из ПВХ, не вызывающего раздражения, и стандартного коннектора. Обычно эндотрахеальную трубку без манжеты используют в случаях, когда у пациента не наблюдается затруднений речи.	
Технические характеристики		<p>Номинальный внутренний диаметр: размер, разделенный на 4 (в миллиметрах).</p> <p>Номинальный наружный диаметр: размер, разделенный на 3 (в миллиметрах).</p>

Подготовлен		Утвержден
	Страница 1	
С.А. Чристиан		М.М. Пател

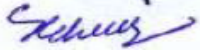
Компоненты и материалы	Порядковый номер	Наименование компонента	Количество	Используемые материалы
	1	Трубка	1	Поливинилхлорид, не содержащий ДЭГФ [ПВХ]
	2	Коннектор	1	Полиэтилен высокой плотности [ПЭНД]
	3	Индивидуальная упаковка	1	Бумажный полиэтиленовый пакет
Инструкция по применению	1. Используя асептический метод, провести интубацию пациента. 2. Провести аускультацию легких. При ослаблении дыхательных шумов над одним из легочных полей или их отсутствии при аускультации отрегулировать трубку соответствующим образом. 3. При постановке эндотрахеальной трубки следует контролировать расположение дистального конца трубки, просматриваемое на рентгенограмме грудной клетки.			
Применяемый стандарт	ISO 5361:2016			
Использование изделия	Только для однократного применения			
Стерилизация	Проведена			
Метод стерилизации	Газовая стерилизация этиленоксидом			
Условия хранения	Беречь от влаги. Хранить в сухом прохладном месте.			
Подробное описание упаковки				
Индивидуальная упаковка [пакет]	Пластиковый картонный пакет, 115 мм [4,5"] x 265 мм [10,5"] x бумага: 300 г и пластик: 200 г (размеры: 3,0–4,5) Пластиковый картонный пакет, 150 мм [6"] x 355 мм [14,5"] x бумага: 300 г и пластик: 200 г (размеры: 5,0–10,0)			
Внутренняя коробка [Размеры и количество]	3 слоя, 400 мм x 165 мм x 160 мм – 25 шт.			
Упаковочная коробка [Размеры и количество]	Гофрокороб, 410 мм x 350 мм x 665 мм – 200 шт.			

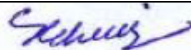
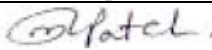
Наименование изделия	Трубка эндотрахеальная армированная гладкой формы, стерильная, одноразового использования ANGELTOUCH AS-08A
-----------------------------	--

Подготовлен		Утвержден
	Страница 2	
С.А. Чристиан		М.М. Пател

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ [КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ]

Модель	AS-08A	
Маркировка CE		
Наименование изготовителя	«Ангипласт Прайвит Лимитед»	
Адрес изготовителя	Участок № 4803, крыло здания IV, Корпорация промышленного развития штата Гуджарат, Ватва, Ахмадабад 382 445 [Индия]	
Описание изделия	<p>Стерильная эндотрахеальная армированная трубка гладкой формы без манжеты состоит из прозрачной, устойчивой к перегибу, термочувствительной трубки из ПВХ, не вызывающего раздражения, и стандартного коннектора. Обычно эндотрахеальную трубку без манжеты используют в случаях, когда у пациента не наблюдается затруднений речи. Однако при повышенном уровне выделений из подсвязочного пространства предпочтительнее использовать эндотрахеальную трубку с манжетой для предотвращения попадания выделений в легкие.</p>	
Область применения	Изделие используется при проведении оротрахеальной или назотрахеальной интубации для восстановления проходимости дыхательных путей.	
Технические характеристики		<ul style="list-style-type: none"> ◆Благодаря усиленной проволоочной арматуре эндотрахеальной трубки создается полноценный временный воздуховод при проведении интубации. ◆Хотя трубка и является достаточно прочной для интубации, она размягчается от температуры тела, и таким образом обеспечивается соответствие строению верхних дыхательных путей. ◆Устойчивость к перегибу, минимизация риска окклюзии трубки. ◆Возможно проведение интубации как через рот, так и через нос. ◆Обратный клапан, обеспечивающий эффективное и удобное раздувание и спускание манжеты. ◆Широкий диапазон размеров по всем параметрам трахеи для детей и взрослых.

Подготовлен		Утвержден
	Страница 1	
С.А. Чристиан		М.М. Пател

Компоненты и материалы	Порядковый номер	Наименование компонента	Количество	Используемые материалы
	1	Трубка	1	Поливинилхлорид, не содержащий ДЭГФ [ПВХ]
	2	Коннектор	1	Полиэтилен высокой плотности [ПЭНД]
	4	Индивидуальная упаковка	1	Бумажный полиэтиленовый пакет
	3	Проволочная арматура (усиленная)/Обратный клапан	1	Нержавеющая сталь
Инструкция по применению	<p>1. Используя асептический метод, полностью раздуть манжету, чтобы убедиться в ее прочности.</p> <p>2. Перед интубацией полностью откачать воздух из манжеты. Во время интубации следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить манжету.</p> <p>3. Используя асептический метод, провести интубацию пациента.</p> <p>4. После интубации раздуть манжету с использованием минимального объема воздуха, достаточного для создания необходимого уплотнения.</p> <p>5. ВНИМАНИЕ. Как правило, при раздувании манжеты должно наблюдаться незначительное сопротивление. Вследствие чего, эффективность уплотнения невозможно определить на ощупь. Рекомендуется использовать методику минимального абсорбирующего объема.</p> <p>6. Сразу после раздувания манжеты следует провести аускультацию легких. При ослаблении дыхательных шумов над одним из легочных полей или их отсутствии при аускультации отрегулировать трубку соответствующим образом.</p> <p>7. При постановке эндотрахеальной трубки следует контролировать расположение дистального конца трубки, просматриваемое на рентгенограмме грудной клетки.</p>			
Применяемый стандарт	ISO 5361:2016			
Использование изделия	Только для однократного применения			
Стерилизация	Проведена			
Метод стерилизации	Газовая стерилизация этиленоксидом			
Условия хранения	Беречь от влаги. Хранить в сухом прохладном месте.			
Подробное описание упаковки				
Индивидуальная упаковка [пакет]	Пластиковый картонный пакет, 115 мм [4,5"] x 265 мм [10,5"] x бумага: 300 г и пластик: 200 г (размеры: 3,0–4,5) Пластиковый картонный пакет, 150 мм [6"] x 355 мм [14,5"] x бумага: 300 г и пластик: 200 г (размеры: 5,0–10,0)			
Внутренняя коробка [Размеры и количество]	3 слоя, 400 мм x 165 мм x 160 мм – 25 шт.			
Упаковочная коробка [Размеры и количество]	Гофрокороб, 410 мм x 350 мм x 665 мм – 200 шт.			
Подготовлен				Утвержден
		Страница 2		
С.А. Чристиан				М.М. Пател

