

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кресло косметологическое

Ballerine 1, Ballerine 2, Ballerine 3, Ballerine 4



Ballerine 1



Ballerine 2



Ballerine 3



Ballerine 4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания 230 В,
- Частота 50 Гц,
- Потребляемая мощность 150 Вт,
- Масса – 55 кг,
- Длина кресла, разложенного горизонтально не более 2000 мм,
- Высота кресла, разложенного горизонтально, 580 – 770 мм,
- Грузоподъемность до 110 кг

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОДУШЕК СЕКЦИЙ

- Верхняя (спинка): 860 x 620 мм, наклон 80⁰,
- Средняя (сиденье): 460 x 620 мм, наклон 20⁰,
- Нижняя (подушка для ног): 610 x 600 мм, наклон 85⁰.

НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кресла косметологические предназначены для удобного размещения пациента при проведении различных лечебных процедур, а также для обеспечения оптимальных условий работы медицинского персонала.

Кресла косметологические применяются для оснащения рабочего места косметологических кабинетов, педикюрных салонов, центров оздоровления. Кресла позволяют расположить пациента в позициях от лежачей до сидячей, с возможностью выбора требуемого наклона позвоночника и фиксации наиболее комфортного положения (позы) для пациента и удобной для специалиста во время проведения процедуры.

Кресла косметологические регулируются с помощью пульта дистанционного управления. Регулировка высоты и наклона осуществляется автоматически четырьмя приводами для каждой секции кресла отдельно.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Пульт оснащен кнопками: «выбрать», «поднять» и «опустить».

Нажимая кнопку выбрать, Вы выбираете секцию, которую необходимо отрегулировать. Светящийся на дисплее светодиод (индикатор) показывает какой привод готов к работе и какую секцию можно отрегулировать. Нажимая кнопки поднять и опустить, Вы регулируете нужный угол наклона выбранной секции кресла.



Рисунок 1.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ КРЕСЕЛ

Кресла легко содержать в чистоте. Материал можно чистить влажной тканью и мыльным раствором. После каждого использования необходимо проводить дезинфекцию традиционными средствами такими как: Спитадерм или 70% салициловый спирт. Рекомендуем использовать для покрытия кресел сменные чехлы, облегчающие поддержку чистоты.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не перегружать. Допустимый вес человека, сажающегося в кресло – 110 кг.
- Садится исключительно на сидение.
- Предохранять от влажности и пыли.
- Кресло не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или сервисной службы.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях. При хранении не допускается наличие в окружающей среде паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.п.).

Транспортировать кресла следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Утилизация осуществляется в соответствии с правилами утилизации медицинских изделий и медицинской техники, установленными в нормативных документах страны-потребителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации кресла - не менее 24 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - не менее 6 месяцев со дня продажи.

За критерий предельного состояния принимается такое состояние кресла, при котором восстановление его работоспособности и электробезопасности невозможно или экономически нецелесообразно.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Адрес места осуществления работ по гарантийному и сервисному обслуживанию медицинского изделия: 223018, Минская область, Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул. Ратомская, дом № 1Б, оф.60.

По всем вопросам принятия претензий по эксплуатации и качеству на продукцию на территории Республики Беларусь Вам следует обращаться к **уполномоченному лицу ООО «Эстетика и медицина»**, находящемуся по адресу: 223018, Минская область, Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул. Ратомская, дом № 1Б, оф.6.

тел. + 375 44 511-02-22

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ НА МАРКИРОВКЕ:



-Изделие типа В



- «Внимание, обратитесь к эксплуатационным документам»

Производитель

«Biomak» Sylwester Kielbowski i Karol Kielbowski Spółka Jawna («Biomak» sp.j.)
ul. Słóńskiego 13, 05-820 Piastów, Polska

ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЗАКАЗУ ООО «Эстетика и медицина»

223018, Минская область, Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул. Ратомская, дом № 1Б, оф.6.

Biomak Sylwester Kiełbowski i Karol
Kiełbowski Spółka Jawna («Biomak» Sp.j.)

Уполномоченный представитель
производителя по доверенности от

30.07.2024

Симоненко О.В.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стол массажный RELAX



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- напряжение питания 230 В,
- частота 50 Гц,
- потребляемая мощность 100 Вт,
- масса не более 70 кг,
- общая длина стола 1980 мм,
- длина подголовника 560 мм,
- минимальная высота стола, разложенного горизонтально, 540 мм,
- максимальная высота стола, разложенного горизонтально, 945 мм,
- ширина стола 700 мм,
- грузоподъемность до 150кг.

НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стол массажный RELAX (далее стол) предназначен для проведения лечебного массажа в лечебных учреждениях.

Стол массажный применяется для оснащения рабочего места массажных кабинетов, салонов красоты, центров оздоровления при проведении профессионального массажа. Высота стола регулируется с помощью электрического механизма, положение подголовника изменяется вручную. Изменение высоты стола позволяет самому массажисту не приспосабливаться при выполнении каждого приема к той или иной высоте, а выполнять их в оптимальном положении. Стол установлен на колесах и на ножках. Колеса позволяют свободно переставлять стол в нужное место. Есть возможность блокировки колес. Ножки обеспечивают надёжную фиксацию стола на месте установки. Дополнительное удобство применения обеспечивается благодаря наличию кнопок управления электрическим механизмом подъема и опускания, доступных с обеих сторон стола.

СПОСОБ УСТАНОВКИ И РЕГУЛИРОВКИ

Регулировка высоты стола

У стола имеются кнопки управления электрическим механизмом подъема и опускания стола.

Нажимая кнопки, можем изменять высоту стола (рисунок 1).

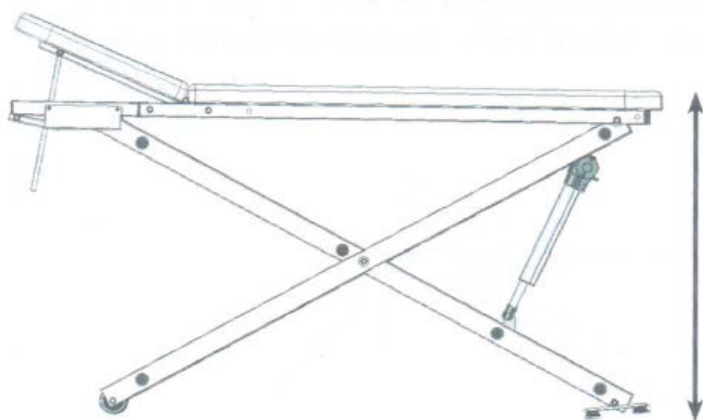


Рисунок 1.

Установка и регулировка подголовника

Способ установки и регулировки подголовника прост, тем не менее следует соблюдать осторожность при изменении положения и убедиться в том, что блокировочный механизм зафиксирован!

Доступ к блокировочному механизму со всех сторон свободный.

Чтобы поднять вверх подголовник его следует просто осторожно поднять вверх, не дотрагиваясь до блокировочного механизма.

Чтобы опустить подголовник как показано на рисунке 2, необходимо держать подголовник рукой и одновременно поднять вверх блокировочный механизм (стрелка на рисунке 3).

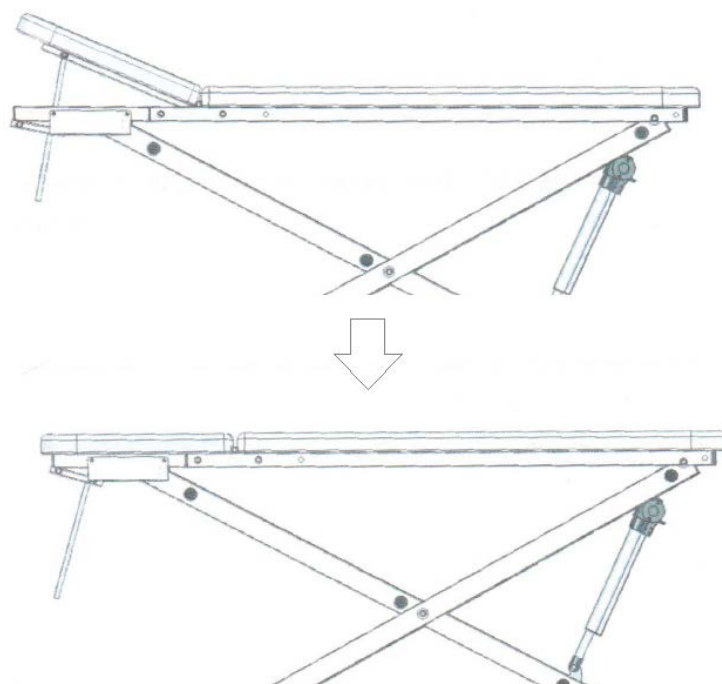


Рисунок 2

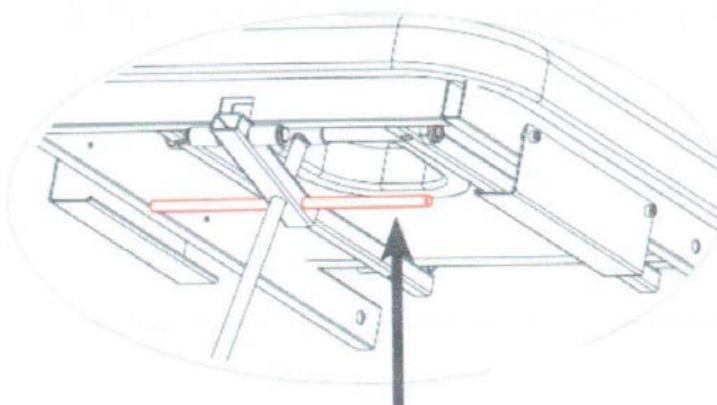


Рисунок 3.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Стол легко содержать в чистоте. Материал можно чистить влажной тканью и мыльным раствором. После каждого использования необходимо проводить дезинфекцию традиционными средствами такими как: Спитадерм или 70% салициловый спирт. Рекомендуем использовать для покрытия стола сменные чехлы, облегчающие поддержку чистоты.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не перегружать. Допустимый вес человека, лежащего на столе – 150 кг.
- Не садится на поднятый подголовник.
- Предохранять от влажности и пыли.
- Стол не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, получаемым у изготовителя или сервисной службе.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях. При хранении не допускается наличие в окружающей среде паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.п.).

Транспортировать стол следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Утилизация осуществляется в соответствии с правилами утилизации медицинских изделий и медицинской техники, установленными в нормативных документах страны-потребителя.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие стола требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - не менее 24 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения - не менее 6 месяцев со дня продажи.

За критерий предельного состояния принимается такое состояние стола, при котором восстановление его работоспособности и электробезопасности невозможно или экономически нецелесообразно.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Адрес места осуществления работ по гарантийному и сервисному обслуживанию медицинского изделия: 223018, Минская область, Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул. Ратомская, дом № 1Б, оф.60.

По всем вопросам принятия претензий по эксплуатации и качеству на продукцию на территории Республики Беларусь Вам следует обращаться к **уполномоченному лицу ООО «Эстетика и медицина»**, находящемуся по адресу: 223018, Минская область, Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул. Ратомская, дом № 1Б, оф.6.

тел. + 375 44 511-02-22

ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА МАРКИРОВКЕ



- Изделие типа В



«Внимание, обратитесь к эксплуатационным документам»

Производитель

«Biomak» Sylwester Kielbowski i Karol Kielbowski Spółka Jawna («Biomak» sp.j.)
ul. Słońskiego 13, 05-820 Piastów, Polska (Польша)

ПРОИЗВЕДЕНО ПО ЗАКАЗУ ООО «Эстетика и медицина»

223018, Минская область, Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Тарасово, ул. Ратомская, дом
№ 1Б, оф.6.

Biomak Sylwester Kiebowski i Karol
Kiebowski Spółka Jawna («Biomak» Sp.j.)

Уполномоченный

представитель

производителя

на

доверенности

от

30.07.2024

Симоненко О.В.

