
УТВЕРЖДАЮ
Директор по качеству ООО «Киевгума
Буткевич А.С.
02 2019 г

Инструкция по медицинскому применению изделия медицинского назначения

Название изделия медицинского назначения.
Кружка Эсмарха резиновая № 1, № 2, № 3.
Состав и описание изделия.
Кружка Эсмарха представляет собой резиновый баллон вместимостью: № 1-(0,8±0,10)литра , № 2 (1,5±0,15) литра и № 3 - (2,5±0,25) литра со штуцером, трубкой, наконечниками, наконечником маточным, зажимом или поворотным краном. Кружка предназначена для санитарно-гигиенических целей (спринцевания и промывания) при индивидуальном применении или в лечебных учреждениях.
Наименование и (или) товарный знак организации-производителя.
ООО "Киевгума" (УКРАИНА).
Область применения.
В медицинских учреждениях и в быту
Комплектность.
- трубка,
- наконечники,
- наконечник маточный,
- зажим.

Способ применения.
Протереть снаружи кружку марлевым тампоном, смоченным в 3% по массе растворе перекиси водорода дважды с интервалом в 15 минут. Перед применением и после эксплуатации кружку и ее составные части промыть горячей (не выше 90°С) водой, затем промыть проточной или кипяченой водой. Высушить при комнатной температуре. Наконечник перед применением и после эксплуатации промыть теплой водой с мылом (при индивидуальном использовании),или обработать в течение 60 минут в 6% по массе растворе перекиси водорода (в случае использования в лечебных учреждениях), затем промыть проточной и кипяченой водой.
Если кружка в разобранном виде, следует на свободный конец штуцера одеть трубку.

Трубку провести через оба отверстия зажима (положение «открыто» - см. рис.). В другой конец трубки вставить наконечник (при промывании) или маточный наконечник (при спринцевании). Собранную в систему кружку подвесить за петлю.
Перевести зажим в положение «закрыто», нажав пальцем на фиксатор зажима с максимальным усилием до щелчка (см. рис.). В горловину кружки залить требуемое количество лекарственного раствора. Во время проведения процедуры перевести зажим в положение «открыто», нажав пальцем на зубчастую часть фиксатора, что обеспечит свободное истечение жидкости из кружки. По окончании санитарно-гигиенической процедуры зажим перевести в положение «закрыто».

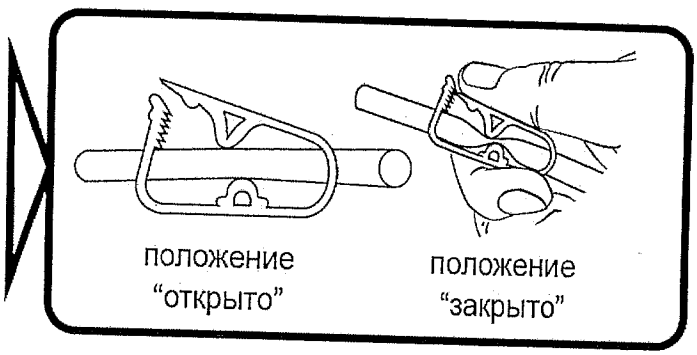

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Условия хранения.

Хранить кружку следует в помещении при температуре от 5°С до плюс 25°С на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов. После транспортирования при отрицательных температурах, кружки выдержать в упаковке в течение суток в нормальных климатических условиях. Не допускать воздействия на кружку кислот, щелочей, растворителей и других веществ, разрушающих изделие.

Срок годности.

Изготовитель гарантирует качество кружки при соблюдении условий хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок хранения кружки – 3 года с момента изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Организация-производитель. Завод-изготовитель ООО «Киевгума»
Юридический адрес. Украина, 07400, Киевская область, г. Бровары, ул. Кутузова, 127
e-mail: zbut@kievguma.ua, www.kievguma.ua
+38(044)364-56-72; +38(044)364-56-74

С рекламациями обращаться в установленном порядке по адресу импортеров/ уполномоченных представителей:

Изготовлены по ТУ У 25.1-00152253-039-2004

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru