Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

Бандаж для легкой фиксации шейного отдела позвоночника, для новорожденных ТВ - «ТРИВЕС»

Модель: ТВ-000

Описание:
- изготовлен из пенополиуретана, снабжен контактной лентой (застежка «Велкро»);
- имеет анатомическую форму с выемкой под подбородок;
- основной и дополнительный съемный чехлы изготовлены из хлопка, приятны к телу, не вызывают раздражения кожи;
- производится в двух цветах – бежевом и черном.

Функции:
- легкая фиксация шейного отдела позвоночника и головы;
- разгрузка тел шейных позвонков и мышечно-связочного аппарата шеи;
- нормализация кровообращения головы и шеи;
- ограничение движения в шейном отделе позвоночника.


Показания к применению:
- родовая черепно-спинальная травма и нарушения мозгового кровообращения у новорожденных;
- в комплексном лечении мышечной кривошеи;
- ушибы, миозиты, ротационный подвывих 1-го и 2-го шейных позвонков;
- патологическая установка головы у детей с легкими формами детского церебрального паралича;
- реабилитация после травм и операций на шейном отделе позвоночника;
- родоразрешение путем Кесарева сечения, наложения акушерских щипцов;
- нарушения тонуса, несостоятельность мышц шеи;
- осложнения со стороны ЦНС у новорожденных.

Противопоказания к применению:
Абсолютных противопоказаний не выявлено.
Относительные противопоказания, требуют консультации врача:
- открытые раны в области использования бандажа;
- дерматологические заболевания кожи в области применения бандажа.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Условия применения изделия:
В зависимости от патологии режим ношения назначается только лечащим врачом.

Инструкция к применению:
Выберите необходимую высоту бандажа, измерив расстояние от ветви нижней челюсти до ключицы (см. рисунок).
Расположите бандаж на шее выемкой под подбородок. Зафиксируйте контактной лентой (застежкой «Велкро») сзади.

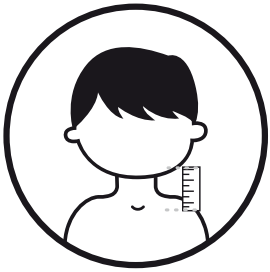

Режим и сроки ношения определяются лечащим врачом или специалистом.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу. Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.


Уход за изделием и хранение:

- перед стиркой застегните все застежки;
- изделие можно стирать по мере загрязнения вручную, в теплом мыльном растворе (при температуре не выше 30 градусов по Цельсию);
- не применять машинную стирку;
- не стирать совместно с другим бельем или изделиями (особенно имеющими ворсистую структуру или подверженными возникновению зацепок);
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- не рекомендуется выкручивать или сильно отжимать изделие;
- сушить в расправленном виде на открытом воздухе вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Гарантийные обязательства распространяются при условии соблюдения правил хранения, использования и ухода за изделием.

Состав:

- основа: пенополиуретан;
- основной чехол: хлопок – 92%, лайкра – 8%;
- дополнительный съемный чехол: хлопок – 92%, лайкра – 8%.

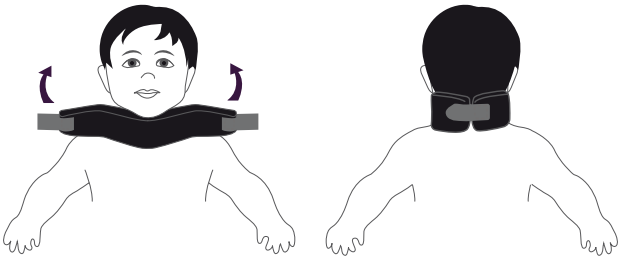

Артикул	ТВ-000 (2.7-27)	ТВ-000 (3.5-32)	ТВ-000 (4.0-33)
Высота изделия, см	2,7	3,5	4
Длина изделия, см	27	32	33

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.

Бандажи для фиксации шейного отдела позвоночника ТВ – «ТРИВЕС» по ТУ 9396-001-85557773-2008 в следующих исполнениях:
Бандаж для легкой фиксации шейного отдела позвоночника,
для новорожденных ТВ-«ТРИВЕС» (вид 182800).
РУ № ФСР 2008/03802 от 19.09.2016 г.

Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи,
срок хранения 5 лет.
Производитель – уполномоченная организация
по принятию претензий: ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ»,
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 4/1
Тел./факс: (812) 329-72-97
e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives-spb.ru

ISCO международный центр стандартизации и сертификации
ISO 13485-2003

30°

Дата выпуска
Штамп ОТК

Дата продажи
Штамп торг. организации

Trives

MED



ТВ-000

ПРИ НАРУШЕНИЯХ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА

БАНДАЖ

ДЛЯ ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

- ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
- ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
- ЧЕХОЛ ИЗ ХЛОПКА

Модель	ТВ-000
Высота изделия, см	3.5

БАНДАЖ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ТВ – «ТРИВЕС»

Модель: ТВ-000

Особенности:
- изготовлен из пенополиуретана
- снабжен контактной лентой (застежка «Велкро»)
- имеет чехол из хлопка

Функции:
- легкая фиксация шейного отдела позвоночника и головы
- разгрузка тел шейных позвонков и мышечно-связочного аппарата шеи
- нормализация кровообращения головы и шеи
- ограничение движения в шейном отделе позвоночника

Назначение:
- родовая черепно-спинальная травма и нарушения мозгового кровообращения у новорожденных
- в комплексном лечении мышечной кривошеи
- ушибы, миозиты, ротационный подвывих 1-го и 2-го шейных позвонков
- патологическая установка головы у детей с легкими формами детского церебрального паралича
- реабилитация после травм и операций на шейном отделе позвоночника

Противопоказания к применению:
Абсолютных противопоказаний не выявлено.
Относительные противопоказания, требуют консультации врача:
- открытые раны в области использования бандажа
- дерматологические заболевания кожи в области применения бандажа

Применять изделие по назначению и под контролем врача.



Инструкция по применению:
- выбрать необходимую высоту бандажа, измерив длину от ветви нижней челюсти до ключицы (см. рисунок)
- расположить бандаж на шее выемкой под подбородок
- зафиксировать контактной лентой (застежка «Велкро») сзади
- режим и срок ношения определяются врачом

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:
- ручная стирка при температуре не более 30°С
- не использовать отбеливатели, растворители и химическую чистку
- не отжимать, не гладить утюгом
- держать вдали от нагревательных приборов
- не подвергать воздействию прямого солнечного света

Состав: основа – пенополиуретан, чехол: хлопок – 100%.
Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.

Бандажи для фиксации шейного отдела позвоночника ТВ – «ТРИВЕС» по ТУ 9396-001-85557773-2008 в следующих исполнениях:
Бандаж для легкой фиксации шейного отдела позвоночника, для новорожденных ТВ–«ТРИВЕС» (вид 182800).
РУ № ФСР 2008/03802 от 19.09.2016 г.

Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи, срок хранения 5 лет.

Производитель – уполномоченная организация по принятию претензий:
ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ»,
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская, д. 4/1
Тел./факс: (812) 329-72-97
e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives-spb.ru

ISCO международный центр стандартизации и сертификации
ISO 13485-2003



Дата выпуска
Штамп ОТК

Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

Бандаж для легкой фиксации шейного отдела позвоночника, для детей грудничкового возраста ТВ – «ТРИВЕС»

Модель: ТВ-001

Описание:

- изготовлен из пенополиуретана, снабжен контактной лентой (застежка «Велкро»);
- имеет анатомическую форму с выемкой под подбородок;
- основной и дополнительный съемный чехлы изготовлены из хлопка, приятны к телу, не вызывают раздражения кожи;
- производится в двух цветах – бежевом и черном.

Функции:

- легкая фиксация шейного отдела позвоночника и головы;
- разгрузка тел шейных позвонков и мышечно-связочного аппарата шеи;
- нормализация кровообращения головы и шеи;
- ограничение движения в шейном отделе позвоночника.

Показания к применению:

- родовая черепно-спинальная травма и нарушения мозгового кровообращения у новорожденных;
- в комплексном лечении мышечной кривошеи;
- ушибы, миозиты, ротационный подвывих 1-го и 2-го шейных позвонков;
- патологическая установка головы у детей с легкими формами детского церебрального паралича;
- реабилитация после травм и операций на шейном отделе позвоночника.

Бандаж для легкой фиксации шейного отдела позвоночника, детский ТВ - «ТРИВЕС»

Модель: ТВ-002

Описание:

- изготовлен из пенополиуретана, снабжен контактной лентой (застежка «Велкро»);
- имеет анатомическую форму с выемкой под подбородок;
- основной и дополнительный съемный чехлы изготовлены из хлопка, приятны к телу, не вызывают раздражения кожи;
- производится в двух цветах – бежевом и черном.

Функции:

- легкая фиксация шейного отдела позвоночника и головы;
- разгрузка тел шейных позвонков и мышечно-связочного аппарата шеи;
- нормализация кровообращения головы и шеи;
- ограничение движения в шейном отделе позвоночника.

Показания к применению:

- в комплексном лечении мышечной кривошеи;
- шейные миозиты;
- реабилитация после травм и операций на шейном отделе позвоночника;
- гиперкинезы в шейном отделе позвоночника;
- остеохондропатии и дисплазии шейного отдела позвоночника;
- сохранение достигнутой коррекции смещения шейных позвонков.

Противопоказания к применению:

Абсолютных противопоказаний не выявлено.
Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- открытые раны в области использования бандажа;
- дерматологические заболевания кожи в области применения бандажа.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Условия применения изделия:

В зависимости от патологии режим ношения назначается только лечащим врачом.



Инструкция к применению:

Выберите необходимую высоту бандажа, измерив расстояние от ветви нижней челюсти до ключицы (см. рисунок).
Расположите бандаж на шее выемкой под подбородок. Зафиксируйте контактной лентой (застежкой «Велкро») сзади.

Режим и сроки ношения определяются лечащим врачом или специалистом.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.


Уход за изделием и хранение:

- перед стиркой застегните все застежки;
- изделие можно стирать по мере загрязнения вручную, в теплом мыльном растворе (при температуре не выше 30 градусов по Цельсию);
- не применять машинную стирку;
- не стирать совместно с другим бельем или изделиями (особенно имеющими ворсистую структуру или подверженными возникновению зацепок);
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- не рекомендуется выкручивать или сильно отжимать изделие;
- сушить в расправленном виде на открытом воздухе вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Гарантийные обязательства распространяются при условии соблюдения правил хранения, использования и ухода за изделием.

Состав:

- основа: пенополиуретан;
- основной чехол: хлопок – 92%, лайкра – 8%;
- дополнительный съемный чехол: хлопок – 92%, лайкра – 8%.

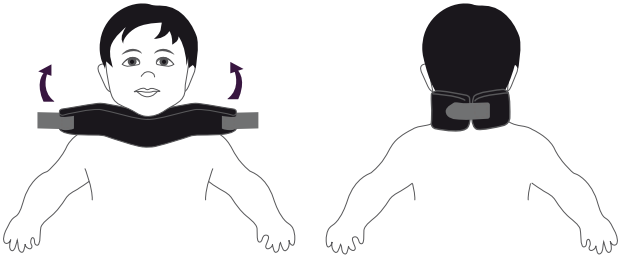

Артикул	ТВ-001 (5.0-36)	ТВ-002 (6.5-36)	ТВ-002 (6.5-42)	ТВ-002 (8.0-36)	ТВ-002 (8.0-42)
Высота изделия, см	5	6,5	6,5	8	8
Длина изделия, см	36	36	42	36	42

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.

Бандажи для фиксации шейного отдела позвоночника ТВ – «ТРИВЕС» по ТУ 9396-001-85557773-2008 в следующих исполнениях:
- Бандаж для легкой фиксации шейного отдела позвоночника, для детей грудничкового возраста ТВ-«ТРИВЕС» (вид 182800);
- Бандаж для легкой фиксации шейного отдела позвоночника, детский ТВ-«ТРИВЕС» (вид 182800).

РУ № ФСР 2008/03802 от 19.09.2016 г.

Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи,
срок хранения 5 лет.

Производитель – уполномоченная организация по принятию претензий: ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ»,
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 4/1
Тел./факс: (812) 329-72-97
e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives-spb.ru

ISCO международный центр стандартизации и сертификации
ISO 13485-2003



Дата выпуска
Штамп ОТК

Дата продажи
Штамп торг. организации

Trives

MED



ТВ-001

БАНДАЖ

ДЛЯ ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ

ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

ЧЕХОЛ ИЗ ХЛОПКА

ПРИ НАРУШЕНИЯХ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Модель	ТВ-001
Высота изделия, см	5

БАНДАЖ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУДНИЧКОВОГО ВОЗРАСТА ТВ – «ТРИВЕС»

Модель: ТВ-001

Особенности:
- изготовлен из пенополиуретана
- снабжен контактной лентой (застежка «Велкро»)
- имеет чехол из хлопка


Функции:
- легкая фиксация шейного отдела позвоночника и головы
- разгрузка тел шейных позвонков и мышечно-связочного аппарата шеи
- нормализация кровообращения головы и шеи
- ограничение движения в шейном отделе позвоночника

Назначение:
- родовая черепно-спинальная травма и нарушения мозгового кровообращения у новорожденных
- в комплексном лечении мышечной кривошеи
- ушибы, миозиты, ротационный подвывих 1-го и 2-го шейных позвонков
- патологическая установка головы у детей с легкими формами детского церебрального паралича
- реабилитация после травм и операций на шейном отделе позвоночника

Противопоказания к применению:
Абсолютных противопоказаний не выявлено.
Относительные противопоказания, требуют консультации врача:
- открытые раны в области использования бандажа
- дерматологические заболевания кожи в области применения бандажа

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Инструкция по применению:
- выбрать необходимую высоту бандажа, измерив длину от ветви нижней челюсти до ключицы (см. рисунок)
- расположить бандаж на шее выемкой под подбородок
- зафиксировать контактной лентой (застежка «Велкро») сзади
- режим и срок ношения определяются врачом

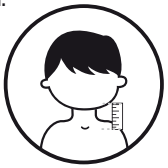

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:
- ручная стирка при температуре не более 30°С
- не использовать отбеливатели, растворители и химическую чистку
- не отжимать, не гладить утюгом
- держать вдали от нагревательных приборов
- не подвергать воздействию прямого солнечного света

Состав: основа – пенополиуретан, чехол: хлопок – 100%.
Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.

Бандажи для фиксации шейного отдела позвоночника ТВ – «ТРИВЕС»
по ТУ 9396-001-85557773-2008 в следующих исполнениях:
Бандаж для легкой фиксации шейного отдела позвоночника,
для детей грудничкового возраста ТВ–«ТРИВЕС» (вид 182800).
РУ № ФСР 2008/03802 от 19.09.2016 г.

Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи,
срок хранения 5 лет.

Производитель – уполномоченная организация по принятию претензий:
ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ»,
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская, д. 4/1
Тел./факс: (812) 329-72-97
e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives-spb.ru

ISCO международный центр стандартизации и сертификации
ISO 13485-2003

30°

Дата выпуска
Штамп ОТК

Trives

MED



ТВ-002

БАНДАЖ

ДЛЯ ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

- ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
- ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
- ЧЕХОЛ ИЗ ХЛОПКА

ПРИ НАРУШЕНИЯХ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Модель	ТВ-002
Высота изделия, см	8

4 602866 021067

БАНДАЖ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ДЕТСКИЙ ТВ – «ТРИВЕС»

Модель: ТВ-002


Особенности:
- изготовлен из пенополиуретана
- снабжен контактной лентой (застежка «Велкро»)
- имеет чехол из хлопка

Функции:
- легкая фиксация шейного отдела позвоночника и головы
- разгрузка тел шейных позвонков и мышечно-связочного аппарата шеи
- нормализация кровообращения головы и шеи
- ограничение движения в шейном отделе позвоночника

Назначение:
- в комплексном лечении мышечной кривошеи
- шейные миозиты
- реабилитация после травм и операций на шейном отделе позвоночника
- гиперкинезы в шейном отделе позвоночника
- остеохондропатии и дисплазии шейного отдела позвоночника
- сохранение достигнутой коррекции смещения шейных позвонков

Противопоказания к применению:
Абсолютных противопоказаний не выявлено.
Относительные противопоказания, требуют консультации врача:
- открытые раны в области использования бандажа
- дерматологические заболевания кожи в области применения бандажа

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

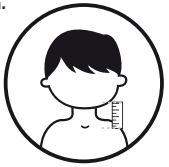

Инструкция по применению:
- выбрать необходимую высоту бандажа, измерив длину от ветви нижней челюсти до ключицы (см. рисунок)
- расположить бандаж на шее выемкой под подбородок
- фиксировать контактной лентой (застежка «Велкро») сзади
- режим и срок ношения определяются врачом

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:
- ручная стирка при температуре не более 30°С, не использовать отбеливатели, растворители и химический метод чистки
- не отжимать, не гладить утюгом
- держать вдали от нагревательных приборов, не подвергать воздействию прямого солнечного света

Состав: основа – пенополиуретан; чехол: хлопок – 100%.
Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.

Бандажи для фиксации шейного отдела позвоночника ТВ–«ТРИВЕС» по ТУ 9396-001-85557773-2008 в следующих исполнениях:
Бандаж для легкой фиксации шейного отдела позвоночника, детский ТВ–«ТРИВЕС» (вид 182800).
РУ № ФСР 2008/03802 от 19.09.2016 г.

Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи, срок хранения 5 лет.

Производитель – уполномоченная организация по принятию претензий:
ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ»,
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 4/1
Тел./факс: (812) 329-72-97
e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives-spb.ru

ISO 13485-2003

Дата выпуска
Штамп ОТК

Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

Бандаж для легкой фиксации шейного отдела позвоночника, для взрослых ТВ - «ТРИВЕС»

Модели: ТВ-003

Описание:
- изготовлен из пенополиуретана, снабжен контактной лентой (застежка «Велкро»);
- имеет анатомическую форму с выемкой под подбородок;
- основной и дополнительный съемный чехлы изготовлены из хлопка, приятны к телу, не вызывают раздражения кожи;
- производится в двух цветах – бежевом и черном.

Функции:
- легкая фиксация шейного отдела позвоночника и головы;
- разгрузка мышечно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника, межпозвонковых дисков и тел позвонков;
- нормализация кровообращения в шейном отделе позвоночника и голове;
- согревающий эффект;
- ограничение движения в шейном отделе позвоночника.

Показания к применению:
- нестабильность шейного отдела позвоночника, головные боли, головокружения;
- ушибы, растяжения, миозиты, ротационный подвывих 1-го и 2-го шейных позвонков в остром, подостром и восстановительном периодах;
- остеохондроз и спондилоартроз с болевым и корешковым синдромом;
- период реабилитации после травм и операций на шейном отделе позвоночника;
- период восстановления после жесткой фиксации шеи и головы (гипсовой повязкой или воротником жесткой фиксации);
- при ожогах шеи для профилактики образования тянущих рубцов;
- профилактика перенапряжения мышц шеи у здоровых людей при длительной сидячей работе, поездках и т.д.

Противопоказания к применению:
Абсолютных противопоказаний не выявлено.
Относительные противопоказания, требуют консультации врача:
- открытые раны в области использования бандажа;
- дерматологические заболевания кожи в области применения бандажа.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.



Условия применения изделия:
В зависимости от патологии режим ношения назначается только лечащим врачом.

Инструкция к применению:
Выберите необходимую высоту бандажа, измерив расстояние от ветви нижней челюсти до ключицы (см. рисунок).
Расположите бандаж на шее выемкой под подбородок. Зафиксируйте контактной лентой (застежкой «Велкро») сзади.

Режим и сроки ношения определяются лечащим врачом или специалистом.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу. Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.


Уход за изделием и хранение:

- перед стиркой застегните все застежки;
- изделие можно стирать по мере загрязнения вручную, в теплом мыльном растворе (при температуре не выше 30 градусов по Цельсию);
- не применять машинную стирку;
- не стирать совместно с другим бельем или изделиями (особенно имеющими ворсистую структуру или подверженными возникновению зацепок);
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- не рекомендуется выкручивать или сильно отжимать изделие;
- сушить в расправленном виде на открытом воздухе вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Гарантийные обязательства распространяются при условии соблюдения правил хранения, использования и ухода за изделием.

Состав:

- основа: пенополиуретан;
- основной чехол: хлопок – 92%, лайкра – 8%;
- дополнительный съемный чехол: хлопок – 92%, лайкра – 8%.

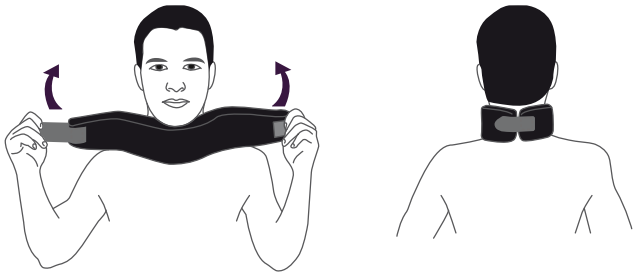

Артикул	ТВ-003 (8.0-50)	ТВ-003 (9.0-50)
Высота изделия, см	8	9
Длина изделия, см	50	50

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.

Бандажи для фиксации шейного отдела позвоночника ТВ – «ТРИВЕС» по ТУ 9396-001-85557773-2008 в следующих исполнениях:
Бандаж для легкой фиксации шейного отдела позвоночника, для взрослых ТВ-«ТРИВЕС» (вид 182800).
РУ № ФСР 2008/03802 от 19.09.2016 г.

Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи,
срок хранения 5 лет.
Производитель – уполномоченная организация по принятию претензий: ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ»,
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 4/1
Тел./факс: (812) 329-72-97
e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives-spb.ru

ISCO международный центр стандартизации и сертификации
ISO 13485-2003




Дата выпуска
Штамп ОТК

Дата продажи
Штамп торг. организации

Trives

MED



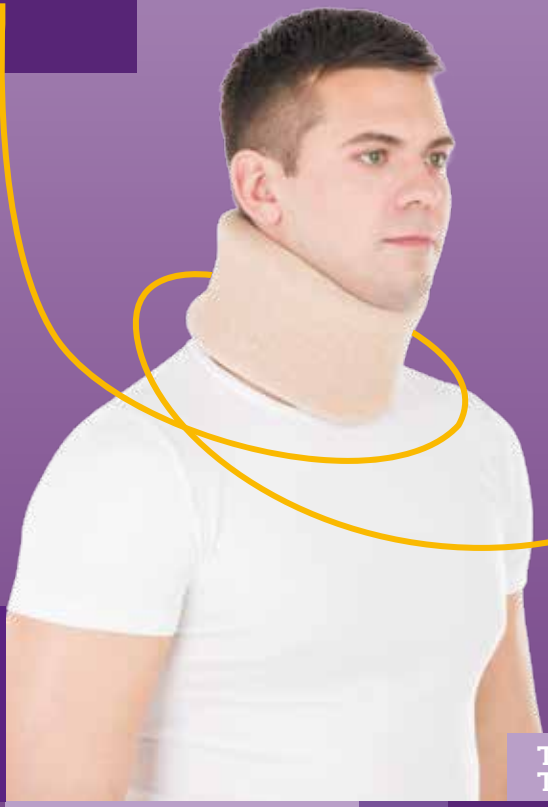

ТВ-004
ТВ-005

БАНДАЖ

ДЛЯ ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

- ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
- ЛЕГКАЯ СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
- ЧЕХОЛ ИЗ ХЛОПКА

ПРИ БОЛЯХ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Модель	ТВ-004	ТВ-005
Высота изделия, см	10	11

БАНДАЖ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ТВ – «ТРИВЕС»

Модель: ТВ-004, ТВ-005

Особенности:
- изготовлен из пенополиуретана
- снабжен контактной лентой (застежка «Велкро»)
- чехол из хлопка

Функции:
- легкая фиксация шейного отдела позвоночника и головы
- разгрузка тел шейных позвонков и мышечно-связочного аппарата шеи
- нормализация кровообращения головы и шеи
- ограничение движения в шейном отделе позвоночника

Назначение:
- остеохондроз, спондилоартроз в шейном отделе позвоночника
- профилактика заболеваний шейного отдела позвоночника у людей, чья деятельность связана с длительным вынужденным статичным положением головы
- головные боли, головокружение
- нестабильность шейного отдела позвоночника
- реабилитация после травм и операций на шейном отделе позвоночника
- миозиты различной этиологии

Противопоказания к применению:
Абсолютных противопоказаний не выявлено.
Относительные противопоказания, требуют консультации врача
- открытые раны в области использования бандажа
- дерматологические заболевания кожи в области применения бандажа

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Инструкция по применению:
- выбрать необходимую высоту бандажа, измерив длину от ветви нижней челюсти до ключицы (см. рисунок)
- расположить бандаж на шее выемкой под подбородок
- фиксировать контактной лентой (застежка «Велкро») сзади
- режим и срок ношения определяются врачом

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:
- ручная стирка при температуре не более 30°С
- не использовать отбеливатели, растворители и химический метод чистки
- не отжимать, не гладить утюгом
- держать вдали от нагревательных приборов
- не подвергать воздействию прямого солнечного света

Состав: основа: пенополиуретан; чехол: хлопок - 100%.
Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.



Бандажи для фиксации шейного отдела позвоночника ТВ-«ТРИВЕС» по ТУ 9396-001-85557773-2008 в следующих исполнениях:
Бандаж для легкой фиксации шейного отдела позвоночника, для взрослых ТВ-«ТРИВЕС» (вид 182800).
РУ № ФСР 2008/03802 от 19.09.2016 г.

Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи, срок хранения 5 лет.

Производитель – уполномоченная организация по принятию претензий: ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ», Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 4/1
Тел./факс: (812) 329-72-97
e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives-spb.ru

ISCO международный центр стандартизации и сертификации
ISO 13485-2003



Дата выпуска
Штамп ОТК

Уважаемый покупатель!

Спасибо за доверие к продукции компании «Тривес».

Вы приобрели качественный продукт с высокой медицинской эффективностью. Наша продукция удовлетворяет требованиям международного стандарта качества ISO 13485:2003 для разработки, производства и продажи медицинских изделий. Все изделия имеют декларации о соответствии и регистрационные удостоверения.

Бандаж для легкой фиксации шейного отдела позвоночника, для взрослых ТВ - «ТРИВЕС»

Модели: ТВ-004, ТВ-005

Описание:
- изготовлены из пенополиуретана, снабжены контактной лентой (застежка «Велкро»);
- имеют анатомическую форму с выемкой под подбородок;
- основной и дополнительный съемный чехлы изготовлены из хлопка, приятны к телу, не вызывают раздражения кожи;
- производятся в двух цветах – бежевом и черном.

Функции:
- легкая фиксация шейного отдела позвоночника и головы;
- разгрузка мышечно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника, межпозвонковых дисков и тел позвонков;
- нормализация кровообращения в шейном отделе позвоночника и голове;
- согревающий эффект;
- ограничение движения в шейном отделе позвоночника.

Показания к применению:
- нестабильность шейного отдела позвоночника, головные боли, головокружения;
- ушибы, растяжения, миозиты, ротационный подвывих 1-го и 2-го шейных позвонков в остром, подостром и восстановительном периодах;
- остеохондроз и спондилоартроз с болевым и корешковым синдромом;
- период реабилитации после травм и операций на шейном отделе позвоночника;
- период восстановления после жесткой фиксации шеи и головы (гипсовой повязкой или воротником жесткой фиксации);
- при ожогах шеи для профилактики образования тянущих рубцов;
- профилактика перенапряжения мышц шеи у здоровых людей при длительной сидячей работе, поездках и т.д.

Противопоказания к применению:
Абсолютных противопоказаний не выявлено.
Относительные противопоказания, требуют консультации врача:
- открытые раны в области использования бандажа;
- дерматологические заболевания кожи в области применения бандажа.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.



Условия применения изделия:
В зависимости от патологии режим ношения назначается только лечащим врачом.

Инструкция к применению:
Выберите необходимую высоту бандажа, измерив расстояние от ветви нижней челюсти до ключицы (см. рисунок).
Расположите бандаж на шее выемкой под подбородок. Зафиксируйте контактной лентой (застежкой «Велкро») сзади.

Режим и сроки ношения определяются лечащим врачом или специалистом.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу. Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Уход за изделием и хранение:


- перед стиркой застегните все застежки;
- изделие можно стирать по мере загрязнения вручную, в теплом мыльном растворе (при температуре не выше 30 градусов по Цельсию);
- не применять машинную стирку;
- не стирать совместно с другим бельем или изделиями (особенно имеющими ворсистую структуру или подверженными возникновению зацепок);
- не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку;
- не рекомендуется выкручивать или сильно отжимать изделие;
- сушить в расправленном виде на открытом воздухе вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей;
- не гладить, хранить изделие в сухом месте при комнатной температуре;
- избегать попадания влаги, воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Гарантийные обязательства распространяются при условии соблюдения правил хранения, использования и ухода за изделием.

Состав:

- основа: пенополиуретан;
- основной чехол: хлопок – 92%, лайкра – 8%;
- дополнительный съемный чехол: хлопок – 92%, лайкра – 8%.



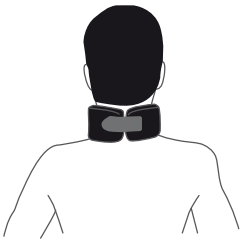

Артикул	ТВ-004 (10-53)	ТВ-005 (11-53)	ТВ-005 (12-53)
Высота изделия, см	10	11	12
Длина изделия, см	53	53	53

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.

Бандажи для фиксации шейного отдела позвоночника ТВ – «ТРИВЕС» по ТУ 9396-001-85557773-2008 в следующих исполнениях: Бандаж для легкой фиксации шейного отдела позвоночника, для взрослых ТВ-«ТРИВЕС» (вид 182800).
РУ № ФСР 2008/03802 от 19.09.2016 г.

Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи,
срок хранения 5 лет.
Производитель – уполномоченная организация по принятию претензий: ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ»,
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Гельсингфорсская, д. 4/1
Тел./факс: (812) 329-72-97
e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives-spb.ru

ISCO международный центр стандартизации и сертификации
ISO 13485-2003

30°

Дата выпуска
Штамп ОТК

Дата продажи
Штамп торг. организации

Trives

PRO*





ТВ-090

БАНДАЖ

ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

- ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ
- ЖЕСТКАЯ ФИКСАЦИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
- ОТВЕРСТИЕ НАД ТРАХЕЕЙ

ПРИ ТРАВМАХ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА

РАЗМЕР	S	M	L	XL
	высота,см	окружность шеи, см		
ТВ-090.2	5,7	25-33	33-41	41-48	48 и более
ТВ-090.3	8,3	25-33	33-41	41-48	48 и более
ТВ-090.4	10,8	25-33	33-41	41-48	48 и более
ТВ-090.5	13,3	25-33	33-41	41-48	48 и более

*Про

БАНДАЖ ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ФИКСАЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА ТВ – «ТРИВЕС»

Модель: ТВ-090

Особенности:
- изготовлен из плотного, водостойкого, легко санируемого ЭВА- материала
- состоит из двух частей согласно анатомическим особенностям головы и шеи
- имеет отверстие над трахеей
- фиксация бандажа осуществляется с помощью застежки «Велкро»
- усилен пластиковыми элементами, придающими изделию необходимую жесткость
- размер подбирается в зависимости от высоты и окружности шеи

Функции:
- жесткая фиксация и стабилизация шейного отдела позвоночника и головы в функционально выгодном положении
- разгрузка тел шейных позвонков и мышечно-связочного аппарата шеи
- нормализация кровообращения, уменьшение явлений воспаления и активация восстановительных процессов в шейном отделе позвоночника

Назначение:
- травмы шейного отдела позвоночника на догоспитальном этапе
- лечение изолированных переломов остистых и поперечных отростков шейных позвонков, тяжелых повреждений мышечно-связочного аппарата шеи
- стабильные неосложненные переломы тел позвонков и комбинированные травмы шейного отдела позвоночника
- реабилитация после оперативных вмешательств по поводу травм, новообразований и другой патологии шейного отдела позвоночника и мягких тканей шеи
- после ожогов шеи для профилактики образования тянущих рубцов
- остеохондроз шейного отдела позвоночника с корешковым синдромом
- нестабильность в шейном отделе позвоночника

Противопоказания к применению:
Абсолютных противопоказаний не выявлено.
Относительные противопоказания, требуют консультации врача:
- открытые раны в области использования бандажа
- дерматологические заболевания кожи в области применения бандажа

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Инструкция по применению:
- при подборе размера бандажа необходимо измерить высоту и окружность шеи
- приложить заднюю половину бандажа к задней поверхности шеи пациента
- приложить переднюю половину бандажа к передней поверхности шеи так, чтобы подбородок оказался в специальном углублении
- боковые стороны передней половины бандажа наложить сверху на боковые поверхности задней половины
- с помощью фиксирующей ленты с застежками «Велкро» закрепить бандаж на шее так, чтобы он плотно прилегал к поверхности тела
- не следует фиксировать бандаж слишком плотно во избежание образования гематом, а также сдавления прилегающих сосудов и нервов
- время ношения бандажа определяется лечащим врачом


При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Если в период использования бандажа появились боль, дискомфорт или другие неприятные ощущения, снимите его и обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Не препятствует рентгеновскому исследованию и томографии.

Рекомендации по уходу:
- следует обрабатывать слабым мыльным раствором
- не применять моющие и отбеливающие средства, содержащие хлор
- сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей

Состав: полимерный материал ЭВА

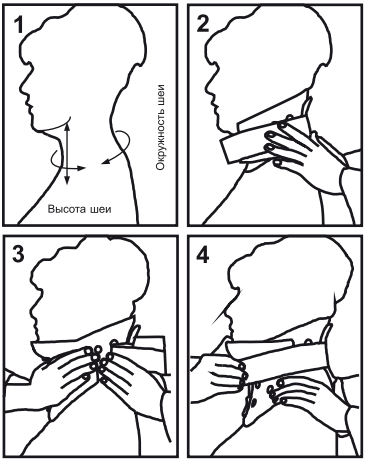


Бандажи для фиксации шейного отдела позвоночника ТВ – «ТРИВЕС»
по ТУ 9396-001-85557773-2008 в следующих исполнениях:
Бандаж для жесткой фиксации шейного отдела позвоночника
ТВ–«ТРИВЕС» (вид 183510).
РУ № ФСР 2008/03802 от 19.09.2016 г.

Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи, срок хранения 5 лет.

Производитель – уполномоченная организация
по принятию претензий: ООО «ТД «ТРИВЕС СПБ»,
Россия, 194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская, д. 4/1
Тел./факс: (812) 329-72-97
e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives-spb.ru

ISCO
международный центр
стандартизации и сертификации
ISO 13485-2003

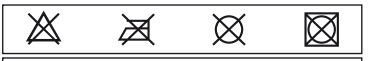

Дата выпуска
Штамп ОТК