(manual no. 6/ Ver. 01/01/97)


C.I.O.M. srl
Via Sapri 14/6 - 20156 Milano, Italy
www.ciom.it - info@ciom.it

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОБНАЯ ОПРАВА - 120/T

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1) Диапазон изменения PD: 50-80мм
   Односторонне (правая или левая сторона) шкала: 25-40мм Минимальный шаг регулировки: 1мм
2) Цена деления градусной циферблатной шкалы: 5°
3) Держатели линзы на праве/левой стороне доступны для одновременной установки 5 стандартных пробных линз,
4) Диапазон настройки носового упора: по вертикальной оси: 0-23mm, угол: 0°-360°
5) Вес: 61г

HOW TO USE

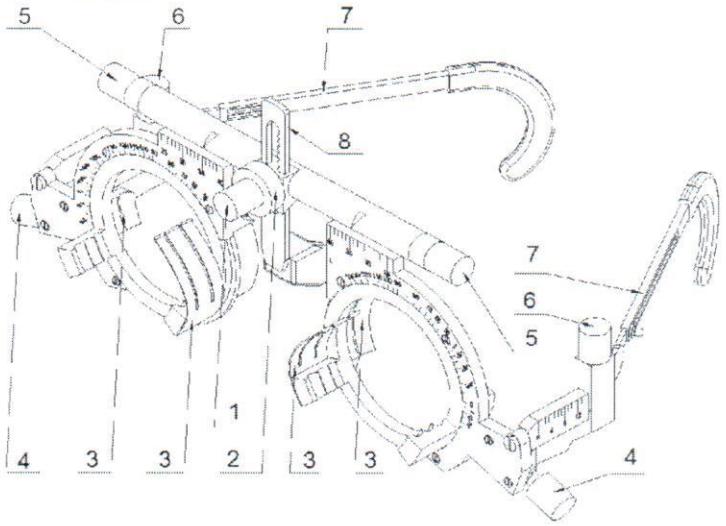

1-кнопка настройки высоты переносицы

2-контргайка переносицы

3- держатель линз

4-кнопка установки угла

5-кнопка для настройки шкалы PD

6-кнопка установки угла заушника

7-заушник

8-переносица

1) **Настройка PD**
   В соответствии с данными PD пациента, поверните кнопку 5 до совмещения необходимого значения с позицией ▼
2) **Настройка заушника**
   Потяните заушник 7 до получения необходимой длины. Поверните кнопку 6 и убедитесь в правильности установки угла заушников. Форма упора для уха настраиваема, что делает ее комфортной для каждого пользователя. Только диагональная часть может регулироваться.
3) **Настройка переносицы**
   Поверните контргайку 2 и освободите переносицу 8, поверните кнопку 1 для настройки высоты переносицы 8 и возвратите переносицу 8 в правильный угол. Зажмите контргайку 2.
4) **Настройка угла**
   После установки цилиндрической/призматической линзы в держатель 3,поверните кнопку 4 для настройки угла.

ПРИМЕЧАНИЯ

1) Для сохранения точности, пожалуйста, не демонтируйте это изделие.
2) Обращайтесь с ним бережно, для предотвращения повреждения.
3) Используйте это изделие в нормальной температуре. Пожалуйста, сохраните его сухим и проветренным.

Для очистки мягкой кистью удалите частицы грязи и пыли. Очищайте поверхности мягкой тканью с использованием подходящей неабразивной моющей жидкости. Избегайте химических реагентов.

CE Directive 93/42/EEC and 2007/47/EEC

C.I.O.M. srl
Via Sapri, 14/6 - 20156 MILANO
Tel. +39 (0) 2 33402669
Fax +39 (0) 2 33402671
e-mail: info@ciom.it

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

(manual no. 1/ Ver. 01/01/97)

C.I.O.M. srl
Via Sapri 14/6 - 20156 Milano, Italy
www.ciom.it - info@ciom.it

Инструкция пользователя

НАБОР ПРОБНЫХ ЛИНЗ

CE **Директива 93/42/EEC и 2007/47/EEC для медицинских изделий класс I**

Пожалуйста, прочитайте внимательно это руководство пользователя перед использованием изделия. Неправильное использование может привести к убыткам и потере гарантии. Если изделие НЕ используется, как описано в этом руководстве, производитель снимает всю ответственность за любой ущерб, нанесенный людям и имуществу.
C.I.O.M. предоставляет гарантию на эксплуатацию изделия сроком два года.

ВВЕДЕНИЕ

Наборы пробных линз применяются для определения остроты зрения и подбора корригирующих очков методом субъективной пробы.

C.I.O.M. изготавливает наборы с 90, 158 и 232 линзами, как показано ниже (Табл.1).

Табл-1

КОД ИЗДЕЛИЯ И ОПИСАНИЕ	
100/D НАБОР 90 ЛИНЗ **101/M** МИНИ 158 ЛИНЗ **102/P** ПОРТАТИВНЫЙ 158 ЛИНЗ **103/T** КАССЕТА 158 ЛИНЗ **103/L** КОМПЛЕКТ ИЗ 158 ЛИНЗ **105/N** СТАНДАРТНЫЙ 232 ЛИНЗЫ **106/H** СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАТИВНЫЙ 232 ЛИНЗЫ	**107/T** КАССЕТА 232 ЛИНЗЫ **108/L** КОМПЛЕКТ ИЗ 232 ЛИНЗ **110/O** НАКЛОННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ 232 ЛИНЗЫ **110/M** НАСТЕННЫЙ НАКЛОННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ 232 ЛИНЗЫ **110/V** ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ 232 ЛИНЗЫ **110/P** ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЛЫЙ ЛАМИНИРОВАННЫЙ 232 ЛИНЗЫ **95/L** ЗАПАСНЫЕ ЛИНЗЫ – КАЖДОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СИЛЫ/ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Наборы пробных линз C.I.O.M содержат сферические, цилиндрические и призматические линзы с различными диоптриями наряду с аксессуарами, установленными в пластмассовых

C.I.O.M. srl
Via Sapri, 14/6 - 20156 MILANO
Tel. +39 (0) 2 33402669
Fax +39 (0) 2 33402671
e-mail: info@ciom.it

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

оправах 38 мм диаметром. У каждой линзы есть свое собственное обозначенное место в защитном кейсе для хранения.
Это позволяет правильно хранить линзы и предотвращает повреждения, царапины и утерю линз.
Оптическая сила линзы отмечена и на ручке линзодержателя и на соответствующем месте хранения.
Положительные линзы традиционно обозначаются зеленым цветом линзодержателей.
Отрицательные рефракции установлены в красных оправках. Аксессуары и призмы установлены в зеленых оправках.
Наборы подразделены на разделы (сферы, цилиндры, призмы, аксессуары), отмеченные этикетками для легкого определения.

Набор из 90 линз содержит:
• 17 пар сферических линз, положительных и отрицательных - 8 пар цилиндрических линз, только отрицательных - 4 призмы - 2 аксессуара

Набор из 158 линз содержит:
• 25 пар сферических линз, положительных и отрицательных - 12 пар цилиндрических линз, положительных и отрицательных - 5 призм - 5 аксессуаров

Набор из 232 линз содержит:
• 34 пары сферических линз, положительных и отрицательных - 19 пар цилиндрических линз, положительных и отрицательных - 10 призм - • 10 аксессуаров

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Для правильного использования пробных линз C.I.O.M. srl необходима их установка в пробной оправе.
Линзы должны быть помещены в обоймы пробной оправы, одетой на лицо пациента.
Оптометрист, изменяя тип и диоптрическую силу линз, позволяет пациенту получить оптимальное изображение, смотря на тестовую таблицу.
Это позволяет произвести подбор линз для выписки правильного рецепта.
Линзы C.I.O.M., двояковогнутые/двояковыпуклые (сферы) и плоско-вогнутые / плоско-выпуклые (цилиндры), что позволяет их использовать с обеих сторон. У цилиндров углы установки оси линзы обозначены двумя маленькими стрелками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Для правильного и длительного использования наборов пробных линз изготовитель C.I.O.M. srl, предлагает соблюдать следующие меры предосторожности.
• Не использовать вблизи открытого пламени или на источниках тепла
• Не оставляйте кейс на радиаторах или других горячих поверхностях.
• Не чистите линзы с применением абразивных материалов, т.к. это может привести к образованию царапин
• Не бросайте линзы.
• Всегда после использования поместите линзы в установленном месте для хранения в кейсе.
• Не удаляйте линзу из ее оправки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

C.I.O.M. srl
Via Sapri, 14/6 - 20156 MILANO
Tel. +39 (0) 2 33402669
Fax +39 (0) 2 33402671
e-mail: info@ciom.it

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Для поддержания изделия в отличном состоянии необходимо производить частую очистку. С этой целью мы предлагаем следующие шаги:
1. мягкой кистью удалите частицы грязи и пыли
2. мягкой тканью очистите поверхность линзы с использованием подходящей неабразивной моющей жидкости.
Важно выполнить предложенную последовательность шагов, чтобы предотвратить случайные царапины.

АГРЕССИВНЫЕ ИЛИ АБРАЗИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Использование правильно очищенных линз важно для корректной и точной проверки зрения.

C.I.O.M. srl
Via Sapri, 14/6 - 20156 MILANO
Tel. +39 (0) 2 33402669
Fax +39 (0) 2 33402671
e-mail: info@ciom.it

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru