УТВЕРЖДАЮ

Директор
Унитарного предприятия «ФреБор»

_____ С.А.Мороз
«18» 01 2019

Сильфон однократного применения
для активного дренажа
ТУ BY 600012098.022-2009

Инструкция по применению
ИСЖЕ.943210.01 ИП

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по производству
Унитарного предприятия «ФреБор»

_____ И.А.Мороз
«17» 01 2019

Руководитель службы контроля качества
Унитарного предприятия «ФреБор»

_____ Т.А.Прус
«17» 01 2019

Экономист по сбыту
Унитарного предприятия «ФреБор»

_____ М.С.Вафина
«17» 01 2019

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сильфон однократного применения для активного дренажа
ТУ BY 600012098.022-2009

НАЗНАЧЕНИЕ: Сильфоны для активного дренажа предназначены для подсоединения к дренажным трубкам при проведении процедуры дренирования послеоперационных ран и гнойных полостей.

ФОРМА ВЫПУСКА: Сильфоны для активного дренажа выпускаются в потребительской таре, состоящей из пленки термоформуемой и бумаги газопроницаемой. Детали сильфона изготовлены из полимерных материалов, выдержавших токсикологические испытания в установленном порядке и рекомендованных для применения в медицинских изделиях.

Сильфоны для активного дренажа в потребительской упаковке стерильны, апирогенны, нетоксичны.


Стерилизованы окисью этилена.

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления.

Допускается поставка сильфонов нестерильными в групповой упаковке.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Проверьте срок годности сильфона (рис.1) и целостность потребительской упаковки.
2. Вскройте потребительскую упаковку и извлеките сильфон.
3. Сожмите гофрированную емкость 2 и подсоедините дренажную трубку к штуцеру 1.
4. Закрепите сильфон в вертикальном положении.
5. После окончания процедуры утилизируйте сильфон в установленном порядке.

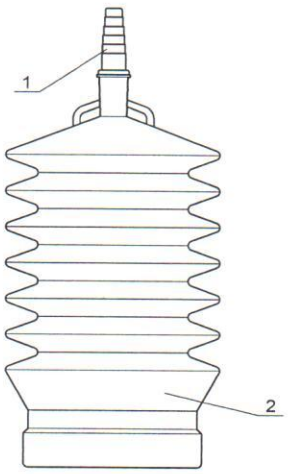

1 – штуцер; 2 – емкость сильфона гофрированная.

Рис.1 – Сильфон однократного применения для активного дренажа

ВНИМАНИЕ:

Не применять при нарушении целостности потребительской упаковки.

Не применять не по назначению. Использовать в соответствии с инструкцией по применению.

Для однократного применения.

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер-технолог ПТО П.И.Петухов

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru