Инструкция по применению и уходу за изделиями

Изделия медицинские компрессионные и антиварикозные

для нижних и верхних конечностей

АВИЦЕНУМ

ARIES, a.s.
512 33 Студенец, д. 309,
Чешская Республика
www.aries.eu

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Профилактические и лечебные свойства Изделий медицинских компрессионных и антиварикозных АВИЦЕНУМ для нижних и верхних конечностей

Варикозное расширение вен и компрессионная терапия

Варикозным расширением вен в развитых странах Европы страдают 40 % женщин и 20 % мужчин.
Заболевания венозной системы относятся к хроническим заболеваниям, требующим изменения образа жизни и практически постоянного лечения. Основой данного лечения является компрессионная терапия. Факторами, вызывающими варикозное расширение вен, являются: наследственная предрасположенность, статическая нагрузка, сидячая работа, старость, недостаточная физическая активность, излишний вес или беременность. Кроме того, частой причиной повреждения венозных клапанов являются воспалительные процессы в организме.
В результате неправильной работы венозной системы появляются признаки хронической венозной недостаточности, такие как варикозное расширение вен, отечность нижних конечностей, гемосидериновая пигментация, венозные трофические язвы и т.д.

Компрессионные чулочно-носочные медицинские изделия

Принцип защиты вен с помощью чулочно-носочных изделий основан на том, что в области щиколотки создается определенное давление, которое постепенно снижается в направлении к талии. Доказано, что поддержка венозных стенок в нижней части ног эффективно улучшает кровообращение и способствует возвращению крови к сердцу.
Благодаря компрессионным чулочно-носочным изделиям у Вас не будут болеть ноги, Вы будете хорошо себя чувствовать и останетесь в форме.

Семь советов для профилактики варикозного расширения вен

Так, как у ряда иных заболеваний, и в вопросе профилактики варикозного расширения вен важен стиль жизни. Ниже мы предлагаем Вам несколько простых советов, полезных для Вашего здоровья.
1 **Физическая активность:** Ходите на прогулки, бегайте, ездите на велосипеде или ходите в бассейн. Движение способствует активизации мышечного насоса в нижних конечностях, таким образом усиливая кровообращение.
2 **Питание:** Следите за тем, чтобы Ваш рацион содержал достаточное количество витаминов С и Е, клетчатки, кальция, магния и цинка.
3 **Ноги на столе:** В течение дня постарайтесь найти подходящее время и сядьте с поднятыми ногами. Несколько минут в таком положении позволит поддержать кровообращение в нижних конечностях.
4 **Не препятствуйте циркуляции крови:** Избегайте длительного нахождения в положении стоя или сидя, не скрещивайте ноги, избегайте ношения слишком узких брюк или обуви на слишком высоком каблуке.
5 **Холодный душ:** Холодный душ или холодные компрессы принесут ощутимую пользу Вашим ногам.
6 **Упражнения:** Круговые движения щиколоткой в обоих направлениях; сжать и распрямить пальцы на ногах и весь подъем; полусогнутую ногу прижать к груди, распрямить ногу, вернуться в исходное положение, сменить ногу; лежа на спине, имитировать езду на велосипеде. Некоторые из упражнений можно делать и на работе, в офисе или в приемной.
7 **Поддерживающие чулочно-носочные изделия:** Носите поддерживающие чулки или гольфы. Качественные поддерживающие чулочно-носочные изделия сегодня на первый взгляд уже сложно отличить от обычных колготок или чулок, причем ассортимент изделий достаточно широкий. Необходимо убедиться, что резинки или кружева в выбранной Вами модели не сжимают ногу и не препятствуют циркуляции крови.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Назначение медицинских изделий АВИЦЕНУМ

Изделия медицинские компрессионные антиварикозные АВИЦЕНУМ (гольфы, чулки, колготки, нарукавники, носки, далее изделия) предназначены для компрессионной терапии (лечение и профилактика варикозных заболевания нижних конечностей, лимфатических отеков нижних и верхних конечностей), профилактики послеоперационного тромбоза и отека нижних конечностей, для профилактики заболеваний «диабетической стопы».

Показания к применению медицинских изделий АВИЦЕНУМ

Изделия класса компрессии I предназначены для профилактики венозной недостаточности разной степени, состояний после склеротерапии и прочих хирургических вмешательствах в венной системе, при варикое и отёках нижних конечностей в течение беременности, дальних перелетов или автомобильных поездок, при вылеченных трофических язвах, состояния после тромботических событий, хирургическое вмешательство с госпитализацией, роды.
Изделия класса компрессии II применяются при функциональных флебопатиях (синдром «тяжелых ног»), ретикулярном варикозе, телеангиэктазии (сосудистые «звёздочки»), профилактике варикозной болезни ног во время беременности и после родов, профилактике варикозной болезни ног при наличии факторов риска, отдалённом периоде реабилитации (> 3 месяцев) после хирургического лечения варикозной болезни (флебэктомии).
Изделия класса компрессии III применяются при примарной и секундарной лимфэдеме, профилактике тромбоза глубоких вен у пациентов группы риска, профилактике тромбоэмболических осложнений у пациентов после хирургических, травматологических, гинекологических операций, с длительным постельным режимом, в раннем периоде реабилитации после хирургического или инъекционного лечения варикозной болезни (флебэктомии, склерооблитерации), при варикозной болезни вен нижних конечностей без трофических нарушений (единичные расширенные вены до 5 см), остром и хроническом тромбофлебит поверхностных вен.
Носки Диафит применяются для профилактики заболеваний «диабетической стопы».
Медицинские изделия АВИЦЕНУМ сертифицированы в немецком институте Хогенштейн, а производство осуществляется в соответствии со строгой нормой RAL.
Функциональность медицинских изделий АВИЦЕНУМ проверена клиническими исследованиями, проведенными престижными институтами и клиниками Чешской Республики.
Медицинские изделия АВИЦЕНУМ могут применяться как в медицинских учреждениях, так и пациентом самостоятельно.

Особые указания:

ВНИМАНИЕ! Применение компрессионного трикотажа возможно только после консультации с врачом.

Побочные действия

Побочные действия от применения компрессионного трикотажа не зафиксированы.
Опасность может возникнуть лишь при неправильно подобранном размере лечебного изделия, неправильном надевании медицинского изделия на конечность, халатном отношении при ношении трикотажа (изделия скатываются, имеются повреждения). Все эти случаи могут иметь последствия, приводящие к противоположному эффекту (развитие варикоза, дерматита, язвы на коже).

Противопоказания к применению медицинских изделий АВИЦЕНУМ

Абсолютные противопоказания:

- прогрессирующие периферические обструкционные заболевания,
- декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность (систолическое давление в артериальной системе ниже 80 мм. рт. ст.).
- тяжелые формы облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей;

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- повреждение кожи и мягких тканей (септический и синий болевой флебит, невенозные трофические язвы, циркуляторная венозная гангрена);

Относительные противопоказания:

- диабетическая полинейропатия и ангиопатия;
- местные кожные заболевания ног;
- чрезмерная чувствительность кожи;
- повреждение кожи и мягких тканей (раны, ожоги, острые воспалительные заболевания кожи)
- индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав изделий;
- размеры ноги, не соответствующие приложенной таблице подбора размеров (например, очень тонкие лодыжки).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Материалы и покрытия

1. **Nylon (Нейлон)** является основным материалом для производства чулочно-носочных изделий АВИЦЕНУМ. В изделиях АВИЦЕНУМ применяется исключительно фирменное полиамидное волокно PAD 6.6 ведущих производителей из Франции, Италии и Швейцарии.
2. **Lycra® (Лайкра)** используется для создания требуемой компрессии. При производстве изделий АВИЦЕНУМ используется волокно лайкры с обмоткой защитным волокном нейлона, что предотвращает прямой контакт волокна лайкры с кожей.
3. **Хлопок,** выращиваемый без использования искусственных удобрений и пестицидов (био-хлопок).
4. **Sanitized® Silver** - это уникальное противомикробное покрытие на базе ионов серебра, которое характеризуется высокой стабильностью, абсолютной безопасностью и высокой эффективностью.

Варианты исполнения:

Изделия медицинские компрессионные и антиварикозные АВИЦЕНУМ для нижних и верхних конечностей выпускаются в следующих вариантах исполнения:

1) Гольфы антиварикозные Авиценум 70;
2) Чулки бедренные антиварикозные Авиценум 70;
3) Колготки антиварикозные Авиценум 70;
4) Гольфы антиварикозные Авиценум 70 ТРАВЕЛ;
5) Гольфы антиварикозные Авиценум 140;
6) Чулки бедренные антиварикозные Авиценум 140;
7) Колготки антиварикозные Авиценум 140;
8) Гольфы антиварикозные Авиценум 310;
9) Гольфы антиварикозные Авиценум 360;
10) Чулки бедренные антиварикозные Авиценум 360;
11) Колготки антиварикозные Авиценум 360;
12) Нарукавник от лимфатических отеков верхних конечностей Авиценум 360;
13) Гольфы антиварикозные Авиценум 360 КОТТОН (ХЛОПОК);
14) Чулки бедренные антиварикозные Авиценум 360 КОТТОН (ХЛОПОК);
15) Гольфы антиварикозные и от лимфатических отеков нижних конечностей Авиценум 520;
16) Чулки бедренные антиварикозные и от лимфатических отеков нижних конечностей Авиценум 520;
17) Гольфы антиварикозные Авиценум АНТИ-ТРОМБО;
18) Чулки бедренные антиварикозные Авиценум АНТИ-ТРОМБО;
19) Носки медицинские Авиценум ДИАФИТ.

АВИЦЕНУМ 70 Класс компрессии 1 (ГОСТ 31509-2012)

Компрессионные чулочно-носочные изделия АВИЦЕНУМ 70 (гольфы, чулки, колготки) улучшают кровообращение, являются эффективным средством профилактики варикозного расширения вен, предотвращают возникновение отечности и снижают ощущение боли и усталости в ногах. Обрабатываются противомикробным серебром Sanitized® Silver.

Состав материала: 76% нейлон, 24% лайкра.

АВИЦЕНУМ ТРАВЕЛ Класс компрессии 1 (ГОСТ 31509-2012)

Компрессионные чулочно-носочные изделия АВИЦЕНУМ ТРАВЕЛ (гольфы) поддерживают правильную работу венозных клапанов, стабилизируют кровообращение и препятствуют возникновению отечности ног. Обрабатываются противомикробным серебром Sanitized® Silver..

Состав материала: 76% нейлон, 24% лайкра

АВИЦЕНУМ 140 Класс компрессии II (ГОСТ 31509-2012)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Компрессионные чулочно-носочные изделия класса компрессии II позволяют устранять проявления развивающейся венозной недостаточности и снимать ощущения усталости и напряжения в ногах. Обрабатываются противомикробным серебром Sanitized® Silver.
Состав материала: 69% Нейлон, 31% Лайкра

АВИЦЕНУМ 310 **Класс компрессии II (ГОСТ 31509-2012)**
Лечебные чулочно-носочные изделия класса компрессии II (гольфы), содержащие 60 % хлопка, поддерживают правильную работу венозных клапанов, стабилизируют кровообращение и препятствуют возникновению отечности ног. Подходят для ежедневного ношения при необходимости многочасового нахождения в положении сидя и стоя. Одновременно пригодны для применения при занятиях спортом и во время поездок. Обрабатываются противомикробным серебром Sanitized® Silver.
Состав материала: 60% Хлопок, 28% Нейлон, 12% Лайкра

АВИЦЕНУМ 360 **Класс компрессии III (ГОСТ 31509-2012)**
Лечебные чулочно-носочные изделия класса компрессии III поддерживают правильную работу венозных клапанов, стабилизируют кровообращение и являются незаменимым компонентом компрессионной терапии. Обрабатываются противомикробным серебром Sanitized® Silver.
Состав материала: 60% Нейлон, 40% Лайкра

АВИЦЕНУМ 360 Нарукавник **Класс компрессии III (ГОСТ 31509-2012)**
Компрессионный рукав **с перчаткой/без перчатки** предназначен для лечения лимфатических отеков верхних конечностей. Данные отеки вызываются нарушением циркуляции тканевой жидкости (лимфы) в верхней конечности и нуждаются в длительном и тщательном лечении, в ходе которого применяется также компрессионная терапия. Материал рукава дополнен приятным микроволокном. Обрабатываются противомикробным серебром Sanitized® Silver.
Состав материала: 60% Нейлон, 40% Лайкра

АВИЦЕНУМ 360 ХЛОПОК **Класс компрессии III (ГОСТ 31509-2012)**
Лечебные чулочно-носочные изделия класса компрессии III с высоким содержанием хлопка (60%) подходят, в первую очередь, для пациентов с очень чувствительной кожей. Хлопок дополнен приятным микроволокном и лайкрой с двойной обмоткой. Изделия АВИЦЕНУМ 360 ХЛОПОК поддерживают правильную работу венозных клапанов, стабилизируют кровообращение и предназначены для компрессионной терапии. Обрабатываются противомикробным серебром Sanitized® Silver..
Состав материала: 60% хлопок, 35% Лайкра, 5% Нейлон

АВИЦЕНУМ 520 **Класс компрессии III (ГОСТ 31509-2012)**
Лечебные компрессионные изделия (гольфы, чулки) класса компрессии III предназначены для лечения хронического варикозного расширения вен и лимфатической отечности. Речь идет о ключевом элементе лечебной терапии, особенно после проведения лимфатического дренажа в существенной мере помогают препятствовать возвращению лимфы на участок отечности. Эффективно предотвращают возникновение новых вариксов, предназначены для применения при развитом хроническом расширении вен. Обрабатываются противомикробным серебром Sanitized® Silver.
Состав материала: 55% Нейлон, 45% Лайкра

АВИЦЕНУМ АНТИ-ТРОМБО **Класс компрессии II (ГОСТ 31509-2012)**
Компрессионные чулочно-носочные изделия АВИЦЕНУМ АНТИ-ТРОМБО (гольфы, чулки) предназначены для профилактики послеоперационного тромбоза и отеков нижних конечностей. Изделия предназначены для лежащих пациентов, у которых снижают риск образования кровяных тромбов. Обрабатываются противомикробным серебром Sanitized® Silver.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Состав материала: 70% нейлон, 30% лайкра

АВИЦЕНУМ ДИАФИТ

Носки АВИЦЕНУМ ДИАФИТ, в составе которых 80% чесанного длинно волоконного биохлопка, являются одним из средств профилактики диабетической ноги. Приятная резинка специального плетения позволяет минимизировать давление на голень, но одновременно достаточно прочна для того, чтобы носок не соскальзывал. Носок закончен плоским кетельным швом, который не натирает ноги.

Состав материала: 80% хлопок, 18% Нейлон, 2% Лайкра

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


Виды исполнения медицинских изделий АВИЦЕНУМ

Изделия АВИЦЕНУМ производятся в следующих исполнениях:


- носки (мужские/женские)



- гольфы (с носком/без носка)

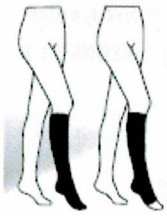


- чулки бедренные (с носком/без носка, с кружевом/с резинкой)

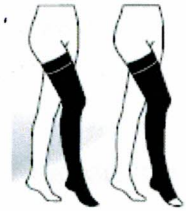






- колготки (большая/маленькая ластовица, для беременных)

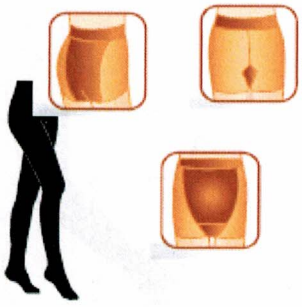

- нарукавник (с перчаткой/без перчатки)



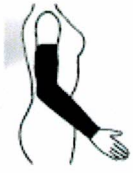


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Порядок снятия мерок и определения размеров компрессионных медицинских изделий АВИЦЕНУМ


При определении размера, пожалуйста, уделите должное внимание снятию мерок. От правильного определения размера зависит правильное функционирование чулка/нарукавника.
Снятие мерок необходимо проводить **утром**, так как в течение дня конечности отекают. Измерьте все точки, показанные в таблице размеров для данного изделия.
Как изделие должно одеваться на конечность, показано на рисунках. При выборе размеров наиболее **важны значения, показанные в таблице серым фоном**.
Не старайтесь «помочь» себе или пациенту выбором чулка/нарукавника большего размера, чем необходимо, такое компрессионное изделие не будет оказывать требуемый **эффект.**

Точки измерений – нога:
a - длина ступни
b - объем над щиколоткой
b1 - объем 10 см над щиколоткой
c - объем голени
d - объем под коленом
e - объем над коленом
f - объем бедра (в середине бедра)
g - объем бедра (5 см ниже паха)
h - объем бедер
t - объем талии

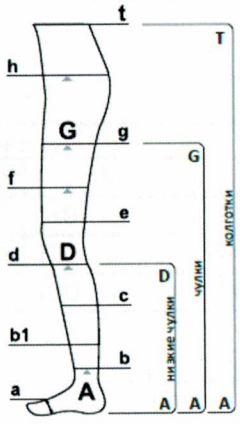

Измерения длины: A–D низкие чулки; **A–G** чулки; **A–T** колготки

Точки измерений – рука
a - объем ладони
c - объем запястья
d - объем предплечья
g - объем под плечом
C-G - измерения длины

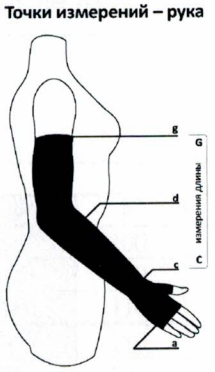

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АВИЦЕНУМ 70

Название	Размеры (см)			
Гольфы антиварикозные (а)	36-38(23-25)	39-41(25-27)	42-44(27-29)	
Антиварикозные чулки с кружевом (а)	M(25)	L(27)	XL(29)	
Антиварикозные колготки				
маленькая ластовица	S(158-164 / 100)	M(164-170 / 108)	L(170-176 / 108-116)	XL(176-182 / 108-116)
большая ластовица	S+(158-164 / 116-124)	M+(164-170 / 116-124)	L+(170-176 / 116-124)	XL+(176-182 / 116-124)
для беременных	M(164-170 / 124-132)	L(170-176 / 124-132)	XL(176-182 / 124-132)	
ТРАВЕЛ - гольфы антиварикозные (а)	36-38(23-25)	39-41(25-27)	42-44(27-29)	45-47(29-31)

АВИЦЕНУМ 140

Размер	Полученное значение в точке						
	b	d	f	g	h	t	
S(1)	20-24	34-37	46-50	50-55	110	80	
M(2)	24-27	37-40	50-54	55-60	120	90	
L(3)	27-30	40-44	54-58	60-66	130	100	

Длина	Normal (K-короткие)	Long (D-длинние)
Гольфы A-D	до 37	больше 37
Чулки A-G Колготки A-T	до 70	больше 70

АВИЦЕНУМ 360/ АВИЦЕНУМ 520

Размер	Полученное значение в точке									
	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
S-(1-)	19-25	20-23	25-30	32-38	31-37	33-39	37-45	42-52	100	70
S(1)	19-25	20-23	25-30	32-38	31-37	33-39	41-49	47-57	110	80
S+(1+)	19-25	20-23	25-30	32-38	31-37	33-39	49-57	57-67	110	80
M-(2-)	22-28	23-26	28-33	35-41	34-40	36-42	40-48	47-57	110	80
M(2)	22-28	23-26	28-33	35-41	34-40	36-42	45-53	52-62	120	90
M+(2+)	22-28	23-26	28-33	35-41	34-40	36-42	53-61	62-72	120	90
L-(3-)	25-31	26-29	31-36	38-44	37-43	39-45	45-53	52-62	120	90
L(3)	25-31	26-29	31-36	38-44	37-43	39-45	49-57	57-67	120	90
L+(3+)	25-31	26-29	31-36	38-44	37-43	39-45	57-65	67-77	130	100
XL-(4-)	28-34	29-32	34-39	41-47	40-46	42-48	49-57	57-67	120	90
XL(4)	28-34	29-32	34-39	41-47	40-46	42-48	53-61	62-72	130	100
XL+(4+)	28-34	29-32	34-39	41-47	40-46	42-48	61-69	72-82	130	100
XXL(5)	31-37	32-35	37-42	44-50	43-49	45-51	57-65	67-77	130	100

Длина		Short (UK-ультра короткие)	Normal (K-короткие)	Long (D-длинные)
Гольфы	A – D	30 – 34	34 – 38	38 – 43

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

чулки колготки	A – G A – T	56 – 62	62 – 71	71 - 82

АВИЦЕНУМ 360 (нарукавник)

Размер	Окружность руки в точках измерения			
	a	c	d	g
S(1)	до 18	16 – 19	22 – 26	24 - 30
M(2)	до 20	19 – 22	26 - 30	30 - 36
L(3)	до 23	22 – 25	30 – 34	36 - 42
XL(4)	до 25	25 – 28	34 – 38	42 - 48

Длина	Normal (K-короткие)	Long (D-длинные)
C - G	do 45	od 45

АВИЦЕНУМ Анти-Тромбо

Avicenum Anti-Trombo

Размер	Объем ноги в точках измерения		
	b	d	g
S	17 – 20	28 – 34	41 – 54
M	20 – 23	31 – 37	48 – 61
L	23 – 26	34 – 40	55 – 68
XL	26 – 29	37 – 43	62 – 75
XXL	29 – 32	40 – 46	69 – 82

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


Как правильно надевать медицинские изделия АВИЦЕНУМ


Надевайте медицинские изделия АВИЦЕНУМ **утром** до появления отеков ног.
Если Вы снимаете антиварикозный компрессионный трикотаж в течении дня, то надевать его нужно **после 10-15 минутного отдыха ног в возвышенном положении** (для облегчения надевания изделия ноги можно обработать тальком или детской присыпкой).
Помните, что острые ногти, мозоли, заусенцы на руках могут повредить изделие. Поэтому, при использовании компрессионного трикотажа нужно постоянно ухаживать за ногтями и кожей рук и ног.

Последовательность надевания:

1. Внимательно прочитайте раздел о подготовке рук и ног к надеванию изделия.
2. Наденьте на ступню **вспомогательный носочек** (в моделях АВИЦЕНУМ с классом компрессии III).
3. Выверните изделие на изнанку до пятки.
4. Осторожно натяните изделие на ступню и убедитесь, что пятка правильно расположена на ноге.
5. Натягивайте изделие разглаживающими движениями через лодыжку к колену, растягивая каждый участок. Не следует тянуть изделие с усилием за верхний край.
6. Окончательно разгладьте мелкие морщинки.
7. Если Вы надеваете колготки, натягиваете их далее на бедра.
8. Вытяните **вспомогательный носочек**.

Как надевать медицинские изделия для верхних конечностей:
Рекомендуется надевать изделия, предварительно сняв украшения и часы с рук. Руки должны быть сухими

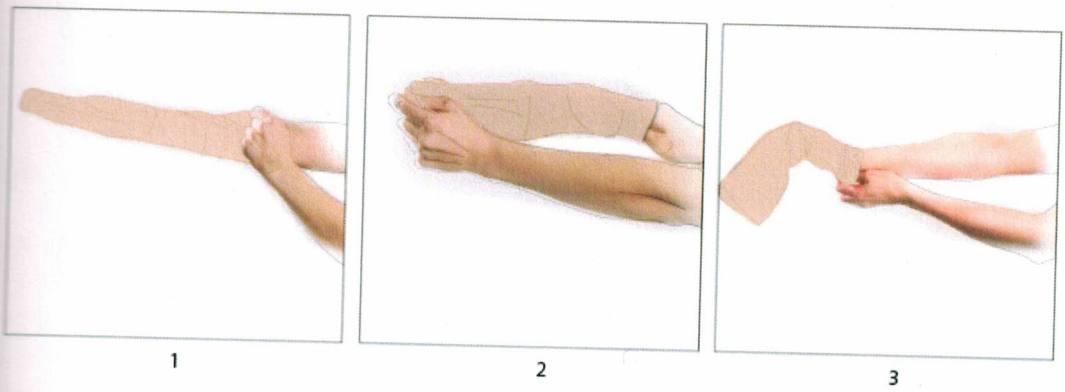

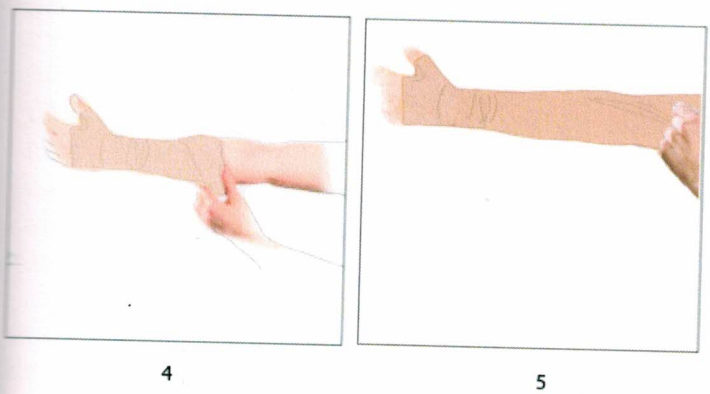

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Как правильно снимать медицинские изделия АВИЦЕНУМ

Прежде чем снимать изделие, удалите с рук все украшения.
Кольца, браслеты и другие украшения на руках могут повредить изделие (их, также, следует снимать перед надеванием и стиркой).

Как правильно ухаживать за медицинскими изделиями АВИЦЕНУМ

Чулочно-носочные изделия АВИЦЕНУМ всех классов компрессии **не стерильны.**
Изделия АВИЦЕНУМ можно стирать один раз в два дня **только вручную**.
Температура воды не должна превышать 30 ^{0}C.
Изделия АВИЦЕНУМ АНТИ-ТРОМБО можно стирать при температуре до 90 ^{0}C.
В качестве моющих средств следует выбирать жидкие шампуни не содержащие щелочи.
Не используйте стиральные порошки.
После стирки изделие нужно хорошо прополоскать в теплой воде, завернуть в полотенце, слегка отжать и просушить в прохладном месте на сухом полотенце.
Силиконовые полоски резинки нужно беречь от попадания воды. Они будут хорошо прилипать к коже, если их протирать хлопковой тканью, смоченной 20%-м спиртовым раствором.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Маркировка

Дизайн упаковки и маркировка представлены на рисунке:



На потребительской упаковке (картонной коробке или пакете) указаны:
- наименование, адрес, телефон, электронный адрес в Интернете и товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и модель изделия;
- размер изделия;
- номер партии;
- фотография или рисунок изделия;
- состав волокна;
- цвет;
- краткое описание изделия рекламного характера;
- класс компрессии и создаваемое давление в мм рт.ст. по RAL_GZ 387/1;
- класс компрессии и создаваемое давление в мм рт.ст. по ГОСТ 31509-2012;
- знаки по уходу за изделием (ISO 3758);
- штрих-код;
- знаки: CE, покрытие «Sanitized® Silver», экологический знак «Зеленая точка», экологический знак «Recycling» (о пригодности для вторичной переработки.

На моделях АВИЦЕНУМ 360, АВИЦЕНУМ АНТИ-ТРОМБО дополнительно указывается дата окончания срока годности (месяц и год).

На транспортной упаковке изделий прикреплена табличка (шильдик) с маркировкой дополнительных обозначений:

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование и модель изделия;
- количество изделий в упаковке.
- манипуляционный знак «Беречь от влаги».

Упаковка

Внутренняя упаковка изготовлена из полупрозрачной бумаги, с надписями Авиценум, которая свободно обмотана вокруг Изделия или Изделия уложены в пакеты из полиэтиленовой пленки.
Все изделия в пакетах (кроме АВИЦЕНУМ АНТИ-ТРОМБО и АВИЦЕНУМ ДИАФИТ) уложены в коробку, изготовленную из коробочного картона.

Транспортная упаковка изделий - в коробке, изготовленной из коробочного картона. Допускается транспортирование изделий в контейнере с принятием мер, препятствующих смещениям и повреждениям изделий в контейнере.

Комплектность

Изделие АВИЦЕНУМ, инструкция.

Условия утилизации

Использованные изделия утилизируются в соответствии с действующим законодательством, с бытовым мусором.
Изделия, неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин, относятся к классу эпидемиологически безопасных отходов, приближенных по составу к твердым бытовым отходам, и утилизируются как бытовые отходы.

Условия хранения, транспортирования

Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня производства.
Изделия должны хранится в заводской упаковке в крытых сухих помещениях при температуре от -50 до +40 ^{0}C без прямого солнечного света и пыли, при средней влажности 75%.
Транспортировать в транспортной упаковке всеми видами транспорта при температуре от -50 до +50 ^{0}C и средней влажности 75%.

Условия применения

Изделие может эксплуатируются при температуре воздуха от (-30 до +30) ±2 ºС;
относительной влажности (20-80) ±2 %, атмосферном давлении 760±10 мм рт.ст.

Срок службы: Не определен и зависит от интенсивности эксплуатации.

Уполномоченный представитель производителя в РБ и адрес для приема рекламаций

ОДО «СЭЙСИМЕД»:
220040 г. Минск, ул. Богдановича, дом 130, пом.4н, тел. +375 17 385 31 90,
УНН 190495628, РБ.

Изготовитель:
АО «АРИЕС»
512 33 г. Студенец, д. 309, Чешская Республика

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

www.aries.eu

Председатель правления
АО «АРИЕС»

_____ Шульц Ладислав

Aries®
VITALITY TEXTILES
ARIES, a.s. | 512 33 Studenec 309
IČ: 28824563 | DIČ: CZ28824563

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Уважаемые клиенты!

Позвольте представить Вам нашу производственную компанию ARIES, которая с самого начала своей деятельности является лидером в своей отрасли. Мы вложили немалые средства в развитие, технологии и качество продукции. Мы работаем с известными европейскими поставщиками и авторитетными центрами сертификации. Более чем за двадцать лет работы мы вошли в число ведущих центрально-европейских компаний и продолжаем развиваться. Мы экспортируем продукцию в Словакию, Польшу, Германию, Францию, Румынию, Венгрию, а теперь и в Россию.

В области медицинских продуктов MEDICO мы специализируемся, прежде всего, на производстве компрессионных чулок, предназначенных для профилактики и лечения варикозного расширения вен и заболеваний лимфатических сосудов, а также на производстве носков для больных диабетом.


Многолетний опыт работы в области производства товаров для компрессионного лечения принес нам преимущества при разработке и производстве новой серии SPORT, которая предлагает спортсменам функциональные компрессионные изделия для улучшения их результатов и быстрого восстановления.

Необходимо также отметить серию модных чулочно-носочных изделий COMFORT.


Мы бы хотели, чтобы наши изделия приносили Вам не только ощущение комфорта при носке, но и способствовали эффективной профилактике и лечению заболеваний, а также приносили Вам облегчение и ***доставляли радость.***

Искренне Ваш, владелец и
председатель правления
ARIES, a.s., Чешская Республика

Ладислав Шульц

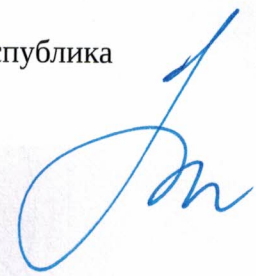

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

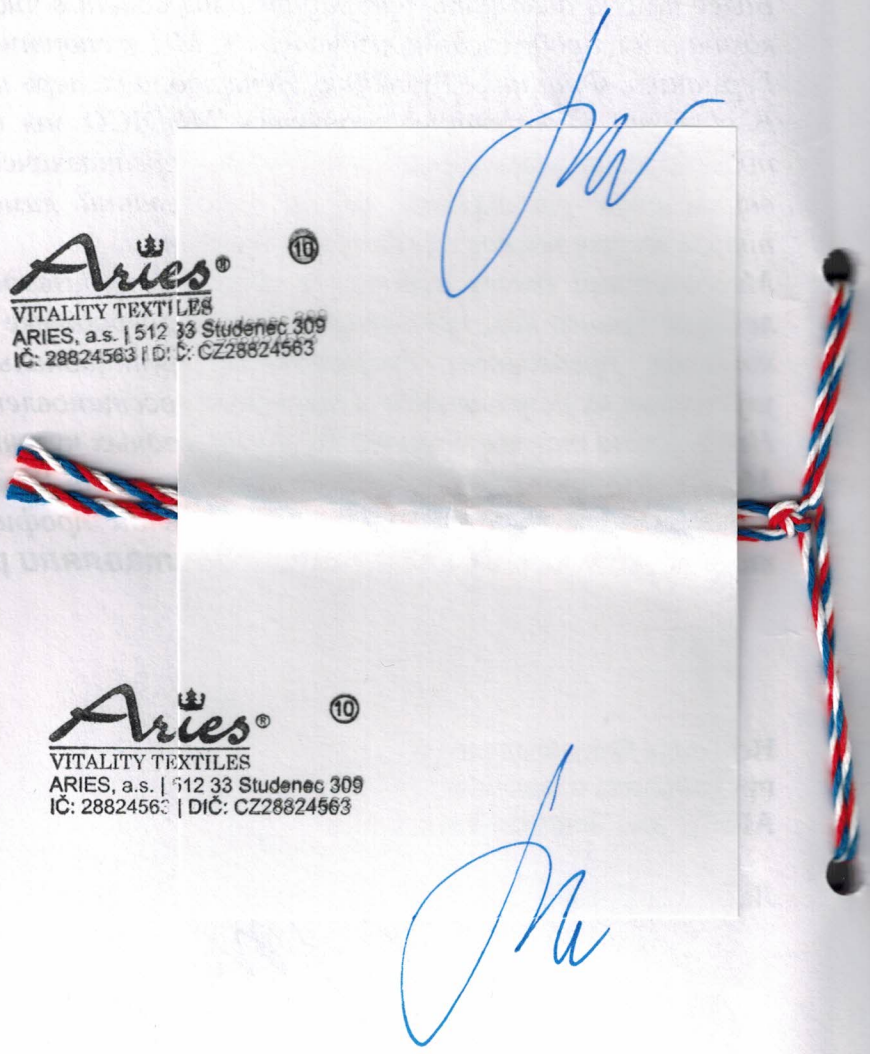

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru