Instruction for use

Medical gloves: latex surgical gloves powder free sterile First+Care (sizes: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9)

Manufacturer: Shandong Yuyuan Latex Gloves Co., Ltd. (Industrial Zone, Linqing City, Shandong Province, China)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Scope.

1. 1 Purpose.

Medical gloves: latex surgical gloves powder free sterile First+Care (sizes: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9) (hereinafter Sterile Medical gloves) – sterile disposable products for general use in medical and medical and preventive medical institutions are designed to protect a health-care worker from exposure to harmful factors of the external production environment, to reduce the risk of infection of patients with microbes that are part of the resident flora of the hands of medical workers.

1.2 Use.

Sterile surgical gloves are intended for use in medical and medical-preventive medical institutions as protective equipment for surgical operations, diagnostic, medical procedures or for medical manipulations requiring compliance with sterility conditions.

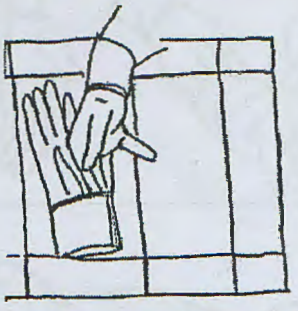
1.3 Indications for use.

- for any surgical intervention: for large and small surgical operations, for small surgical operations on the skin and other manipulations associated with penetration into the tissues under the skin, in the mucous membranes, for endoscopic manipulations, for obstetrics, and for bandaging;
- to protect a health-care worker and patients during manipulations related to access to sterile areas of the body (vessels, genitourinary tract, tracheobronchial tree), rectal, vaginal examination, contact with mucous membranes and etc.;
- for the preparation of drugs for total parenteral administration;
- gloves are used when covering a sterile table and laying on a sterile sheet of instruments, removing moisture residues, placing them in a sterile tool bag, endoscopes after sterilization;
- to protect a health-care worker and a patient when there is a risk of infection with direct contact with the patient (his/her biological matrixes) or contact with mucous membranes, damaged skin, with blood or other biological substrates that are potentially or clearly contaminated by microorganisms;

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2. Rules for use.

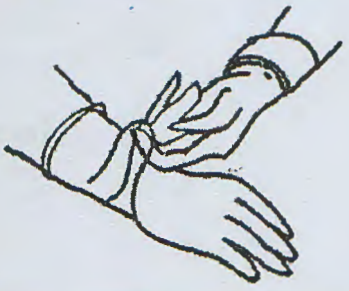
2.1 How to don the gloves

1. Take the fingers of the right hand in the glove for the lapel on the left glove, touching it from the outside, make a lapel; 2. Take the glove for the right hand for the lapel so that the fingers do not touch the inner surface of the glove;	
3. Shorten the fingers of your right hand and insert them into the glove;	
4. Put on the glove without breaking its lapel, breaking the fingers of the right hand;	
5. Take the glove for the left hand with the second, third and fourth fingers of the right hand (in the glove) for the lapel so that the fingers do not touch the inner surface of the glove;	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6. To shorten the fingers of the left hand and insert them into the glove; Straighten the lapels on the left, then the right gloves, pulling them onto the sleeve.	

2.2 How to remove the gloves

process	justification
1. Take the fingers of the right hand in the glove for the lapel on the left glove, touching it from the outside, make a lapel;	
2. Take the fingers of the left hand in the glove for the lapel on the right glove, touching it from the outside, make a lapel;	
3. Remove the glove from the left hand, turning it inside out and holding the lapel in the right hand;	
4. With your left hand, take the glove on your right hand for the lapel from the inside and remove it by turning it inside out (the left glove was inside the right).	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2.3 The rules for use:

- The use of medical sterile gloves does not replace hand hygiene. It is necessary to carry out hand treatment in accordance with the manipulation.
- It is necessary to select sterile medical gloves of the appropriate size.
- It is necessary to select sterile medical gloves depending on the nature of the manipulations performed - they should be easily don and not impede movement or squeeze the hands.
- When donning medical sterile gloves, no great effort should be exerted.
- When donning sterile medical gloves, the established technique should be used, that will ensure the sterility.
- Before donning the sterile medical gloves for performing medical procedures, it is necessary to prepare a workplace - ready-to-use sterile instruments and consumables should be on the manipulation table. It is necessary to ensure their availability without compromising the sterility of the hands.
- Do not use medical sterile gloves in damaged packaging. Sterility may be impaired.

2.3.1 To replace the gloves in case of:

- a visible defect;
- possible or actual puncture.
- if the glove begins to swell, stretch, stick or not seated on the hand as a result of the absorption of liquids by the material.
- in accordance with the rules adopted in the institution.
- during the transition from performing "dirty manipulations" to "clean ones", and also when changing from one patient to another one.
- every two hours of continuous operation;

3 Product description and its main specifications.

Medical gloves: latex surgical gloves powder free sterile First+Care (sizes: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Gloves' material – 100% latex
Surface: textured, ensure reliable gripping of both dry and wet tool
Form: anatomical, not ambidextrous.
Cuff options: with roller on the edge of the cuff.
The cuff fits tight.
Control Level and AQL (Acceptable Quality Limit) 1,5

Physical sizes:

Size	Length, mm	Width, mm	Cuff's thickness mm.	Fingers' thickness mm.	Palm's thickness mm
6	≥265	77±5	0.11±0.01	0.17±0.01	0.15±0.01
6,5	≥265	83±5	0.11±0.01	0.17±0.01	0.15±0.01
7	≥270	89±5	0.11±0.01	0.17±0.01	0.15±0.01
7,5	≥270	95±5	0.11±0.01	0.17±0.01	0.15±0.01
8	≥270	103±5	0.11±0.01	0.17±0.01	0.15±0.01
8,5	≥280	109±5	0.11±0.01	0.17±0.01	0.15±0.01
9	≥280	114±5	0.11±0.01	0.17±0.01	0.15±0.01

Weight of the glove

Size	Weight
6	7.0 g±3
6,5	7.5 g±3
7	8.0 g±3
7,5	8.6 g±3
8	9.5 g±3
8,5	9.9 g±3
9	10.5 g±3

Physical properties:

Force at break (N)		Elongation at break %	
Before Aging	After Aging	Before Aging	After Aging
12.5	9.5	≥700	≥550

4. Labeling.

Single package.
Sterile gloves packaging
The following data are indicated on a single package of sterile gloves:
1) name and trade mark, manufacturer

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2) Importer.
3) material used;
3) words «textured», «powder free»
4) size;
5) Batch number;
7) date of manufacture and shelf life;
8) word «single use»
9) words «surgical gloves», «anatomical»
10) warning of the possibility of an allergic reaction to latex
11) storage and transportation conditions

Group package.

The group package contains a certain number of single packages of gloves of the same size, ensuring safe transportation and storage. The group packages are marked with the number of pairs of gloves and additional instructions for storage

5. Storage and transportation conditions.

5.1 Gloves are transported by all modes of transport in accordance with the transportation rules applicable for this type of transport in original factory packages - cardboard boxes in a protected from direct sunlight at a temperature of 5 ° C to 30 ° C and 65% relative humidity.

5.2 Gloves are stored in original factory group cardboard packages in a well-ventilated area away from heat sources, sunlight, direct exposure to light sources and electrical equipment, with an optimum humidity of 65%. At a storage temperature of 5 ° C to 30 ° C. - otherwise there may be difficulties due to loss of elasticity by gloves.

6. Package

The gloves are packed in packages and transport boxes.
Single package - 1 pair
Quantity in the package - 50 pairs
In the box - 10 packs * 50 pairs

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

In the box there are 500 pairs

7. Shelf life

The shelf life of the product (indicated on the package and the box) is 5 years from the manufacture date indicated on the packaging.

8. Warranty

The manufacturer guarantees the compliance with all specifications and characteristics, during the entire shelf life – that is 5 years - subject to the integrity of the packaging and the compliance with the storage, transportation and use conditions in accordance with the instructions for use.

9. Special instructions

Restrictions on age and user status are determined by the nature of the work performed. The gloves should be used as indicated, in accordance with a certain size. Do not use after the expiration date. In exceptional cases in people prone to allergy to latex, an allergic reaction is possible. The employee must be familiar with this instruction and have a qualification appropriate to the nature of the work performed. The gloves are disposable, methods of care are not provided for.

10. Procedure for the recycling and disposing of gloves.

Sterile surgical gloves are disposable medical products. After use, the gloves are to be collected, temporarily stored, removed and disposed in accordance with the medical waste management rules adopted by the health care organization.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ по оказанию услуг
«ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ»
220073, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 25-610
р/с BY16BLBB30120100121135001001
отделение №538 ОАО «Белинвестбанк»
БИК BLBBBY2X, г. Минск
УНП 100121135 т. 2077761, ф. 2227978
моб. +375296640651 E-mail: 2077761@mail.ru

Инструкция по применению

Перчатки медицинские: перчатки латексные хирургические неопудренные стерильные First+Care (размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9)

Производитель: Шаньдун Юйюань Латекс Главс Ко., Лтд. (Промышленная зона, г. Линьцин провинция Шаньдун Китай).

ПЕРЕВОД СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
«ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ»
220073, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 25-610
р/с BY16BLBB30120100121135001001
отделение №538 ОАО «Белинвестбанк»
БИК BLBBBY2X, г. Минск
УНП 100121135 т. 2077761, ф. 2227978
моб. +375296840651 E-mail: 2077761@mail.ru

1. Сфера применения.

1. 1 Назначение.

Перчатки медицинские: перчатки латексные хирургические неопудренные стерильные First+Care (размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9) (далее по тексту перчатки медицинские стерильные) – стерильные изделия одноразового использования широкого применения в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях предназначены для защиты медицинского персонала от воздействия вредных факторов внешней производственной среды, для снижения риска заражения пациентов микробами, являющимися частью резидентной флоры рук медицинских работников.

1.2 Применение.

Перчатки медицинские стерильные хирургические предназначены для применения в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях в качестве защитных средств при проведении хирургических операций, диагностических, лечебных процедур или для медицинских манипуляций требующих соблюдения условий стерильности.

1.3 Показания к применению.

- при любом хирургическом вмешательстве: при больших и малых хирургических операциях, при малых хирургических операциях на коже и других манипуляциях, связанных с проникновением в ткани под кожу, в слизистые оболочки, при эндоскопических манипуляциях, при родовспоможении, при перевязках;
- для защиты медицинского персонала и пациента при проведении манипуляций, связанных с доступом к стерильным участкам организма (сосуды, мочеполовой тракт, трахеобронхиальное дерево), при ректальных, вагинальных исследованиях, контакте со слизистыми и пр.;
- при приготовлении препаратов для тотального парентерального введения;
- при накрытии стерильного стола и выкладывании на стерильную простыню инструментов, при удалении остатков влаги, помещении в стерильный чехол инструментов, эндоскопов после стерилизации.
- для защиты медицинского персонала и пациента, когда существует риск заражения при непосредственном контакте с больным (его биологическими средами) или возможен контакт со

ПЕРЕВОД СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ

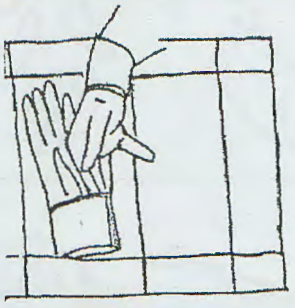
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

слизистыми оболочками, поврежденной кожей, с кровью или другими биологическими субстратами, которые потенциально или явно контаминированы микроорганизмами;

2. Правила применения.

ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ по оказанию услуг
«ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ»
220073, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 25-610
р/с BY16BLBB30120100121135001001
отделение №536 ОАО «Белинвестбанк»
БИК BLBBBY2X, г. Минск
УНП 100121135 т. 2077761, ф. 2227978
моб. +375296640651 E-mail: 2077761@mail.ru

2.1 Надевание печаток

1. Взять перчатки в стерильной упаковке, развернуть; 2. Взять, перчатку для правой руки за отворот так, чтобы пальцы не касались внутренней поверхности перчатки;	
3. Сомкнуть пальцы правой руки и ввести их в перчатку;	
4. Надеть перчатку, не нарушая ее отворота, разомкнув пальцы правой руки;	
5. Взять перчатку для левой руки вторым, третьим и четвертым пальцами правой руки (в перчатке) за отворот так, чтобы пальцы не касались внутренней поверхности перчатки;	

ПЕРЕВОД СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ

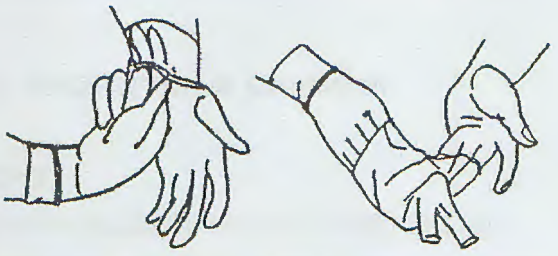
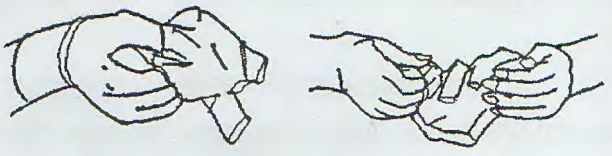
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ» ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ г. МИНСК

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ по оказанию услуг
«ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ»
220073, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 25-610
р/с BY16BLBB30120100121135001001
отделение №538 ОАО «Белинвестбанк»
БИК BLBBBY2X, г. Минск
УНП 100121135 т. 2077761, ф. 2227978
моб +375296840651 E-mail: 2077761@mail.ru

6. Сомкнуть пальцы левой руки и ввести их в перчатку; 7. Расправить отвороты на левой, затем правой перчатках, натянув их на рукав.	

2.2 Снятие перчаток

1. Взять пальцами правой руки в перчатке за отворот на левой перчатке, касаясь ее с наружной стороны, сделать отворот;	
3. Взять пальцами левой руки в перчатке за отворот на правой перчатке, касаясь ее с наружной стороны, сделать отворот;	
4. Снять перчатку с левой руки, выворачивая ее наизнанку и держа за отворот в правой руке;	
4. Левой рукой взять перчатку на правой руке за отворот с внутренней стороны и снять, выворачивая ее наизнанку (левая перчатка оказалась внутри правой).	

ПЕРЕВОД СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ * ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ * «ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ» * ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ * г. МИНСК *

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
«ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ»
220073, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 25-810
р/с BY16BLBB30120100121135001001
отделение №538 ОАО «Белинвестбанк»
БИК BLBBBY2X, г. Минск
УНП 100121135 т. 2077761, ф. 2227978
моб. +375296840651 E-mail: 2077761@mail.ru

2.3 Правила использования:

- Использование перчаток медицинских стерильных не заменяет гигиены рук. Необходимо проводить обработку рук в соответствии с режимом манипуляции.

- Необходимо подбирать перчатки медицинские стерильные нужного размера.

- Необходимо подбирать перчатки медицинские стерильные в зависимости от характера выполняемых манипуляций – они должны легко надеваться и не должны затруднять движения или сдавливать кисти рук.

- При надевании перчаток медицинских стерильных не должно прилагаться больших усилий.

- При надевании перчаток медицинских стерильных должны использоваться установленные техники надевания, что позволит гарантировать режим стерильности.

- Перед надеванием перчаток медицинских стерильных для выполнения медицинских процедур необходимо подготовить рабочее место – на манипуляционном столе должны лежать готовые к использованию стерильные инструменты и расходные материалы. Необходимо обеспечить их доступность без нарушения стерильности рук.

- Не допускается использование перчаток медицинских стерильных при поврежденной упаковке, т.к. может быть нарушена стерильность.

2.3.1 Необходимо заменить перчатки в случае:

- обнаружения видимого дефекта;

- возможного или действительно имевшего место прокола.

- если перчатка начинает вздуваться, растягиваться, липнуть или неплотно сидит на руке в результате впитывания материалом жидкостей

- в соответствии с правилами, принятыми в учреждении.

- при переходе от выполнения «грязных манипуляций» к «чистым», а также при переходе от одного пациента к другому.

- каждые два часа непрерывной работы;

ПЕРЕВОД СООТВЕТСТВУЕТ
ОРИГИНАЛУ

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ»
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
г. МИНСК

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
«ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ»
220073, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 25-610
р/с BY16BLSB30120100121135001001
отделение №538 ОАО «Белинвестбанк»
моб. +375298640651, E-mail: 2077781@mail.ru

3. Описание изделия и его основные технические характеристики.

Перчатки медицинские: перчатки латексные хирургические неопудренные стерильные First+Care (размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9).

Материал перчаток – 100% латекс

Поверхность: текстурированная, обеспечивают надежный захват инструмента как в сухом, так и во влажном состоянии

Форма: анатомическая - имеют разделение на правую и левую руку.

Варианты манжеты: с валиком по краю манжеты.

Манжета плотно прилегает.

Уровень контроля и AQL (приемлемый уровень качества) -1,5

Физические размеры:

Размер	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина манжета мм.	Толщина пальцев мм.	Толщина ладони мм.
6	≥265	77±5	0,11±0,01	0.17±0.01	0.15±0.01
6,5	≥265	83±5	0,11±0,01	0.17±0.01	0.15±0.01
7	≥270	89±5	0,11±0,01	0.17±0.01	0.15±0.01
7,5	≥270	95±5	0,11±0,01	0.17±0.01	0.15±0.01
8	≥270	103±5	0,11±0,01	0.17±0.01	0.15±0.01
8,5	≥280	109±5	0,11±0,01	0.17±0.01	0.15±0.01
9	≥280	114±5	0,11±0,01	0.17±0.01	0.15±0.01

Вес перчатки

Размер	Вес
6	7.0 g±3
6,5	7.5 g±3
7	8.0 g±3
7,5	8.6 g±3
8	9.5 g±3
8,5	10 g±3
9	10.5 g±3

Физические свойства:

Предел прочности при растяжении (Мпа)		Удлинение %	
До изнашивания	После изнашивания	До изнашивания	После изнашивания
12.5	9.5	≥700	≥550

4. Маркировка.

Единичная упаковка.

Упаковка стерильных перчаток

ПЕРЕВОД СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ» ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ г. МИНСК

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

На единичной упаковке стерильных перчаток указаны следующие данные:

1) наименование и торговая марка, производитель
2) Импортер.
3) использованный материал;
3) слова «текстурированные», «неопудренные»;
4) размер;
5) Номер партии;
7) дата изготовления и срок хранения;
8) слово «одноразовые»
9) слова «перчатки хирургические», «анатомическая форма»
10) предупреждение о возможности аллергической реакции на латекс
11) условия хранения и транспортировки

Групповая упаковка.

Групповая упаковка содержит определенное количество единичных упаковок перчаток одинакового размера, обеспечивающих безопасное транспортирование и хранение. На групповых упаковках нанесена маркировка с указанием количества пар перчаток и дополнительные инструкции для хранения.

5. Условия транспортировки и хранения.

5.1 Перчатки транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами транспортирования, действующими для данного вида транспорта в оригинальных заводских транспортных упаковках - коробках из плотного картона в защищённом от воздействия прямых солнечных лучей в транспорте при температуре от 5°С до 30°С и относительной влажности 65 %.

5.2 Перчатки хранятся в оригинальных заводских групповых упаковках из плотного картона в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, солнечных лучей, прямого воздействия источников света и электрического оборудования, с оптимальной влажностью 65%. При температуре хранения от 5°С до 30°С. - иначе могут возникнуть затруднения вследствие потери перчатками эластичности.

ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
«ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ»
220073, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 25-810
р/с BY16BLSB30120100121135001001
отделение №538 ОАО «Белинвестбанк»
БИК BLBBBY2X, г. Минск
УНП 100121135 т. 20777761, ф. 2227978
моб. +375296640651 E-mail: 2077761@mail.ru

ПЕРЕВОД СООТВЕТСТВУЕТ ОРИГИНАЛУ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ по оказанию услуг
«ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ»
220073, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 25-810
р/с BY16BLBB30120100121135001001
отделение №538 ОАО «Белинвестбанк»
БИК BLBBBY2X, г. Минск
УНП 100121135 т. 2077761, ф. 2227978
моб. +375296640651 E-mail: 2077761@mail.ru

6. Упаковка

Перчатки упакованы в упаковки и транспортные короба.
Единичная упаковка – 1 пара
Количество в упаковке – 50 пар
В коробке – 10 упаковок*50 пар
В коробке – 500 пар

7. Срок хранения

Срок хранения изделия (указан на упаковке и коробке) – 5 лет с даты производства, указанной на упаковке.

8. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует сохранность всех их параметров и характеристик, в течение всего срока годности – 5 лет – при условии целостности упаковки и соблюдении условий хранения, транспортирования и использования в соответствии инструкцией по применению.

9. Особые указания

Ограничения по возрасту и состоянию пользователя определяются характером выполняемых работ. Применять по назначению, в соответствии с определенным размером. Не использовать после истечения срока годности. В исключительных случаях возможна аллергическая реакция у людей, склонных к аллергии на латекс. Работник должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией и иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Перчатки одноразовые, способы ухода не предусмотрены.

10. Порядок осуществления утилизации и уничтожения перчаток.

Перчатки медицинские стерильные хирургические являются одноразовыми медицинскими изделиями. После использования перчатки подлежат сбору, временному хранению, вывозу и утилизации в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в организации, осуществляющей медицинскую деятельность.

ПЕРЕВОД СООТВЕТСТВУЕТ
ОРИГИНАЛУ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru