**10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ BY 800017554.054-2015 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем.

10.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу:

225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая ,31б, к.4.

**11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

11.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

11.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Столик для манипуляций на руке СР ТУ BY 800017554.054-2015 заводской №_____

Приобретен_____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию_____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____города_____

Подпись и печать руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения - владельца

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


**СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»**

# СТОЛИК ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ НА РУКЕ СР

**ТУ BY 800017554.054-2015**

Паспорт

БИПЯ.942813.054 ПС

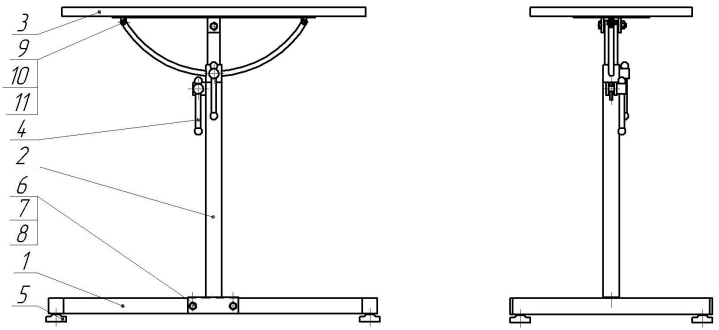


1. Основание
2. Стойка
3. Панель
4. Фиксатор
5. Опора
6. Болт М8х40
7. Гайка М8
8. Шайба 8
9. Болт М4х30
10. Гайка М4
11. Шайба 4

Рисунок

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Столик для манипуляций на руке СР (далее – столик) предназначен для забора крови с целью проведения лабораторных исследований, а также для проведения манипуляций на руке (мелкого хирургического и постхирургического вмешательства: например, удаление фурункула, зашивание ран, перевязка и т.п.) в медицинских учреждениях.

1.2 Столик предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10ºС до +35ºС и относительной влажности 80% при температуре +25ºС.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры столика, мм:
длина……..……650±10
ширина…….....400±10
высота……620…1000
2.2 Габаритные размеры панели, мм:
длина……600±10
ширина…….....320±10
2.3 Масса, кг, не более……..…….....8,5
2.4 Номинальная нагрузка на панель, кг……..…10±1
2.5 Угол наклона панели, не менее ……70º
2.6 Срок службы, лет, не менее…….……..……5

## 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы.

| Наименование | Кол., шт. | Наименование | Кол., шт. |
|---|---|---|---|
| Основание | 1 | Гайка М8 | 3 |
| Стойка | 1 | Шайба 8 | 3 |
| Панель | 1 | Болт М4х30 | 2 |
| Фиксатор | 2 | Гайка М4 | 2 |
| Опора | 4 | Шайба 4 | 2 |
| Болт М8х40 | 3 | Паспорт | 1 |

## 4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Столик (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из основания 1, стойки 2, панели 3, фиксаторов 4, регулируемых опор 5.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Столик поставляется потребителю в упакованном виде.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.3 Распакуйте столик, очистите его от пыли.

4.4 Осмотрите столик для определения его состояния после транспортирования и хранения.

4.5 Соберите столик согласно рисунка. Прикрепите панель 3 к стойке 2 при помощи крепежа 9,10,11 и 6,7,8.Соедините основание 1 со стойкой 2 при помощи крепежа 6,7,8. С помощью регулируемых опор 5 выставьте столик на полу. Отрегулируйте высоту и наклон столика с помощью фиксаторов 4.

4.6 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной 3,0 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства либо 1,0 % раствором монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193(салфетка должна быть отжата). Также допускается проводить обработку дезсредствами, разрешенными к применению Минздравом Республики Беларусь.

## 5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации столика необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения.

## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Столик в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50ºС до +50º С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25º С.

6.2 Хранить столик допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50ºС до +40ºС и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик для манипуляций на руке СР, заводской №_____ соответствует ТУ BY 800017554.054-2015 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____

м.п.

Подпись ответственного за приемку_____

## 8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Столик для манипуляций на руке СР, заводской №_____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки_____

Упаковку произвел_____ м.п._____ Подпись