ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения:

Катетеры дренажные Силиконовые/ **Silicone**.

Размер круглого в сечении катетера по Шарьеру: 10, 15, 19
Ширина плоского в сечении катетера, мм: 7, 10
Длина дренажа, мм: 500
Длина части катетера с каналами, мм: 200, 280
Наличие троакара: да/нет
Наличие переходника для присоединения к устройствам дренирующим: да/нет
Цвет катетера: белый/прозрачный

1. Вскройте индивидуальную упаковку изделия в асептических условиях.
2. Введите дренажный катетер в рану, пользуясь маркировкой черного цвета на дренаже для обеспечения расположения его отверстий под кожей.
3. При наличии троакара отрежьте его после установки катетера.
4. Соедините катетер с дренажным устройством посредством коннектора.
5. Активируйте дренирование раны.
6. Располагайте дренажное устройство ниже уровня дренируемой полости для обеспечения наилучших результатов.
7. При заполнении дренажного устройства опорожните его в подставленную емкость и снова активируйте дренирование.
8. Удаление дренажных катетеров следует производить с осторожностью, с применением легкого вытягивающего движения.
9. Осмотрите дренажный катетер после удаления и убедитесь в отсутствии возможных повреждений.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КонваТек" ОГРН 1027700254398 * МОСКВА *

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ШОР О.А

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения:

Устройство дренирующее UnoVac с/без катетера дренажного Ulmer/Redon, катетеры дренажные Ulmer, Redon, Spiral и Y-образный катетер (коннектор) UnoVac, мешок UnoVac для сбора раневого отделяемого.

Емкость вакуумной камеры, мл: 300
Шаг шкалы вакуумной камеры, мл: 10/20/200
Стартовый уровень вакуума при полностью сжатой камере: 95 мм.рт.ст
Количество встроенных невозвратных клапанов: 2
Емкость мешка сборного для устройства дренирующего UnoVac, мл: 600
Шаг шкалы, мл: 25/50/100
Кол-во катетеров дренажных: 0/1/2
Тип катетера дренажного: Ulmer
Размер катетера дренажного по Шарьеру: 10, 12, 14, 16, 18
Внутренний/наружный диаметр
катетера дренажного, мм: 2.0/3.3, 2.2/4.0, 2.4/4.7, 3.0/5.6, 3.5/6.0
Длина катетера дренажного, мм: 500, 750
Длина перфорированной части катетера дренажного Ulmer, мм: 80-120
Наличие троакара: да/нет
Длина приводной трубки, мм: 1050

Мешок UnoVac для сбора раневого отделяемого

Емкость резервуара, мл: 600
Наличие гидрофобного антибактериального фильтра: да
Наличие шкалы на резервуаре: да
Шаг шкалы, мл: 25/50/100
Тип коннектора: специальный поворотный
Наличие встроенного невозвратного клапана: да/нет
Наличие закручивающейся крышки: да

Y- образный катетер (коннектор) UnoVac

Размер коннекторов для катетеров дренажных по Шарьеру: 6-18
Кол-во присоединяемых катетеров дренажных: 2

1. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Устройства дренирующие применяются в хирургической практике.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Устройства дренирующие применяются для активного низковакуумного послеоперационного дренирования области оперативного вмешательства с целью контроля возможного послеоперационного кровотечения, снижения риска развития ретенционных и инфекционных осложнений.

2. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия должны быть использованы в соответствии с показаниями и противопоказанию к их применению в клинической практике.
Устройства одноразовые дренирующие для хирургии предназначены для применения врачами, средним медицинским персоналом или другими квалифицированными медицинскими работниками.

Только для однократного применения. Повторное применение недопустимо.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Убедитесь, что индивидуальная упаковка изделия не повреждена. При нарушенной индувидуальной упаковке использовать изделие запрещается, изделие должно быть утилизировано в соответствии с действующими нормами.
Рекомендуется применять перчатки при работе с изделием.

1. Вскройте упаковку изделия в асептических условиях.
2. Снимите защитный колпачок со стального троакара дренажного катетера (при наличии). Если катетеры отсутствуют, используйте катетеры, упакованные отдельно от устройства.
3. Установите дренажный катетер в ране, пользуясь маркировкой черного цвета на дренаже для обеспечения расположения его отверстий под кожей. Отрежьте троакар (при наличии).
4. Для установки двух дренажных катетеров используйте Y-образный катетер (коннектор) UnoVac. Для этого отрежьте коннекторы изделия на необходимом уровне в соответствии с размерами дренажных катетеров, пользуясь насечками на коннекторах с указанными размерами по Шарьеру.
5. Плотно соедините приводную трубку вакуумной камеры с дренажным катетером (или Y-коннектором в случае установки одновременно двух дренажных катетеров) посредством универсального закручивающегося коннектора.
6. Присоедините мешок UnoVac для сбора раневого отделяемого к вакуумной камере с помощью поворотного коннектора.
7. Чтобы активировать дренирование раны, полностью сожмите вакуумную камеру большими пальцами обеих рук до упора для обеспечения низкого вакуума.
8. Используя систему креплений, подвесьте устройство, убедившись, что оно расположено ниже уровня дренируемой полости для обеспечения эффективного дренирования.
9. При заполнении вакуумной камеры раневым отделяемым, сожмите ее большими пальцами обеих рук до упора, при этом собравшееся в камере раневое отделяемое

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

попадет в мешок UnoVac для сбора раневого отделяемого устройства, а вакуум в устройстве восстановится.

10. При заполнении мешка UnoVac для сбора раневого отделяемого отсоедините его от вакуумной камеры, повернув коннектор на 90°, и утилизируйте его.
11. При необходимости можно изолировать вакуумную камеру и мешок устройства имеющимися крышками-заглушками.
12. Для использования мешка UnoVac для сбора раневого отделяемого откройте крышку-заглушку на вакуумной камере и подсоедините мешок при помощи поворотного коннектора. Убедитесь в качестве соединения.
13. Удаление дренажных катетеров следует производить с осторожностью, с применением легкого вытягивающего движения. Осмотрите дренажный катетер после удаления и убедитесь в отсутствии возможных повреждений.
14. По окончании использования изделия утилизируйте все части изделия в соответствии с протоколом, принятым в вашем лечебном учреждении.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ШОРОБА



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения:

Катетер кислородный (канюля носовая)

Функциональное назначение медицинского изделия

Изделие предназначено для доставки кислорода к пациенту во время кислородной терапии.

Показания

Изделия показаны пациентам, которым необходимо проведение кислородной терапии.

Противопоказания

Не имеется общепризнанных противопоказаний для применения изделия.

Инструкция по применению

1. Откройте упаковку и извлеките изделие.
2. Вставьте канюлю в ноздри пациента.
3. Зафиксируйте изделие над ушами и под подбородком пациента.
4. Аккуратно зафиксируйте канюлю путем движения бегунка до тех пор, пока носовая канюля не будет правильно установлена.
5. Прикрепите увлажнитель к источнику кислорода (при необходимости).
6. Присоедините трубку подачи кислорода к источнику кислорода или увлажнителю и отрегулируйте скорость потока до уровня, предписанного врачом.
7. Убедитесь в движении потока кислорода по всему устройству.
8. Присоедините коннектор Луер к устройству мониторинга CO2 (при необходимости подключения разъема изделия к источнику кислорода с 22-мм коннектором, воспользуйтесь кислородным адаптером, который поставляется в упаковке с канюлей).
9. Изделие предназначено только для одноразового применения.
10. Изделие не разрешается использовать, если упаковка повреждена.

Иллюстрированная инструкция по применению (памятка потребителю) вкладывается в каждую групповую упаковку изделия (смотрите приложение 1 настоящей инструкции).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Рекомендуется сохранять инструкцию до тех пор, пока не будут использованы все изделия из групповой упаковки.

Предостережения

Изделие предназначено только для однократного применения и не должно использоваться повторно. Повторное использование может привести к увеличению риска возникновения инфекции и перекрестной контаминации, а также к утрате физических свойств изделия, необходимых для его использования по назначению. Изделия с поврежденной упаковкой не применимы к использованию. Изделия с истекшим сроком годности не следует использовать для пациентов, они подлежат утилизации. Носовая канюля обычно используется в ситуациях, требующих небольшого количества кислорода, без жесткого контроля дыхания, таких как оксигенотерапия.

Область применения медицинского изделия

Канюли используются в условиях стационара (в медицинском учреждении) - в отделениях реанимации, интенсивной терапии, анестезиологии исключительно квалифицированным медицинским персоналом со специальной подготовкой.

Условия применения

Температура окружающей среды: от +10°С до +40°С.
Относительная влажность воздуха: не более 80%.
Атмосферное давление: от 84 до 106,7 кПа.

Побочные реакции

При использовании изделия квалифицированным медицинским персоналом в соответствии с инструкцией по применению никаких побочных эффектов не возникает. Тем не менее, в состав изделия входит ПВХ, который может вызвать аллергическую реакцию на коже.

Частота замены изделия

Изделие является одноразовым и предназначено для использования одним пациентом. Частота замены определяется квалифицированным медицинским персоналом в соответствии с протоколами, принятыми в ЛПУ.

Акционерное общество "КонваТек" ОГРН 1027700254388 г. Москва
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ФОР О.А

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения:

Катетер желудочный

1. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам изделия.

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Наденьте перчатки.
2. Подберите подходящий размер катетера в соответствии с физическими характеристиками пациента. Цветомаркированные воронкообразные коннекторы позволяют быстро определить размер катетера и могут использоваться со всеми стандартными адаптерами.
3. Визуальным осмотром определите целостность индивидуальной упаковки. В случае повреждения индивидуальной упаковки использование катетера запрещается. Катетер подлежит уничтожению.
4. При необходимости – доведите до пациента информацию о сути и задачах процедуры катетеризации.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Вскройте индивидуальную стерильную упаковку изделия со стороны несклеенного участка.

Катетеры (зонды) **желудочные** применяются для аспирации желудочного содержимого и промывания желудка, введения лекарственных средств, а также для энтерального питания.

1. Осторожно введите катетер (зонд) в желудок пациента через рот.
2. Убедитесь в правильности введения катетера.
3. Произведите промывание желудка пациента, введение лекарственных средств или энтерального питания в соответствии с действующими инструкциями. Соблюдайте рекомендуемую в каждой конкретной клинической ситуации скорость и длительность осуществления процедуры.
4. Извлеките катетер (зонд) вытягивающим движением по окончании процедуры.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. После использования изделие утилизируйте в соответствии с правилами, принятыми в вашем ЛПУ. Вторичное использование катетера (зонда) запрещается.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хранить в темном прохладном месте, избегать воздействия высоких температур, прямого дневного света и высоких доз радиации.
Обеспечить условия хранения, исключающие повреждение упаковки.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ШОР О.А

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения:
Катетеры одноразовые для анестезиологии и реанимации

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Катетеры одноразовые для анестезиологии и реанимации применяются для обеспечения движения жидких сред и воздуха к естественным полым органам пациента и от них.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер – оптимальный в соответствии с выполняемыми функциями конкретного изделия.
Форма конца катетера – определяется направлением использования изделия.
В зависимости от целей и задач применения выполняются из различных материалов, обьединенных общими характеристиками: термопластичных, имплантационно нетоксичных, биосовместимых, не содержащих фталатов.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам изделия.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Наденьте перчатки.
2. Подберите подходящий размер катетера в соответствии с физическими характеристиками пациента. Цветомаркированные воронкообразные коннекторы позволяют быстро определить размер катетера и могут использоваться со всеми стандартными адаптерами.
3. Визуальным осмотром определите целостность индивидуальной упаковки. В случае повреждения индивидуальной упаковки использование катетера запрещается. Катетер подлежит уничтожению.
4. При необходимости – доведите до пациента информацию о сути и задачах процедуры катетеризации.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Вскройте индивидуальную стерильную упаковку изделия со стороны несклеенного участка.

Питающие катетеры применяются для введения пищи и лекарственных средств новорожденным и маленьким детям.

1. Бережно ввести катетер в желудок ребенка через одно из ноздревых отверстий или рот.
2. Проверить правильность введения катетера в желудок. Для этого при помощи шприца провести забор желудочной жидкости. (Внимание! При введении катетера возможно

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

его попадание вместо желудка в дыхательные пути и в таком случае введение пищи или лекарств грозит смертью).

3. После проверки правильности введения катетера зафиксировать его на поверхности щеки или носа при помощи пластыря или фиксирующей повязки.
4. По окончании процедуры герметично закройте коннектор пробкой, расположенной на коннекторе.
5. По гигиеническим соображениям замена питающего катетера должна производиться по меньшей мере раз в неделю.
6. Размер катетера выбирается доктором, исходя из физических характеристик пациента (веса, роста и др.)
7. После использования изделие утилизировать в соответствии с правилами, принятыми в вашем ЛПУ. Вторичное использование катетера (зонда) запрещается.

Катетеры (зонды) **желудочные** применяются для аспирации желудочного содержимого и промывания желудка, введения лекарственных средств, а также для энтерального питания.

1. Осторожно введите катетер (зонд) в желудок пациента через рот.
2. Убедитесь в правильности введения катетера.
3. Произведите промывание желудка пациента, введение лекарственных средств или энтерального питания в соответствии с действующими инструкциями. Соблюдайте рекомендуемую в каждой конкретной клинической ситуации скорость и длительность осуществления процедуры.
4. Извлеките катетер (зонд) вытягивающим движением по окончании процедуры.
5. После использования изделие утилизируйте в соответствии с правилами, принятыми в вашем ЛПУ. Вторичное использование катетера (зонда) запрещается.

Катетеры (зонды) **дуоденальные** применяются для аспирации содержимого двенадцатиперстной кишки после оперативных вмешательств, введения лекарственных средств и для проведения энтерального питания.

1. Осторожно введите катетер (зонд) в тонкий кишечник (двенадцатиперстную кишку) пациента через рот.
2. Убедитесь в правильности введения катетера.
3. Произведите аспирацию содержимого двенадцатиперстной кишки пациента, введение лекарственных средств или энтерального питания в соответствии с действующими правилами. Соблюдайте рекомендуемую в каждой конкретной клинической ситуации скорость и длительность осуществления процедуры.
4. Извлеките катетер (зонд) вытягивающим движением по окончании процедуры или по мере необходимости.
5. После использования изделие утилизируйте в соответствии с правилами, принятыми в вашем ЛПУ. Вторичное использование катетера (зонда) запрещается.

Катетеры (зонды) **ректальные** применяются как газоотводная трубка, а также для введения лекарственных средств и дренажа прямой кишки.

1. Осторожно введите катетер (зонд) в прямую кишку пациента.
2. Убедитесь в правильности введения катетера.
3. Произведите необходимые процедуры (промывание прямой кишки пациента, отведение газов, введение лекарственных средств) в соответствии с действующими

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

правилами. Соблюдайте рекомендуемую в каждой конкретной клинической ситуации скорость и длительность осуществления процедуры.
4. Извлеките катетер (зонд) после окончания процедуры.
5. После использования изделие утилизируйте в соответствии с правилами, принятыми в вашем ЛПУ. Вторичное использование катетера (зонда) запрещается.

Катетеры **кислородные** (канюли носовые) применяются для кислородной терапии. Их использование позволяет пациенту разговаривать и принимать пищу, не прерывая терапию. Атравматичная форма назальной части удобна для пациента и снижает риск повреждения слизистой.

1. Расположите кислородный катетер перед лицом пациента так, чтобы носовые канюли были обращены к носовым ходам.
2. Медленно введите канюли в носовые ходы пациента и заведите трубку за уши пациента.
3. Подведите трубку под подбородок и закрепите ее, подняв муфту вверх.
4. Проверьте надежность и комфортность расположения катетера.
5. Подключите свободный конец кислородного катетера (канюли носовой) к кислородному дозатору в соответствии с действующими правилами. Соблюдайте предписания врача.
6. Процентное насыщение кислородом при заданной скорости подачи газа может варьироваться в зависимости от особенностей респираторной системы пациента.
7. Удалите катетер по мере необходимости.
8. Утилизируйте катетер после использования. Вторичное использование катетера запрещается.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хранить в темном прохладном месте, избегать воздействия высоких температур, прямого дневного света и высоких доз радиации.
Обеспечить условия хранения, исключающие повреждение упаковки.

Генеральный директор_____Шор О.А.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения:

Устройства для контроля диуреза и внутрибрюшного давления Унометр/UnoMeter.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Устройства для контроля диуреза и внутрибрюшного давления Унометр/UnoMeter применяются для получения четких диагностических данных относительно объема и темпа выделяемой мочи, а также уровня внутрибрюшного давления.

Данная инструкция распространяется на следующие устройства:
1. Унометр 500/Unometer 500.
2. Унометр Сейфети /UnoMeter Safeti.
3. Унометр Сейфети Плюс/UnoMeter Safeti Plus.
4. Унометр Абдо-Прешше/UnoMeter Abdo-Pressure.
5. Унометр Абдо-Прешше набор/UnoMeter Abdo-Pressure Kit.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Безыгольный порт "Комбикон" для взятия проб мочи.
Встроенные невозвратные клапаны.
Встроенные гидрофобные антибактериальные фильтры.
Система удобных измерительных шкал.
Индивидуальная стерильная упаковка.
Полностью закрытые системы.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Отсутствуют.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

1. Визуальным осмотром убедитесь в целостности упаковки и изделий.
2. При наличии повреждений – изделия уничтожьте.
3. Наденьте перчатки.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Унометр 500/Unometer 500; Унометр Сейфети /UnoMeter Safeti; Унометр Сейфети Плюс/UnoMeter Safeti Plus

1. Вскройте одноразовую стерильную упаковку и извлеките из неё изделие. Соблюдайте необходимые правила асептики.
2. Зафиксируйте изделие на раме кровати с помощью системы креплений.
3. Убедитесь, что сливной кран закрыт и повернут вверх.
4. Избегайте провисания приводной трубки с образованием петли.
5. Соедините систему с катетером Фолея через коннектор. Катетеризируйте пациента, соблюдая необходимые рекомендации.
6. Измеряйте объем выделяемой мочи через равные промежутки времени.
7. Фиксируйте результаты в листе наблюдений.
8. Для опорожнения измерительной камеры поверните синий поворотный рычажок в положение открыто (перпендикулярно плоскости устройства). При этом собранная в ней моча попадет в сборный мешок. Верните рычажок в исходное положение.
9. Для опорожнения сборного мешка откройте кран, расположенный в его нижней части, предварительно подставив какую-либо подходящую емкость.
10. При необходимости взятия проб мочи, пережмите приводную трубку ниже порта для взятия проб с помощью соответствующего зажима и при помощи канюли шприца (без иглы) возьмите через порт образцы для анализа.


Унометр Абдо-Прешше/UnoMeter Abdo-Pressure

1. Вскройте одноразовую стерильную упаковку и извлеките из неё изделие. Соблюдайте необходимые правила асептики.
2. Для измерения внутрибрюшного давления присоедините устройство к катетеру Фолея и мочеприемнику через коннекторы. Частота измерения ВБД - 4 часа по протоколу или по требованию.
3. При недостаточном количестве мочи в мочевом пузыре наберите в шприц 20мл стерильного физиологического раствора, вставьте шприц в безыгольный порт КомбиКон и заполните систему.

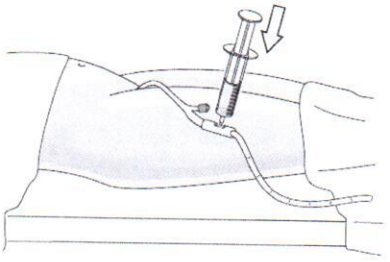


4. Переведите изделие в вертикальное положение, установите нулевое значение шкалы в области проекции большого вертела, откройте красный зажим воздушного фильтра и измерьте внутрибрюшное давление по шкале (шаг измерения 1 мм рт.ст.).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

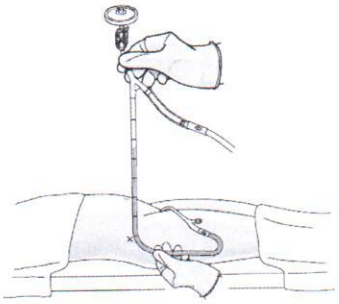


5. Закройте красный зажим и переведите изделие в горизонтальное положение.

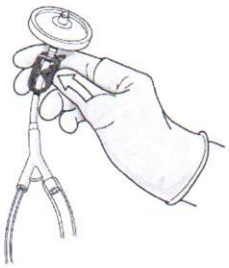

6. Зафиксируйте результаты в листе наблюдений. Внимание: результат Вы получаете в миллиметрах ртутного столба.
7. При необходимости взятия проб мочи, пережмите приводную трубку ниже порта для взятия проб с помощью соответствующего зажима и при помощи канюли шприца (без иглы) возьмите через порт образцы для анализа.

Унометр Абдо-Прешше набор/UnoMeter Abdo-Pressure Kit


1. Вскройте одноразовую стерильную упаковку и извлеките из неё изделие. Соблюдайте необходимые правила асептики.
2. Зафиксируйте изделие на раме кровати с помощью системы креплений.
3. Убедитесь, что сливной кран закрыт и повернут вверх.
4. Избегайте провисания приводной трубки с образованием петли.
5. Соедините устройство с катетером Фолея через коннектор. Катетеризируйте пациента, соблюдая необходимые рекомендации. Частота измерения ВБД - 4 часа по протоколу или по требованию.

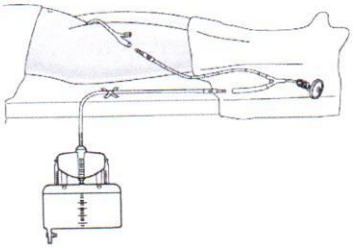


6. Измеряйте объем выделяемой мочи через равные промежутки времени.
7. Фиксируйте результаты в листе наблюдений.
8. Для опорожнения измерительной камеры поверните синий поворотный рычажок в положение открыто (перпендикулярно плоскости устройства). При этом собранная в ней моча попадет в сборный мешок. Верните рычажок в исходное положение.
9. Для опорожнения сборного мешка откройте кран, расположенный в его нижней части, предварительно подставив какую-либо подходящую емкость.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


10. Для измерения внутрибрюшного давления при недостаточном количестве мочи в мочевом пузыре наберите в шприц 20мл стерильного физиологического раствора, вставьте шприц в безыгольный порт КомбиКон и заполните систему.

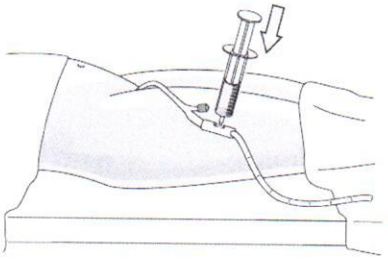

11. Переведите изделие в вертикальное положение, установите нулевое значение шкалы в области проекции большого вертела, откройте красный зажим воздушного фильтра и измерьте внутрибрюшное давление по шкале (шаг измерения 1 мм рт.ст.).

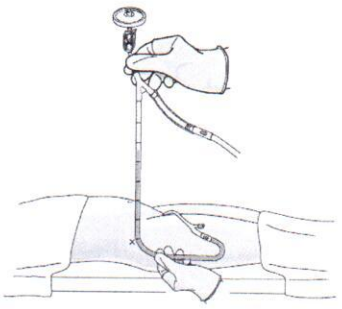

12. Закройте красный зажим и переведите изделие в горизонтальное положение.

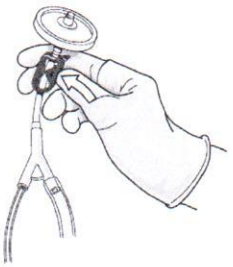

13. Зафиксируйте результаты в листе наблюдений. Внимание: результат Вы получаете в миллиметрах ртутного столба.
14. При необходимости взятия проб мочи, пережмите приводную трубку ниже порта для взятия проб с помощью соответствующего зажима и при помощи канюли шприца (без иглы) возьмите через порт образцы для анализа.
15. Во время транспортировки больного положите устройство на кровать лицевой стороной вверх.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Длительность применения: вплоть до принятия клинических решений, но не более 7 дней (гарантия стерильности системы)
Не допускайте повторной обработки изделия после окончания его использования.
Защищайте продукцию от влаги и чрезмерного нагрева.
Не допускайте длительного воздействия УФ-лучей.
Стерилизация оксидом этилена.
Срок годности (стерилизации) 5 лет.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru