Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Республиканское унитарное предприятие
«Медтехноцентр»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Республиканского унитарного
предприятия «Медтехноцентр»
_____ С.Ф. Кравец
«____» _____ 2019 г.

КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ С ОГРАЖДЕНИЕМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ

Паспорт

ГКСН 057.000.000 ПС

Начальник КТО
Республиканского унитарного
предприятия «Медтехноцентр»
_____ И.И. Николаенко
«____» _____2019г.

КОПИЯ ВЕРНА
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные сведения	3
2 Описание кровати	3
2.1 Назначение	3
2.2Технические характеристики	3
2.3 Комплектность	4
2.4 Состав кровати	4
2.5 Устройство и работа	5
2.6 Ввод в эксплуатацию	5
2.7 Перемещение	6
3 Управление основными функциями кровати	6
4 Транспортирование, хранение и утилизация	7
5 Техническое обслуживание	8
6 Требования безопасности	9
7 Гарантии изготовителя	9
8 Сведения о рекламациях	9
9 Свидетельство об упаковывании	10
10 Свидетельство о приемке	10
11 Монтаж	11
12 Свидетельство о монтаже	11

КОПИЯ ВЕРНА

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ГКСН 057.000.000 ПС		
Разраб.		Гончерёнок			Кровать детская медицинская с ограждением для детей до 3 лет Паспорт	Лит.	Лист 2 / Листов 11
Провер.		Николаенко					
Руковод.						Республиканское унитарное предприятие «Медтехноцентр»	
Н. Контр.							
Утвердил		Кравец					

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Основные сведения

Настоящий паспорт (далее - ПС) предназначен для ознакомления с назначением и технической характеристикой кровати детской медицинской с ограждением для детей до 3 лет (далее по тексту - кровать), и распространяется на кровать ГКСН 057.000.000 и ГКСН 057.000.000-01.

В случае передачи кровати в другое место для эксплуатации или выполнения какого-либо вида ремонта, ПС подлежит передаче вместе с кроватью.

Записи, вносимые отделом технического контроля, должны быть подтверждены штампом. Не заверенные подписью исправления не допускаются.

Примечание - В связи с постоянным техническим совершенствованием, конструкция поставленной заказчику кровати может иметь незначительные изменения не отраженные в ПС, при этом все основные характеристики сохраняются.

2 Описание кровати

2.1 Назначение

Кровать предназначена для ухода за пациентами в организациях здравоохранения.

Назначение кровати – уход за пациентом, нахождение его на больничной кровати с возможностью придания телу больного положений, которые соответствуют тяжести и характеру патологических процессов в организме и которые необходимы для проведения лечебных и диагностических процедур.

Кровать позволяет, без перекладывания пациента, перемещать его в пределах лечебного учреждения и выполнять ультразвуковые и другие виды обследования.

Конструкция кровати является сборной.

Управление кроватью осуществляется механическим способом.

Кровать изготавливается по конструкторской документации согласно ТО BY 102307694 в климатическом исполнении УХЛ 4.2. по ГОСТ 15150-69 и эксплуатируется в помещениях при температуре окружающей среды от плюс 10 °С до плюс 40 °С, относительной влажности 85 % при плюс 25 °С.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРНА

2.2 Технические характеристики

2.2.1 Основные параметры и размеры

Диаметр колёсной опоры – 125 мм.

Грузоподъёмность колёсной опоры – 100 кг.

Система блокировки – на двух колёсных опорах.

Максимальное усилие, необходимое для перемещения кровати на колёсных опорах по твёрдому горизонтальному покрытию, прикладываемое к средине торец-спинки кровати, не более 200 Н.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Усилие, необходимое для подъёма бокового ограждения, прикладываемые к его середине, не более 50 Н.

Грузоподъёмность кровати, не более 30 кг.

Высота до уровня ложа кровати 300±10 или 500±10 мм.

Габаритные размеры ложе кровати, не более: 1200х600 мм.

Габаритные размеры кровати (без навесного оборудования), не более: 1480х675х1050 мм.

Масса кровати, не более:

ГКСН 057.000.000 33 кг.

ГКСН 057.000.000-01 33 кг.


2.3 Комплектность

Таблица 1- комплект поставки

Наименование и обозначение	Единица измерения	Количество	Примечание
Кровать ГКСН 057.000.000 (-01)	шт	1	
Паспорт ГКСН 057.000.000 ПС	шт	1	
Штатив для длительных вливаний ГКСН 057.006.000	шт	1	В зависимости от комплектации кровати
Кронштейн ГКСН 057.002.000	шт	1	В зависимости от комплектации кровати
Планшет для информации В-715.000.000	шт	1	В зависимости от комплектации кровати

2.4 Состав кровати

Общий вид кровати показан на рисунке 1

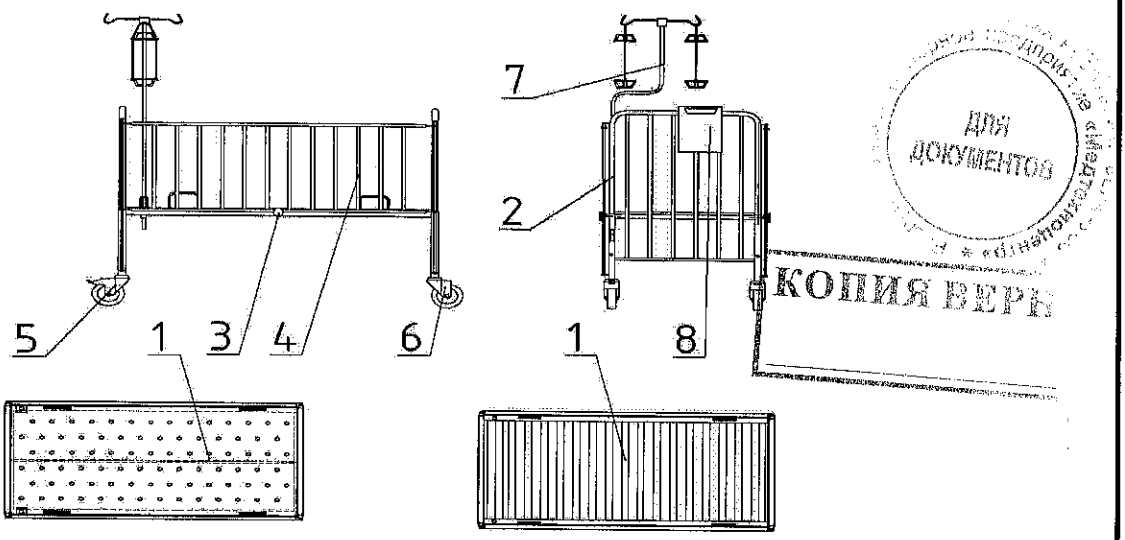

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРН

Рисунок 1 - Общий вид кровати детской медицинской с ограждением для детей до 3 лет

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1- ложе;
2- торец-спинка;
3- фиксатор;
4- ограждение;
5- опора колёсная с тормозом;
6- опора колёсная без тормоза;
7- штатив для длительных вливаний;
8- планшет для информации.

2.4.1 Ложе (см. рисунок 1, позиция 1) представляет собой сборочную единицу, состоящую из сварного основания (трубы прямоугольного и квадратного сечения), покрытого плитой полиэтилена вспененного для кровати ГКСН 057.000.000 или состоящую из сварного основания - труб прямоугольного и квадратного сечения для кровати ГКСН 057.000.000-01. Крепится к торец-спинкам с помощью болтов. Ложе может устанавливается на высоте 300 или 500 мм от уровня пола. Имеет полимерное покрытие цвета, согласованного с заказчиком.

2.4.2 Торец-спинка (см. рисунок 1, позиция 2) представляет собой сварную конструкцию, состоящую из труб круглого сечения. Конструкция торец-спинок обеспечивает возможность подъёма (опускания) ограждения по специальным направляющим. Металлические части торец-спинки имеют полимерное покрытие.

2.4.3 Фиксатор (см. рисунок 1, позиция 3) предназначен для установки ограждений над уровнем ложа на фиксированное расстояние, монтируется с обеих сторон ложа.

2.4.4 Ограждение (см. рисунок 1, позиция 4) представляет собой сборную систему, состоящую из поручней и перекладин, выполненных из трубы круглого сечения, смонтированное на направляющих торец-спинок. Ограждение легко перемещается вверх или вниз по направляющим торец-спинок, фиксируется над ложем кровати с помощью фиксатора. Металлические части ограждения имеют полимерное покрытие или могут быть выполнены из металла нержавеющей стали.

2.5 Устройство и работа

2.5.1 Размещение кровати

Кровать устанавливается со свободным промежутком от ближайших окружающих предметов (стена, прикроватная тумбочка) не менее 10 см.

КОПИЯ
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

2.6 Ввод в эксплуатацию

2.6.1 Внимательно изучить настоящий паспорт.

2.6.2 Освободить кровать от упаковочного материала.

2.6.3 В соответствии с паспортом на изделие проверить комплектность поставки. В случае обнаружения недостатков зарегистрируйте их и в письменной форме и информируйте производителя или поставщика изделия.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2.6.4 После того, как кровать будет освобождена от упаковочного материала, оставить кровать непокрытую матрасом и постельными принадлежностями минимум на два часа в помещении, в котором она будет размещена. Если на конструкции кровати возникает конденсат, необходимо подождать ещё минимум два часа с момента полного исчезновения конденсата.

2.6.5 В соответствии с паспортом проверить работоспособность всех частей кровати.

Если проверка работоспособности всех частей кровати прошла без каких-либо проблем, можно приступить к непосредственной эксплуатации кровати.

2.7 Перемещение

Кровать разрешено перемещать, приведя её в исходное положение (боковые ограждения опущены, колёса должны быть расторможены). Перемещение кровати с пациентом выполняется исключительно двумя работниками учреждения здравоохранения.

3 Управление основными функциями кровати

3.1 Опора колёсная с тормозом

Ходовая часть кровати оснащена четырьмя колёсными опорами (далее – колесо) две из которых с тормозом. Кронштейн каждого колеса крепится к торец-спинке при помощи резьбового соединения, свободно (без заеданий) поворачивается вокруг вертикальной оси. Фиксация кровати происходит нажатием в направлении вниз носком ступни внешнего конца тормозной педальки на двух колёсах. Приведение кровати в движение происходит нажатием противоположного конца тормозной педальки каждого заторможенного колеса.

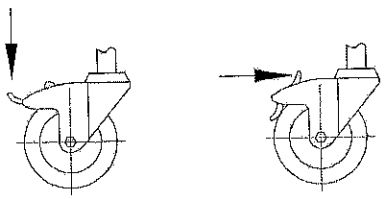


Рисунок 2 – фиксация ходовой части кровати

ВНИМАНИЕ: НА ТОРМОЗНЫЕ ПЕДАЛЬКИ ВСЕГДА НАЖИМАЙТЕ ТОЛЬКО НОСКОМ СТУПНИ.

КОПИЯ ВЕРНА

3.2 Ограждение

Кровать снабжена двумя опускаемыми ограждениями, прикреплёнными к торец-спинкам кровати на специальных направляющих. Ограждение легко перемещаться вверх или вниз кровати.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Поднятие с нижнего положения и фиксация ограждения над уровнем ложа кровати осуществляется следующим путём: одной рукой взяться за верхнюю часть перекладины ограждения (по возможности ближе к центру) и поднять ограждение вверх в направлении 3 (см. рисунок 3) до упора. Второй рукой взяться за шайбу фиксатора (см. рисунок 1, позиция 3) и вытянуть его на себя (в направлении 1 см. рисунок 3) до упора. Затем переместить ограждение в направлении 4, опустив его на фиксатор.

Опускание ограждения проводится в обратном порядке.


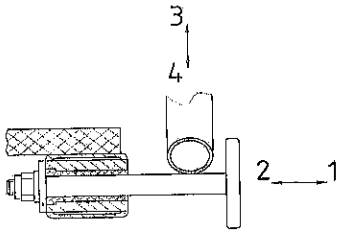


Рисунок 3 – фиксация ограждения кровати

ВНИМАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ УСТАНОВКИ ОГРАЖДЕНИЙ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ПОПАДАНИЯ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ И ПАЛЬЦЕВ РУК МЕЖДУ ЛОЖЕМ КРОВАТИ И ПЕРЕКЛАДИНАМИ ОГРАЖДЕНИЙ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛОМКИ КРОВАТИ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЮ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПАЦИЕНТА ИЛИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА.

3.3 Штатив для длительных вливаний

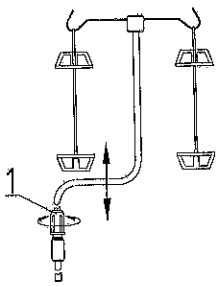

Кровать оборудована штативом для длительных вливаний (далее – штатив), который вставляется у изголовья кровати в раму и крепиться винтами. Высоту штатива над уровнем кровати регулируют следующим образом. Одной рукой придерживают штатив, а другой рукой освобождают цанговый зажим 1, вращая его против часовой стрелки. Освободив зажим, выставляют необходимую высоту штатива над уровнем кровати, после чего зажимают цанговый зажим.

КОПИЯ ВЕРНА

4 Транспортирование, хранение и утилизация

4.1 Кровать транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

4.2 Кровать хранится в помещениях при следующих условиях:
температура окружающей среды от минус 10 ^{0}С до плюс 50 ^{0}С;
относительная влажность воздуха не более 85 % при температуре плюс 25 ^{0}С и ниже, при более высокой температуре влажность должна быть ниже указанной;
в помещении, где хранится кровать, не должно быть веществ, вызывающих коррозию металлических частей.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.3 Утилизация производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.14-20-2005.

5 Техническое обслуживание

5.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения работы кровати в процессе её эксплуатации.

Виды работ и периодичность технического обслуживания представлена в таблице 2.

Таблица 2

Виды работ при техническом обслуживании	Периодичность технического обслуживания
Проверка внешнего вида деталей и узлов с целью установления отсутствия механических повреждений, ржавчины, нарушения лакокрасочных и гальванических покрытий; фиксацию колес; комплектность.	1 раз в месяц
Проверка и очистка деталей и составных частей кровати от пыли, загрязнений, коррозии	1 раз в 6 месяцев
Проверка и проведение затяжки резьбовых соединений, крепежных элементов	1 раз в 6 месяцев
Проверка работоспособности тормозной системы колес, надёжность их крепления. При необходимости смазка колес консистентной смазкой.	1 раз в 6 месяцев
Проверка надежности крепления торец-спинки, ограждений.	1 раз в 6 месяцев
Проверка технических характеристик и работоспособность кровати.	1 раз в год

5.2 Удаление пыли и грязи проводить ватно-марлевым тампоном, при необходимости провести дезинфекцию корпуса модуля протиранием 3 % раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % универсального моющего средства или любым дезинфицирующим средством, разрешенным к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

5.3 Под воздействием моющих и дезинфицирующих средств существует возможность вымывания смазки из сопряженных поверхностей кровати. Необходимо не реже 1 раза в шесть месяцев осмотреть и обработать вазелином техническим ТУ 0255-006-54051488-05 поверхности направляющих торец-спинок.

5.4 Проверка технического состояния проводится для обнаружения возможных неисправностей и контроля основных технических характеристик. После технического обслуживания кровать должна быть чистой и исправной.

КОПИЯ ВЕРНА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Требования безопасности

6.1 К эксплуатации изделия допускаются лица (персонал), ознакомившиеся с настоящим паспортом

6.2 Не допускается использование кровати не по её прямому назначению, а также использование кровати при наличии неисправностей или повреждений.

6.3 Перемещение кровати допускается только после установки тормозной педальки опоры колёсной (см. рисунок 2) в не тормозное положение (при нахождении пациента – при поднятых ограждениях).

6.4 При функциональном использовании кровати не допускается попадание посторонних предметов в рабочее пространство движущихся частей кровати.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие кровати требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок хранения в транспортировочной таре - 6 месяцев со дня изготовления кровати.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Начало исчисления гарантийного срока - со дня поступления кровати потребителю.

7.4 В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно ремонтирует или заменяет кровать и (или) её составные части. Если кровать в период гарантийного срока вышла из строя в результате: неправильной эксплуатации, отсутствия технического обслуживания, ремонта лицами неуполномоченными изготовителем, или использовалась в целях не соответствующих её назначению, то стоимость ремонта оплачивает потребитель кровати.

7.5 Гарантийные обязательства не распространяются на техническое обслуживание.

7.6 Срок службы кровати – не менее 6 лет.

7.7 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию кровати в процессе модернизации.

8 Сведения о рекламациях

8.1 В случае отказа кровати в период действия гарантийных обязательств, обнаружения некомплектности при её первичной приемке, потребитель должен направить в адрес изготовителя следующие документы:

заявку на ремонт (с указанием номера телефона, адреса по которому должен прибыть представитель изготовителя);

дефектную ведомость.

Адрес изготовителя:

Республика Беларусь

Республиканское унитарное предприятие «Медтехноцентр»

ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск

тел. 375 17 284 22 55, факс 375 17 294 62 91

КОПИЯ ВЕРНА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

9 Свидетельство об упаковывании

Кровать детская медицинская с ограждением для детей до 3 лет — наименование изделия

ГКСН 057.000.000 — обозначение

исполнение

№_____ — заводской номер

упакована Республиканским унитарным предприятием «Медтехноцентр»
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации

_____ должность _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

10 Свидетельство о приемке

Кровать детская медицинская с ограждением для детей до 3 лет — наименование изделия

ГКСН 057.000.000 — обозначение

исполнение

№_____ — заводской номер

изготовлена в соответствии с требованиями действующей технической документации.

Представитель ПИМНиО

_____ год, месяц, число _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

принята в соответствии с требованиями действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Представитель СТК

МП _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

Республиканское унитарное предприятие «Медтехноцентр» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

КОПИЯ ВЕРНА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11 Монтаж

ВНИМАНИЕ: МОНТАЖ КРОВАТИ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГОТОВНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ К МОНТАЖУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ.

11.1 Заполнить свидетельство о монтаже в соответствии с разделом 12, сдать смонтированную кровать заказчику.

12 Свидетельство о монтаже

Кровать детская медицинская с ограждением для детей до 3 лет
наименование изделия

ГКСН 057.000.000
обозначение

исполнение

№_____
заводской номер

смонтирована согласно проектно-сметной документации, соответствует требованиям настоящего паспорта и признана годной для эксплуатации.

Монтаж кровати произвёл:

_____ должность

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

Смонтированную кровать принял:

_____ должность

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

КОПИЯ ВЕРНА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство здравоохранения Республики Беларусь

Республиканское унитарное предприятие
«Медтехноцентр»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Республиканского унитарного
предприятия «Медтехноцентр»
_____ С.Ф. Кравец
«____» _____ 2019 г.

КРОВАТЬ ДЕТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ С ОГРАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ

Паспорт

ГКСН 058.000.000 ПС

Начальник КТО
Республиканского унитарного
предприятия «Медтехноцентр»
_____ И.И. Николаенко
«____» _____2019г.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРНА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные сведения	3
2 Описание кровати	3
2.1 Назначение	3
2.2Технические характеристики	3
2.3 Комплектность	4
2.4 Состав кровати	4
2.5 Устройство и работа	5
2.6 Ввод в эксплуатацию	5
2.7 Перемещение	6
3 Управление основными функциями кровати	6
4 Транспортирование, хранение и утилизация	7
5 Техническое обслуживание	8
6 Требования безопасности	9
7 Гарантии изготовителя	9
8 Сведения о рекламациях	9
9 Свидетельство об упаковывании	10
10 Свидетельство о приемке	10
11 Монтаж	11
12 Свидетельство о монтаже	11

КОПИЯ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Основные сведения

Настоящий паспорт (далее - ПС) предназначен для ознакомления с назначением и технической характеристикой кровати детской медицинской с ограждением для детей в возрасте от 3 до 7 лет (далее по тексту - кровать), и распространяется на кровать ГКСН 058.000.000, ГКСН 058.000.000-01, ГКСН 058.000.000-02, ГКСН 058.000.000-03.

В случае передачи кровати в другое место для эксплуатации или выполнения какого-либо вида ремонта, ПС подлежит передаче вместе с кроватью.

Записи, вносимые отделом технического контроля, должны быть подтверждены штампом. Не заверенные подписью исправления не допускаются.

Примечание - В связи с постоянным техническим совершенствованием, конструкция поставленной заказчику кровати может иметь незначительные изменения не отраженные в ПС, при этом все основные характеристики сохраняются.

2 Описание кровати

2.1 Назначение

Кровать предназначена для ухода за пациентами в организациях здравоохранения.

Назначение кровати – уход за пациентом, нахождение его на больничной кровати с возможностью придания телу больного положений, которые соответствуют тяжести и характеру патологических процессов в организме и которые необходимы для проведения лечебных и диагностических процедур.

Кровать позволяет, без перекладывания пациента, перемещать его в пределах лечебного учреждения и выполнять ультразвуковые и другие виды обследования.

Конструкция кровати является сборной.

Управление кроватью осуществляется механическим способом.

Кровать изготавливается по конструкторской документации согласно ТО BY 102307694 в климатическом исполнении УХЛ 4.2. по ГОСТ 15150-69 и эксплуатируется в помещениях при температуре окружающей среды от плюс 10 °С до плюс 40 °С, относительной влажности 85 % при плюс 25 °С.

КОПИЯ ВЕРНА

2.2 Технические характеристики

2.2.1 Основные параметры и размеры

Диаметр колёсной опоры – 125 мм.

Грузоподъёмность колёсной опоры – 100 кг.

Система блокировки – на двух колёсных опорах.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Максимальное усилие, необходимое для перемещения кровати на колёсных опорах по твёрдому горизонтальному покрытию, прикладываемое к средине торец-спинки кровати, не более 200 Н.

Усилие, необходимое для подъёма бокового ограждения, прикладываемые к его середине, не более 50 Н.

Угол поворота секции опоры спины, не более 68°.

Грузоподъёмность кровати, не более 45 кг.

Высота до уровня ложа кровати 300±10 мм.

Габаритные размеры ложе кровати, не более: 1400х600 мм.

Габаритные размеры кровати (без навесного оборудования), не более: 1677х646х700 мм.

Масса кровати, не более:

ГКСН 058.000.000	30 кг.
ГКСН 058.000.000-01	30 кг.
ГКСН 058.000.000-02	30 кг.
ГКСН 058.000.000-03	30 кг.

2.3 Комплектность

Таблица 1- комплект поставки

Наименование и обозначение	Единица измерения	Количество	Примечание
Кровать ГКСН 058.000.000 (-01,-02, -03)	шт	1	
Паспорт ГКСН 058.000.000 ПС	шт	1	
Штатив для длительных вливаний ГКСН 057.006.000	шт	1	В зависимости от комплектации кровати
Кронштейн ГКСН 057.002.000	шт	1	В зависимости от комплектации кровати
Планшет для информации В-715.000.000	шт	1	В зависимости от комплектации кровати



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2.4 Состав кровати

Общий вид кровати показан на рисунке 1

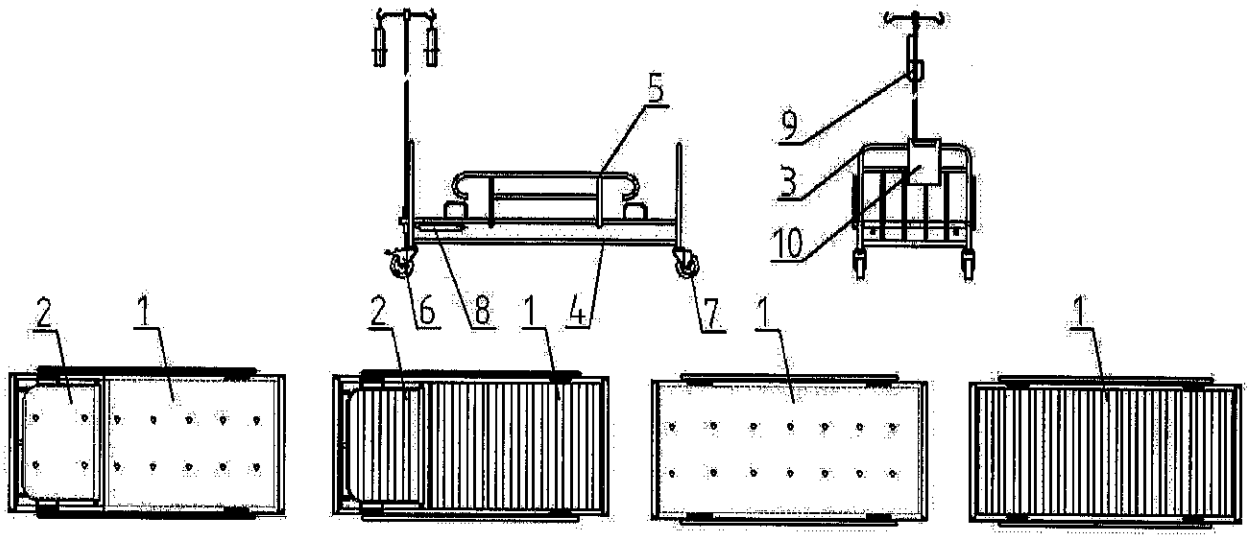


Рисунок 1 - Общий вид кровати детской медицинской с ограждением для детей в возрасте от 3 до 7 лет

1- ложе;
2- секция опоры спины;
3- торец-спинка;
4- стяжка;
5- ограждение;
6- опора колёсная с тормозом;
7- опора колёсная без тормоза;
8- механизм трансформации;
9- штатив для длительных вливаний;
10- планшет для информации.

ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРНА

2.4.1 Ложе (см. рисунок 1, позиция 1) представляет собой сборочную единицу, состоящую из сварного основания (трубы квадратного сечения), покрытого плитой полиэтилена вспененного для кровати ГКСН 058.000.000 и ГКСН 058.000.000-02 или состоящую из сварного основания (труб прямоугольного и квадратного сечения) для кровати ГКСН 058.000.000-01 и ГКСН 058.000.000-03. Крепится к торец-спинкам с помощью болтов. Ложе может устанавливается на высоте 300 мм от уровня пола. Имеет полимерное покрытие цвета, согласованного с заказчиком.

2.4.2 Секция опоры спины (см. рисунок 1, позиция 2) представляют собой сварную рамку из труб прямоугольного и квадратного сечения. Секция для кроватей ГКСН 058.000.000 покрыта плитой полиэтилена вспененного. У секции для кроватей ГКСН 058.000.000-01 вместо плиты предусмотрена обрешётка сечением из прямоугольного профиля. Устанавливается внутри ложа на осях вращения, регулируется по углу подъёма при помощи механизма трансформации (см. рисунок 1, позиция 8). Имеет полимерное покрытие.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2.4.3 Торец-спинка (см. рисунок 1, позиция 2) представляет собой сварную конструкцию, состоящую из труб круглого сечения.. Металлические части торец-спинки имеют полимерное покрытие.

2.4.4 Стяжка (см. рисунок 1, позиция 4) предназначена для соединения торец-спинок и для придания жёсткости всей конструкции, состоит из трубы круглого сечения, имеет полимерное покрытие.

2.4.5 Ограждение (см. рис. 1, поз. 5) представляет собой сборную конструкцию, состоящую из поручня и кронштейнов, соединённых между собой с помощью осей. Ограждение крепится к раме ложа кровати. Металлические части ограждения имеют полимерное покрытие или цинковое.

2.4.6 Механизм трансформации (см. рисунок 1, позиция 8) представляет собой сборную систему, состоящую из направляющей гребёнки и бегунка, позволяет перевести секцию опоры спины (см. рисунок 1, позиция 2) в любое из возможных десяти положений. Монтируется на раму и секцию опоры спины.

2.5 Устройство и работа

2.5.1 Размещение кровати

Кровать устанавливается со свободным промежутком от ближайших окружающих предметов (стена, прикроватная тумбочка) не менее 10 см.

2.6 Ввод в эксплуатацию

2.6.1 Внимательно изучить настоящий паспорт.

2.6.2 Освободить кровать от упаковочного материала.

2.6.3 В соответствии с паспортом на изделие проверить комплектность поставки. В случае обнаружения недостатков зарегистрируйте их и в письменной форме и информируйте производителя или поставщика изделия.

2.6.4 После того, как кровать будет освобождена от упаковочного материала, оставить кровать непокрытую матрасом и постельными принадлежностями минимум на два часа в помещении, в котором она будет размещена. Если на конструкции кровати возникает конденсат, необходимо подождать ещё минимум два часа с момента полного исчезновения конденсата.

2.6.5 В соответствии с паспортом проверить работоспособность всех частей кровати.

Если проверка работоспособности всех частей кровати прошла без каких-либо проблем, можно приступить к непосредственной эксплуатации кровати.

КОПИЯ ВЕРНА

2.7 Перемещение

Кровать разрешено перемещать, приведя её в исходное положение (боковые ограждения подняты, колёса должны быть расторможены). Перемещение кровати с пациентом выполняется исключительно двумя работниками учреждения здравоохранения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3 Управление основными функциями кровати

3.1 Опора колёсная с тормозом

Ходовая часть кровати оснащена четырьмя колёсными опорами (далее – колесо) две из которых с тормозом. Кронштейн каждого колеса крепится к торец-спинке при помощи резьбового соединения, свободно (без заеданий) поворачивается вокруг вертикальной оси. Фиксация кровати происходит нажатием в направлении вниз носком ступни внешнего конца тормозной педальки на двух колёсах. Приведение кровати в движение происходит нажатием противоположного конца тормозной педальки каждого заторможенного колеса.


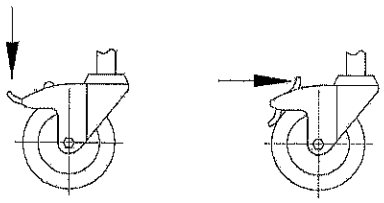


Рисунок 2 – фиксация ходовой части кровати

ВНИМАНИЕ: НА ТОРМОЗНЫЕ ПЕДАЛЬКИ ВСЕГДА НАЖИМАЙТЕ ТОЛЬКО НОСКОМ СТУПНИ.

3.2 Ограждение

Кровать снабжена двумя откидными ограждениями, смонтированными на ложе. Опускание ограждения осуществляется в следующем порядке: необходимо взяться рукой за перила ограждения и поднять вверх в направлении 1 до упора, повернуть в направлении 2 и аккуратно опустить вниз. Поднятие ограждения осуществляется в следующем порядке: взяться рукой за перила и повернуть в направлении 3 до упора, затем надавить на перила в направлении 4 и задвинуть до упора.

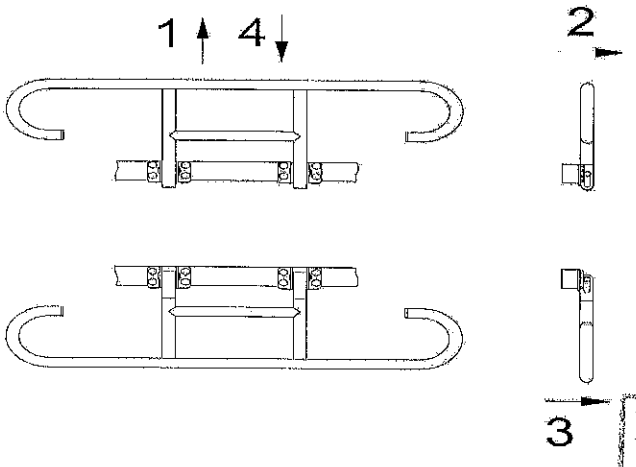


ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
КОПИЯ ВЕРНА

Рисунок 3 – фиксация ограждения кровати

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.3 Штатив для длительных вливаний

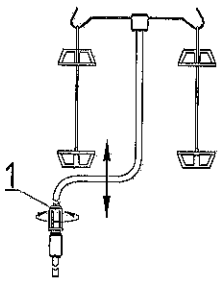

Кровать оборудована штативом для длительных вливаний (далее – штатив), который вставляется у изголовья кровати в кронштейн и крепиться винтами. Высоту штатива над уровнем кровати регулируют следующим образом. Одной рукой придерживают штатив, а другой рукой освобождают цанговый зажим 1, вращая его против часовой стрелки. Освободив зажим, выставляют необходимую высоту штатива над уровнем кровати, после чего зажимают цанговый зажим.

4 Транспортирование, хранение и утилизация

4.1 Кровать транспортируется всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

4.2 Кровать хранится в помещениях при следующих условиях:
температура окружающей среды от минус 10 ^{0}С до плюс 50 ^{0}С;
относительная влажность воздуха не более 85 % при температуре плюс 25 ^{0}С и ниже, при более высокой температуре влажность должна быть ниже указанной;
в помещении, где хранится кровать, не должно быть веществ, вызывающих коррозию металлических частей.

4.3 Утилизация производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.14-20-2005.

5 Техническое обслуживание

5.1 Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения работы кровати в процессе её эксплуатации.

Виды работ и периодичность технического обслуживания представлена в таблице 2.

Таблица 2

Виды работ при техническом обслуживании	Периодичность технического обслуживания
Проверка внешнего вида деталей и узлов с целью установления отсутствия механических повреждений, ржавчины, нарушения лакокрасочных и гальванических покрытий; фиксацию колес; комплектность.	1 раз в месяц
Проверка и очистка деталей и составных частей кровати от пыли, загрязнений, коррозии	1 раз в месяц

КОПИЯ ВЕРНА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Проверка и проведение затяжки резьбовых соединений, крепежных элементов	1 раз в 6 месяцев
Проверка работоспособности тормозной системы колес, надёжность их крепления. При необходимости смазка колес консистентной смазкой.	1 раз в 6 месяцев
Проверка работоспособности механизма опускания секции опоры спины и механизма опускания ограждения	1 раз в 6 месяцев
Проверка надежности крепления торец-спинки, ограждения, полки.	1 раз в 6 месяцев

5.2 Удаление пыли и грязи проводить ватно-марлевым тампоном, при необходимости провести дезинфекцию корпуса модуля протиранием 3 % раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % универсального моющего средства или любым дезинфицирующим средством, разрешенным к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

5.3 Под воздействием моющих и дезинфицирующих средств существует возможность вымывания смазки из сопряженных поверхностей кровати. Необходимо не реже 1 раза в шесть месяцев осмотреть и обработать вазелином техническим ТУ 0255-006-54051488-05 поверхности направляющих торец-спинок.

5.4 Проверка технического состояния проводится для обнаружения возможных неисправностей и контроля основных технических характеристик. После технического обслуживания кровать должна быть чистой и исправной.

6 Требования безопасности

6.1 К эксплуатации изделия допускаются лица (персонал), ознакомившиеся с настоящим паспортом

6.2 Не допускается использование кровати не по её прямому назначению, а также использование кровати при наличии неисправностей или повреждений.

6.3 Перемещение кровати допускается только после установки тормозной педальки опоры колёсной (см. рисунок 2) в не тормозное положение (при нахождении пациента – при поднятых ограждениях).

6.4 При функциональном использовании кровати не допускается попадание посторонних предметов в рабочее пространство движущихся частей кровати.

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие кровати требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок хранения в транспортировочной таре - 6 месяцев со дня изготовления кровати.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Начало исчисления гарантийного срока - со дня поступления кровати потребителю.

КОПИЯ ВЕРНА
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7.4 В течение гарантийного срока изготовитель бесплатно ремонтирует или заменяет кровать и (или) её составные части. Если кровать в период гарантийного срока вышла из строя в результате: неправильной эксплуатации, отсутствия технического обслуживания, ремонта лицами неуполномоченными изготовителем, или использовалась в целях не соответствующих её назначению, то стоимость ремонта оплачивает потребитель кровати.

7.5 Гарантийные обязательства не распространяются на техническое обслуживание.

7.6 Срок службы кровати – не менее 6 лет.

7.7 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию кровати в процессе модернизации.

8 Сведения о рекламациях

8.1 В случае отказа кровати в период действия гарантийных обязательств, обнаружения некомплектности при её первичной приемке, потребитель должен направить в адрес изготовителя следующие документы:

заявку на ремонт (с указанием номера телефона, адреса по которому должен прибыть представитель изготовителя);

дефектную ведомость.

Адрес изготовителя:

Республика Беларусь

Республиканское унитарное предприятие «Медтехноцентр»

ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск

тел. 375 17 284 22 55, факс 375 17 294 62 91

9 Свидетельство об упаковывании

Кровать детская медицинская с ограждением для детей в возрасте от 3 до 7 лет
наименование изделия

ГКСН 058.000.000
обозначение

исполнение

№_____
заводской номер

упакована Республиканским унитарным предприятием «Медтехноцентр»
наименование или код изготовителя


согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации

_____ должность

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

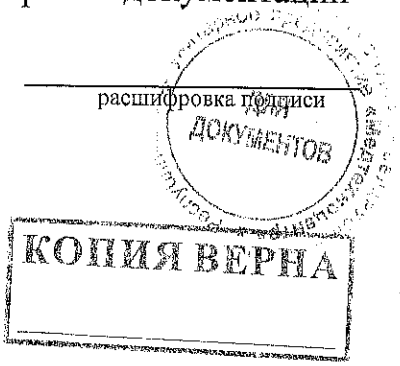

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10 Свидетельство о приемке

Кровать детская медицинская с ограждением для детей в возрасте от 3 до 7 лет
наименование изделия

ГКСН 058.000.000
обозначение

исполнение

№_____
заводской номер

изготовлена в соответствии с требованиями действующей технической документации.

Представитель ПИМНиО

_____ _____ _____
год, месяц, число личная подпись расшифровка подписи

принята в соответствии с требованиями действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Представитель СТК

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
год, месяц, число

11 Монтаж

ВНИМАНИЕ: МОНТАЖ КРОВАТИ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ГОТОВНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ К МОНТАЖУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ.

11.1 Заполнить свидетельство о монтаже в соответствии с разделом 12, сдать смонтированную кровать заказчику.

КОПИЯ ВЕРНА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

12 Свидетельство о монтаже

Кровать детская медицинская с ограждением для детей в возрасте от 3 до 7 лет
наименование изделия

ГКСН 058.000.000
обозначение

исполнение

№_____
заводской номер

смонтирована согласно проектно-сметной документации, соответствует требованиям настоящего паспорта и признана годной для эксплуатации.

Монтаж кровати произвёл:

_____ должность

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

Смонтированную кровать принял:

_____ должность

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru