

Instructions



1. Always use baby oil or similar products on Windi® to facilitate the insertion.

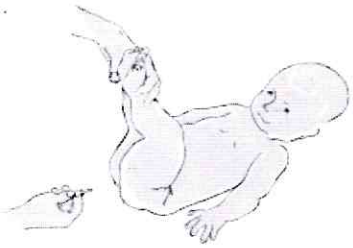

2. Take your baby to the changing table and make them lie on their back. Lift the baby's legs towards the stomach. Carefully insert the catheter into the baby's rectum (as if you were using a thermometer). You will know that the treatment is working when you hear a "whistling" sound and the gas comes out.

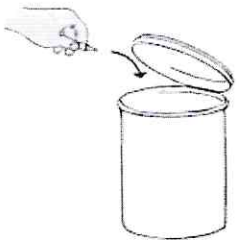

3. The treatment is complete when the "whistling" sound ends and your baby is no longer in pain. Dispose of the catheter. Never leave the catheter in the baby's rectum after the treatment is complete. Do not repeat the treatment more than three times per day in order to prevent disrupting the baby's natural bowel rhythm unnecessarily.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



Warning!

Never leave the catheter in the baby's rectum after the treatment is complete. Always discard the Windi after you have finished the treatment.Do not repeat the treatment more than three times per day.

DiProServa Medical AB
S:t Johannesgatan 2
211 46 Malmö, Sweden
Tel: +46 40 6992515
www.windi.se

Sign: .....

Made in Sweden

Manufacturer: DiProServa Medical AB, S:t Johannesgatan 2, 211 46 Malmö, Sweden, www.windi.info

Web : www.nasalprodukter.se Mail :info@nasalprodukter.se

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Перевод с английского языка на русский язык

Инструкция

1. Всегда смазывайте газоотводную трубку (ректальный катетер) детским кремом, маслом или вазелином перед введением, чтобы облегчить ввод.
2. Поднимайте ножки ребенка к голове и аккуратно вставьте газоотводную трубочку в анальное отверстие ребенка аналогично термометру. Когда газы начнут выходить наружу, вы сразу услышите характерный звук. Иногда вместе с газами может выйти небольшое количество фекалий. Если газы не вышли сразу, повторите массаж и попробуйте ввести катетер снова. Иногда требуется повторить процедуру несколько раз, чтобы достичь желаемого результата. Во время проведения одной процедуры вы можете использовать один и тот же газоотводную трубочку несколько раз.
3. Приучите себя выбрасывать газоотводную трубочку после того, как вы закончили процедуру. Повторное использование газоотводной трубочки через какое-то время может быть небезопасным.

Предупреждение!

Никогда не оставляйте катетер в анальной отверстии ребенка, после проведения процедуры.

Не используйте газоотводную трубочку более 3х раз в день, так как чрезмерно частое использование может снизить естественные рефлексы кишечника вашего малыша.

<Печать>

Перевод выполнила: Петрова Мария Сергеевна, диплом 107705 0688613 от 18 января 2019 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru