УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
РУП "Гродторгмаш"
_____ В.М.Шкулепа
25.04.2007

КОРОБКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ С ФИЛЬТРАМИ КСКФ

Паспорт

КСКФ 0.00ПС

Лист утверждения

КСКФ 0.00ПС - ЛУ

Главный технолог
_____ П.П.Лобкис
23.04.2007

Главный конструктор
_____ Е.Н.Жаров
19.04.2007

Начальник ОТК
_____ Ф.А. Печень
23.04.2007

Ведущий конструктор
_____ Ю.А.Гусев
19.04.2007

Начальник БСС
_____ Н.М.Таранко
23.04.2007

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
2905	26.04.07	24625		

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утвержден
КСКФ 0.00ПС-ЛУ

Открытое акционерное общество
"Гродненский завод торгового машиностроения"
230023, Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Тимирязева, 16

ОКП РБ 32.50.12.000

ISO 9001

КОРОБКИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ С ФИЛЬТРАМИ КСКФ

Паспорт
КСКФ 0.00ПС

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

КСКФ 0.00ПС

34 Зам. 9-18 04.04.18

Назначение

Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КСКФ-3, КСКФ-6, КСКФ-КСКФ-12, КСКФ-18 (далее – коробки) предназначены для размещения в них перязочного материала, операционного белья, хирургического инструмента и других едметов медицинского назначения с целью их стерилизации в паровых медицинх стерилизаторах и доставки к месту использования, а также стерильного хранея в течение 20 суток.

Регистрационное удостоверение МЗ Республики Беларусь ИМ - 7.5617/1505 от 28.05.2015.Срок действия-до 28.05.2020.

Регистрационное удостоверение ФСЗ РФ № ФСЗ 2009/04494 10.06.2009. Срок действия не ограничен.

Регистрационное удостоверение МЗ Республики Казахстан РК-МТ-7 № 006692 от 10.2014. Срок действия – до 20.10.2021.

Регистрационное удостоверение МЗ Республики Узбекистан № 01243/06/17 от 06.2017. Срок действия – до 06.06.2022.

Регистрационное удостоверение МЗ Кыргызской Республики – рия ПМТ-2015-125 КР- № 4051 от 20.03.2015. Срок действия – до 20.03.2020.

Регистрационное удостоверение МЗ и МП Туркменистана – серия ИМ-А 013775 от 30.09.2016. Срок действия – до 30.09.2021.

2 Технические характеристики

менование параметра	КСКФ –3	КСКФ – 6	КСКФ – 9	КСКФ – 12	КСКФ-18
вный объем, дм^3	3	6	9	12	18
етр D, мм, не более	170	240	270	320	380
та H, мм, не более	170	170	180	180	180
етр фильтра, мм	110	135	155	175	175
а, кг, не более	0,8	1,1	1,5	1,9	2,2
чество замков	1	2	2	2	2

3 Комплект поставки

Коробка, шт.	1
Фильтр, шт.	2
Паспорт, шт.	1
Упаковка, шт.	1

4 Устройство коробок и указания по эксплуатации


4.1 Устройство коробок показано на рисунке 1.

Коробка состоит из корпуса **1** с замком(ами) **4**, крышки **3** с ручкой **2**. На шке и дне корпуса расположены прижимы **6**, фильтры **5** и защелки **7**. атор **9** предотвращает самопроизвольное открывание замка.

4.2 Металлические детали коробок изготовлены из коррозионностойкой стали.

4.3 Фильтры изготовлены из фильтродиагонали по ГОСТ 332 – 91.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

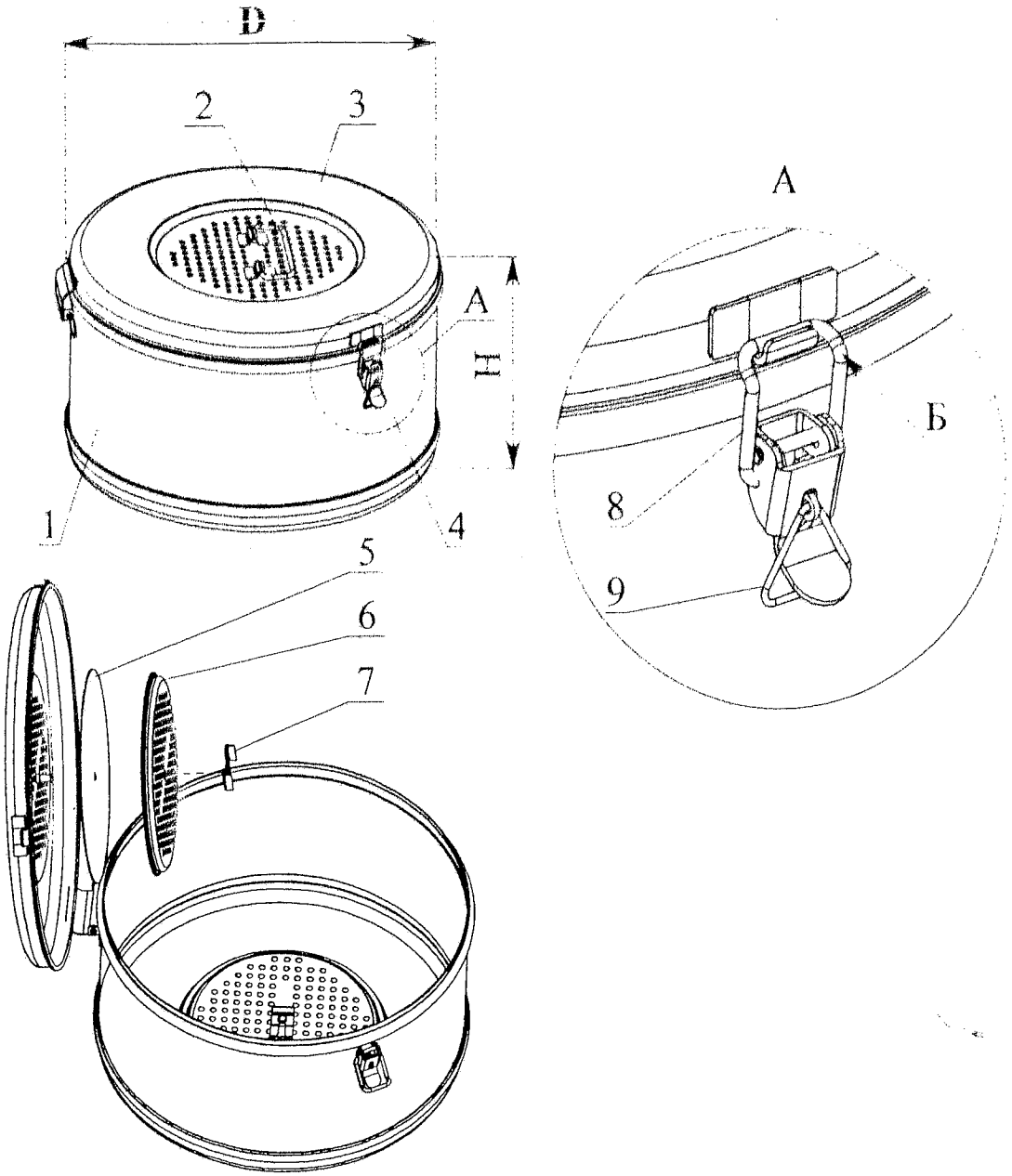

1 – корпус; 2 – ручка; 3- крышка; 4 – замок; 5 – фильтр; 6 – прижим; 7 –защелка; 8 – серьга; 9 –фиксатор.

Рисунок 1 – Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КСКФ

4.4 Фильтры обеспечивают возможность проведения стерилизации предметов и материалов медицинского назначения в паровых стерилизаторах под давлением (0,2 ± 0,02) МПа при температуре (132 ± 2) °С в течение (20^{+2}) мин или под давлением ($0{,}11^{+0{,}02}$) МПа при температуре (120^{+2}) °С в течение (45^{+3}) мин и способны к микробиологической фильтрации воздушной среды при последующем хранении.

4.5 Смену фильтров в коробках производить через 60 циклов стерилизации.

4.6 Для смены фильтров необходимо сдвинуть защелку, снять прижим и фильтр, установить запасной или вырезать новый фильтр по диаметру прижима с

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ом на сторону 1,0 см. В центре фильтра сделать отверстие диаметром не мм; затем положить фильтр, как указано на рисунке 1, установить при-акрепить защелкой.

7 Плотность прилегания крышки к корпусу регулируется подгибкой серь-мка (ов) **4** по радиусу Б.

8 **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОРОБКИ БЕЗ ФИЛЬТРОВ, СПРАВНЫМ(ЫМИ) ЗАМКОМ(АМИ) И С ФИЛЬТРАМИ, ПРО-ИМИ БОЛЕЕ 60 ЦИКЛОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ.**

9 Коробки должны храниться в упаковке изготовителя в закрытом поме-ри температуре от минус 50 °С до плюс 40 °С. Общий срок хранения ко-ограничен.

10 Коробки должны эксплуатироваться в помещении при температуре ощей среды от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажности – до и 25 °С.

Подготовка коробок к работе

Перед применением, коробки подвергаются химической очистке дезин- и предстерилизационной обработке в соответствии с действующими ин-ми Минздрава.

После проведения предстерилизационной обработки в коробки необхо-тановить фильтры в соответствии с указаниями пункта 4.6.

Свидетельство о приемке, упаковке и продаже

робка стерилизационная круглая с фильтрами КСКФ – _____

твует требованиям ТУ РБ 500059647.020-2002 «Коробки стерилизацион-лые с фильтрами КСКФ» и признана годной для эксплуатации.

ОТК Дата упаковывания (изготовления) _____

месяц, год

_____

наименование предприятия торговли

дажи_____ _____ _____

штамп магазина подпись

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи коробок.

В течение гарантийного срока изготовитель ремонтирует или заменяет или их [illegible] пришедшие в негодность по вине изготовите-

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru