
СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

КРОВАТКА ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
КН-1П

ТУ BY 800017554.048-2010

Паспорт
БИПЯ.324426.048 ПС

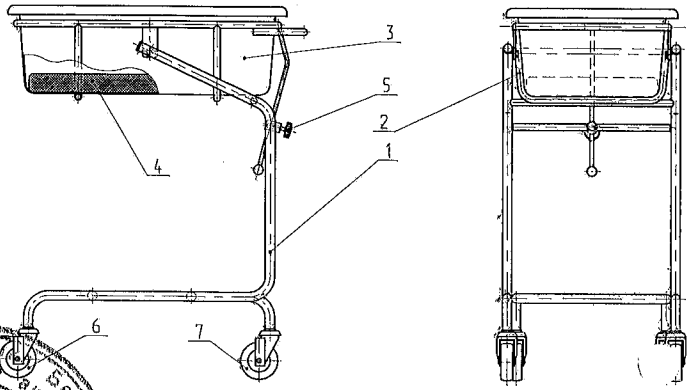

1. Основание
2. Каркас кювезы
3. Кювеза (ванночка)
4. Матрац
5. Ручка
6. Колесо с тормозом
7. Колесо без тормоза

Рисунок

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ВНИМАНИЕ! Допускаемая нагрузка на кроватку – не более 10 кг.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Кроватка для новорожденных КН-1П (далее - кроватка) предназначена для оборудования больничных родильных отделений.

1.2 Кроватка предназначена для эксплуатации в условиях умеренного клата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°С до +35°С и относительной влажности 80% при температуре +25°С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры кроватки, мм, не более:

- длина.....870
- ширина.....500
- высота 1010

2.2 Угол наклона ванночки.....0°- 20°

2.3 Масса, кг, не более.....14

2.4 Допускаемая нагрузка на кроватку, кг, не более.....10

2.5 Срок службы, лет, не менее.....5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- основание кроватки в сборе.....1 шт.;
- кювеза (ванночка).....1 шт.;
- матрац .....1 шт.;
- паспорт.....1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Кроватка (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, состоящую из основания (поз.1), каркаса для кювезы (ванночки) (поз 2), кювезы (ванночки) (поз.3), матраца (поз.4), двух опорных колес (поз.7) и двух опорных с тормозом (поз.6). Регулировка угла наклона ванночки от 0 до 20 ществляется при помощи ручки поз.5.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Кроватка поставляется потребителю в упакованном виде.

4.3. Распакуйте кроватку, очистите от пыли.

4.4 Осмотрите кроватку для определения ее состояния после транспортирования и хранения.

4.5 Выполните санитарную обработку кроватки путем протирания ее поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода добавлением 0,5%-го раствора моющего средства или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата).

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать ослабленные крепежные соединения.

5.2 Регулировку угла наклона кювезы (ванночки) производить плавно, без рывков.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить регулировку угла наклона кювезы (ванночки) с находящимся в кроватке младенцем!

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1 Возможные неисправности приведены в таблице.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Увеличение усилия перемещения кроватки	Перекос, заедание, ослабление крепления узлов	Прочистить, смазать, подтянуть крепеж.
Кроватка не ровно стоит на поверхности пола	Слабое крепление узлов колес.	Подтянуть крепеж

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Кроватка в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50° С до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

7.2 Хранить кроватку допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кроватка для новорожденных КН-1П, заводской №_____ соответствует ТУ BY 80017554.048-2010 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п._____

Подпись ответственного за приемку_____

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Кроватка для новорожденных КН-1П, заводской №_____ упакована согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации

Дата упаковки_____

Упаковку произвел_____ м.п. _____Подпись _____

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ BY 800017554.048-2010 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня получения потребителем (дня продажи).

10.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу: 225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р.-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31Б, комн.4.

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться предприятием и содержать сведения о принятых мерах.

11.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Кроватка для новорожденных КН-1П, заводской № _____
ТУ BY 800017554.048-2010,

Приобретена_____
дата, подпись и штамп торгующей организации
Введена в эксплуатацию _____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации
Принята на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____города_____
подпись и печать руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения- владельца

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru