Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


Артикли:

SL-18-18	SL-23-20
SL-21-12	SL-23-24
SL-21-18	SL-26-18
SL-21-22	SL-28-16
SL-21-24	SL-28-18
SL-21-28	SL-30-16
SL-23-18	SL-30-18


VeriFine®

Safety Lancet


Инструкция по применению ланцетов безопасных

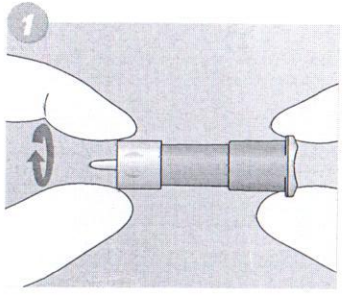


1.Поверните предохранительный корпус не более чем на пол оборота

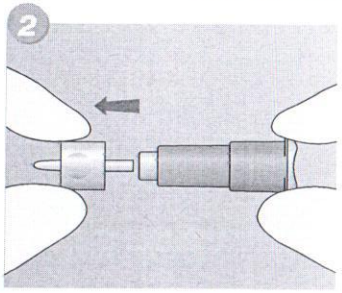


2.Достаньте предохранительный корпус

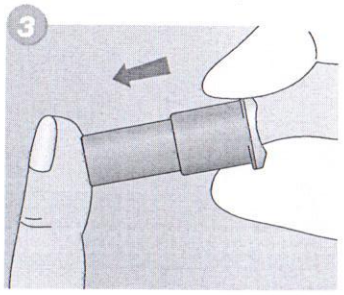

3.Поместите устройство на место прокола и нажмите

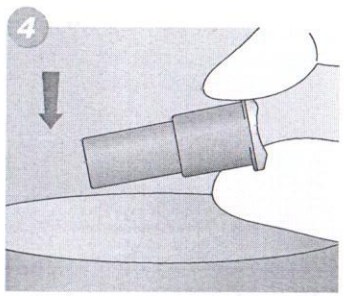

4.Пометите ланцет в контейнер для сбора острых предметов

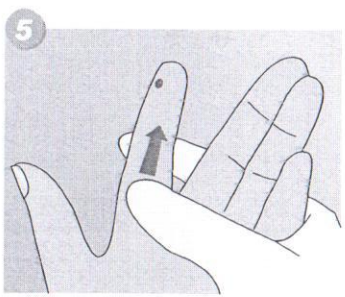

5.Слегка надавите на палец в направлении указанном на изображении, чтобы получить образец крови

Promisemed®

PROMISEMED HANGZHOU MEDITECH CO., LTD.
No.12 Longtan Road, Cangqian Street, Yuhang District,
Hangzhou City, Zhejiang, China - www.promisemed.ca

EC REP **MT Promedt Consulting GmbH**
Altenhofstr. 80 66386 St.
Ingbert, Germany

Promisemed®

Heel Blade Package Insert

Инструкция по применению ланцетов для забора крови из пятки


Артикли: HB-065; HB-085; HB-100; HB-150

Меры предосторожности:


1. Изделие одноразовое, стерильное и апирогенное. Не следует использовать изделие, когда крышка отдельна от контейнера.

2. Изделие стерилизовано методом этиленоксидной стерилизации. Срок его годности составляет 5 лет. Изделие следует использовать только в течение срока годности.


3. Изделие не следует хранить в местах с высокой температурой, влажностью и под прямыми солнечными лучами.

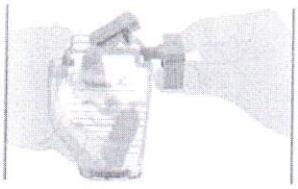


1. Вытащите предохранительный корпус.

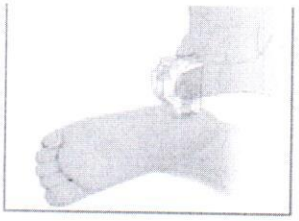

2. Поместите устройство на место прокола и нажмите кнопку.

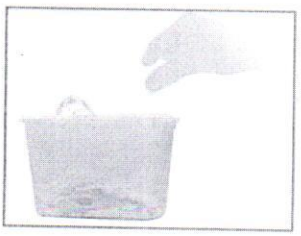

3. Выбросьте устройство в контейнер для острых предметов.

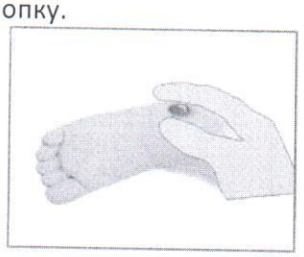

4. Слегка надавите пальцами место прокола, чтобы получить образец крови.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Скарификатор

Артикль: BL-21

Размер: 21G


100 шт.

СТЕРИЛЬНО | R

Хранить в сухом и не пыльном помещении от -35°C до +50°C

CE 0197 ⊗ Σ 100

Для использования со следующими устройствами:

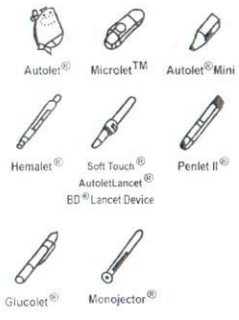

Стерильные скарификаторы
Для самостоятельного тестирования и профессионального использования
Внимание:
Не используйте скарификатор, извлеченный из упаковки, если защитный наконечник отсутствует или ослаблен. Проявляйте осторожность при обращении с открытой иглой скарификатора.
Упаковка содержит:
100 стерильных скарификаторов

Дата изготовления:
Номер партии:
Срок годности:

6666-BL-Promisemed-28B-02-100

Производитель:
Promisemed Hangzhou Meditech Co.,Ltd,
Китай, №.12 Лонгтан Роуд,
Ул. Кансиан, Район Юйхан,
311121, Ханчжоу

Уполномоченый представитель в РБ:
ЧТСУП «Ренекс РТ»
РБ, Минск,
ул. Железнодорожная
д. 27/В, 208

Скарификатор

Артикль: BL-28

Размер: 28G


100 шт.

СТЕРИЛЬНО | R

Хранить в сухом и не пыльном помещении от -35°C до +50°C

CE 0197 ⊗ Σ 100

Для использования со следующими устройствами:

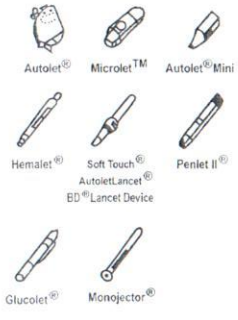

Стерильные скарификаторы
Для самостоятельного тестирования и профессионального использования
Внимание:
Не используйте скарификатор, извлеченный из упаковки, если защитный наконечник отсутствует или ослаблен. Проявляйте осторожность при обращении с открытой иглой скарификатора.
Упаковка содержит:
100 стерильных скарификаторов

Дата изготовления:
Номер партии:
Срок годности:

6666-BL-Promisemed-28B-02-100

Производитель:
Promisemed Hangzhou Meditech Co.,Ltd,
Китай, №.12 Лонгтан Роуд,
Ул. Кансиан, Район Юйхан,
311121, Ханчжоу

Уполномоченый представитель в РБ:
ЧТСУП «Ренекс РТ»
РБ, Минск,
ул. Железнодорожная
д. 27/В, 208

Скарификатор

Артикль: BL-23

Размер: 23G


100 шт.

СТЕРИЛЬНО | R

Хранить в сухом и не пыльном помещении от -35°C до +50°C

CE 0197 ⊗ Σ 100

Для использования со следующими устройствами:

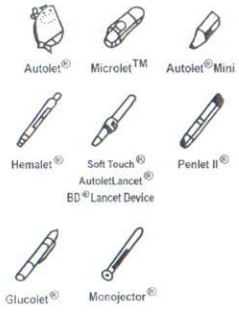

Стерильные скарификаторы
Для самостоятельного тестирования и профессионального использования
Внимание:
Не используйте скарификатор, извлеченный из упаковки, если защитный наконечник отсутствует или ослаблен. Проявляйте осторожность при обращении с открытой иглой скарификатора.
Упаковка содержит:
100 стерильных скарификаторов

Дата изготовления:
Номер партии:
Срок годности:

6666-BL-Promisemed-30B-02-100

Производитель:
Promisemed Hangzhou Meditech Co.,Ltd,
Китай, №.12 Лонгтан Роуд,
Ул. Кансиан, Район Юйхан,
311121, Ханчжоу

Уполномоченый представитель в РБ:
ЧТСУП «Ренекс РТ»
РБ, Минск,
ул. Железнодорожная
д. 27/В, 208

Скарификатор

Артикль: BL-30

Размер: 30G


100 шт.

СТЕРИЛЬНО | R

Хранить в сухом и не пыльном помещении от -35°C до +50°C

CE 0197 ⊗ Σ 100

Для использования со следующими устройствами:

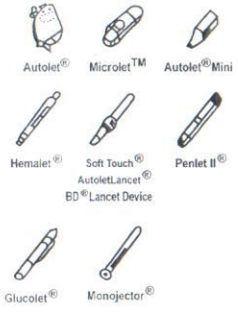

Стерильные скарификаторы
Для самостоятельного тестирования и профессионального использования
Внимание:
Не используйте скарификатор, извлеченный из упаковки, если защитный наконечник отсутствует или ослаблен. Проявляйте осторожность при обращении с открытой иглой скарификатора.
Упаковка содержит:
100 стерильных скарификаторов

Дата изготовления:
Номер партии:
Срок годности:

6666-BL-Promisemed-30B-02-100

Производитель:
Promisemed Hangzhou Meditech Co.,Ltd,
Китай, №.12 Лонгтан Роуд,
Ул. Кансиан, Район Юйхан,
311121, Ханчжоу

Уполномоченый представитель в РБ:
ЧТСУП «Ренекс РТ»
РБ, Минск,
ул. Железнодорожная
д. 27/В, 208

杭州美德医疗科技有限公司
PROMISEMED HANGZHOU MEDITECH CO.,LTD