Частное торгово-производственное унитарное предприятие «Очкарик»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОЧКОВ КОРРИГИРУЮЩИХ, СТБ ГОСТ Р 51193-99

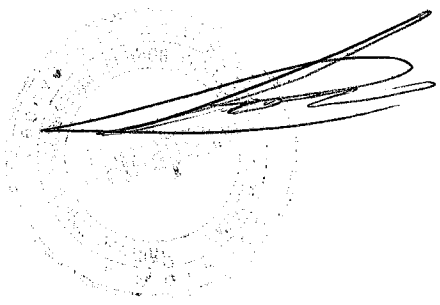
Рекомендуемое применение: Диоптрийные очки изготавливаются по рецепту врача-офтальмолога и используются по назначению. Правильно подобранные диоптрии сделают их идеальными для нормальных условий пользования.

Эксплуатация: Современные очки, а также диоптрийные линзы, изготавливаются из высококачественных материалов и требуют деликатного обращения. Однако они предлагают только ограниченную защиту против внешних воздействий, таких как – насилие, удар, падение. Не допускается прикладывать к очкам значительные механические усилия. Надевать и снимать очки следует двумя руками, придерживая за заушники, во избежание перелома дужек очков и возможного излишнего напряжения в линзах, что может привести к их поломке. Особенно это касается очков в безободковой оправе на «винтах» и на «леске». Гарантией их целостности и сохранности может быть только бережное и деликатное к ним отношение. Рекомендуется периодически проводить профилактическое обслуживание очков (проверить состояние резьбовых соединений), обращаясь при этом к специалистам.

Предупреждение: Не кладите очки линзами вниз, т.к. это может привести к появлению царапин на поверхности линз и к значительному сокращению срока их службы. При пользовании на очках появляются типичные характерные признаки износа, не влияющие на изменение их первоначальных свойств. Механические повреждения оправ, разбитые или поцарапанные линзы не могут являться основанием для претензий изготовителю очков СТБ ГОСТ Р 51193-99. Не следует подвергать очки воздействию высоких температур, в частности при сушке волос феном, ходить в баню или сауну, оставлять очки на приборной панели автомобиля.

Хранение: Очки должны храниться в футляре.

Чистка: Промывать очки в воде с нейтральным моющим средством. Не использовать грязную или абразивную ткань, которая может изменить характеристики линз и материалов. Для чистки линз, особенно с покрытием, рекомендуется использовать специальные растворы и салфетки из микрофибры.

Директор частного
предприятия «Очкарик»  Д.А. Сантхалилов

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru