

## 9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ РБ 200079626.028-2005 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель производит безвозмездную замену или ремонт ширмы, если составлен акт совместно с представителем незаинтересованной организации и подтверждающий наличие заводских дефектов.

Адрес изготовителя:

225730 Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4

## 10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)  
в течение гарантийного срока

Ширмы Ш-1П, Ш-2П, Ш-3П, заводской № \_\_\_\_\_  
ТУ РБ 200079626.028-2005

Пробран

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города \_\_\_\_\_

Подпись и печать

*Директор*



*Валковский А.И.*

Рисунок

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

**ШИРМЫ**


**Ш-1П, Ш-2П, Ш-3П**

исполнения: на опорах или на колесах

ТУ РБ 200079626.028-2005

Паспорт

БИПЯ.324422.028 ПС

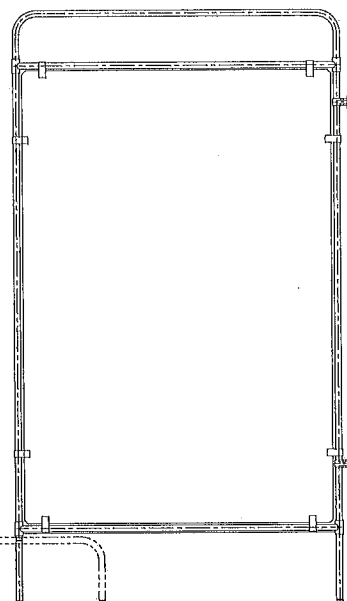

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Ширмы Ш-1П, Ш-2П, Ш-3П (далее — ширмы) предназначены для использования при проведении медицинских осмотров в лечебных учреждениях.

Исполнение ширм — на опорах или колесах — по требованию потребителя.

1.2 Ширмы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры и масса согласно таблицы.

Таблица

| Наименование параметра    | Ш-1П      | Ш-2П      | Ш-3П      |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. Габаритные размеры, мм |           |           |           |
| длина                     | 500 ± 10  | 500 ± 10  | 500 ± 10  |
| ширина                    | 950 ± 10  | 1905 ± 10 | 2870 ± 15 |
| высота на опорах          | 1700 ± 10 | 1700 ± 10 | 1700 ± 10 |
| высота на колесах         | 1745 ± 10 | 1745 ± 10 | 1745 ± 10 |
| 2. Масса, кг, не более    | 8,5       | 17        | 25,5      |

2.2 Средний срок службы, лет, ..... 5

## 3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 В комплект поставки входит:

- ширма ..... 1 шт.
- защелка для Ш-2П / Ш-3П ..... 2/4 шт.
- паспорт ..... 1 шт.

## 4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Ширма представляет собой сборную конструкцию и поставляется потребителю в собранном виде. Каркас металлический, из трубы, покрыт порошковой полимерной краской; экран (шторка) — полистирол.

4.2 Распакуйте ширму, установите резьбовые опоры или колеса в нужном положении.

4.3 Для ширмы Ш-2П и Ш-3П соедините ширмы при помощи соединительных защелок.

4.3 Выполните санитарную обработку ширмы путем протирания ее поверхностей салфеткой, смоченной 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или согласно инструкции "Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения", утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.11.2002 № 165.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

## 5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации необходимо периодически затягивать ослабленные крепежные соединения.

5.2 Периодически проводите обработку ширмы дезинфицирующими средствами.

## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Ширма в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить ширму допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ширма Ш-1П, Ш-2П, Ш-3П, заводской № \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ РБ 200079626.028-2005 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ м.п.

Подпись ответственного за приемку \_\_\_\_\_

## 8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Ширма Ш-1П, Ш-2П, Ш-3П, заводской № \_\_\_\_\_ упакована согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_ м.п. \_\_\_\_\_ Подпись