

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.035-2015 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая ,316, к. 4.

СТОЛИК ХИРУРГИЧЕСКИЙ СХ-2П

ТУ ВУ 800017554.035-2015

Паспорт
БИПЯ.324152.006 ПС

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Столик хирургический СХ-2П, заводской №
ТУ ВУ 800017554.035-2015

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации


Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____
города


Подпись и печать руководителя
ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя
учреждения - владельца

Директор

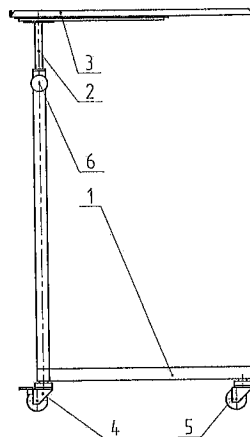

1. Основание
2. Шток
3. Панель
4. Колесо с тормозом
5. Колесо без тормоза

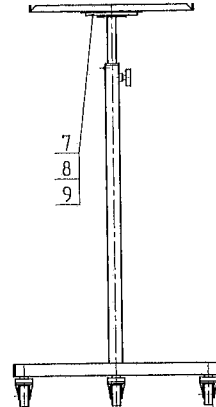

6. Ручка
7. Болт М6х10
8. Шайба 6
9. Шайба 6 (пружинная)

Рисунок

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.035 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации- 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая ,316,к.4.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Столик инструментальный СИ-5Н, заводской №
ТУ ВУ 800017554.035-2015

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации



Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____
города


Подпись и печать руководителя
ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя
учреждения - владельца

Директор

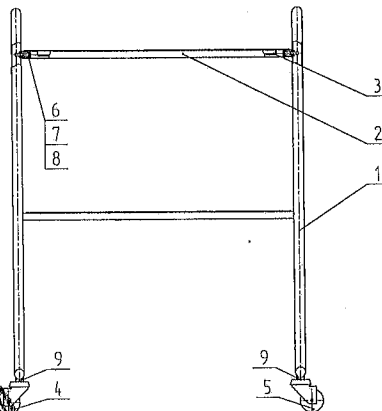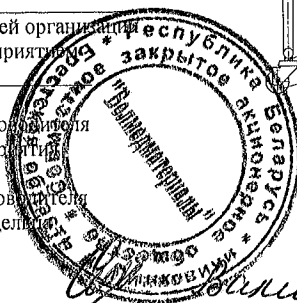

1. Стойка боковая
2. Рамка
3. Полка
4. Колесо Ø 50 мм с тормозом
5. Колесо Ø 50 мм без тормоза

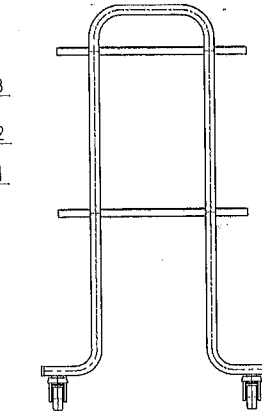

6. Болт М6 или винт М8
7. Шайба 6
8. Шайба 6 (пружинная)
9. Винт М10

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Столик хирургический СХ-2П (далее - столик) предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов, необходимых для выполнения хирургических операций.

1.2 Столик предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Размер полки, мм:

длина.....600±10
ширина.....400±10

2.2 Габаритные размеры столика, мм, не более:

длина.....670
ширина.....550
высота max/min1340/865

2.3 Масса, кг, не более.....10

2.4 Допускаемая нагрузка на панель, кг, не более.....10

2.5 Срок службы, лет, не менее5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 В комплект поставки входит:

- столик1 шт.;
- паспорт1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Столик (см. рис.) представляет собой конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из основания 1, штока 2 и панели 3, двух опорных колес с тормозом 4 и одного опорного колеса без тормоза 5.

Примечание – Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Столик поставляется потребителю в собранном виде.

4.3 Распакуйте столик, очистите его от пыли. Осмотрите столик для определения его состояния после транспортирования и хранения.

4.4 Выполните санитарную обработку столика путем протирки его поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% раствора моющего средства типа "Лотос" или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата)) или любыми

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Столик инструментальный СИ-5Н (далее – столик) предназначен для размещения инструментов, материалов и медикаментов.

1.2 Столик предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры столика, мм, не более:

длина.....730
ширина.....540
высота.....880

2.2 Габаритные размеры рамки, мм:

длина.....580±10
ширина.....410±10

2.3 Масса, кг, не более.....17

2.4 Допускаемая равномерно-распределенная нагрузка на полку (далее - нагрузка), кг, не более.....10

2.5 Срок службы, лет, не менее.....5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки указан в таблице.

Таблица

Наименование	Кол., шт	Наименование	Кол., шт
Стойка с колесами	2	Болт М6х30	8
Рамка	2	Шайба 6	8
Полка съемная*	2	Шайба 6 (пружинная)	8
Паспорт	1		

* В качестве полки поставляется лоток из нержавеющей стали размером 570х400 мм или полка стеклянная по заказу потребителя.

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК СБОРКИ

4.1 Столик поставляется потребителю в разобранном виде. Вскройте упаковку, очистите от пыли.

4.2 Рекомендуемая последовательность сборки (см. рис.).

4.2.1 Присоедините колеса поз.4, поз.5 к стойкам при помощи винтов поз.9, если колеса не установлены производителем.

дезсредствами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 Во избежание падений и опрокидывания предметов, располагаемых на панели, избегайте резких рывков или ударов столика при его перемещении.

5.2 Изменение высоты столика производится с помощью ручки 6. При изменении высоты столика придерживайте панель 3 рукой.

5.3 В процессе эксплуатации периодически затягивайте ослабленные крепежные соединения 7,8,9 (см. рис.).

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Столик в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить столик допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик хирургический СХ-2П, заводской номер _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.035-2015 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

м.п.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Столик хирургический СХ-2П, заводской номер _____ у _____, в соответствии с требованиями, предусмотренными в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ м.п. _____ Подпись _____

4.2.2 Соедините боковые стойки поз.1 с рамками поз.2 при помощи крепежа поз.6, 7, 8.

Стойки и рамки металлические, покрыты порошковой полимерной краской.

4.2.3. Далее положите полки поз.3 (предварительно снимите защитную пленку) на рамки поз.2.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.3 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любыми дезсредствами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации столика необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения.

5.2 Во избежание падений и опрокидывания предметов, расположенных на полках столика, необходимо передвигать столик плавно, без рывков и ударов.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Столик в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить столик допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик инструментальный СИ-5Н, заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.035-2015 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ м.п.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Столик инструментальный СИ-5Н, заводской № _____ упакован в соответствии с требованиями, предусмотренными в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ м.п. _____ Подпись _____

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.035-2015 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока, изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу: 225730, Беларусь, Пинский район, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316, к.4.

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

СТОЛИК СТОМАТОЛОГА

СС-3П

ТУ ВУ 800017554.035-2015

Паспорт

БИПЯ.324152.030.СС-3П ПС

1) СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Столик стоматолога СС-3П, заводской №

ТУ ВУ 800017554.035-2015

Приобретен _____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации


Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

города _____

Подпись и печать руководителя
ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя
учреждения - владельца

Директор

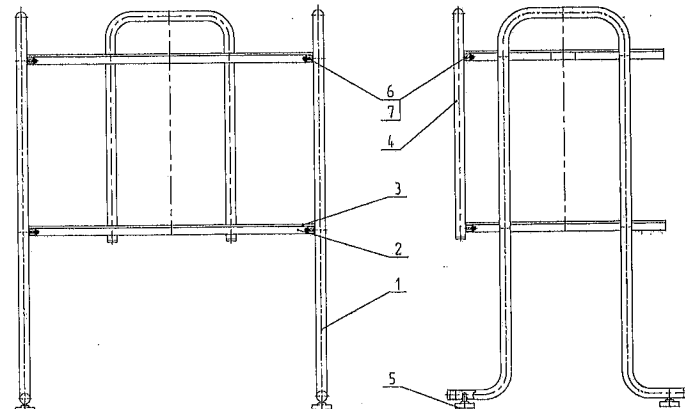

- 1. Стойка боковая
- 2. Рамка
- 3. Полка
- 4. Стяжка

- 5. Опора
- 6. Винт М8
- 7. Шайба 10

Рисунок

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.035-2015 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем.

10.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 316, к.4.

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

СТОЛИК МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ

СМ-3П

ТУ ВУ 800017554.035-2015

Паспорт

БИПЯ.942814.031 ПС

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

11.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Столик манипуляционный СМ-3П заводской №

ТУ ВУ 800017554.035-2015

Приобретен _____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации


Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____

города _____

Подпись и печать руководителя
ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя
учреждения - владельца

Директор

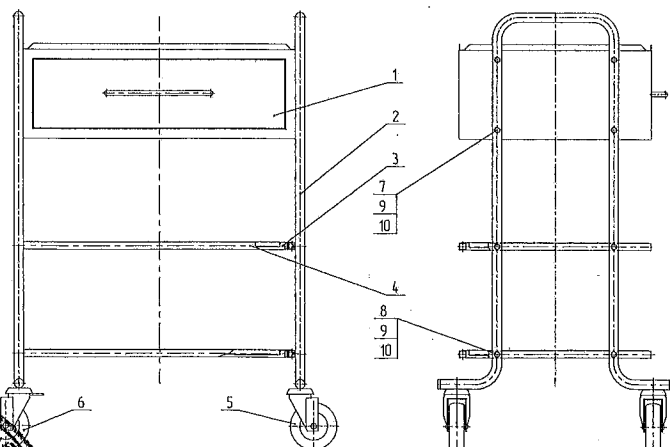

- 1. Каркас с ящиком
- 2. Стойка
- 3. Рамка
- 4. Полка
- 5. Колеса Ø 100мм без тормоза

- 6. Колеса Ø 100мм с тормозом
- 7. Болт М6х16
- 8. Болт М6х30
- 9. Шайба 6Г
- 10. Шайба 6

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Столик стоматолога СС-ЗП (далее – столик) предназначен для размещения предметов и материалов, необходимых врачу-стоматологу для работы.

1.2 Столик предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры столика, мм, не более:

длина.....650
ширина.....500
высота.....840

2.2 Габаритные размеры рамки, мм:

длина.....580±10
ширина.....410±10

2.3 Масса, кг, не более.....16

2.4 Допускаемая равномерно-распределенная нагрузка на полку (далее - нагрузка), кг, не более.....10

2.5 Срок службы, лет, не менее.....5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки указан в таблице.

Таблица

Наименование	Кол. шт	Наименование	Кол. шт
Стойка	2	Опора	4
Рамка	2	Винт М8	12
Полка	2	Шайба 6	12
Стяжка	1	Паспорт	1

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК СБОРКИ

4.1 Столик поставляется потребителю в разобранном виде. Вскройте упаковку, очистите от пыли.

4.2 Рекомендуемая последовательность сборки (см. рис.).

4.2.1 Вкрутите опоры поз.4 в стойки поз.1, если опоры не установлены производителем.

4.2.2 Соедините боковые стойки поз.1 с рамками поз.2 при помощи крепежа поз.5, 6. Затем стяжку поз.4 с рамками поз.2.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Столик манипуляционный СМ-ЗП (далее – столик) предназначен для размещения медикаментов, приспособлений и т.п. и доставки их в палаты в пределах больничного корпуса.

1.2 Столик предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры столика, мм, не более:

длина.....780
ширина.....690
высота.....930

2.2 Габаритные размеры корпуса/полки, мм:

длина.....580±10
ширина.....410±10

2.3 Масса, кг, не более.....28

2.4 Допускаемая нагрузка на ящик (далее - нагрузка), кг.....5

2.4 Допускаемая нагрузка на полку (далее – нагрузка), кг.....10

2.5 Срок службы, лет, не менее.....5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки согласно таблицы:

Наименование	Кол. шт	Наименование	Кол. шт
Стойка с колесами	2	Шайба 6 (пружинная)	8
Рамка	2	Шайба 6	8
Полка съемная из нержавеющей стали размером 570x400 мм	2	Болт М6x30	8
		Болт М6x16	8
Корпус с ящиком	1	Паспорт	1

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Столик (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из корпуса с выдвижным ящиком 1 (ящик с ручкой), стоек 2, рамок 3, полок 4, двух опорных колес 5 и двух опорных колес с тормозом 6.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Столик поставляется потребителю в разобранном виде.

Примечание – По желанию потребителя столик может поставляться в собранном виде.

4.3 Распакуйте столик, очистите его от пыли.

4.4 Осмотрите столик для определения его состояния после транспортирования и хранения.

4.5 Регистрация МИ в Росздравнадзоре обязательности (см. рисунок):

www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.2.3. Положите полки поз.3 на рамки поз.2.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.3 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любыми дезсредствами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации столика необходимо периодически затягивать ослабленные крепежные соединения.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Столик в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

6.2 Хранить столик допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик стоматолога СС-ЗП, заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.035-2015 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Подпись ответственного за приемку _____

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Столик стоматолога СС-ЗП, заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ М.П. _____ Подпись _____

присоедините корпус 1 и рамки 3 к стойкам 2 при помощи крепежа 7, 8, 9, 10. Полки 4 положите на рамки 3.

Стойки, корпус с выдвижным ящиком и рамки металлические, покрыты порошковой полимерной краской. Верхний лоток и съемные полки - из нержавеющей стали.

4.6 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любыми дезсредствами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации столика необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения.

5.2 Во избежание падений и опрокидывания предметов, расположенных на полке столика, необходимо передвигать столик плавно, без рывков и ударов, не переезжать через пороги и другие препятствия.

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1 Возможные неисправности приведены в таблице.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Увеличение усилия перемещения ящика	Перекос, засаждение, ослабление крепления узлов	Почистить направляющие, подтянуть крепеж
Появление люфтов	Слабое крепление узлов	Подтянуть крепеж

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Столик в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50° С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25° С.

7.2 Хранить столик допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик манипуляционный СМ-ЗП, заводской № _____ соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.035-2015 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П.

Подпись ответственного за приемку _____

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Столик манипуляционный СМ-ЗП, заводской № _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ М.П. _____ Подпись _____

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.035-2015 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

10.3 В течение гарантийного срока, изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4.

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

11.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Столик анестезиолога СА-2П заводской № _____
ТУ ВУ 800017554.035-2015

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____
города _____

Подпись и печать руководителя
ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя
учреждения-владельца

Директор



1. Каркас с ящиками
2. Стойка
3. Рамка
4. Полка
5. Колеса без тормоза

6. Колеса с тормозом
7. Болт М6х16
8. Болт М6х30
9. Шайба 6Г
10. Шайба 6

Рисунок

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»


СТОЛИК АНЕСТЕЗИОЛОГА

СА-2П

ТУ ВУ 800017554.035-2015

Паспорт

БИПЯ.324152.032 ПС

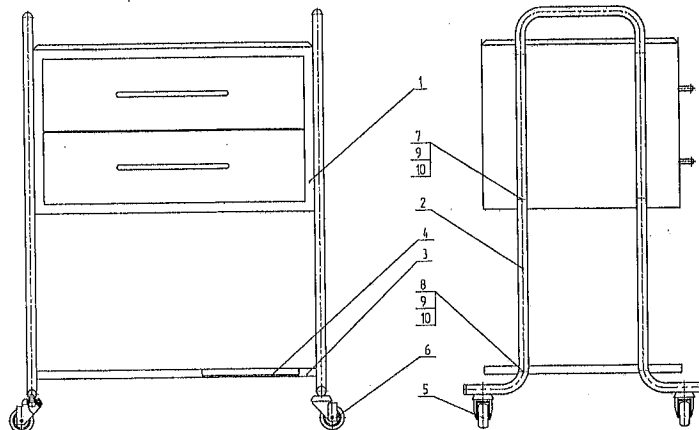

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ ВУ 800017554.035-2015 при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

9.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу: 225730, Беларусь, Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31б, к.4.

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

СТОЛ ПОД МЕДИЦИНСКУЮ АППАРАТУРУ

ФТА-1П

ТУ ВУ 800017554.035-2015

Паспорт

БИПЯ.324114.053 ПС

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

10.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

10.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока

Стол под медицинскую аппаратуру ФТА-1П, заводской № _____
ТУ ВУ 800017554.035-2015


Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием _____
города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного предприятия


Подпись и печать руководителя
учреждения - владельца

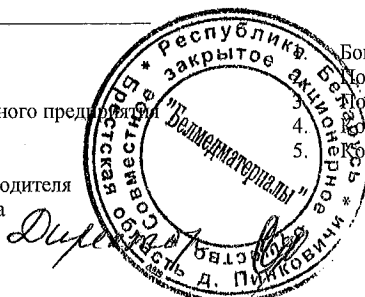

- Боковина
- Полка
- Полка верхняя
- Колесо
- Колесо с тормозом

6. Винт М6х45
7. Винт М6х30
8. Шайба 6
9. Шайба (пружинная)
10. Гайка М6

Рисунок

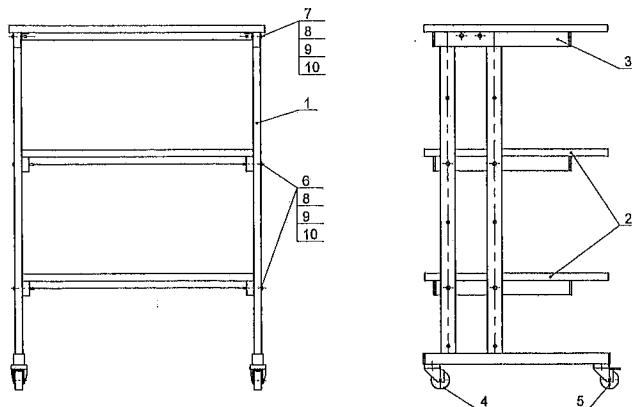

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Столик анестезиолога СА-2П (далее – столик) предназначен для размещения предметов, необходимых врачу-анестезиологу при работе в операционной.

1.2 Столик предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры столика, мм, не более:

длина.....780
ширина.....600
высота.....930

2.2 Габаритные размеры корпуса/полки, мм:

длина.....580±10
ширина.....410±10

2.2 Масса, кг, не более.....37

2.3 Допускаемая нагрузка на ящик (далее – нагрузка), кг.....5

2.4 Допускаемая нагрузка на полку (далее – нагрузка), кг.....10

2.5 Срок службы, лет, не менее.....5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- корпус.....1 шт. рамка.....1 шт. болт М6х16.....8 шт.
- полка.....1 шт. стойка.....2 шт. шайба 6Г.....12 шт.
- паспорт.....1 шт. болт М6х30.....4 шт. шайба 6.....12 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Столик (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, выполненную из унифицированных элементов и состоящую из корпуса с ящиками 1, стоек 2, рамки 3, полки 4, двух опорных колес 5 и двух опорных колес с тормозом 6.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Столик поставляется потребителю в разобранном виде.

Примечание – По желанию потребителя столик может поставляться в собранном виде.

4.3 Распакуйте столик, очистите его от пыли.

4.4 Осмотрите столик для определения его состояния после транспортирования и хранения.

4.5 Соберите столик в следующей последовательности (см. рисунок): присоедините корпус 1 и рамку 3 к стойкам 2 при помощи крепежа 7, 8, 9, 10. Полку 4 положите на рамку 3.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Стол под медицинскую аппаратуру ФТА-1П (далее – стол) предназначен для размещения медицинской аппаратуры и оборудования в медицинских учреждениях.

1.2 Стол предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Размер верхней полки, мм :

длина.....700± 5
ширина.....500± 5

2.2 Размер нижней и средней полок, мм :

длина.....635± 5
ширина.....500± 5

2.3 Габаритные размеры, мм, не более:

длина.....836
ширина.....640
высота.....1110

2.4 Масса, кг, не более.....28

2.5 Допускаемая нагрузка на полку, кг.....20

2.6 Срок службы, лет, не менее.....5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 В комплект поставки входит:

- стол под медицинскую аппаратуру.....1 шт.;
- паспорт.....1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

4.1 Стол (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, состоящую из двух боковин поз.1, верхней полки поз.2 и двух регулируемых полок поз.3, соединенных между собой с помощью крепежа поз. 6, 7, 8, 9, 10. Стол снабжен четырьмя колесами поз. 4, 5 два из которых с тормозом.

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью совершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

4.2 Стол по конструкции - разборный, потребителю поставляется в собранном виде.

4.3 Распакуйте стол, очистите его от пыли. Осмотрите стол для определения его состояния после транспортирования и хранения.

4.6 Выполните санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любыми дезсредствами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 В процессе эксплуатации столика необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения.

5.2 Во избежание падений и опрокидывания предметов, расположенных на полке столика, необходимо передвигать столик плавно, без рывков и ударов, не проезжать через пороги и другие препятствия.

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

6.1 Возможные неисправности приведены в таблице.

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Увеличение усилия перемещения ящика	Перекося, заедание, ослабление крепления узлов	Почистить направляющие, подтянуть крепеж
Появление люфтов в конструкции	Слабое крепление узлов	Подтянуть крепеж

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Столик в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25°C.

7.2 Хранить столик допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столик анестезиолога СА-2П, заводской №..... соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.035-2015 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска..... м.п.

Подпись ответственного за приемку.....

9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Столик анестезиолога СА-2П, заводской №..... упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки.....
Упаковку произвел..... м.п. Подпись.....

4.4 По желанию потребителя стол поставляется в разобранном виде. Соедините полки поз.2,3 с боковинами поз.1 согласно рисунка, при помощи крепежа поз.6,7,8,9,10.

4.5 Выполните санитарную обработку стола путем протирания его поверхностей салфеткой, смоченной раствором перекиси водорода с добавлением 0,5%-го раствора моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина (салфетка должна быть отжата) или любыми дезсредствами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Республики.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

5.1 Во избежание падений и опрокидывания предметов, располагаемых на полках, избегайте резких рывков или ударов стол при его перемещении.

5.2 В процессе эксплуатации периодически затягивайте ослабленные крепежные соединения.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Стол в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25°C.

6.2 Хранить стол допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25°C. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стол под медицинскую аппаратуру ФТА-1П, заводской номер..... соответствует техническим условиям ТУ ВУ 800017554.035-2015 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска..... м.п.

Подпись ответственного за приемку.....

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Стол под медицинскую аппаратуру ФТА-1П, заводской номер..... упакован согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки.....
Упаковку произвел..... м.п. Подпись.....