
Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

IFU, RU, Front: 120 mm x 260 mm

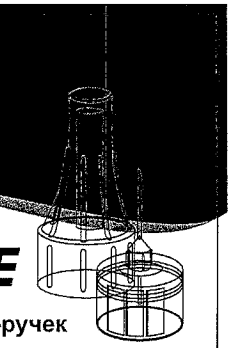

KD-*PENOFINE*

Иглы для инсулиновых шприц-ручек

KD-*PENOFINE* стерильные инъекционные иглы однократного применения предназначены для инъекций инсулина с использованием совместимых инсулиновых шприц-ручек в соответствии со схемой лечения сахарного диабета.

Инструкции по применению:

- Проверьте совместимость иглы со шприц-ручкой – список совместимых шприц-ручек указан в таблице.
- Проверьте целостность упаковки и срок годности перед использованием.
- Не используйте, если упаковка была преждевременно вскрыта или повреждена, так как в этом случае стерильность продукта не может быть гарантирована.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Используйте незамедлительно после вскрытия упаковки.
- Присоедините иглу к шприц-ручке.
- Убедитесь, что лекарственное средство беспрепятственно поступает в иглу. Всегда держите рядом запасные иглы для замены при необходимости.
- Используйте технику введения лекарственного средства, рекомендованную Вашим лечащим врачом. Сделайте инъекцию, нажимая кнопку на шприц-ручке. Следите за тем, чтобы угол расположения шприц-ручки не менялся. Если после извлечения иглы инсулин продолжает вытекать из иглы, во время следующей инъекции удерживайте иглу введенной более продолжительный период времени.
- После инъекции снимите иглу со шприц-ручки и утилизируйте в специальном контейнере в соответствии с применяемыми нормами и указаниями.

Предупреждения:

- Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом по поводу наиболее подходящего размера иглы и техники введения.
- Всегда следуйте указаниям Вашего лечащего врача.
- Пациентам с ограниченными возможностями должна быть оказана помощь при использовании данного продукта.
- Иглы инъекционные для инсулиновых шприц-ручек предназначены для однократного применения – всегда используйте новую иглу для очередной инъекции и утилизируйте ее после использования. Повторное применение одноразовых изделий может привести к инфицированию, т.к. использованное изделие не является стерильным. Кроме того, инъекции с ранее использованными иглами могут быть более болезненными из-за отсутствия любриканта и деформации кончика иглы после предыдущей инъекции.
- Никогда не храните шприц-ручку с насаженной иглой, т.к. это может привести к изменению (кристаллизации) или загрязнению инсулина, а также попаданию пузырьков воздуха в картридж, что нарушит точность дозировки лекарственного средства.

IFU, RU, Back: 120 mm x 260 mm

Список совместимых шприц-ручек:

Owen Mumford	AutoPen®	✓
	AutoPen® 2	✓
DONGBAO	YpsoPen®	✓
Novo Nordisk	NovoPen® 3	✓
	NovoPen® 4	✓
	NovoPen® Junior	✓
	NovoMix®30 FlexPen®	✓
Ypsomed	YpsoPen®	✓
BD Medical	Puregon Pen®	✓
Bioton	GensuPen2	✓
	GensuPen Improve	✓
Eli Lilly	Luxura HumaPen®	✓
	HumaPen®	✓
	HumaPen® Ergo®	✓
	Saline KwikPen™	✓
	Luxura HD HumaPen®	✓
	HumaPen® Ergo II	✓
	OptiPen® Pro 1	✓
Sanofi Aventis	TactiPen®	✓
	Sanofi Aventis Lantus	✓
Lantus	Lantus® SoloStar®	✓
Gan & Lee	GanLee Pen	✓

Дата последнего пересмотра: 2020-05-18
5431

Символы:

CE 0123

STERILE EO — Стерилизация оксидом этилена

Только для одноразового применения

Не используйте, если упаковка повреждена

Беречь от влаги

Не допускать воздействия солнечного света

Хранить при температуре от +5 С до +35 С

REF — Номер изделия по каталогу/номер артикула

LOT — Номер партии

Дата производства

Использовать до / срок годности

Изготовитель

KD MEDICAL GMBH HOSPITAL PRODUCTS • CHARLOTTENSTRASSE 65 • 10117 BERLIN – GERMANY

KD MEDICAL GMBH KDM CHARLOTTENSTRASSE 65 10117 BERLIN GERMANY

Jörg Bartz, Managing Director