Инструкция по применению

Набор принадлежностей для введения и фильтрации газов GOT для внутриглазной тампонады

Наборы принадлежностей для введения и фильтрации газов GOT Multi для внутриглазной тампонады (артикул GIS 003-00) представляют собой медицинские изделия для применения в офтальмологии с целью проведения внутриглазной тампонады с использованием газов GOT Multi в витреоретинальной хирургии.

ВНИМАНИЕ: эта инструкция содержит важную информацию и предупреждения о правильном использовании изделий медицинского назначения. Внимательно прочитайте её перед началом любой операции и внимательно следуйте инструкции по применению.

Состав и упаковка


Набор принадлежностей для введения и фильтрации газов GOT Multi для внутриглазной тампонады включает в себя: антибактериальный фильтр 0,2 мкм с адаптером (из поливинилхлорида) для подключения к баллону с газом, игла (канюля) калибром 30 Gauge, браслет для пациента.
Наборы упакованы в индивидуальный стерильный пакет.

Показания для применения

Наборы принадлежностей для введения и фильтрации газов GOT Multi для внутриглазной тампонады предназначены исключительно для использования вместе с офтальмологическими газами SF6, C2F6, C3F8 с целью длительной внутриглазной тампонады в витреоретинальной хирургии медицинским персоналом в условиях операционной. Любое другое использование должно считаться не по показаниям.

Указания по применению

1.Убедитесь, что упаковка не повреждена.
2 Извлеките принадлежности из пакета в стерильное поле.
3. Подсоедините фильтр (2) к стерильному шприцу с разъемом Луэра в асептических условиях.
4. Подсоедините адаптер (1) к баллону, содержащему офтальмологический газ, согласно инструкции к газу, которая поставляется вместе с газом.
5. Возьмите газ в соответствии с инструкцией, поставляемой с газом.
6. Отсоедините антимикробный фильтр (2) и адаптер (1) от шприца.
7. Немедленно установите иглу на шприц.
8. Продукт готов к внутриглазному введению.

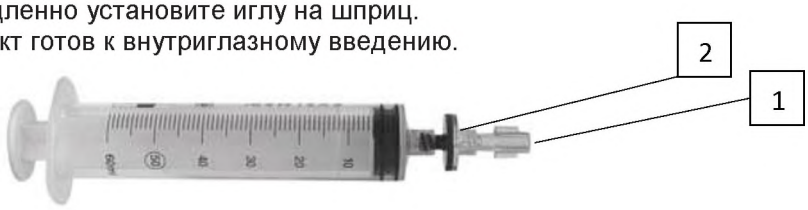

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Перед использованием храните так, как указано на этикетке.
• Целостность продукции гарантируется, только если упаковка не повреждена. Не используйте изделие, если упаковка открыта или повреждена, или любой компонент получен в неисправном состоянии.
• Срок годности указан на этикетке продукта. Не использовать после истечения срока годности.
• Изделие предназначено для одноразового использования. Не стерилизовать повторно. Использование или стерилизация уже использованных одноразовых продуктов может вызвать перекрестное заражение.
• Изделие должно быть утилизировано как медицинские отходы.
• Не снимайте антимикробный фильтр с шприца перед забором газа в шприц и смешивания с воздухом.
• После введения газа в глаз пациенту обязательно необходимо носить на руке информирующий закрытый браслет на соответствующий период времени.
• Утилизируйте пустые упаковки, соблюдая действующие правила и процедуры.

Стерилизация

• Наборы стерилизованы этиленоксидом.
• Продукт предназначен для одноразового использования - не стерилизовать повторно.

ХРАНЕНИЕ

• Хранить при комнатной температуре.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


Для любого отчета об этом продукте укажите номер партии, указанный на этикетке.

Для любых комментариев и предложений, перейдите на www.alchimiasrl.com

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
AL.CHI.MI.A. S.r.l.
Viale Austria 14
35020 Ponte S. Nicolò (PD) - Italy
e-mail: info@alchimiasrl.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

УКАЗАТЕЛЬ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ

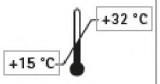	Маркировка CE
	Осторожно, см. информацию о продукте
	Не используйте повторно
	Номер лота
	Срок годности
	Номер по каталогу
	Стерилизовано
	Не содержит натуральный каучуковый латекс
	Не используйте, если упаковка повреждена
	Пределы температуры
	Хранить вдали от солнечного света
	Не засоряйте окружающую среду
	Производитель

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru