Инструкция по применению

Масло силиконовое для внутриглазной тампонады в витреоретинальной хирургии с принадлежностями RS-OIL

представляет собой медицинское силиконовое масло для применения в офтальмологии с целью проведения внутриглазной тампонады в витреоретинальной хирургии.

ВНИМАНИЕ: эта инструкция содержит важную информацию и предупреждения о правильном использовании изделий медицинского назначения. Внимательно прочитайте её перед началом любой операции и внимательно следуйте инструкции по применению.

Состав

Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL является апирогенным, стерильным, медицинским, чистым силиконовым маслом (100% полидиметилсилоксан), не содержит консервантов или каких-либо других ингредиентов.

Силиконовое масло RS-OIL может иметь следующие параметры вязкости: 1000 cS, 1300 cS, 2000 cS, 5000 cS, 5700 cS.

Упаковка

Продукт доступен в следующих формах выпуска: 15 мл в стеклянном флаконе, 10 мл в стеклянном флаконе, 10 мл в шприце, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения. Этикетки на упаковке предоставляют возможность отслеживания продукта.

Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL имеет следующие артикулы (каталожные номера):

Масло силиконовое для внутриглазной тампонады в стеклянном флаконе:

- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL 1000 cS , 15 мл в стеклянном флаконе (артикул RSO 002-00)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL 1300 cS, 15 мл в стеклянном флаконе (артикул RSO 008-00)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL 2000 cS, 15 мл в стеклянном флаконе (артикул RSO 012-00)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL 5000 cS, 15 мл в стеклянном флаконе (артикул RSO 004-00)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL 5700 cS, 15 мл в стеклянном флаконе (артикул RSO 009-00)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL 1000 cS, 10 мл в стеклянном флаконе (артикул RSO 003-00)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL 5000 cS, 10 мл в стеклянном флаконе (артикул RSO 005-00)

Масло силиконовое для внутриглазной тампонады в шприце:

- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 1000 cS, 10 мл в шприце (артикул RSO 006-00)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 1300 cS, 10 мл в шприце (артикул RSO 010-00)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 2000 cS, 10 мл в шприце (артикул RSO 013-00)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 5000 cS, 10 мл в шприце (артикул RSO 007-00)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 5700 cS, 10 мл в шприце (артикул RSO 011-00)

Масло силиконовое для внутриглазной тампонады в шприце с набором для автоматического введения:

- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 1000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Accurus, Constellation, Associate 2500, EVA (артикул SOP 001)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 1000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Millenium, Stellaris (артикул SOP 002)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 1300 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Accurus®, Constellation, Associate 2500, EVA (артикул SOP 009)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 1300 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Millenium, Stellaris (артикул SOP 012)

- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 2000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Accurus, Constellation, Associate 2500, EVA (артикул SOP 010)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 2000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Millenium™, Stellaris (артикул SOP 013)

- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 5000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Accurus®, Constellation, Associate 2500, EVA (артикул SOP 003)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 5000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Millenium™, Stellaris (артикул SOP 004)

- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 5700 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Accurus, Constellation, Associate 2500, EVA (артикул SOP 011)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 5700 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Millenium, Stellaris (артикул SOP 014)

Физикохимические свойства
Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL (100% полидиметилсилоксан) - оптически чистое вещество, не смешивается с водными растворами, биологически инертно, не обладает биологической токсичностью.

RS-OIL	**1000**	**1300**	**2000**	**5000**	**5700**
Кинематическая вязкость при 25°C (сСт)	1000	1300	2000	5000	5700
Динамическая вязкость при 25°C (мПа*с)	1031	1340	2062	5155	5876
Удельная масса (плотность) при 25°C (г/см^3)	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Поверхностное натяжение на границе с воздухом (мН/м)	21	21	21	21	21
Поверхностное натяжение на границе с водой (мН/м)	40	40	40	40	40
Рефрактивный индекс:	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Показания для применения
Длительная внутриглазная тампонада в витреоретинальной хирургии. Любое другое использование должно считаться не по показаниям. Количество вводимого силиконового масла остается на усмотрение хирурга; недостаточное наполнение может привести к неэффективной задней тампонаде, а избыточное наполнение может привести к аномалиям роговицы и повышению внутриглазного давления. Продолжительность периода нахождения силиконового масла в глазу пациента определяется на усмотрение хирурга. Отбор пациентов и выбор хирургической процедуры также определяется на усмотрение хирурга. Предназначен только для применения в офтальмологии!

Указания по применению
Убедитесь, что упаковка не повреждена.
Для каждого варианта продукта следуйте инструкциям по применению ниже:
Стеклянные флаконы
• Извлеките флакон из пакета в стерильное поле.
• В асептических условиях переместите содержимое флакона в стерильное устройство (шприц), пригодное для инъекций, стараясь не допустить образования пузырьков воздуха.
• Не смешивать с другими веществами.
Шприцы
• Извлеките шприц из пакета в стерильном поле.
При ручном введении: поверните адаптер шприца (1) против часовой стрелки для его снятия; вкрутите шток поршня (2) в резиновую заглушку (3) шприца (см. рис. ниже).
При автоматизированном введении с использованием оборудования: уберите поршень (2) и поверните адаптер шприца (1) по часовой стрелке прочно прикрепив его к шприцу. Прикрепите шприц к набору для автоматического (механического) введения силиконового масла с одной стороны, подключите набор к хирургической системе используя разъем для подключения с другой стороны.
• Убедитесь, что канюля надежно прикреплена к шприцу!
• ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ СИЛИКОНОВОГО МАСЛА НАПОЛНИТЕ КАНЮЛЮ, ВЫДАВИВ НЕМНОГО (ДО 0,5 МЛ) СИЛИКОНОВОГО МАСЛА, ПРОВЕРЯЯ ПРАВИЛЬНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ РЕЗИНОВОЙ ЗАГЛУШКИ (03) В ШПРИЦЕ
ЕСЛИ ПЕРФТОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (ПЕРФТОРОКТАН ИЛИ ПЕРФТОРДКАЛИН)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ЭТОЙ ХИРУРГИИ, ВЫПОЛНЯЙТЕ ЖИДКОСТНО-ВОЗДУШНЫЕ ОБМЕНЫ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ПЕРФТОРУГЛЕРОДОВ ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ СИЛИКОНОВОГО МАСЛА.

• Медленно вводите силиконовое масло в соответствии с принятой медицинской практикой.

Правильно утилизируйте оставшееся силиконовое масло.

При достижении удовлетворительных результатов у пациента удалите силиконовое масло из глаза и утилизируйте удаленное масло как медицинские отходы.



Противопоказания

Силиконовое масло - относительно инертное вещество; тем не менее, рекомендуется не применять их у пациентов с известной повышенной чувствительностью к заявленным ингредиентам.

Силиконовое масло противопоказано у пациентов с псевдофакией с установленными силиконовыми интраокулярными линзами или в качестве постоянного заменителя стекловидного тела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Перед использованием храните так, как указано на этикетке.

• Целостность продукции гарантируется, только если упаковка не повреждена. Не используйте раствор, если упаковка открыта или повреждена, или любой компонент получен в неисправном состоянии.

• Срок годности указан на этикетке продукта. Не использовать после истечения срока годности.

• Не встряхивать и не смешивать с другими веществами.

• Изделие предназначено для одноразового использования. Не стерилизовать повторно. Использование или стерилизация уже использованных одноразовых продуктов может вызвать перекрестное заражение.

• ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВВОДИТЬ ПРОДУКТ, ПЕРЕВЕДИТЕ ШПРИЦ В ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С КАНЮЛЕЙ, ВЫДАВИТЕ НЕМНОГО (ДО 0,5 МЛ) ЖИДКОСТИ, ПРОВЕРЯЯ ПРАВИЛЬНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ РЕЗИНОВОЙ ЗАГЛУШКИ В ШПРИЦЕ

ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ ПОЯВЛЕНИЕ ОСТАТКОВ ПЕРФТОРУГЛЕРОДОВ ПОД СЕТЧАТКОЙ АССОЦИИРОВАНО С ПОДЛИПАНИЕМ И ФЛОТИРОВАНИЕМ СИЛИКОНОВОГО МАСЛА. ВЫПОЛНЯЙТЕ ЖИДКОСТНО-ВОЗДУШНЫЕ ОБМЕНЫ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ПЕРФТОРУГЛЕРОДОВ ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ СИЛИКОНОВОГО МАСЛА.

• Прежде чем вводить силиконовое масло, убедитесь в отсутствии макулярных отверстий или разрывов сетчатки, в которые может проникнуть силиконовое масло под сетчатку. Избегайте любых контактов силиконового масла с эндотелием роговицы.

• Во время введения обращайте внимание чтобы никакие остатки не попали под сетчатку через разрывы.

• Продукт должен использоваться только квалифицированным медицинским персоналом, в операционной комнате. Любые остатки должны быть утилизированы как медицинские отходы. В случае случайного повреждения упаковки и разлива силиконового масло до или во время использования, устраните разлив и впитайте масло, используя абсорбирующий инертный материал, поместите в пластиковый контейнер и утилизируйте, соблюдая действующие правила и процедуры.

• Утилизируйте пустые упаковки, соблюдая действующие правила и процедуры.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

• После операции может возникнуть временное повышенное внутриглазного давления, гипотония, глаукома, катаракта.

• Миграция силиконового масла в переднюю камеру может привести к изменениям роговицы, таким как отек, помутнение, повреждение десцеметовой мембраны или декомпенсация роговицы.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Силиконовое масло может взаимодействовать с сильными окислителями.

Стерилизация
• Флаконы, шприцы, наборы для введения стерилизованы методом автоклавирования.
• Продукт предназначен для одноразового использования - не стерилизовать повторно.

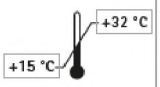
ХРАНЕНИЕ
• Хранить при комнатной температуре. Хранить вдали от источников тепла и прямого света.

Для любого отчета об этом продукте укажите номер партии, указанный на этикетке.
Для любых комментариев и предложений, перейдите на www.alchimiasrl.com

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
AL.CHI.MI.A. S.r.l.
Viale Austria 14
35020 Ponte S. Nicolò (PD) - Italy
e-mail: info@alchimiasrl.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

УКАЗАТЕЛЬ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ

	Маркировка CE
	Осторожно, см. информацию о продукте
	Не используйте повторно
	Номер лота
	Срок годности
	Номер по каталогу
	Стерилизовано
	Не содержит натуральный каучуковый латекс
	Не используйте, если упаковка повреждена
	Пределы температуры
	Хранить вдали от солнечного света
	Не засоряйте окружающую среду
	Производитель

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению

Масло силиконовое в комплекте с набором для введения

Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL в шприце с набором для автоматического введения представляет собой медицинское силиконовое масло для применения в офтальмологии с целью проведения внутриглазной тампонады в витреоретинальной хирурги для автоматического введения с использованием различных хирургических офтальмологических систем.

ВНИМАНИЕ: эта инструкция содержит важную информацию и предупреждения о правильном использовании изделий медицинского назначения. Внимательно прочитайте её перед началом любой операции и внимательно следуйте инструкции по применению.

Состав и упаковка

Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL является апирогенным, стерильным, медицинским, чистым силиконовым маслом (100% полидиметилсилоксан), не содержит консервантов или каких-либо других ингредиентов. Силиконовое масло RS-OIL может иметь следующие параметры вязкости: 1000 cS, 1300 cS, 2000 cS, 5000 cS, 5700 cS.
Продукт расфасован по 10 мл в шприцы и укомплектован набором для автоматического введения.
Каждый компонент упакован в отдельную стерильную упаковку.
Этикетки на упаковке предоставляют возможность отслеживания продукта.

Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL в шприце с набором для автоматического введения имеет следующие артикулы (каталожные номера):

- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 1000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Accurus, Constellation, Associate 2500, EVA (артикул **SOP 001**)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 1000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Millenium, Stellaris (артикул **SOP 002**)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 1000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам ORBIT, OS3, OS4 FAROS™, R-EVOLUTION (артикул **SOP 005**)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 1000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам ASSISTANT, MEGATRON S (артикул **SOP 007)**
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 1300 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Accurus, Constellation, Associate 2500, EVA (артикул **SOP 009**)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 1300 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Millenium, Stellaris (артикул **SOP 012**)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 1300 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам ORBIT, OS3, OS4 FAROS™, R-EVOLUTION (артикул **SOP 015**)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 1300 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам ASSISTANT, MEGATRON S (артикул **SOP 018)**
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 2000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Accurus, Constellation, Associate 2500, EVA (артикул **SOP 010**)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 2000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Millenium, Stellaris (артикул **SOP 013**)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 2000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам ORBIT, OS3, OS4 FAROS™, R-EVOLUTION (артикул **SOP 016**)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 2000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам ASSISTANT, MEGATRON S (артикул **SOP 019)**
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 5000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Accurus, Constellation, Associate 2500, EVA (артикул **SOP 003**)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 5000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Millenium, Stellaris (артикул **SOP 004**)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 5000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам ORBIT, OS3, OS4 FAROS, R-EVOLUTION (артикул **SOP 006**)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 5000 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам ASSISTANT, MEGATRON S (артикул **SOP 008)**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 5700 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Accurus, Constellation, Associate 2500, EVA (артикул **SOP 011**)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 5700 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам Millenium, Stellaris (артикул **SOP 014**)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 5700 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам ORBIT, OS3, OS4 FAROS, R-EVOLUTION (артикул **SOP 017**)
- Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL ECS 5700 cS, 10 мл в шприце с набором для автоматического введения к системам ASSISTANT, MEGATRON S (артикул **SOP 020).**

		ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМАМ			
		ACCURUS® CONSTELLATION® ASSOCIATE® 2500, EVA	MILLENNIUM™ STELLARIS®	ORBIT OS3 - OS4 FAROS™ R-EVOLUTION	ASSISTANT MEGATRON S
СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО В ШПРИЦАХ ПО ВЯЗКОСТИ (cSt)	1000	SOP 001	SOP 002	SOP 005	SOP 007
	1300	SOP009	SOP 012	SOP 015	SOP 018
	2000	SOP 010	SOP 013	SOP 016	SOP 019
	5000	SOP003	SOP 004	SOP 006	SOP 008
	5700	SOP 011	SOP 014	SOP 017	SOP 020

Физикохимические свойства

Масло силиконовое для внутриглазной тампонады RS-OIL (100% полидиметилсилоксан) - оптически чистое вещество, не смешивается с водными растворами, биологически инертно, не обладает биологической токсичностью.

RS-OIL	1000	1300	2000	5000	5700
Кинематическая вязкость при 25°C (сСт)	1000	1300	2000	5000	5700
Динамическая вязкость при 25°C (мПа*с)	1031	1340	2062	5155	5876
Удельная масса (плотность) при 25°C (г/см^3)	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Поверхностное натяжение на границе с воздухом (мН/м)	21	21	21	21	21
Поверхностное натяжение на границе с водой (мН/м)	40	40	40	40	40
Рефрактивный индекс:	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Показания для применения

Длительная внутриглазная тампонада в витреоретинальной хирургии. Любое другое использование должно считаться не по показаниям. Количество вводимого силиконового масла остается на усмотрение хирурга; недостаточное наполнение может привести к неэффективной задней тампонаде, а избыточное наполнение может привести к аномалиям роговицы и повышению внутриглазного давления. Продолжительность периода нахождения силиконового масла в глазу пациента определяется на усмотрение хирурга. Отбор пациентов и выбор хирургической процедуры также определяется на усмотрение хирурга. Предназначен только для применения в офтальмологии!

Указания по применению

• Убедитесь, что упаковка не повреждена.
• Извлеките шприц из пакета в стерильном поле.
• Поверните адаптер шприца (1) по часовой стрелке прочно прикрепив его к шприцу. Прикрепите шприц к набору для автоматического (механического) введения силиконового масла с одной стороны, подключите набор к хирургической системе используя разъем для подключения с другой стороны.
• Убедитесь, что канюля надежно прикреплена к шприцу!
• ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ СИЛИКОНОВОГО МАСЛА НАПОЛНИТЕ КАНЮЛЮ, ВЫДАВИВ НЕМНОГО (ДО 0,5 МЛ) СИЛИКОНОВОГО МАСЛА, ПРОВЕРЯЯ ПРАВИЛЬНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ РЕЗИНОВОЙ ЗАГЛУШКИ (03) В ШПРИЦЕ
ЕСЛИ ПЕРФТОРОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (ПЕРФТОРОКТАН ИЛИ ПЕРФТОРДКАЛИН) ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ЭТОЙ ХИРУРГИИ, ВЫПОЛНЯЙТЕ ЖИДКОСТНО-ВОЗДУШНЫЕ ОБМЕНЫ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ПЕРФТОРУГЛЕРОДОВ ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ СИЛИКОНОВОГО МАСЛА.
• Медленно вводите силиконовое масло в соответствии с принятой медицинской практикой.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

• Правильно утилизируйте оставшееся силиконовое масло.
• При достижении удовлетворительных результатов у пациента удалите силиконовое масло из глаза и утилизируйте удаленное масло как медицинские отходы.



Противопоказания
Силиконовое масло - относительно инертное вещество; тем не менее, рекомендуется не применять их у пациентов с известной повышенной чувствительностью к заявленным ингредиентам.
Силиконовое масло противопоказано у пациентов с псевдофакией с установленными силиконовыми интраокулярными линзами или в качестве постоянного заменителя стекловидного тела.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Перед использованием храните так, как указано на этикетке.
• Целостность продукции гарантируется, только если упаковка не повреждена. Не используйте раствор, если упаковка открыта или повреждена, или любой компонент получен в неисправном состоянии.
• Срок годности указан на этикетке продукта. Не использовать после истечения срока годности.
• Не встряхивать и не смешивать с другими веществами.
• Изделие предназначено для одноразового использования. Не стерилизовать повторно. Использование или стерилизация уже использованных одноразовых продуктов может вызвать перекрестное заражение.
• ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВВОДИТЬ ПРОДУКТ, ПЕРЕВЕДИТЕ ШПРИЦ В ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С КАНЮЛЕЙ, ВЫДАВИТЕ НЕМНОГО (ДО 0,5 МЛ) ЖИДКОСТИ, ПРОВЕРЯЯ ПРАВИЛЬНОЕ СКОЛЬЖЕНИЕ РЕЗИНОВОЙ ЗАГЛУШКИ В ШПРИЦЕ
ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ ПОЯВЛЕНИЕ ОСТАТКОВ ПЕРФТОРУГЛЕРОДОВ ПОД СЕТЧАТКОЙ АССОЦИИРОВАНО С ПОДЛИПАНИЕМ И ФЛОТИРОВАНИЕМ СИЛИКОНОВОГО МАСЛА. ВЫПОЛНЯЙТЕ ЖИДКОСТНО-ВОЗДУШНЫЕ ОБМЕНЫ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ПЕРФТОРУГЛЕРОДОВ ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ СИЛИКОНОВОГО МАСЛА.
• Прежде чем вводить силиконовое масло, убедитесь в отсутствии макулярных отверстий или разрывов сетчатки, в которые может проникнуть силиконовое масло под сетчатку. Избегайте любых контактов силиконового масла с эндотелием роговицы.
• Во время введения обращайте внимание чтобы никакие остатки не попали под сетчатку через разрывы.
• Продукт должен использоваться только квалифицированным медицинским персоналом, в операционной комнате. Любые остатки должны быть утилизированы как медицинские отходы. В случае случайного повреждения упаковки и разлива силиконового масло до или во время использования, устраните разлив и впитайте масло, используя абсорбирующий инертный материал, поместите в пластиковый контейнер и утилизируйте, соблюдая действующие правила и процедуры.
• Утилизируйте пустые упаковки, соблюдая действующие правила и процедуры.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
• После операции может возникнуть временное повышенное внутриглазного давления, гипотония, глаукома, катаракта.
• Миграция силиконового масла в переднюю камеру может привести к изменениям роговицы, таким как отек, помутнение, повреждение десцеметовой мембраны или декомпенсация роговицы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Силиконовое масло может взаимодействовать с сильными окислителями.

Стерилизация

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

• Шприцы, наборы для введения стерилизованы методом автоклавирования.
• Продукт предназначен для одноразового использования - не стерилизовать повторно.

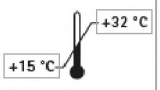
ХРАНЕНИЕ
• Хранить при комнатной температуре. Хранить вдали от источников тепла и прямого света.

Для любого отчета об этом продукте укажите номер партии, указанный на этикетке.
Для любых комментариев и предложений, перейдите на www.alchimiasrl.com

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
AL.CHI.MI.A. S.r.l.
Viale Austria 14
35020 Ponte S. Nicolò (PD) - Italy
e-mail: info@alchimiasrl.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

УКАЗАТЕЛЬ ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ

	Маркировка CE
	Осторожно, см. информацию о продукте
	Не используйте повторно
	Номер лота
	Срок годности
	Номер по каталогу
	Стерилизовано
	Не содержит натуральный каучуковый латекс
	Не используйте, если упаковка повреждена
	Пределы температуры
	Хранить вдали от солнечного света
	Не засоряйте окружающую среду
	Производитель

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru