

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АКССЕССУАРА К ОДНОРАЗОВОЙ ИГЛЕ ДЛЯ БИОПСИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ COMPLETE-CHIBA/ECOCHIBA

PAC/PACUF (PAC102030, PACUF1020)

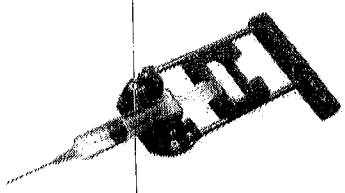

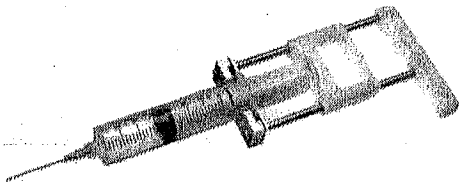

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- хранить в сухом, чистом месте, вдалеке от прямых источников тепла
- проверить правильность модели
- в случае обнаружения деффектов или неправильного функционирования заполнить бланк претензий, помещенный в картонной коробке, и сохранить неисправный инструмент

Примечания:

- инструмент предназначен для использования квалифицированным медицинским персоналом, обладающим знаниями в области его применения.
- инструмент необходимо простерилизовать после каждого использования. Методы стерилизации – этиленоксидный газ, пар, опущение в дезинфекционный раствор.
- настоящая инструкция не определяет особую хирургическую технику. Выбор техники использование остается на усмотрение врача.
- игла Complete Chiba/Ecochiba для акссесуара Pac/Pacuf одноразового использования. Sterylab отклоняет любой вид ответственности, вытекающий из неправильного или повторного использования иглы или ее повторной стерилизации.

ПРОЦЕДУРА БИОПСИИ:

1. Поместить курсор аксессуара таким образом, чтобы шприц вошел в специальные пазухи. Только для версии PACUF – повернуть курсор таким образом, чтобы шприц правильно вошел в специальные пазухи.
2. Поместить в аксессуар шприц с присоединенной к нему игле типа Чиба.
3. Отвести назад курсор, чтобы произвести аспирацию.

ПРОЦЕДУРА СТЕРИЛИЗАЦИИ:

Акссесуар можно стерилизовать в паровом автоклаве с помощью этиленоксидного газа или погружением. Средние условия стерилизования:

130°C - 20-25 мин

120°C - 15-20 мин в автоклаве

50°C – 70 kPa – этиленоксидный газ – 16 часов. Для выведения газа – тунель на 72 часа при 48 °C

Можно продезинфицировать акссесуар с помощью специально разработанных для этой цели растворов, следуя инструкциям производителя.

Для обеспечения гарантии процесса стерилизации, он должен быть проверен с помощью специальных биологических индикаторов. Ответственность за стерилизацию несет оператор.

sterylab
STERYLAB s.r.l.
Via Magenta, 77/6
20017 RHO (MI) ITALY
Part. IVA 10124260158
Tel. 02 / 93 50 84 27 r.a.
Fax 02 / 93 50 84 26

Sterylab Srl - Via Magenta 77/6 - 20017 Rho (Milano) – Italy
telefono : 02 935 084 27 fax : 02 935 084 26
website: www.sterylab.it e-mail : sterylab@sterylab.it

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru