
Инструкция по применению, наносится на картонную пачку.

Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт»

ВОЗДЕЙСТВИЕ. Легкая фиксация и стабилизация голеностопного сустава.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Травмы, нестабильность, период реабилитации после травм и операций, дегенеративные и воспалительные заболеваний области голеностопного сустава.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Индивидуальная непереносимость материалов изделия.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ. Выполнен в форме разъемной «восьмерки» из эластичной ленты с высоким содержанием льна и хлопка.

Степень фиксации и режим использования определяются лечащим врачом.

ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.
Перед первым применением рекомендуется ручная стирка до t 40°. Не тереть и не выжимать изделие. Сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов. Не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку. Транспортировка и хранения при температуре от -40° до +40°. После транспортировки в условиях отрицательных температур изделие в упаковке должно быть выдержано при комнатной температуре не менее 4 часов.

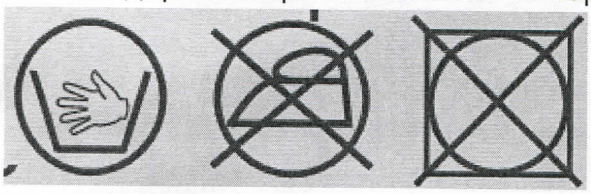

Использованные изделия складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790. Срок хранения – 5 лет. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации - 6 месяцев со дня продажи. Состав: хлопок – 29%, лен – 24%, полипропилен – 20%, латекс – 17%, полиэфир – 10%.
Дата изготовления _____ 20 __ г.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), Россия, 195220, г. Санкт Петербург, ул. Бутлерова, д.11, корп.4, литер А, пом. 24Н, тел. 8 (800) 700-68-50, e-mail: torg@kreitspb.ru.
Место производства медицинского изделия: Россия, 194223, Санкт Петербург, ул. Курчатова, д.10, лит. И.
www.kreitspb.ru, www.zdors.ru

Генеральный директор ООО «Крейт» /_____/ Кривицкий А.К.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


Инструкция по применению, наносится на картонную пачку.

Бандаж для коленного сустава – «Крейт»

ВОЗДЕЙСТВИЕ. Обеспечивает умеренную стабилизацию колена, устраняет патологическую подвижность коленного сустава, восстанавливает нарушенную функцию при нестабильности коленного сустава вследствие травм или заболеваний. Способствует уменьшению болевых ощущений.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Остаточная или функциональная нестабильность после травмы связок коленного сустава. Период реабилитации после травм, ушибов, растяжений, подвывихов и операций на коленном суставе.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Заболевания кожи. Индивидуальная непереносимость материалов изделия.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ. Основа – эластичная перфорированная бандажная лента. Имеет разъемную конструкцию. 2 уплотняющих полукольца для коленного сустава, 2 съемных металлических шарнира анатомической формы. Вырез для коленной чашечки. Анатомический вырез в подколенной области. Фиксация с помощью застежки VELCRO. Конструкция универсальна для левой и правой ноги. Высота 30 см.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Расположите бандаж на ноге так, чтобы разъемное отверстие находилось спереди посредине коленной чашечки, а боковые шарниры – строго по наружной и внутренней поверхности коленного сустава. Зафиксируйте спереди застежками с лентой Velcro.

Степень фиксации и режим использования определяются лечащим врачом.

Перед первым применением рекомендуется ручная стирка до t 40°. Не тереть и не выжимать изделие. Сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов. Не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку. Транспортировка и хранения при температуре от -40° до +40°. После транспортировки в условиях отрицательных температур изделие в упаковке должно быть выдержано при комнатной температуре не менее 4 часов.

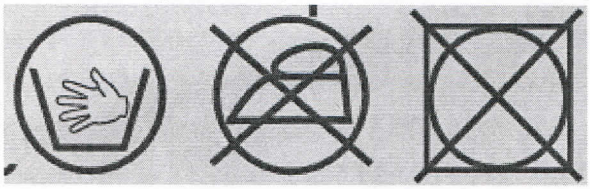

Использованные изделия складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790. Срок хранения – 5 лет. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации - 6 месяцев со дня продажи. Состав: полипропилен – 30%, полиэфир – 25%, латекс – 20%, неопрен - 15%, хлопок – 10%.
Дата изготовления _____ 20 __ г.

Ген. дир. ООО „Крейт" Кравецкий А. К.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), Россия, 195220, г. Санкт Петербург, ул. Бутлерова, д.11, корп.4, литер А, пом. 24Н, тел. 8 (800) 700-68-50, e-mail: torg@kreitspb.ru.
Место производства медицинского изделия: Россия, 194223, Санкт Петербург, ул. Курчатова, д.10, лит. И.
www.kreitspb.ru, www.zdors.ru

Генеральный директор ООО «Крейт» /_____/ Кривицкий А.К.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


Инструкция по применению, наносится на картонную пачку.

Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт»

ВОЗДЕЙСТВИЕ. Приведение первого пальца стопы в функционально правильное положение. Уменьшение болевого синдрома в области первого плюснефалангового сустава.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Нефиксированное вальгусное или варусное отклонение первого пальца. Период после операций в области первого плюснефалангового сустава.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Заболевания кожи. Индивидуальная непереносимость материалов изделия.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ. Имеет съемную металлическую пластину 12 см и мягкий апликатор на плюснефаланговый сустав первого пальца стопы. Конструкция универсальна для левой и правой ноги. Фиксация лентой Velcro. Изготовлен из перфорированной эластичной бандажной ленты.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ. Приложите бандаж к стопе чтобы шина располагалась на внутренней боковой поверхности. Закрепите застежку Velcro вокруг 1-го пальца, затем зафиксируйте бандаж вокруг стопы.

Степень фиксации и режим использования определяются лечащим врачом.

ПРИМЕНЯТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА.
Перед первым применением рекомендуется ручная стирка до t 40°. Не тереть и не выжимать изделие. Сушить в расправленном виде вдали от нагревательных приборов. Не гладить, не использовать растворители, отбеливатели и химическую чистку. Транспортировка и хранения при температуре от -40° до +40°. После транспортировки в условиях отрицательных температур изделие в упаковке должно быть выдержано при комнатной температуре не менее 4 часов.

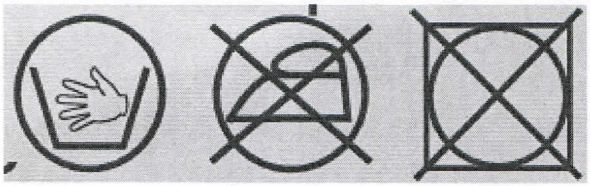

Использованные изделия складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790. Срок хранения – 5 лет. Гарантийный срок при соблюдении правил эксплуатации - 6 месяцев со дня продажи. Состав: полиамид – 40%, эластон – 35%, полипропилен - 20%, хлопок – 5%.
Дата изготовления _____ 20 __ г.

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «Крейт» (ООО «Крейт»), Россия, 195220, г. Санкт Петербург, ул. Бутлерова, д.11, корп.4, литер А, пом. 24Н, тел. 8 (800) 700-68-50, e-mail: torg@kreitspb.ru.

Ген. дир. ООО „Крейт" Кравчук А.К.

Общество с ограниченной ответственностью "Крейт" Для документов * Санкт-Петербург

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Место производства медицинского изделия: Россия, 194223, Санкт Петербург, ул. Курчатова, д.10, лит. И.
www.kreitspb.ru, www.zdors.ru

Генеральный директор ООО «Крейт» /_____/ Кривицкий А.К.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru