Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Кресло функциональное
Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.03.698.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Кресло функциональное (далее – кресло) ЦСИЕ.03.698.00.00.00 предназначено для сидения, перемещения внутри помещений и удовлетворения естественных надобностей в имеющуюся емкость больных и престарелых людей (пользователей) с нарушением опорно-двигательного аппарата. Применяется для оснащения ортопедических клиник, травматологических и восстановительных отделений клиник, а также для индивидуального пользования в домашних условиях. Кресло не складывается по ширине, угол наклона спинки и подножек не регулируется. Изготавливается в четырех исполнениях, различающихся по ширине.

2 Технические данные

2.1 Параметры кресла приведены в таблице.

Обозначение	Габаритные размеры, мм				Масса кресла, кг, не более
	Длина (±10)	Ширина сиденья (±10)	Ширина (±10)	Высота (±10)	
ЦСИЕ 03.698.00.00.00	1000	382	524	949	18,2
-01		412	554		18,6
-02		442	584		19,0
-03		472	614		19,4

2.2 Максимальная грузоподъемность (масса пользователя) – 100 кг.

2.3 Срок службы – не менее 5 лет.

3 Устройство и работа

3.1 Кресло состоит из следующих основных элементов, приведенных на рисунке (стр. 2):

рама 1; спинка 2; две съемные боковины с подлокотниками 3; два задних колеса с тормозами 4, два передних колеса 5, подушка 6; сиденье с отверстием для емкости 7; регулируемая по высоте подножка 8; ремень для ног 9; емкость 10; фиксатор 11; болт 12.

Примечания *– Изображение кресла на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД. Допускаются изменения конструкции, не влияющие на эксплуатационные свойства кресла.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации кресла 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию (дня продажи), но не более 18 месяцев с даты изготовления.

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт кресла в случае выхода его из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии руководства по эксплуатации. Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на кресла, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем руководстве.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений и повреждений покрышек колес.

10.5 Гарантия не распространяется на те дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования кресла.

10.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу: **220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.** По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а; 220003, г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

11 Сведения о государственной регистрации

Кресло является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.96990/1505.

Действительно до 29.05.2020 г.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 308-14-34; отдел маркетинга и сбыта (017) 308-14-79; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.2 Подготовка к работе

Кресло к пользователю поступает в собранном состоянии, в чехле.

3.2.1 Расчехлить.

3.2.2 Поставить кресло на колеса на пол.

3.2.3 Кресло готово к работе.

3.3 Работа

3.3.1 Для посадки в кресло и высадки из него необходимо затормозить два задних колеса 4, для чего нажать ногой на площадку тормоза вниз так, чтобы тормоз плотно прижал колесо. При необходимости снять боковину 3, для чего нажать кнопку фиксатора 11 так, чтобы она утопилась в боковину, и потянуть боковину вверх. Сесть в кресло и установить боковину обратно. Для растормаживания площадку тормоза поднять ногой вверх.

3.3.2 Отрегулировать высоту подножки с помощью болта 12.

3.3.3 Для удовлетворения естественных надобностей достать емкость 10 за рукоятку со стороны спинки кресла.

3.3.4 Налить в емкость воды на 1/3 ее объема и вставить емкость на место до упора.

3.3.5 Приподнять пользователя над сиденьем кресла.

3.3.6 Вытащить подушку 6 за ручку сиденья.

3.3.7 Опустить пользователя на сиденье 7.

3.3.8 Для приведения кресла в нормальное состояние проделать обратные операции.

3.3.9 Перемещение кресла осуществляется сопровождающим за счет захвата руками гнутой рукоятки, расположенной сзади кресла.

4 Меры безопасности

4.1 Категорически запрещается при посадке в кресло и высадке из него становиться на площадку подножки, так как это может привести к опрокидыванию кресла и нанесению травмы пользователю.

4.2. Посадку в кресло и высадку из него производить при заторможенных колесах.

4.3 Запрещается оставлять кресло с пользователем в незаторможенном состоянии.

4.4 Запрещается подвергать кресло ударам.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.5 Пользователю запрещается резко наклоняться в сторону во избежание опрокидывания кресла.

4.6 После удовлетворения естественных надобностей необходимо вымыть емкость и сполоснуть дезинфицирующим раствором.

5 Техническое обслуживание

5.1 Подушку и спинку кресла необходимо протирать дезинфицирующим раствором, чистящими средствами.

5.2 Остальные части кресла протираются влажной ветошью и вытираются насухо.

6 Комплектность

6.1 Кресло функциональное	1 шт.
6.2 Руководство по эксплуатации	1 шт.

7 Маркировка

Маркировка кресла должна иметь:

- товарный знак изготовителя;
- наименование изготовителя и его местонахождение;
- наименование и условное обозначение изделия;
- обозначение ТНПА;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя (заводской номер);
- система менеджмента качества сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015;
- дату изготовления;
- гарантийный срок (месяцев);
- срок службы (лет);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- идентификационный штриховой код.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8 Свидетельство о приемке

Кресло функциональное ЦСИЕ 03.698.00.00.00 _____
наименование изделия обозначение зав. номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов ТУ BY 100010315.068-2010, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента качества разработки и производства изделий протезно-ортопедических, обуви ортопедической и технических средств реабилитации соответствует требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

МП

_____ _____
личная подпись *расшифровка подписи*

_____
число, месяц, год

9 Свидетельство об упаковывании

Кресло функциональное ЦСИЕ 03.698.00.00.00 _____
наименование изделия обозначение зав. номер


упаковано на РУП БПОВЦ
наименование или код изготовителя
согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Начальник участка *Лекунович Е.И.*
должность личная подпись расшифровка подписи

_____
число, месяц, год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

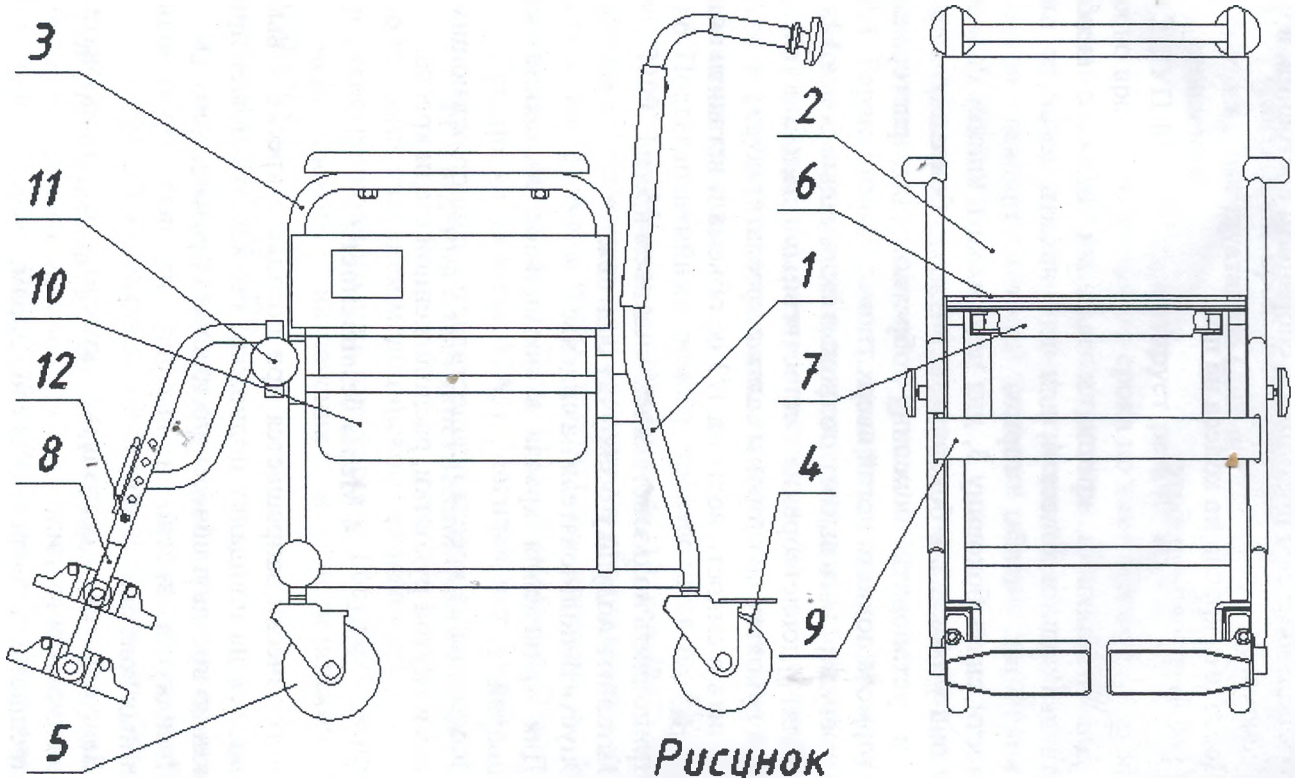

Рисунок