«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ОДО «Полиэфир»
_____ Палеес И.Э
4 января 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Кассета для проводки и заливки образцов ткани ТУ BY 100129639.022-2020

1. Назначение

Кассета предназначена для проводки и заливки клинических образцов ткани для подготовки к последующему цитологическому или гистологическому исследованию.

2. Описание

Кассета для проводки и заливки образцов ткани биопсийная представляет собой корпус с крышкой и квадратными отверстиями.

Кассета для проводки и заливки образцов ткани гистологическая представляет собой корпус с крышкой и параллельными прямоугольными отверстиями.

Кассеты имеют специальное поле для нанесения маркировки и надписей под углом 45°. Боковые стенки не содержат отверстий и их также можно использовать для маркировки.

Изготавливаются в беспылевой атмосфере при температуре +250°С.

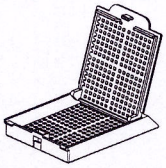


Рисунок 1. Кассета для проводки и заливки образцов ткани биопсийная. Общий вид в открытом состоянии.

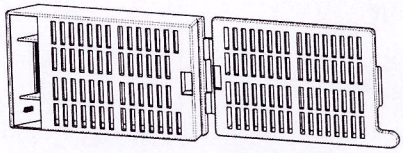


Рисунок 2. Кассета для проводки и заливки образцов ткани гистологическая. Общий вид в открытом состоянии.

3. Материал

При производстве кассет используется полиацеталь (POM), устойчивый к химическому воздействию органических растворителей. Полиацеталь характеризуется высокой стабильностью, сохраняет жёсткость и механическую прочность до 120 °С, стоек к истиранию, ударным нагрузкам, к органическим растворителям и маслам, хорошо поддаётся обработке. Благодаря физиологической безвредности и устойчивости к дезинфекции и стерилизации полиацеталь широко используется в пищевом оборудовании и медицине.

4. Технические характеристики

Наименование кассеты	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, г
Кассета для проводки и заливки образцов ткани биопсийная	42,00 ± 0,5	28,00 ± 0,5	7,2 ± 0,5	3,5 ± 0,3
Кассета для проводки и заливки образцов ткани гистологическая	42,00 ± 0,5	28,00 ± 0,5	7,2 ± 0,5	3,0 ± 0,3

5. Порядок использования изделия

Изделия предназначены для профессионального лабораторного использования.

Работа с кассетами гистологическими:

1. Промаркировать кассету, пинцетом поместить исследуемый материал в кассету.
2. Закрыть кассету до щелчка. Материал готов к проводке.
3. После проводки открыть кассету, взять заливочную форму, налить парафиновую среду в заливочную форму, перенести материал из кассеты в заливочную форму, накрыть заливочную форму кассетой, завершить заливку материала через отверстия кассеты.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. Подождать пока образец застынет. Отделить кассету с блоком от заливочной формы. Образец готов.

Работа с кассетами биопсийными аналогична работе с кассетами гистологическими. Во избежание потери материала биопсии следует дополнительно использовать биопсийные прокладки.

6. Условия эксплуатации

Кассета предназначена для профессионального использования.
Все манипуляции с кассетой должны проводиться в перчатках.
Кассета предназначена для однократного использования.
Не использовать кассету после истечения срока годности или в случае повреждения упаковки.

7. Противопоказания к применению

При использовании изделий по назначению противопоказаний в применении нет.

8. Комплектность

Кассета для проводки и заливки образцов ткани биопсийная реализуется в раскрытом виде в групповой упаковке. В комплект поставки входит: кассета для проводки и заливки ткани биопсийная 1 уп. / 500 шт.

Кассета для проводки и заливки образцов ткани гистологическая реализуется в раскрытом виде в групповой упаковке. В комплект поставки входит: кассета для проводки и заливки ткани гистологическая 1 уп. / 500 шт.

9. Упаковка и маркировка

Изделия упаковываются в групповой полиэтиленовый пакет по ГОСТ 12302.

На групповой упаковке указаны: товарный знак, наименование изделия, количество изделий в упаковке, название и адрес изготовителя, номер регистрационного удостоверения, дата изготовления, срок годности, номер партии, условия хранения, указание «для однократного применения», «петля Мебиуса», знак, призывающий к охране окружающей среды, знак запрета на повторное применение, знак о неиспользовании при повреждении упаковки, цифровое обозначение материала (приложение В).

10. Условия транспортировки и хранения

Кассеты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Кассеты необходимо хранить в закрытых складских помещениях в условиях 3 по ГОСТ 15150 с защитой от прямого воздействия солнечного света.

11. Утилизация

Одноразовые изделия утилизируются в соответствии с требованиями СанПиН 07.02.2018 № 14 по утилизации медицинских отходов класса Б.

12. Гарантия и срок годности

Производитель гарантирует соответствие кассеты требованиям технических условий и (или) конструкторской документации на изделие конкретного вида при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет с даты изготовления.

Производитель: ОДО «Полиэфир», 220140, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 62, административно производственное здание Литер А4/КП, к. 147.
Тел./факс: +375 17 395 05 65, email: polyefir@mail.ru, web: www.polyefir.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru