9 СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ

Кресло донорское КДС заводской №_____ упаковано согласно требованиям, предусмотренным в конструкторской документации.

Дата упаковки_____

Упаковку произвел_____ м.п._____ Подпись

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения.

10.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем (даты продажи).

10.3 В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует изделие и его части при предъявлении паспорта по адресу:

225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая ,31б, к.4.

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 Предъявленные рекламации должны регистрироваться изготовителем и содержать сведения о принятых мерах.

11.2 Рекламация, полученная изготовителем, рассматривается в двухнедельный срок.

О принятых мерах письменно уведомляется потребитель.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену)

в течение гарантийного срока

Кресло донорское КДС, заводской №_____, ТУ BY 800017554.075-202_

Приобретено_____

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введено в эксплуатацию_____

дата, подпись и штамп обслуживающей организации

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____города_____

Подпись и печать руководителя ремонтного предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения - владельца


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СЗАО «БЕЛМЕДМАТЕРИАЛЫ»

КРЕСЛО ДОНОРСКОЕ КДС

ТУ BY 800017554.075-202_

Паспорт
КЗК-1.00.000 ПС

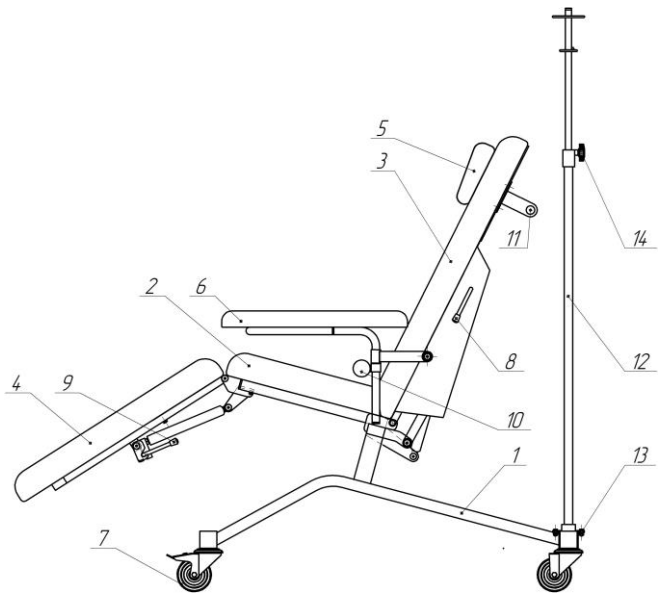

1 – каркас в сборе
2 – сиденье
3 – спинка
4 – подколенник
5 – подголовник
6 – подлокотник
7 – колеса Ø 100мм
8 – рычаг регулировки спинки
9 – рычаг регулировки подколенника
10 – винт-барашка
11 – ручка
12 – штатив для капельниц
13 – комплект крепления штатива
14 – винт-барашка регулировки высоты штатива

Рисунок

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Кресло донорское КДС (в дальнейшем – кресло) предназначено для взятия крови, проведения гемодиализа и других медицинских процедур, а также для осмотра и обследования пациентов в лечебных и других медицинских учреждениях.

1.2 Кресло предназначено для эксплуатации в условиях умеренного климата в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +10ºС до +35ºС и относительной влажности 80% при температуре +25ºС.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Габаритные размеры в положении «кресло», мм, не более:

длина ……1600

ширина (без развёрнутых подлокотников)……850

высота ……1340

2.2 Габаритные размеры в положении «стол», мм, не более:

длина ……2100

ширина (без развёрнутых подлокотников)……850

высота ……700

2.3. Размеры сиденья, мм не более:

длина ……460

ширина……570

2.4 Высота до сиденья, мм, не более……700

2.5 Угол наклона спинки ……от минус 15° до (65±5)°

2.6 Угол наклона подколенника …… от минус 15° до (55±5)°

2.7 Масса, кг, не более……60

2.8 Допускаемая нагрузка, кг, не более……160

2.9 Срок службы, лет, не менее……5

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входит:

- кресло ……1 шт.
- штатив для капельниц (по заказу потребителя) ……1 шт.
- валик для спинки (по заказу потребителя) …… 1 шт.
- комплект крепежа для штатива (болт М6х16, гайка М6, шайба 6, шайба 6Г – по 2 шт.)
- паспорт……1 шт.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Кресло (см. рис.) представляет собой сборную конструкцию, состоящую из сварного каркаса поз.1 с закрепленными на нем сиденьем поз.2, спинкой поз.3, подколенника поз.4, подголовника поз.5, двух подлокотников поз.6.

Кресло установлено на четырех колесах поз.7 (два из них с тормозом). Для перемещения спинки используют рычаг поз.8, для перемещения подколенника - рычаг поз.9, для перемещения подлокотников – винт-барашка поз. 10.

4.2 Каркас и штатив для капельниц изготовлен из стальных труб, покрыт порошковой полимерной краской. Мягкие элементы (сиденье, спинка, подлокотники) изготовлены из ДСП, поролона и обтянуты винилискожей.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Примечание - Предприятие оставляет за собой право с целью усовершенствования конструкции вносить изменения, не влияющие на качество изделия.

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Кресло поставляется потребителю в упакованном виде. Распакуйте кресло, очистите от пыли. Осмотрите кресло для определения его состояния после транспортирования и хранения.

5.2 Угол наклона спинки регулируется с помощью рычага поз.8, при этом необходимо придерживать спинку за ручку поз.11. Угол наклона подколенника регулируется с помощью рычага поз.9.

5.3 Подлокотники регулируются по высоте и вокруг своей оси бесступенчато. Для изменения положения необходимо ослабить винт-барашку поз.10, установить подлокотник в необходимое положение и зафиксировать с помощью винт-барашка поз.10.

5.4 Штатив для капельниц поз. 12 закрепить на каркасе поз.1 (см. рисунок) при помощи крепежа поз.13. Отрегулируйте высоту штатива при помощи винт – барашка поз. 14, опуская или поднимая верхнюю стойку штатива.

5.5 Выполните санитарную обработку кресла путем протирки его поверхностей дезсредствами, разрешенными к применению Минздравом РБ.

6 ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1 Необходимо периодически проверять затяжку резьбовых соединений.

6.2 Во избежание поломки ходовой части, кресло не следует свозить по лестницам, переезжать с резкими толчками через высокие пороги и другие препятствия.

6.3 Во избежание перемещения кресла перед началом процедур (до размещения пациента на кресле) и после окончания процедур (перед подъемом пациента с кресла) необходимо зафиксировать колеса при помощи тормоза.

ВНИМАНИЕ! Опираться на подколенник при размещении на кресле и подъёме с кресла запрещается.

6.4 Периодически обрабатывайте кресло дезинфицирующими средствами.

7 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1 Кресло в упаковке транспортируется в крытых транспортных средствах всех видов при температуре воздуха от -50ºС до +50º С и относительной влажности воздуха 100% при температуре +25º С.

7.2 Хранить кресло допускается в не отапливаемом помещении при температуре от -50ºС до +40ºС и относительной влажности воздуха не более 98% при температуре +25ºС. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кресло донорское КДС, заводской №_____ соответствует ТУ BY 80017554.075-202_ и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____ м.п.

Подпись ответственного за приемку_____